

Brugsanvisning

Tillykke med den nye cykel, vi håber at den vil blive til gavn og glæde i mange år.

Anvendelse:

Da kørsel på en 2-hjulet cykel med spec.støttehjul (Therapicykel), og en 3-hjulet cykel er helt forskellig fra kørsel på en almindelig 2-hjulet cykel, bør brugeren vænnes til denne under langsom kørsel med hjælp og opsyn af en hjælper.

Det skal specielt bemærkes at vendediameteren er anderledes, og der bør derfor tages særligt hensyn til dette under træningsperioden.

Sikkerhed:

Disse cykler har en stor understøtningsflade, i form af støttehjul eller 2 for/- eller 2 baghjul, hvilket giver optimal balancestøtte.

På trods af denne store understøtningsflade, kan det ikke udelukkes at cyklen i specielle situationer risikere at vælte.

Særlig opmærksomhed ved følgende;

- 1) Kørsel på ujævnt og skrående underlag.
- 2) Kraftig opbremsning og drejning samtidig.
- 3) Cykletype og størrelse passer til brugeren (se tekniske data)
- 4) Det er vigtigt for sikkerhed og holdbarhed at dæktrykket altid er korrekt (min. 2,5 bar)
- 5) Vigtigt at samtlige indstillinger er foretaget hensigtsmæssigt, herunder styrets vinkel, sadlens højde, samt øvrige tilbehør til støtte og fiksering (se tekniske data)
- 6) Respektare altid de på cykel og tilbehør angivne max belastninger, og placeringer (se tekniske data)
Ved tvivl – kontakt forhandleren.

Såfremt brugeren er helt eller delvist fastspændt, skal der altid være opsyn eller hjælp i umiddelbar nærhed.

Vedligeholdelse:

- 1) Cyklen bør kun rengøres med mild sæbe, f.eks. autoshampoo, den må ikke højtryksrensnes, rengøres med opløsningsmidler eller benzin.
- 2) Cyklen skal løbende vedligeholdes med kædefedt, efterspænding af kæde/ kæder, skruer, møtrikker, spec.tilbehør, kabler, bremsere.
- 3) 1. service/ eftersyn foretages efter 5 km kørsel, her kontrolleres og efterspændes samtlige skruer og møtrikker.

Garanti:

Jfr. dansk lovgivning.

Arden juni 2007

Tekniske data


- A** = Min. skridtlængde (cm)
- B** = Indstigninghøjde (cm)
- C** = Cykel egenvægt (kg)
- D** = Max. brugerbelastning (kg)
- E** = Længde (cm)
- F** = Bredde (cm)
- G** = Max. højde (styr)
- H** = Max. højde sadel (cm)



Cykel type	A	B	C	D	E	F	G	H
3-hjul:								
3-hjulet 12/12	32	30	13	35	103	62	77	47
3-hjulet 16/16	43	29	15	50	120	68	88	58
3-hjulet 20/16	50	32	18	60	135	78	100	65
3-hjulet 24/20	60	37	21	75	155	78	106	75
3-hjulet 26/20	70	37	23	90	155	78	113	85
3-hjulet 24/20 TE	60	26	21	75	155	78	106	75
3-hjulet 26/20 TE	70	27	23	90	155	78	113	85
3-hjulet 26/20 VA	70	37	26	100	165	78	113	85
3-hjulet 24"	72	42	30	100	175	78	124	87
3-hjulet 24" TE	72	30	30	100	180	78	124	87
3-hjulet 26"	78	38	33	120	186	78	119	93
3-hjulet 26" FEA	78	39	35	120	191	78	119	93
3-hjulet 26" TEK	69	30	35	120	195	78	125	84
3-hjulet MTB 24"	75	47	30	100	176	78	109	90
3-hjulet MTB 26"	80	50	30	100	187	78	115	95
3-hjulet Racer 27"	80	50	22	90	185	84	110	95
2 hjul med støttehjul:								
2-hjulet 16"	43	29	18	50	120	65	88	58
2-hjulet 20" str. 1	50	34	20	60	140	68	100	65
2-hjulet 20" str. 2	60	37	22	75	150	68	101	75
2-hjulet 20" str. 2 TE	60	26	22	75	150	68	101	75
2-hjulet 20" str. 3	70	37	23	90	155	68	114	85
2-hjulet 20" str. 3 TE	70	27	23	90	155	68	114	85
2-hjulet 24"	72	43	25	100	167	70	124	87
2-hjulet 24" TE	72	30	25	100	167	70	124	87
2-hjulet 26"	78	39	25	100	180	66	119	93
2-hjulet 26" TE	70	30	25	100	185	66	123	85



Respektere markeringerne for max. indstilling

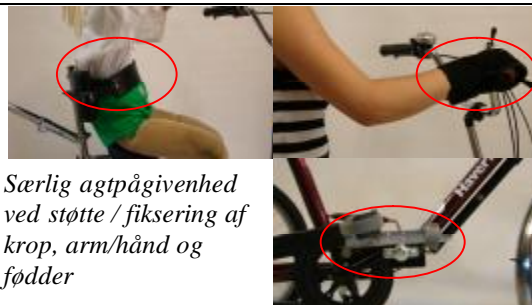

Særlig agtpågivenhed ved støtte / fiksering af krop, arm/hånd og fødder

Producent:
 Walter Haverich GmbH
 Striegauer Strasse 13
 D-33719 Bielefeld
 Tyskland
Samtlige cykler og tilbehør er TÜV godkendt og CE mærket

Forhandler Danmark:
 Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S