

Kvik Guide til Ridesimulator Care Rider



1. Før brug:

- Sørg for at læse instruktionerne neden for og brug dem korrekt
- For at minimere evt. skader under brug skal du sørge for at læse forholdsreglerne heri, før du bruger dette produkt.



2. Indhold af pakken:


1. Care Rider 2. Stigbøjler (2 stk.) 3. Gummidupper (4 stk.)



4. Ledning 5. Sikkerhedsmagnet 6. Manual




7. Kontroller 8. Antenne 9. Fjernbetjening

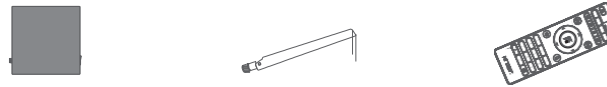

10. 5V DC-adapter 11. HDMI-kabel




5. Tv-tilstand

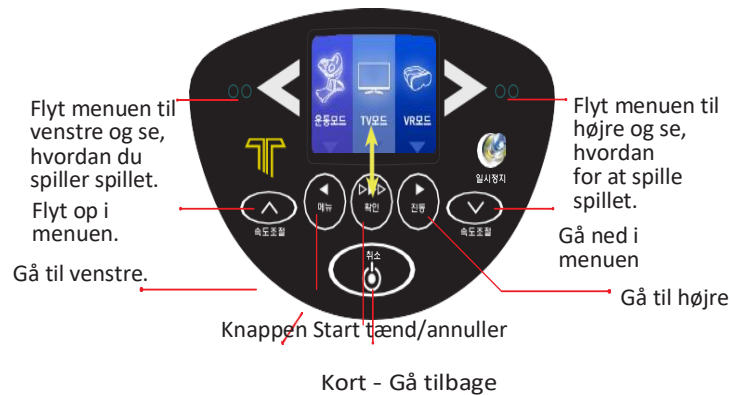


3. Sådan installerer du Care Rider:

- Placer Care Rider på et sikkert sted med jævnt underlag

- Vip Care Rider lidt op som vist på billedet og sæt gummidupperne på i hvert hjørne

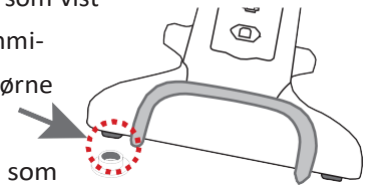


- Monter stigbøjlerne som vist på billedet nedenfor

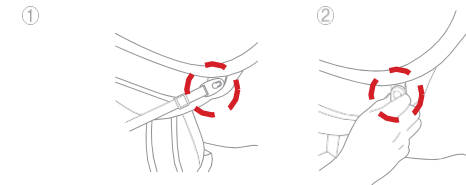


- Tilslut ledningen og tryk på tænd/annuller-knappen på kontrolenheden for at kontrollere stemmevejledningen.

6. VR-tilstand

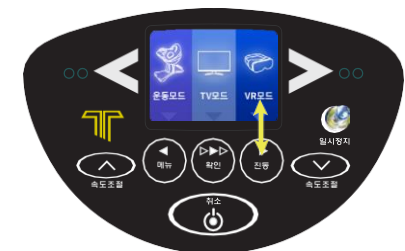

- ※ Søg og installer "Tanda TVR" fra Play Butik.
- ※ Før du udfører VR-tilstand, skal du tillade 'Indstillinger->Application->

4. Træningstilstand

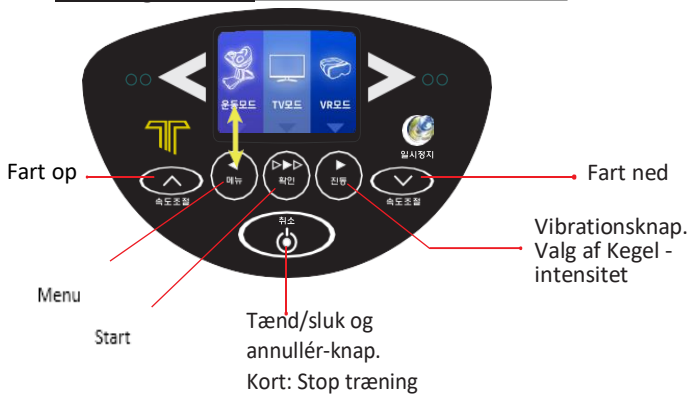

1. Træningstilstand udføres med menuknappen.
2. Du kan trykke på menuknappen under træning for at ændre træningstilstanden og trykke på startknappen for at sætte den i gang.



Kør tv-tilstand med knappen 'Start'

1. Flyt til venstre: 'Menu' knap / venstre sensor
2. Flyt til højre: 'Vibration' knap / Højre sensor
3. Flyt op: Hastighedskontrol 'Λ'
4. Flyt ned: Hastighedskontrol 'V'
5. Udførelse: **knappen 'Start'**.
6. Gå tilbage: Knappen tryk kort: **'Tænd el. annullér'**
7. Sluk: Lang **'Tænd/annuller'**-knap. (1 sekund eller mere)

Søg på YouTube efter hvordan du installerer Care Riders aktivitetspakke for tv-tilstandsrelaterede videoer:

YouTube-link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL85uoyLYZaj_TITmegjAyjgWB6NozqeNX

"Tanda App Selection"->Authorization-> tillad henholdsvis placering og lagerplads

※ VR-tilstand udføres med en vibrationsknap

※ Den er forbundet, når du kører den installerede VR-spilapp efter at have kørt

VR-tilstand.

※ Anbefalet specifikation: Galaxy S7, LG G6 eller højere, iPhone ikke tilladt.

Søg efter Tanda VR på YouTube for VR-tilstandsrelaterede videoer.

YouTube-link: https://www.youtube.com/playlist?list=PL85uoyLYZaj_wUvIFDkKHqphJHlochKcw

Forholdsregler:

- ⊗ - Sæt IKKE dine fødder op i stignøjlerne, når du stiger op. Brug dem først, når du sidder sikkert i sadlen. Der er risiko for at falde, ligesom du kan ødelægge stignøjlerne med din vægt.
- ! - Brug håndtaget under træningen af sikkerhedsmæssige årsager.

- ! Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen eller knappen. Der er risiko for at beskadige udstyret.
- ! Hvis der opstår fare under træning, fjern sikkerhedsnøglen eller tryk straks på stop-knappen.