


Brugervejledning for:

Nuga Best NM-80 turmalinkeramik varmetæppe

Nuga Best NM-85 turmalinkeramik varmemadras

Personlig stimulator med varme

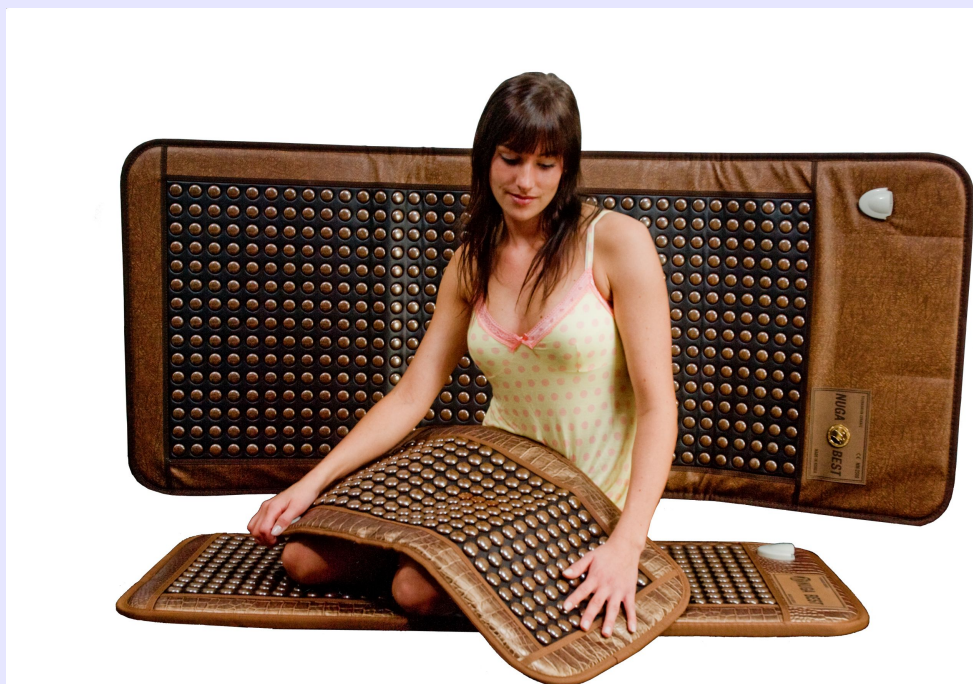

Indholdsfortegnelse

Karakteristik for Nuga Best turmalin varme tæppe og madrasser.....	3
Hvad er turmalin?.....	3
Seks funktioner i madrassen der gavner din krop:.....	3
Produktion af Nuga Best turmalin keramik.....	4
Infrarøde varmestråler.....	5
Fingertryksmassage (akupressur) og moxibustion.....	6
Naturens negative ioner.....	7
Helbredende virkninger.....	8
Udpakning og installation.....	9
Sådan bruges kontrolleren.....	11
Forholdsregler for brug.....	12
Vigtigt.... læs alle punkter inden ibrugtagning for din egen skyld.....	12
Produkt specifikationer.....	13
Sikkerhed.....	13
Produkt garanti.....	14
For garanti gælder følgende vilkår:.....	15

Forord:

Vi ønsker dig tillykke med dit nye Nuga Best NM-80 turmalinkeramik varmetæppe eller din nye NM-85 turmalinkeramik varmemadras. Et medicinsk produkt af høj kvalitet og fremstillet af naturlige mineraler.


Mange mennesker rundt om i verden har allerede nu haft stor glæde af at bruge produktet, og personer med smerter har enten opnået et liv uden smerter eller med en smerte lindring i større eller mindre grad. Og vigtigst af alt, helt uden brug af medicin.

Derfor er vi overbevist om du vil få stor glæde af dette medicinske produkt i mange år frem i tiden, og det vil bidrage positivt til dit velvære og helbred.

Lad trykt dine andre familiemedlemmer, venner og andre personer anvende produktet. Selv om man ikke har smerter vil alle kunne få glæde af produktets positive påvirkning fra den opvarmede turmalinkeramik.

Især ældre mennesker vil kunne opnå positive forandringer i deres krop, men også børn vil nyde produktets egenskaber.

Med venlig hilsen
Studio Balance ApS

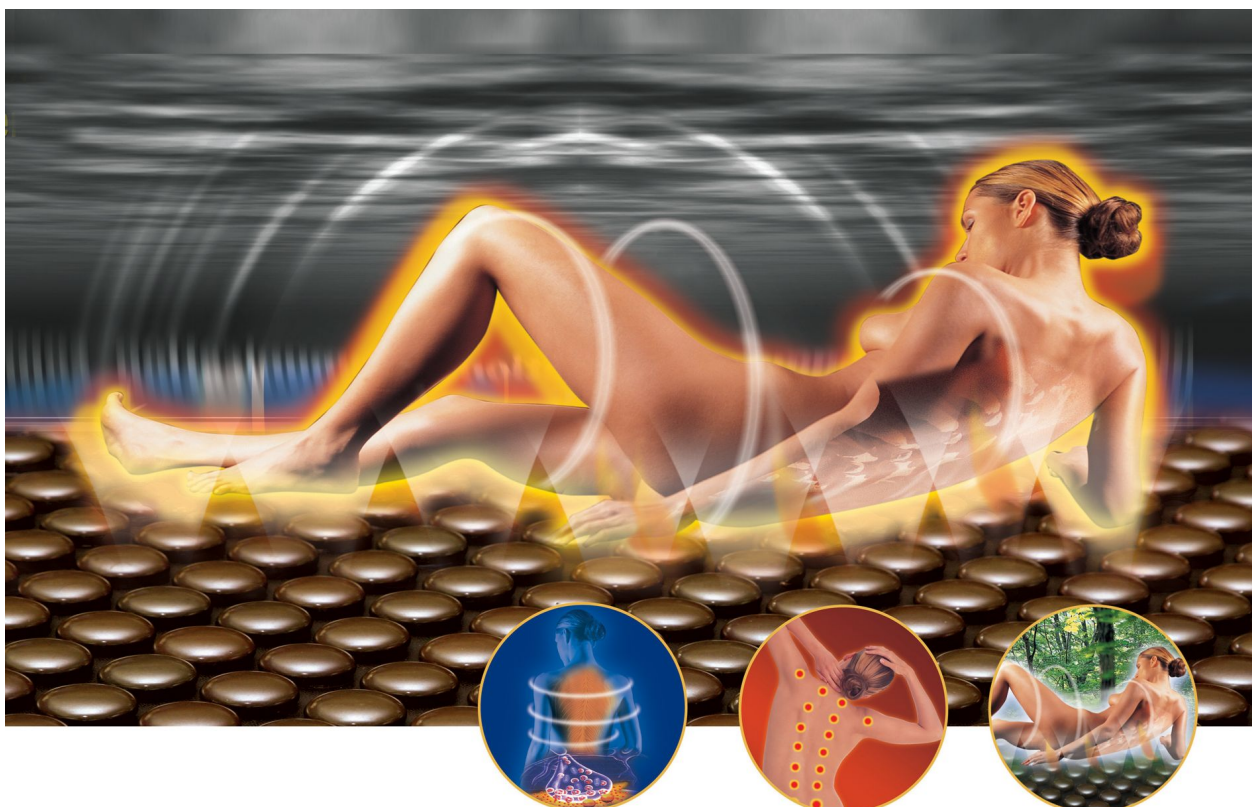

Glæd dig til at nyde fordelende fra de infrarøde varmestråler, fingertryksmassagen, moxibustion virkningen og de naturlige negative ioner.

Karakteristik for Nuga Best turmalin varme tæppe og madrasser

Hvad er turmalin?



Fra alle eksisterende hårde mineraler på jorden er det kun turmalin der besidder et permanent elektrisk potentiale, også kaldet polar krystal, derfor fik den navnet "gådefuld mineral med polarisation". Denne effekt er også kendt som piezo-elektricitet, som bruges til mange forskellige formål.

I de uendelige mange forskellige arter af sten, er turmalin absolut vinder på antal af farver og anstrøg af farver. På grund af sit naturlige lys, gennemsigtigt og fasthed, vinder det værdifulde mineral berømmelse som juvelersten.

Forskelligartetheden af mineralets farve siger noget om dens komplicerede bestanddele. Turmalin består af 26 grundstoffer fra det periodiske system: kalium, calcium, magnesium, mangan, jern, krypton, jod, fluor og m.m. Ved kontakten med vandet, ligesom i menneskers organisme, fremstiller uforarbejdet turmalin eller pulver af turmalin, hydro- ilt anioner og udstøder dybe infrarøde stråler og negative ioner.

Magnetiske bølger

Under varme skaber turmalin lav frekvente magnetiske bølger (magnet terapi), som forstærker kroppens blodcirkulation samt forbedre vores organismes energiforsyning i organer og celler.

Påvirkning af turmalin på organismen hjælper med at genopbygge endokrinsystemet, påvirker positivt mod leversygdomme, på det autonome nervesystem, blodcirkulation, hudproblemer. Turmalin støtter ilt skiftet i blodet, forstærker immunforsvaret, hormonsystemet og lymfesystemet, hjælpe ved onkologiske sygdomme.

Mellem folk har stenen derfor fået navnet "forunderlig læge" for sin positive virkning på helbredet.

Med disse egenskaber er turmalin derfor en vigtig komponent i Nuga Best alternative terapi, behandling og produkter til gavn for helbredet.

Seks funktioner i madrassen der gavner din krop:

- Strålevarmen giver terapeutisk effekt med høj temperatur fra turmalinen.
- Stimulere væksten og udviklingen af kroppen og dens organer.
- Bidrager til at opretholde balancen i dit fordøjelsessystem.
- Regulerer og stabiliserer kroppens væskebalance.
- Hjælper kroppen til at frigive sine affaldsstoffer.
- Stimulere stofskiftet.

Produktion af Nuga Best turmalin keramik

Nuga Best turmalinkeramik er en stærk blanding af turmalin, germanium, vulkansk bjergarter og 100% Koreansk granit (elvan).

Nuga Best turmalinkeramik er skabt ved brænding af et mix af mikropartiklerne fra disse mineraler. Brændingen foregår ved 1300 graders celsius.

Inden brænding formes turmalinkeramikken til små "knapper" som under brug gør at kroppens vægt mod varmepladen virker som fingertryksmassage og moxibustion. (Moxibustion er en smertebehandlingsmetode fra den orientalske medicin som blandt andet benytter sig af varme).



I Nuga Best produkterne er turmalinkeramikken påsat et specielt varmelegeme, der kan kontrolleres i temperaturområdet 40°C til 70°C, hvilket yderligere forstærker effekten af termoterapien, den dybe infrarøde udstråling samt ion terapien.

Elvan

Elvan karakteriseres ved evnen til at vedhæfte til og opløse fremmedlegemer, bakterier, og tungmetaller; neutralisere giftige materialer, og deodorere. Elvan i turmalinkeramikken hjælper dig derfor til at forblive sund.

Infrarøde varmemstråler

Dybe infrarøde varmemstråler for bedre blodcirkulation.

De infrarøde varmemstråler fra Nuga Best turmalinkeramik trænger dybt ind i vores krop og stimulerer derved kroppens blodcirkulation.

Denne påvirkning hjælper på behandling af sygdomme og smerter, samtidig med det styrker kroppens immunforsvar og dermed vores sundhed og følelse af velvære.

Det Koreanske folk har altid udnyttet fordelene ved varme i form af dybe infrarøde stråler udsendt fra for eksempel lervægge, keramiske plader og de specielle "Ondol" opvarmede gulve.

Nuga Best varmetæppe og madrasser anvender præcis samme princip ved at afgive infrarøde varmemstråler, som trænger dybt ind i vores krop og sætter gang i blodcirkulationen.

Selvom vi ikke føler nogle tydelige symptomer eller signaler, vil de fleste der klager over forstoppelse, skulder stivhed, rygsmerter, og ligende udvise en unormal lav kropstemperatur. Omkring 70% af alle kvinder lider af at føle denne slags kulde og uheldigvis er denne tildens stigende.

Denne tildens kan måske tilskrives dårligt miljø, som nutidens personer udsættes for. Så som stress og overdreven brug af aircondition, som forvirrer vores nervesystem og resulterer i dårlig blodcirkulation.

Nuga Best opvarmede turmalinkeramik vil hjælpe kroppen til at genskabe denne balance i vores autonome nervesystem.

Med en lysbølgelængde på mellem 3 til 1000um, er dybe infrarøde stråler karakteristiske som stærke varmemstråler, sammenlignet med synlige lysstråler. De infrarøde stråler overfører derfor direkte og øjeblikkelig varmeenergi med et meget lavt energitab. Dette udnyttes i mange forbindelser til for eksempel tøreropvarmning, hypertermisk terapi, helbreds instrumenter, fremstilling af fødevarer og dyr/plante fysiologiske behandlinger.



Fingertryksmassage (akupressur) og moxibustion

Udformningen af turmalinkeramikken i varmetæppet og varmemadrassen som små runde og blanke knapper giver en virkning som fingertryksmassage og moxibustion.

Fingertryksmassage, eller akupressur er en orientalsk terapi som bygger på principperne i akupunktur, den vigtigste forskel er fingertryk, i stedet for nåle, der bruges på akupunkterne. Akupressur kan være meget gavnligt som førstehjælp og nogle metoder har stor afslappende virkning. Akupressur kan hjælpe meget på mange forskellige slags lidelser som for eksempel astma, leddegigt, rygsmerter, fordøjelses problemer, migræne, hudproblemer, allergi, blodcirkulation, menstruationssmerter for bare at nævne nogle få.

Moxibustion, eller kort "Moxa" er ved siden af akupunktur, et vigtigt element i den orientalske medicin.

Som en velkendt terapi i denne medicin er moxibustions hensigt at genskabe cirkulationen af energi og/eller blod i kroppen. For eksempel som vand fryser til is ved lave temperaturer, vil en unormal kold kropstemperatur være stærkt forbundet med dårlig funktion af de store og mindre organer.

I dette tilfælde kan tilførsel af moxibustion hjælpe med at genskabe funktionerne.



Udformningen af turmalinkeramikken som små runde og blanke knapper giver en virkning som fingertryksmassage og moxibustion.

Naturens negative ioner

Turmanlinkeramikken udsender også et højt niveau af de negativt ladede ioner, som influerer positivt på vores velvære, arbejdslyst og humør.

Følelsen af negativt ladede ioner kender vi for eksempel fra når vi holder ferie ved havet, går en tur i skoven eller i bjergene, der fornemmer vi at organismen beriger sig med ilt.

Og specielt i skoven er luften ekstra frisk efter et tordenvejr, hvilket skyldes at torden og lyn producerer enorme mængder af negative ioner.

Tænk på, hvordan du føler dig umiddelbart før en storm eller et uvejr. Det skyldes at luften er ladet med positive ioner.

Efter uvejret er luften ladet med små negative ioner og naturen vågner og man føler sig opladet af den friske luft.

Forskningen har bevist, at negative ioner har en helbredende effekt. Desuden forbedrer de negative ioner det autonome nervesystem, blodcirkulationen, hjernefunktioner, kroppens immunforsvar, stofskiftet og fjerne træthed. De har positiv indflydelse på lungefunktionen, aktiverer hormonproduktionen og forbedrer luftvejene. De negative ioner medvirker til hurtigere at læge skrammer og sår, samt dræber bakterier og virus før de når at mutere.

Det foregår, fordi negativt opladet stof har evne til hurtigt at trænge ind i organismen og indvirker positivt på blodsystemet.

De dårlige positive ioner får vi alle steder fra i rigelige mængder. For eksempel i en by er det meget kompliceret, for her er der masser af kilder til positive spændinger, for eksempel fra transport, fabrikker, forskellige slags industri, lystofrør, bygninger med jernkonstruktioner, tv og computere, vores påklædning, og endda os selv er kilde til positive spændinger.

Derfor føler vi os tit dårlig tilpas i sådanne omgivelser.



Helbredende virkninger

Nogle af virkninger ved anvendelse af Nuga Best turmalinkeramiske tæppe og madrasser:

- ◆ Forbedre blodcirkulationen væsentligt.
- ◆ Forebyggelse af forskellige slags sygdomme.
- ◆ Forbedre blodet evne til at optage ilt.
- ◆ Styrkelse af blodårenes vægge.
- ◆ Styrker åndedrætssystemet.
- ◆ Forbedre de metaboliske processer, (stofskiftet).
- ◆ Rensning af affaldsstoffer og toksiner.
- ◆ Smerte- og betændelseslindring.
- ◆ Modvirker væskeansamlinger og hævelser.
- ◆ Styrkelse af immunsystemet.
- ◆ Stabilisere nervesystemet.
- ◆ Modvirker stress.
- ◆ Normalisering af søvn.
- ◆ Bedre hud.
- ◆ Forhøjet humør og levealder.
- ◆ Bremses ældning.
- ◆ Reducerer fedtlag.



Nyd den afslappende varmepåvirkning

Udpakning og installation

1



Åben papkassen i venstre side som vist.

2



Udtag varmetæppet og kontrolleren.

3



Tilslut stikket fra kontrolleren til stikket i turmalinkeramik varmetæppet eller madrassen.

4



Tilslut kontrolleren til en stikkontakt.
230VAC

5



Tænd for strømmen på tænd/sluk knappen på højre side af kontrolleren.
Nu vil display vise den øjeblikkelige temperatur for tæppet/madrassen.

6



Indstil den ønskede temperatur (for eksempel 45°C) ved at dreje på drejeknappen til højre eller venstre indtil displayet viser den ønskede temperatur. Stop med at dreje og display blinker nu i 1 sekund for at vise dig din ønskede indstilling (45°C).

7




Efter 1 sekund vil display gå tilbage og vise dig tæppet/madrassens nuværende temperatur. Varmelegemet vil nu begynde at varme tæppet/madrassen op indtil ønsket temperaturindstilling er opnået.



Glæd dig til at få ny energi og bedre helbred mens du sover.

Sådan bruges kontrolleren


Sådan bruges kontrolleren for NM-80 turmalinkeramik varmetæppet og NM-85 turmalinkeramik varmemadrassen:

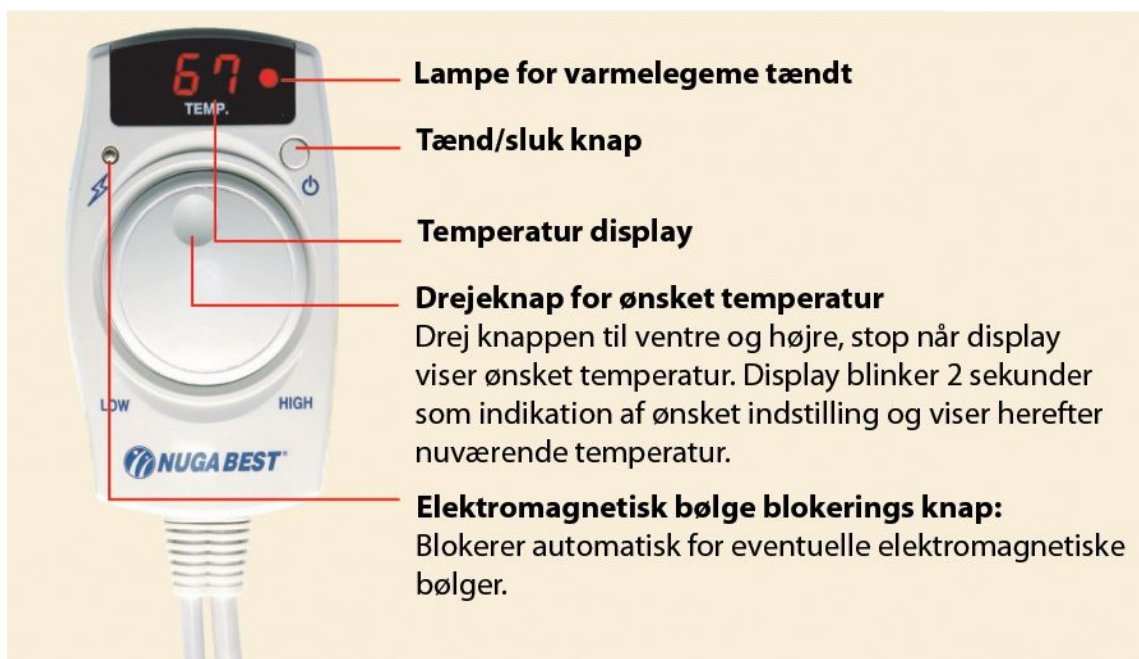

Temperaturen kan indstilles mellem 30°C til 70°C (86°F til 158°F)

Bemærk:

I starten anbefales det ikke at anvende en temperatur over 50°C (122°F)

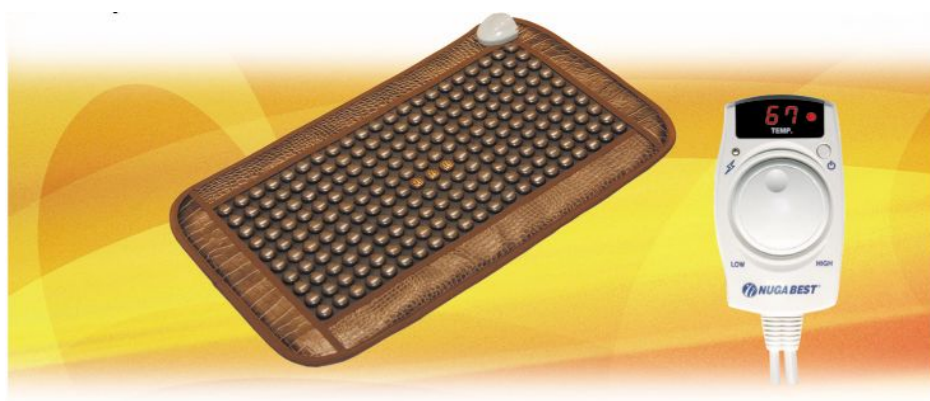

For din sikkerhed:

Kontrolleren slukker automatisk for strømmen til tæppet/madrassen efter 8 timers brug af sikkerheds grunde.

Når du ikke anvender produktet anbefales det ligeledes at udtage stikproppen i stikkontakten.

Forholdsregler for brug

Vigtigt.... læs alle punkter inden ibrugtagning for din egen skyld.

- ◆ Det anbefales ikke at huden har direkte kontakt med turmalinkeramikken under brug. Anvend et tyndt stykke stof mellem din hud og turmalinkeramikken i form af et lagen, en t-shirt, nattøj, bukser eller ligende. Dette for at undgå for kraftig varmepåvirkning og samtidig beskytter det dit tæppe eller madras mod sved og andre urenheder.
- ◆ For høj temperaturindstilling kan forårsage forbrændinger af huden. Det anbefales derfor at bruge en temperaturindstilling mellem 50°C til 60°C (122°F til 140°F).
- ◆ Patienter med ondartede svulster, forhøjet blodtryk, infektionssygdomme, eller hjerteproblemer skal kontakte deres læge inden brug af produktet.
- ◆ I tilfælde af irritation eller andre abnormaliteter af din hud eller krop, stop øjeblikkeligt brugen af produktet og kontakt din læge.
- ◆ Stik ikke nåle, ledninger eller andre fremmedlegemer og metalgenstande i tæppet eller madrassen. Dette kan i værste fald medføre elektrisk stød!
- ◆ I tilfælde af en fejlfunktion, stop brugen af produktet og kontakt forhandler eller butik hvor du har købt produktet.
- ◆ Forsøg aldrig at demontere, adskille, reparere eller ændre produktet.
- ◆ Brug kun en blød klud til aftørring af støv og rengøring af produktet. Brug ALDRIG fortynder, benzin eller andre kemiske stoffer til rensning.
- ◆ Brug ikke produktet sammenfoldet eller sammen med nogle andre varmeenheder.
- ◆ Produktet må ikke vaskes eller tørvaske. Det anbefales alene at rengøre produktet med en støvsuger og tør klud.
- ◆ Lad ikke kontrollere ligge under produktet eller anden afdækning under brugen. Enheden kan i så fald risikere at brænde af pga. overopvarmning.
- ◆ Brug ikke produktet i en meget blød stol, sofa eller madras. Gælder især for NM-85 turmalinkeramik madrassen.
- ◆ Brug ikke produktet i, eller i nærheden af vand, så som på badeværelset eller ligende våde omgivelser.

Produkt specifikationer

Produkt navn	Turmalinkeramik varmetæppe / madras
Spænding	220 til 230 VAC / 50Hz
Forbrug NM-80	Max 170W
Forbrug NM-85	Max 161W
Temperatur anvendelse	30°C til 70°C (86°F til 158°F)
Dimensioner NM-80	758 x 440 x 20 mm (±3)
Dimensioner NM-85	1230 x 490 x 50 mm (±3)
Vægt NM-80	Ca. 3 kg
Vægt NM-85	Ca 6 kg

Sikkerhed

- ◆ Udtag stikkontakten når produktet ikke er i brug.
- ◆ Placer ikke tunge genstande på produktet.
- ◆ Brug ikke andre kontrolenheder til produktet.
- ◆ Brug kun produktet efter foreskrifterne og som det er tiltænkt.
- ◆ Brug ikke produktet sammenfoldet.
- ◆ Hvis der opstår en strømfejl eller andre fejlfunktioner under brug af tæppet/madrassen, udtag da straks stikproppen fra stikkontakten og kontakt forhandler eller butik hvor du har købt produktet.

Produkt garanti

Sælger:

Produkt navn	Turmalinkeramisk varmetæppe / madras	Model:	
Serienummer:		Dato:	
Garantiperiode	2 år fra købsdatoen		
Sted for køb:		Tlf.:	

Køber:

Navn:	
Adresse linie 1:	
Adresse linie 2:	
Postnummer:	
By:	
Telefon:	
Mobil:	
Købspris:	

For garanti gælder følgende vilkår:

- ★ Venligst behold garantibevis på et sikkert sted. Du kan modtage fyldestgørende service ved at fremvise et gyldigt garantibevis med dato for køb.
- ★ Nuga Medical Co. yder garanti for sine produkter i henhold til lov om forbruger beskyttelse.
- ★ I tilfælde af fejlfunktion, kontakt enten stedet hvor du har købt produktet eller den nærmeste distributør. Hvis du ikke kan få hjælp nogen af disse steder så kontakt Nuga Best kunde support.
- ★ Du skal have købsstedets dato for køb registreret and købsstedets navn og garantibevis for at kunne opnå gratis service.
- ★ Nuga Medical Co. yder kvalitets garanti for dette produkt for 1 år fra købsdato.
(Studio Balance ApS forlænger denne garanti periode til 2 år for produkter solgt af Studio Balance ApS i danmark enten solgt direkte af os eller gennem nogle af vores forhandlere i Danmark).
Du kan kun modtage gratis garanti service i tilfælde af fejlfunktioner hvor produkter har været under normal brug.
- ★ Garantiperioden starter fra datoen for køb eller (udlån med henblik på senere køb). Venligst sikre dig forhandleren eller salgsstedet har udfyldt dit garantibevis korrekt.
- ★ Når dette produkt, som er beregnet på brug i hjemmet, bruges kommercielt (for eksempel i forretnings øjemed eller under andre unormale omstændigheder) eller for industriel brug, falder garantiperioden til 6 måneder fra købsdato, (inklusive dækning af kritiske enheder).
- ★ Garantibeviset udstedes ikke igen i tilfælde af det er bortkommet eller beskadiget.
- ★ Garanti service ydes IKKE i følgende tilfælde:
Fejlfunktion opstået på grund af naturkatastrofer herunder brand, jordskælv, tornado, oversvømmelse og ligende.
Udskiftning af defekte dele som skyldes slid under almindeligt brug.
Fejlfunktion som skyldes tilslutning til forkert stømkilde eller en fejlfunktion som skyldes en anden tilsluttet enhed eller fejl i el-nettet.
Fejlfunktioner som ikke skyldes mangelfuldhed i produktet, men skyldes en udefra kommende årsag.
Fejlfunktioner opstået som følge af reparation eller modifikation foretaget af enhver person som ikke er fra en Nuga Best distributør eller fra Nuga Medical kunde service.

 **NUGA MEDICAL CO.,LTD.**
<http://www.nugamedical.com>