

## Tryghedsalarm med GPS

# VarioCall



# Quick Guide Manual

## VarioCall

welldana  
**INNOCARE**

Innovation for a better life -  
taking welfare to a higher level

Produkt beskrivelse.	Bestellnummer	GSM Frekvenzen
VarioCall, opladekabel, opladestation, rem.	HC-415	850/900/1800/1900 MHz
Betjeningsvejledning	HC-415-KA	


### Anvendelse og funktion

VarioCall er en tryghedsalarm, der kan tilkalde hjælp ved simpelt tryk og ringe 3 forud programmerede mobil numre op.

### SIM-Kort

SIM-Kortet skal være et **Micro** SIM-Kort !

Pin kode skal være deaktiveret !

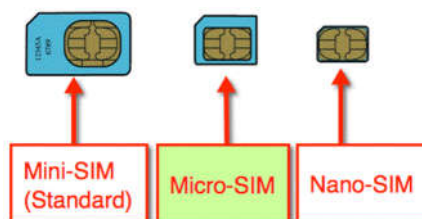

### Opladning af batteri

1

Ladestation for Variocall



#### Beskrivelse:

Monter kabel i ladestation og brug enten USB stik i PC eller det medfølgende stik til 230 V.

Placer Variocall i ladestationen og der lyser en rød prik foran på ladestationen. Når batteriet er fuld opladet slukker den røde prik.


Variocall kan også oplades direkte med kablet.

Åben forsigtig beskyttelsesklap på siden og monter kablet. Blå LED på siden lyser konstant.

**Vigtig!** Anvend kun det leverede opladekabel eller ladestation

## GPS enheden adskilles

2

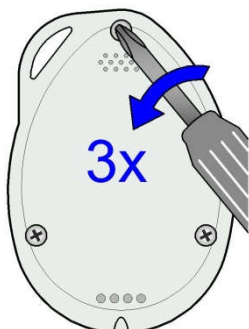


### Beskrivelse:

VarioCall huset er samlet med 3 stk skruer på bagsiden, som løsnes og afmonteres. Derved kan huset adskilles og give adgang til placering af SIM-Kort.

## SIM-Kort holder åbnes

2.1

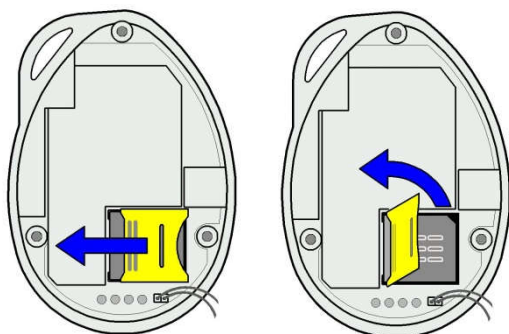


### Beskrivelse:

Træk og åben SIM-kort holder.

## SIM-Kort placeres

2.2

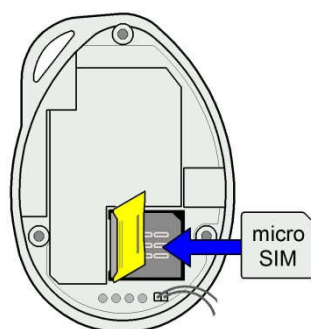


### Beskrivelse:

Micro SIM-Kortet placeres i holderen, med det skrå hjørne øverst til højre.

**Husk.** Pin koden på SIM-Kortet skal være deaktiveret. !!

## Luk SIM-Kort holder og GPS enheden samles

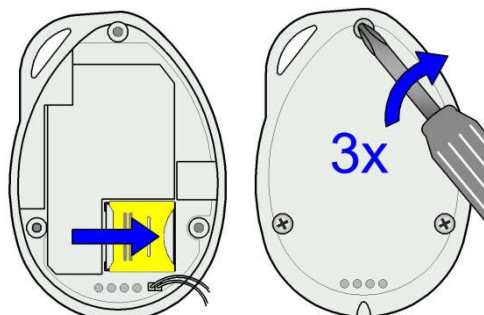**2.3****Beskrivelse:**

Luk og skub SIM-Kort holder forsigtig på plads.

Huset samles og skrues med de 3 skruer.

Pas på ikke at overskrue skrueerne!

## Tænde / Slukke

**3****Beskrivelse:****Tænde:**

Hold tasten med telefonsymbol inde i 1 Sekund. Enheden vibrere kort og begge LED blinker hurtig.

**Slukke:**

Tryk på tasten med telefonsymbol på siden og SOS tasten samtidig i ca et sekund. GPS enheden slukker.

## Funktioner for GSM LED - grøn

Blink ( korte blink hvert 3. sekund )	VarioCall er forbundet til GSM-Nettet
Blink ( lange blink hvert 3. sekund )	VarioCall er <u>ikke</u> forbundet til GSM-Nettet
Konstant lys i LED	SIM-kort er forkert monteret / Ingen SIM-Kort / Fejl i GPS enheden
Blink ( 2 korte blink hvert 3. sekund )	Varicall er forbundet med GPRS – Nettet

## Funktion Power LED - blå (også GPS LED, se nedenfor)

LED lyser konstant

Batteriet oplades.

**Bemærk:** Ved Batterivarsel via SMS, kommer når kapacitet er under 20 %, GPS enheden bør straks oplades.

Ingen eller langsom blink

Batteri er fuld opladet

Hurtig blink

Batteri ladestand er under 15 %

## Funktioner for GPS LED - blå

Blink ( korte blink hvert 3. Sekund )

VarioCall modtager GPS signal


Blink ( lange blink hvert 3. Sekund )

VarioCall modtager ingen GPS signal

LED Slukket (når den er helt opladet )

GPS Funktion er deaktiveret

## 4 Programmering og kobling af modtager Mobil numre

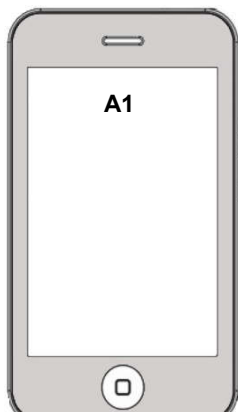

SMS til VarioCall

### Beskrivelse:

A) Send først en SMS med teksten: **RESET!** - til GPS enhedens telefonnummer

B) Send derefter en SMS med teksten: **A1** fra den mobil der skal være nr 1 i kalderækken

C) Der modtages en SMS fra VarioCall med teksten:

**Set mobile number 1 OK!**

D) Der kan tilkobles 2 stk mobil numre yderligere til kalderækken.

Mobil nr 2 sender SMS med teksten **B1** og mobil nr. 3 sender sms med teksten: **C1**

Bemærk. Brug STORE bogstaver!

## VarioCall er nu klar til brug!

### SOS knap – sender sms og ringer op

**SOS**

### Beskrivelse:

A) **Hold SOS Tasten i 3 Sekunder.**


B) VarioCall bekræfter ved at vibrere og give en bib tone.

C) VarioCall sender en SMS „Help Me“ til alle mobil numre. Derefter ringer den nummer A1 op (første mobil nummer i rækken) og der kan frit snakkes!

D) Alle opkoblede Mobilnumre modtager en sms med teksten „Help Me“ samt en koordinat på Google MAPS™, hvor nøjagtig personen befinder sig.

## Find VarioCall med sms.

**LOC**

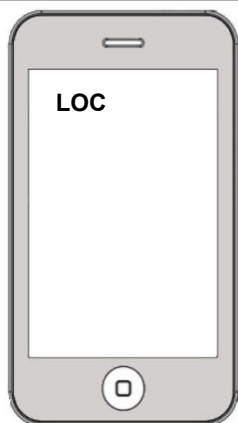


SMS til VarioCall

### Beskrivelse:

- A) Send en SMS med teksten: **LOC**
- B) Efter få sekunder modtages en sms med et Link til Google MAPS™, hvor VarioCall nøjagtig befinder sig

## Batteri status

**STATUS**

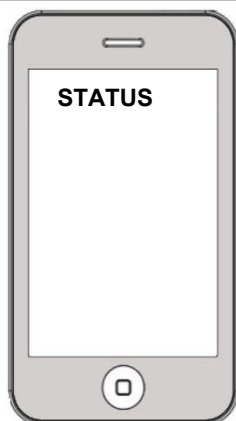

SMS til VarioCall

### Beskrivelse:

- A) VarioCall sender automatisk en SMS, til den eller de mobil numre der er tilkoblet SIM-Kortet, med en advarsel, hvis batteri niveauet komme rundt 20 %.

### Se status:

- B) Send en SMS med teksten: **STATUS** til GPS enhedenes SIM-Kort nummer
- C) VarioCall svarer med en SMS med diverse status informationer. Batteri status kan aflæses i % ved: **Bat:xx%**

## Opsætning af virtuelt hegn for alarm (3 virtuelle hegn er muligt, tast G1...,G2... eller G3...)

**G...**



SMS til VarioCall

### Beskrivelse:

- A) Send en SMS med teksten: **G1,1,0,200M** til VarioCall  
**De sidste 3 cifre + M er den radius der ønskes.** (eks. 200 Meter = 200M). Der bør ikke indstilles under 50 meter, for at beskytte GPS enheden.  
Eks.: **G1,1,0,200M = Radius på 200 Meter**  
**eller**  
**G1,1,0,500M = Radius på 500 Meter**
- B) Når VarioCall overskrider den indtastede radius, sender den en SMS alarm til opkoblede mobiltelefoner.


**Legende:** **G1** = Første virtuelle hegn

**G1,1** = Aktivere første virtuelle hegn

**G1,1,0** = Alarm ved overskridelse af punk / **1** = Alarm ved betrædelse af punk

## Slukke for virtuelt hegn alarm

**Gx,0**

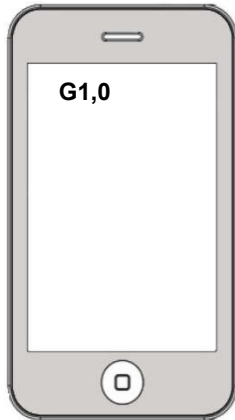

SMS an VarioCall

### Beskrivelse:

A) Send en SMS med teksten: **G1,0** til VarioCall og alarmen er slukket

B) VarioCall sender SMS med bekræftelse

## Garantie

Der ydes 1 års garanti og 2 års reklamationsret på produktet. Garantien omfatter ikke udefra kommende skader, som er opstået ved uhensigtsmæssig brug. Garantien omfatter udelukkende produktet og ikke arbejdsløn og forsendelse.

## Serviceadresse

Welldana Innocare, Randersvej 6, 6700 Esbjerg – Tlf: 75272333 – Mail: [km@welldana.com](mailto:km@welldana.com) – Web: Welldana-innocare.dk

GPS enheden er forsynet med batteri og må ikke smides ud som almindeligt affald.





## Konformitetserklæring

Hiermit erklært AAL Homecare, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter [www.aal-homecare.com](http://www.aal-homecare.com).





**REACH Verordnung** Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.

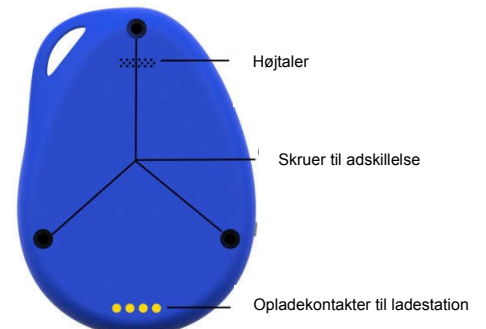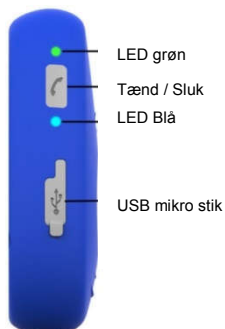

# Quick Guide Manual VarioCall

**welldana  
INNOCARE**

Innovation for a better life -  
taking welfare to a higher level

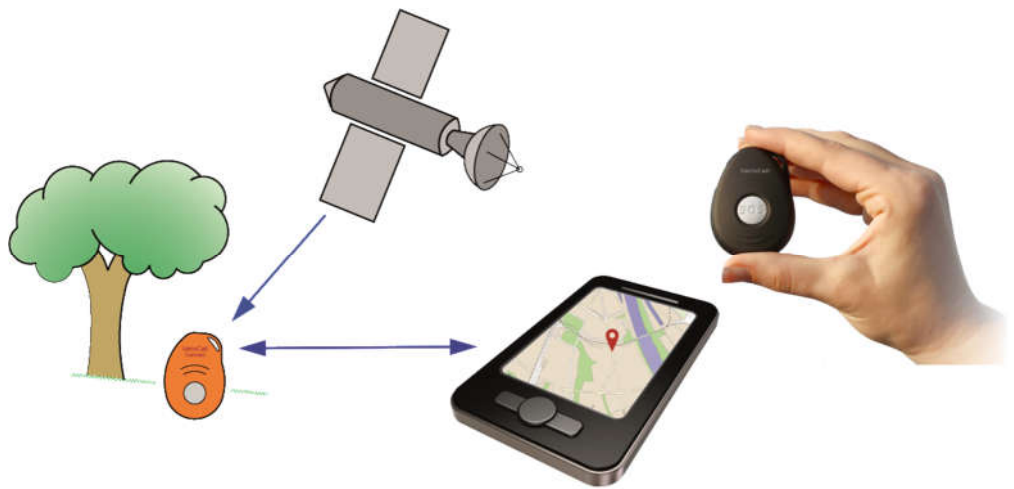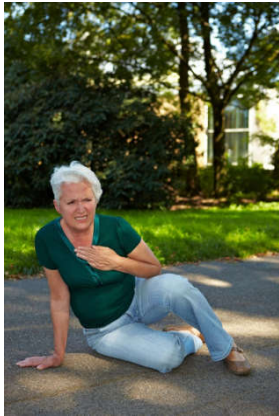

**welldana  
INNOCARE**

Innovation for a better life -  
taking welfare to a higher level

[www.welldana-innocare.dk](http://www.welldana-innocare.dk)

Tlf.: 75 27 23 33