


Path Finder™

Forbedrer mobilitet



REF FIN101

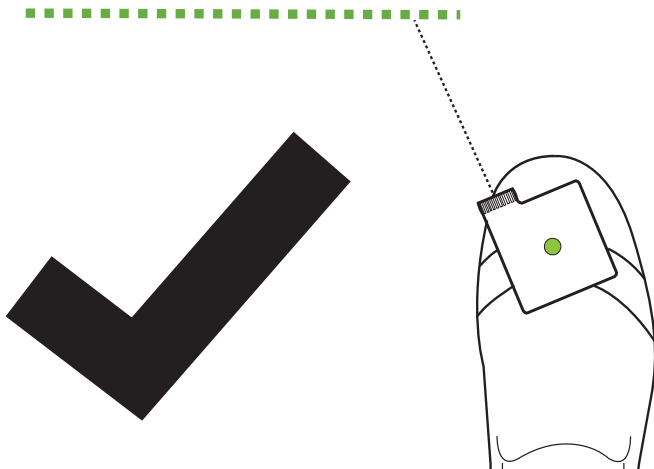

Walk With Path, Titangade 11, 2200 København N,
Danmark

Version Nummer 1

Introduktion


Path Finder er designet til at stimulere gågang og forebygge at fryse fast i Parkinson's sygdom.

Se de projekterede linier på gulvet og brug dem til at træde henover.




Indhold

Introduktion

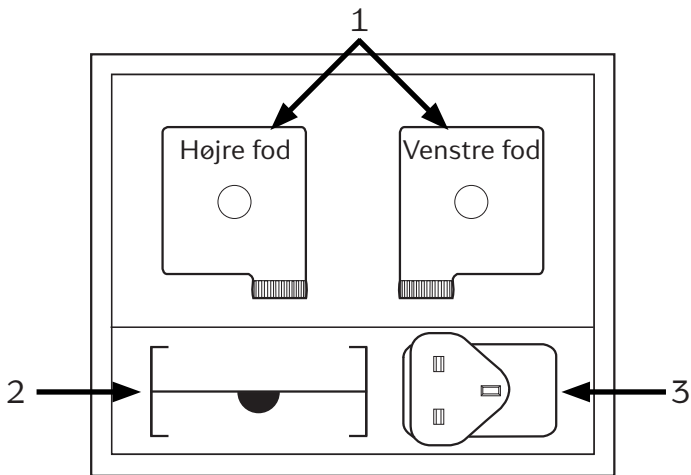

1. Enheder 2. Kabler til opladning 3. Stik

Introduktion

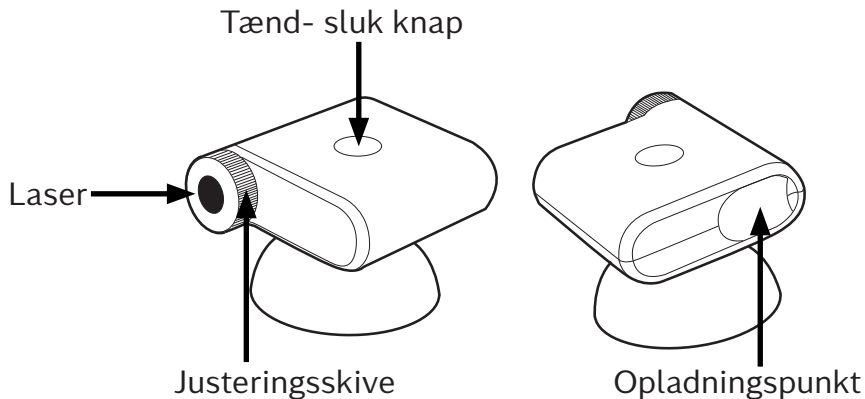

Primær enhed

Vigtig sikker-
hedsinformation




Klasse 2 Laserprodukt

< 5mW laser output ved 515nm, med en spredning på 35x0.07 grader

En Klasse 3R laser findes indeni produktet. Brug af laserproduktet med manglende eller beskadigede dele kan være farligt.

Dette produkt har til hensigt at projicere en laserlinie på gulvet eller lignende overflade.


Laser

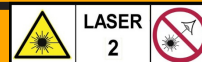

Dette produkt har til hensigt at projicere en laserlinie på gulvet eller lignende overflade.

- Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen.
- Brug varsomt når laseren er tændt.
- Peg aldrig laseren i retning af øjnene på andre mennesker eller dyr
- Undgå at pege laseren imod meget reflekterende overflader.
- Pas på at laseren ikke distraherer nogen som arbejder med noget som kræver høj koncentration for at undgå eventuelle sikkerhedsskader.
- Undgå at pege laseren mod materialer som kan gå i brand eller eksplodere.

Vigtig Sikkerhedsinformation

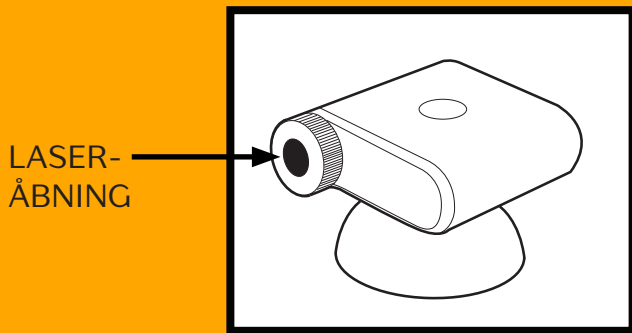


LASERSTRÅLING KIG IKKE IND
I STRÅLEN KLASSE 2 LASER-
PRODUKT

FORSØG IKKE AT ÅBNE PRODUKTET. Dette vil give adgang til laserstråling der er stærkere end Klasse 2. Eventuel produktreparation som involverer at skille laserenheden ad, eller at åbne den, skal under alle omstændigheder kun gøres af Walk With Path. FORSØG ALDRIG SELV AT ÅBNE ENHEDEN.

ADVARSEL - KLASSE 3B LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. UNDGÅ
LASERPROJEKTION DIREKTE MOD ØJNE

Begynd at bruge
Path Finder

Begynd at bruge Path Finder

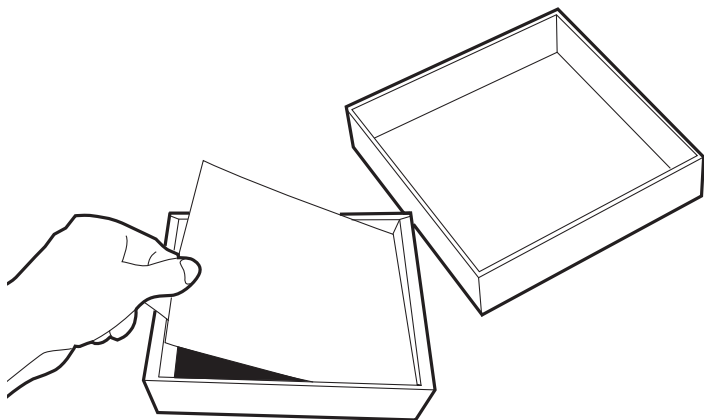


1

Læs vejledningen først

Oplad før brug.


Begynd at bruge Path Finder

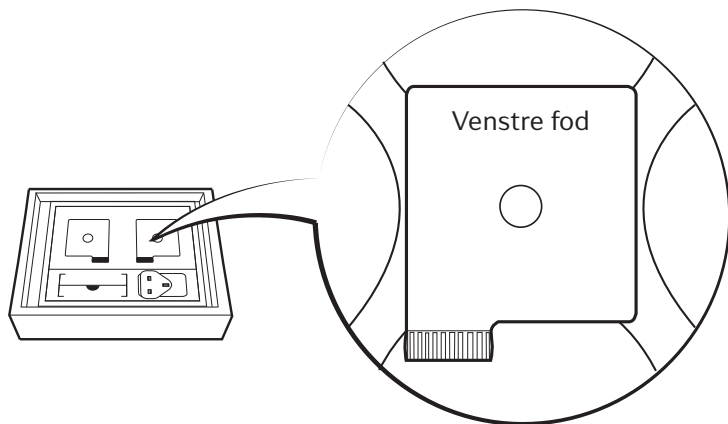

2

Tag ud af emballagen

Begynd at bruge Path Finder

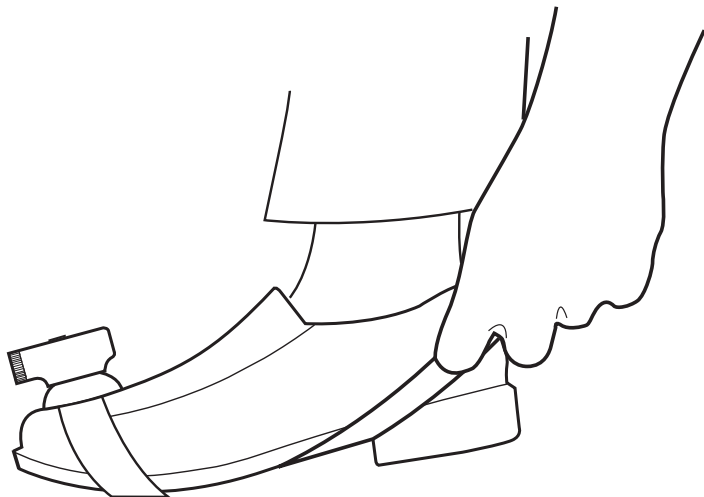


3

Placer på skoen

Sørg for at produktet sidder sikkert fast på skoen.

Begynd at bruge Path Finder

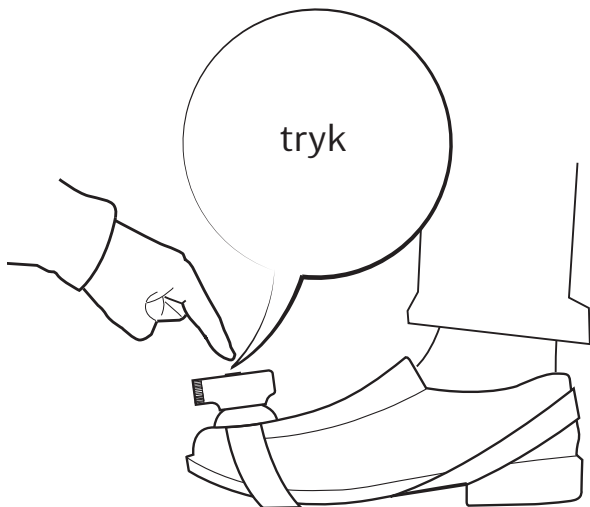


Path Finder tændes ved at trykke på knappen ovenpå produktet. Et grønt lys (eller orange ved lavt batteri) indikerer at produktet er tændt. For at slukke trykkes der på knappen igen.

Hvis du er inaktiv for en kort periode, slukker laserlyset automatisk, men lyset ovenpå produktet forbliver tændt. Dette er midlertidigt og laserlyset kommer tilbage når aktivitet opdages.

5


Tænd produktet

Begynd at bruge Path Finder

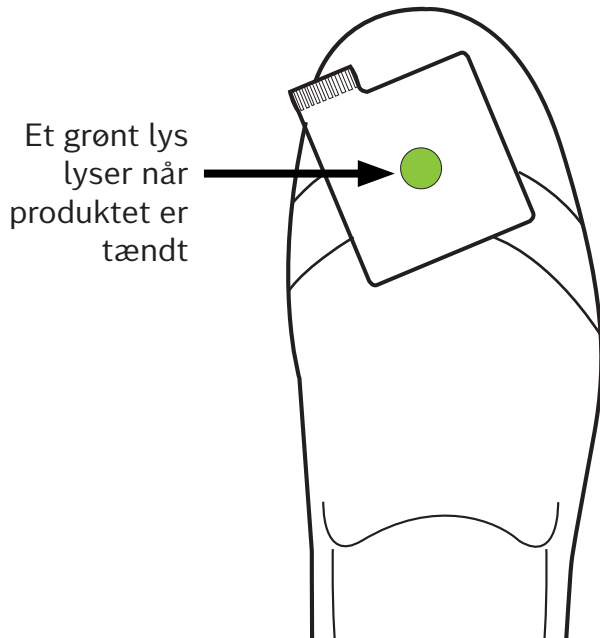


Hvordan du
kalibrerer
Path Finder

Hvordan du kalibrerer Path Finder: Højre fod

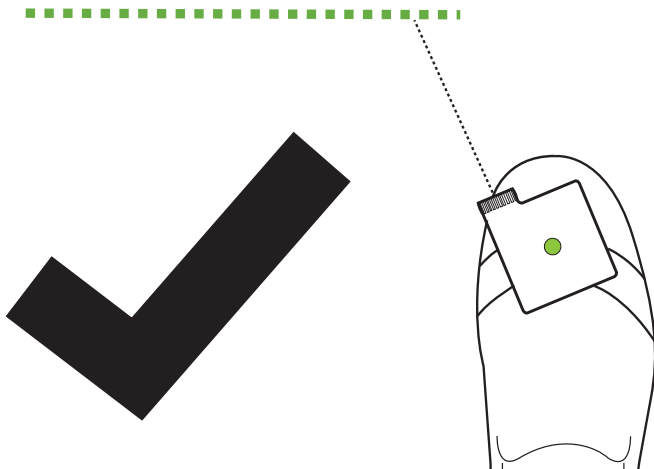


 Korrekt linjeprojektion

Hvordan du kalibrerer Path Finder: Venstre fod

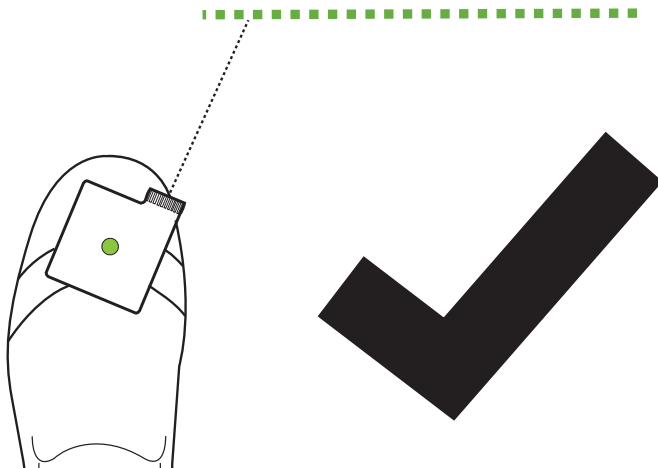

 Korrekt linjeprojektion

Hvordan du kalibrerer Path Finder

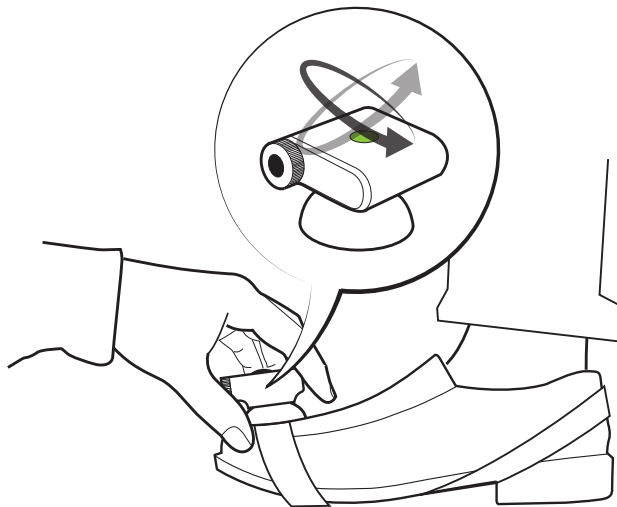


6

Rotate the unit

Move side-side and up-down to adjust the laser light.

Hvordan du kalibrerer Path Finder

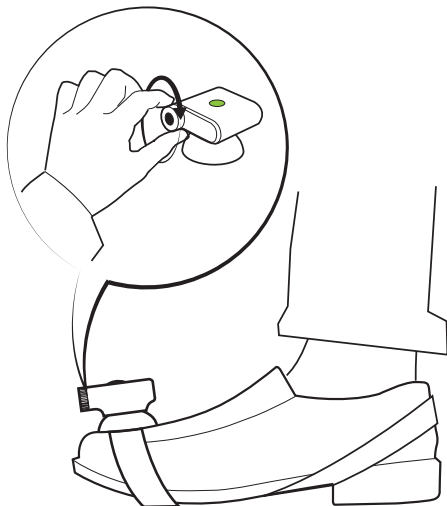


7

Roter enheden

Bevæg fra side til side eller op-ned for at justere laserlyset.


Hvordan du oplader Path Finder

Hvordan du oplader Path Finder

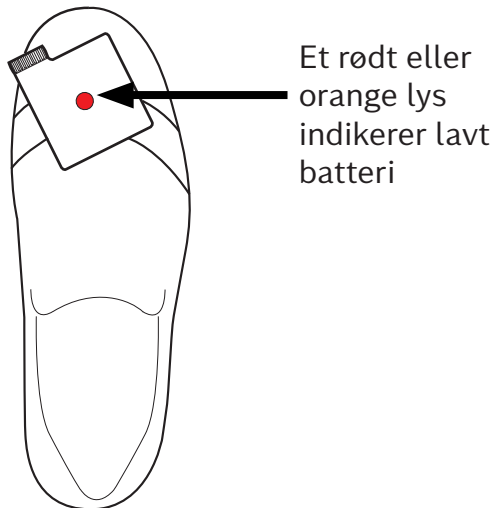

Lavt batterisignal

Hvordan du oplader Path Finder

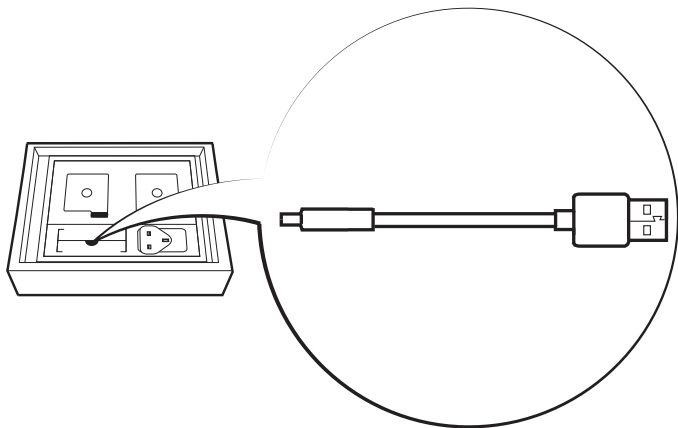


1

Tag opladerkablet

OBS: Brug kun det givne kabel. Oplad ikke med et andet kabel, da dette kan medføre at produktet stopper med at virke.

Hvordan du oplader Path Finder

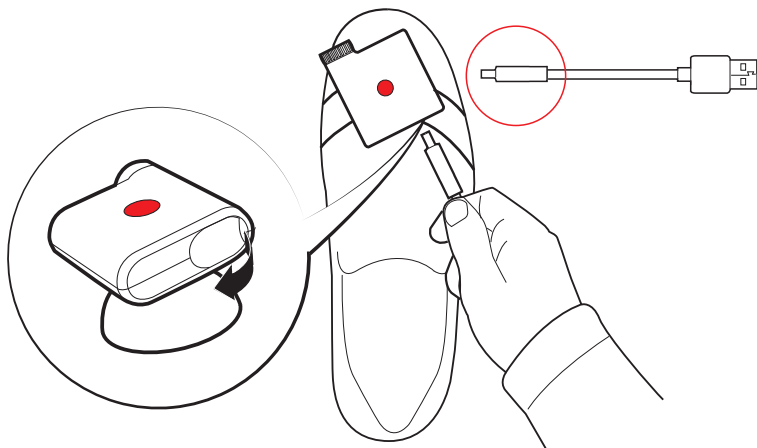


2

Forbind kablet

Den runde del føres ind i enheden.


Hvordan du oplader Path Finder

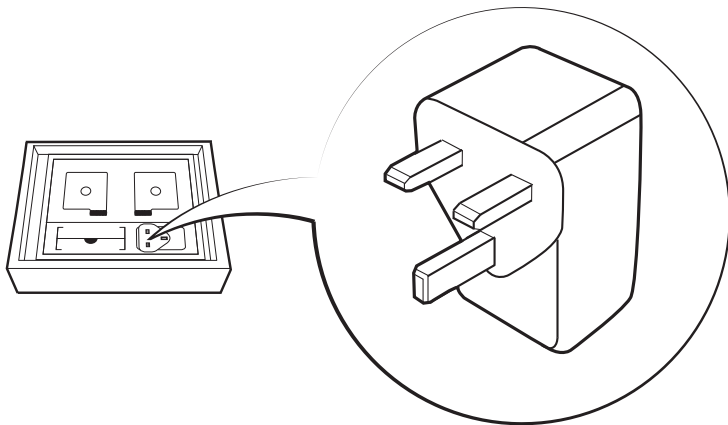

3

Tag stikket


Hvordan du oplader Path Finder

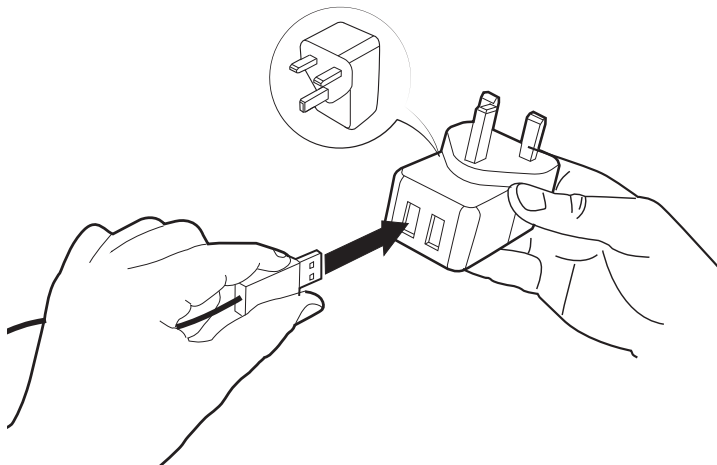

4


Placer USB i stikket

Hvordan du oplader Path Finder

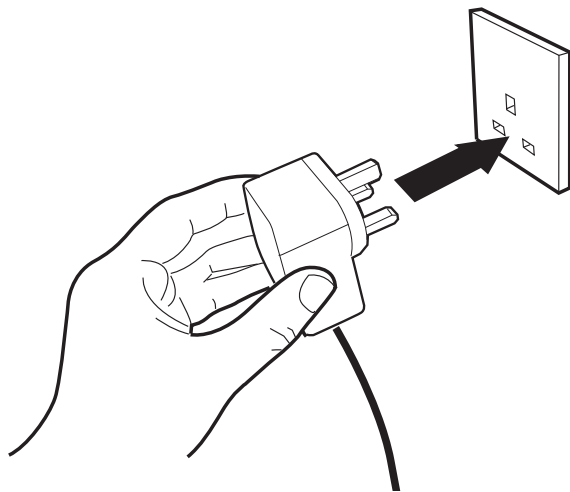


5 Placer i en stikkontakt
OBS: Produktet kan ikke tændes mens det lades.


Hvordan du oplader Path Finder

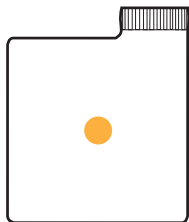


orange konstant
-lavt batteri
-produktet er
tændt

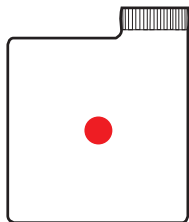

rød konstant
-lavt batteri
-produkt
slukket

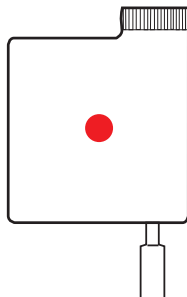

rød konstant
-lades

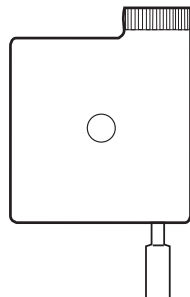

lys slukket
-fuldt ladet




Li-ion

Batteri indikation

Dette produkt indeholder lithium-ion batterier.
Bortskaf produktet ansvarligt eller send tilbage til producenten.

Yderligere information

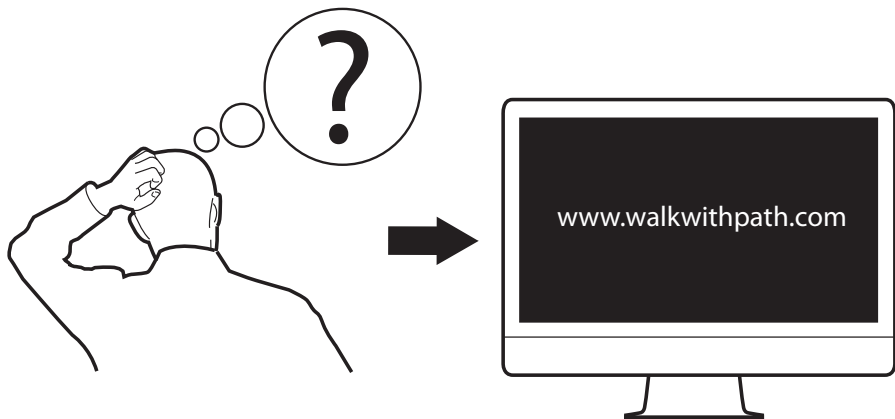

For yderligere information og instruktionsvideo
se www.walkwithpath.com

Walk With Path har ikke oplevet nogen sundhedsproblemer eller bivirkninger forbundet med at bruge Path Finder.

Produktet kan modstå let vand men er ikke vandtæt.

Sørg for at skoremmen sidder ordentligt fast på skoen.

UNDGÅ DEN DIREKTE LASERSTRÅLE





Walk With Path
All rights reserved