



BRUGERVEJLEDNING (Ver. 1.0)

Alarmtryk/Overfaldstryk med GPS og to-vejstale (CM-GPS-869-V2)



GPS nødkaldet anvendes som en trygheds- og overfaldsalarm i samme enhed. Nødkaldet sikrer at borger eller personale altid kan lokaliseres, når nødkaldet aktiveres. Nødkaldet er bærbart og med fuld to-vejstale, som muliggør direkte kommunikation mellem borger og personale. Anvendes til borgere med tendens til vandring og til borgere i eget hjem, der ofte bevæger sig ud på egen hånd. Kan også anvendes som overfaldsalarm til personale.

Alarmdetaljer i IC Pro app'en

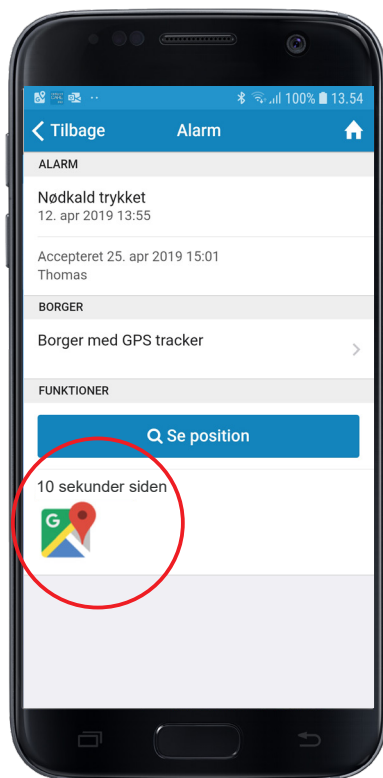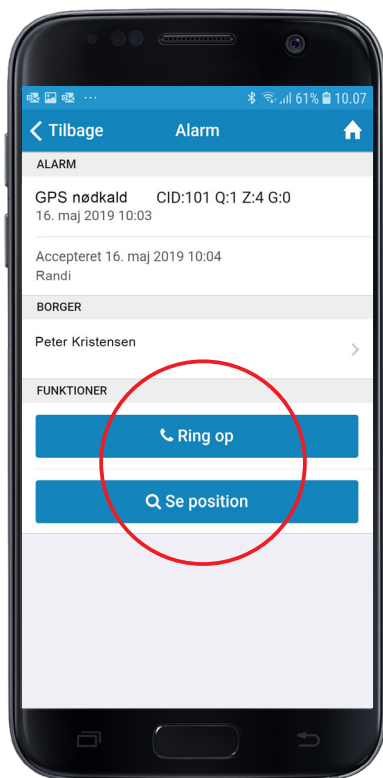


NØDKALDSALARM

Når den blå nødkaldsknap aktiveres, sendes en alarm til IC Pro app'en med GPS koordinater fra enheden.

Alarmen vises i IC Pro App'en under menuen alarmer. Tryk på nødkalds-alarmen, hvorefter alarmdetaljer vises.

Alarmen accepteres ved at trykke Accepter alarmen, og herefter Bekræft eller annuller din accept.

Vælg herefter Ring op eller se Position. Borgerens nøjagtige position vises når man trykker på Google map ikonet.

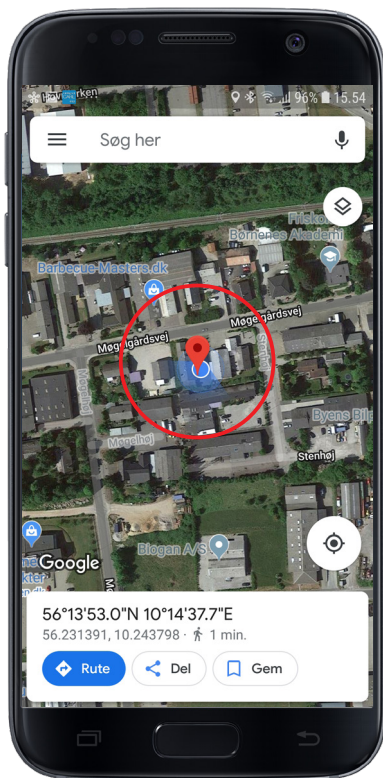

GPS DÆKNING/OPDATERING

Nødkaldsalarmen indeholder GPS data, samt information om hvornår GPS koordinaterne er registreret - dvs. hvor gamle de er (Se rød cirkel ovenfor). Ved dårligt GPS signal sendes sidste registrerede brugbare koordinater. De viste koordinater kan altså være flere timer/dage gamle data - hvis GPS nødkaldet har været uden for GPS dækning.

Efter der er sendt en alarm med eksempelvis gamle data, tracker GPS'en kontinuerligt efter bedre signal. Når den har fået nye GPS data, sendes en opdatering ud til App'en, med disse nye koordinater.

Hvis GPS dataene er mere end 6 minutter gamle, skal man gå tilbage til alarmlisten under menuen Alarmer. Vælg alarmen igen og tryk på Se position for at se nye data.

BEMÆRK!

GPS opdateringen vises KUN i app'en, og ikke i pushbeskeden (pop-up alarmen), brug derfor kun App'en.

Imens der tales i GPS nødkaldet, sendes der ingen GPS tracking/opdatering.

Ved at klikke på Google map ikonet, vises GPS koordinater for nødkald.

Opdatering af position skal foretages som beskrevet ovenfor.

ACCESS TECHNOLOGY A/S

HOVEDAFDELING: Møgelgårdsvej 14A • DK - 8520 Lystrup • T: +45 32 20 10 53 • CVR: 32831192 • www.acct.dk

SALGSAFDELING SJÆLLAND: Norvangen 3D, Opg. C, 2 sal • DK - 4220 Korsør • T: +45 70 27 66 45 • www.intelligentcare.com