



estiloPRIME+

Mobile Massage Chair *Plus*



Brugermanual
OF2004 Omknee 2

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner	3
Forholdsregler for driftsmiljø.....	3
Bemærk før brug.....	3
Garanti	4
Pakkens Indhold.....	5
Diagram over fjernbetjening.....	6
Produktbetjeningsvejledning.....	6
Forberedelse før brug	6
Placering af massageapparatet.....	6
Fjernbetjenings betjeningsinstruktion.....	7
1. [Power].....	7
2. [Nakkemassage med uret/mod uret].....	7
3. [Alternativ nakkemassage].....	7
4/5. [Opad] / [Nedad]	8
6. [Valg af tilbageæltning og banketilstand]	8
7. [Niveauvalg for bankestyrke]	8
8. [Spot].....	8
9. [Valg af massagezone]: [Fuld]/[Øvre]/[Nedre]	8
10. [Varme]	8
11. [Vibration]	8
ADVARSEL.....	8
Produktets funktioner.....	9
Innovativ nakkemassage.....	9
Innovativ ælte- og tappingmassage.....	9
Synkron massage på nakke og ryg	9
Opbevaring.....	9
Rengøring.....	9
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	9
Produkt Specifikationer	10

Sikkerhedsinstruktioner

Læs brugermanualen grundigt før du bruger dette produkt, specielt sikkerhedsinstrukserne. Behold brugermanualen til fremtidigt brug.

Forholdsregler for driftsmiljø

- Brug ikke dette apparat i fugtige eller ekstremt støvede miljøer, for at undgå driftsfejl.
- Brug ikke fodmassageapparatet udendørs.
- Undgå at placere eller bruge massageapparatet i direkte sollys, varmeapparater eller ovne.

Bemærk før brug

- Hvis du på tidspunktet før brug har en af de følgende forhold, søg professionel rådgivning før brug.
 - Graviditet eller Menstruation
 - Hud allergi eller irritationer
 - Ryg- og nakkesmerter eller andre hvirvelanomaler
 - Forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme
 - Eller andre forhold som kunne være til bekymring
- Sørg for at bruge en stikkontakt, der passer til stikket
- Sæt ikke netledningen i/træk ud af stikkontakten, og rør ikke ved strømafbryderen med vådt hænder. For at undgå elektrisk stød eller udstyrsfejl.
- Sørg for, at stikket er sat helt ind i den korrekte elektriske enhed
- stikkontakt for at undgå elektrisk stød og brand.
- Hvis strømmen afbrydes under brug, skal du dreje afbryderen til OFF position og træk stikket ud af stikkontakten for at forhindre evt skader, når strømmen genoprettes.
- Træk altid netledningen ud efter brug eller før rengøring.
- Træk ikke i strømledningen for at tage stikket ud. Træk kun stikket.
- Brug ikke apparatet, hvis det har en beskadiget ledning eller stik. Vær venlig returner enheden til IWAO servicecenter for undersøgelse og reparation.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af IWAO.
- Hvis du opdager en funktionsfejl eller andre unormale forhold under betjening, skal du straks slukke for strømafbryderen, tage stikket ud netledningen og kontakt IWAO Service Center for undersøgelse.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere dette apparat. Vedligeholdelsen og reparation bør kun udføres af en autoriseret tekniker.
- Hvis du føler unormale eller stærke smerter under massagen, skal du stoppe med massage med det samme.
- Det anbefales ikke at bruge dette apparat i mere end 30 minutter ad gangen
- tid. Koncentrer ikke massagen på ét område i mere end 15 minutter heller.

Garanti

1. Garantien kan ikke overdrages.
2. Denne garanti er kun effektiv, hvis produktet er købt hos IWAO.
3. Købsbevis (original kvittering) er påkrævet for alle garantireparationer.
4. Alle underforståede garantier, inklusive men ikke begrænset til disse underforståede garantier af fitness og salgbarhed, er begrænset til den varighed, der er angivet i garantipolitik.
5. Skader på grund af forkert brug, forkert behandling og uautoriseret modifikation og reparation er ikke dækket af denne garanti.
6. Garantien dækker ikke tilbehør og tilbehør, som ikke gør det hører til massageenheden.
7. Garantien er ikke effektiv for udlejning, forretning, kommerciel, institutionel eller andre ikke-boligbrugere.
8. Alle tjenester, der er dækket af denne garanti, skal godkendes af IWAO og kun repareret af autoriserede teknikere.
9. Hvis reservedele til defekte materialer ikke er tilgængelige, IWAO forbeholder sig retten til at foretage erstatning i stedet for reparation eller udskiftning.

Pakkens Indhold

1. Massagesæde
2. Fjernbetjening
3. Adapter




Diagram over fjernbetjening

Produktbetjeningsvejledning


Forberedelse før brug

Placering af massageapparatet

- Massageapparatet er udstyret med en rygstrap, der gør det muligt for brugeren at fastgøre den på de fleste stole.
- Placer massageapparatet på en stol, vikl de to ender af remmen rundt om ryggen af stolen og sikres med velcro.

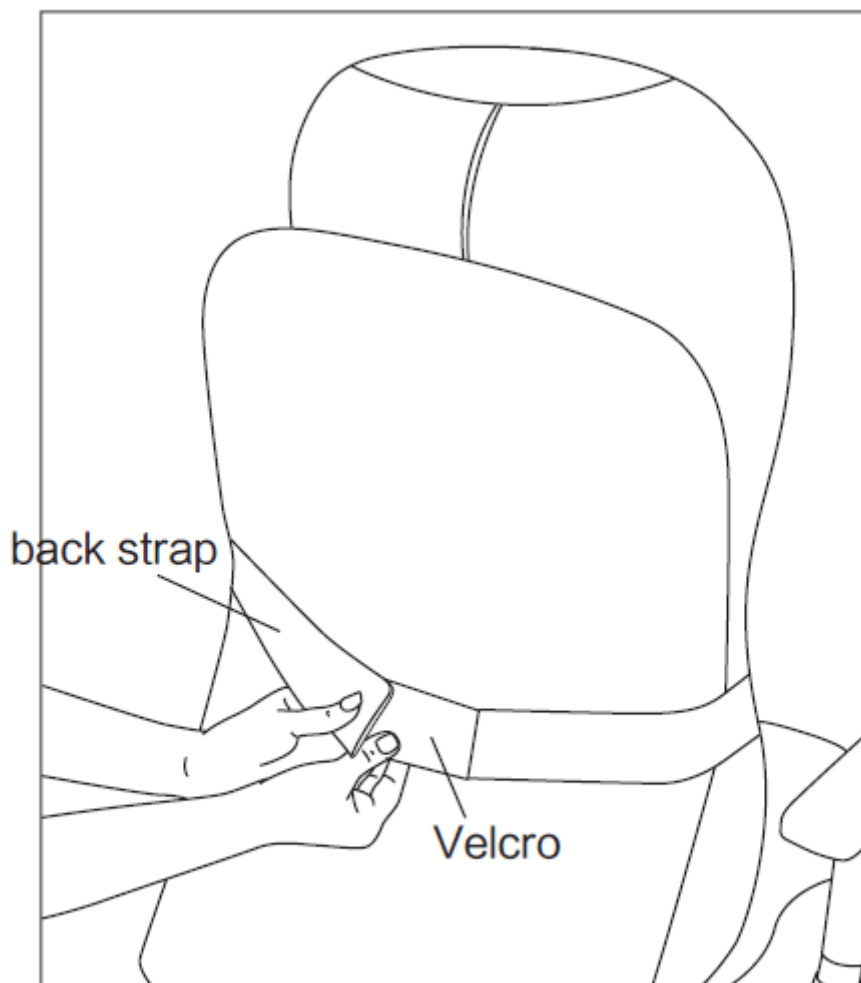

Fjernbetjenings betjeningsinstruktion

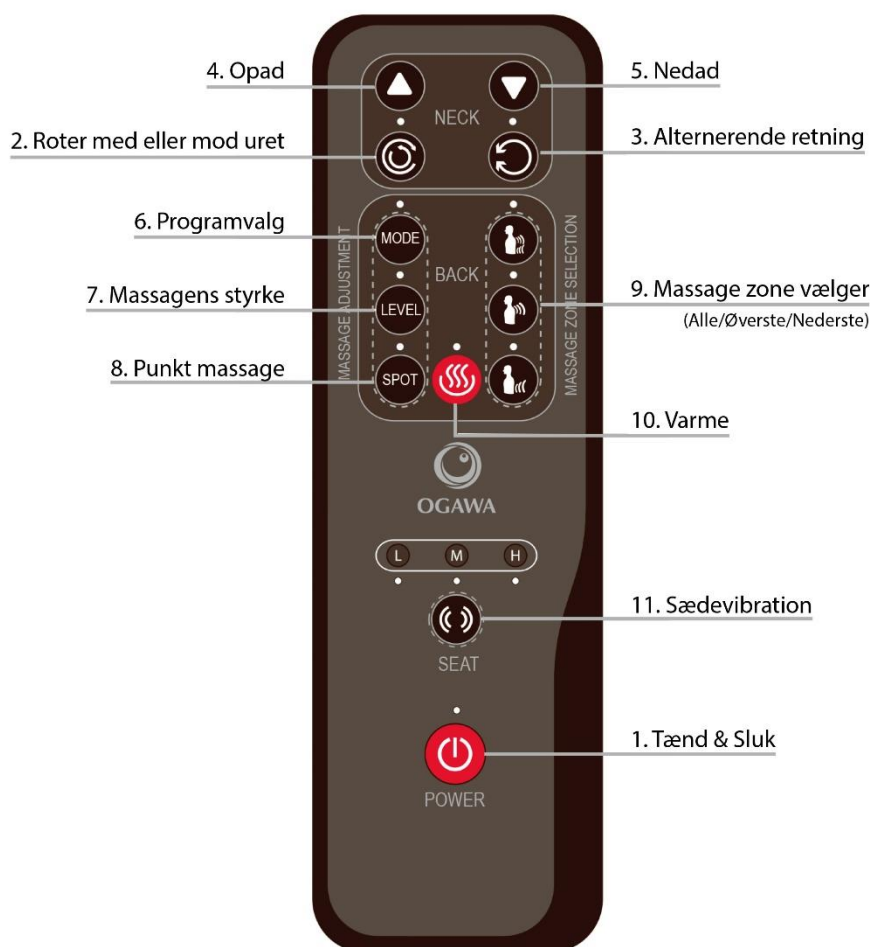

1. [Power]

Sæt strømstikket i stikkontakten. Hvis rullerne ikke er ved nederste position, blinker indikatorlyset på [Power]-knappen og rullerne vender tilbage til den nederste position.

Tryk på [Power]-knappen, produktet går i standbytilstand, og [Power]-indikatoren er tændt. Så kan du vælge massageprogrammet du vil have og nyde massagen. Der er en 15-minutters autosluk for hver brug.

Når tiden på 15 minutter er forbi, eller hvis du trykker på [Power] knappen under drift, stopper enheden med at fungere, alle lysene på panelet slukkes, og massagerullerne vender tilbage til originalen position.

2. [Nakkemassage med uret/mod uret]

Funktion tilgængelig, når [Power] er tændt. Tryk på denne knap og ruller vil starte en ælte med uret i nakkeområdet. tryk på knappen igen, og rullerne vil ælte mod uret.

3. [Alternativ nakkemassage]

Funktion tilgængelig, når [Power] er tændt. Tryk på denne knap og ruller vil begynde at ælte på nakken. Retningen vil skiftevis skifte mellem med uret og mod uret.

4/5. [Opad] / [Nedad]

Når [Power] er tændt, skal du trykke og holde [Opad]/[Ned] knappen nede, for at flytte nakkemassagerullerne opad eller nedad, for at justere nakkemassagepositionen. Slip knappen, når den ønskede position er opnået.

6. [Valg af tilbageæltning og banketilstand]

Når [Power] er tændt, skal du trykke på denne knap for at starte det automatiske program for tilbage æltning og bankning og skift mellem tre tilstande i rækkefølge.

1. æltning+tapping (intermitterende tapping+kontinuerlig bankning) indikatorlyset blinker langsomt.
2. æltning+tapping (kontinuerlig tapping) indikatorlyset blinker hurtigt.
3. æltning+tapping (intermitterende tapping) indikatorlys

7. [Niveauvalg for bankestyrke]

Under autoprogrammet ælte og tapping skal du trykke på denne knap for at skifte tappingstyrken mellem tre niveauer (lav/medium/høj).

Indikatorlyset blinker langsomt for lavt niveau, blinker hurtigt for medium niveau, lyser konstant for højt niveau.

8. [Spot]

Tryk på denne knap for at stoppe under autoprogrammet for æltning og tapping massagerullerne fra at bevæge sig opad eller nedad, koncentrerer sig således æltning og tapping på nuværende sted.

9. [Valg af massagezone]: [Fuld]/[Øvre]/[Nedre]

Når [Power] er tændt, kan der vælges tre massagezoner: [Fuld]/[Øvre]/[Nedre].

Massagerullerne vil bevæge sig op og ned og give massage i den valgte zone.

10. [Varme]

Når massagemekanismen fungerer, skal du trykke på denne knap for at starte varmfunktionen. LED lyset på massagerullerne vil lyse når funktionen er aktiv. Tryk på knappen igen, varmfunktionen vil stoppe og L.E.D. lyset på massagerullerne slukkes.

11. [Vibration]

Når [Power] er tændt, skal du trykke på denne knap for at aktivere sædevibrationen og skifte mellem tre intensitetsniveauer (lav/medium/høj). Indikatorlyset for det valgte niveau vil lyse.

ADVARSEL

Læn dig ikke på den dobbelte massagemekanisme i puden, når justering af din kropspose for at undgå rifter på produktets pudeoverflade. Undlad at klemme eller tvinge nogen del af din krop mod den bevægelige massage mekanisme.

Produktet anbefales ikke til brug på træoverflader, da lynlåsen kan beskadige træet.

Der må kun udøves en let tryk mod enheden for at eliminere enhver risiko for skade.

Forsøg ikke at reparere massagepuden, kontakt venligst 'IWAO' for enhver påkrævet service.

Produktets funktioner

Innovativ nakkemassage

Justerbar højde velegnet til forskellige mennesker. Ergonomisk designet ruller simulerer i høj grad menneskehænder til at ælte din nakke. Denne funktion er effektivt til reducere ubehag og stivhed i nakken.

Innovativ ælte- og tappingmassage

Innovativ kombination af æltning og tapping som hjælper med at frigøre stress, eliminere træthed og anspændte rygmuskler. 3 tilstande og 3 intensiteter efter eget valg. Varmebehandling hjælper med at forbedre din blodcirkulationen.

Synkron massage på nakke og ryg

Massage på både nakke og ryg på samme tid, føles som to massage terapeuter betjener dig samtidigt. Sammen med vibrationen af sædet, afslapper din krop fra nakke til bund.

Opbevaring

- Opbevar massageapparatet i æsken eller på et sikkert, tørt og køligt sted.
- Hold massageapparatet væk fra skarpe kanter eller spidse genstande, der evt. skære eller punktere produktets stofoverflade.
- For at undgå beskadigelse må netledningen ikke vikles rundt om enheden.
- Hæng ikke enheden med fjernbetjeningsledningen eller netledningen.

Rengøring

- Rengør kun med en blød, let fugtig klud.
- Undgå at nedsænke enheden i væske under rengøring.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad den køle af før rengøring.
- Hold apparatet væk fra vand eller anden væske.
- Undgå at bruge slibende rengøringsmidler, børster, benzin, petroleum, glas/møbelpuds eller malerfortynder til at rense produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- For at sikre en sikker og korrekt brug, vær venlig at læs instruktionsmanualen grundigt før du bruger produktet.
- Brug kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Fjern altid stikket fra stikkontakten før du rengør produktet.
- Brug ikke apparatet hvis du har overfølsom hud, neuropati.
- Lad ikke børn eller personer med psykisk handicap bruge varme funktionen uden opsyn. Ukorrekt brug kan være farligt.
- Brug ikke produktet under et tæppe eller overdækket. Dette kan få apparatet til at overophede og forårsage brand, elektrisk stød eller skader.
- Dæk ikke apparatet til for at undgå elektriske fejl, skader på apparatet grundet for høj motor temperatur.
- Stop massagen øjeblikkeligt hvis du følger ubehag.

Forhold	Løsning
Virker ikke	Tjek om der er strøm til apparatet. Kontrollér netledning og strøm knap.

Ingen lys og/eller varme efter jeg trykker på 'Heat'	For din sikkerhed kan man ikke tænde for varmen hvis der ikke er valgt et massageprogram.
Fjernbetjningen virker men sædet gør ikke noget.	Massageapparatet kan være overophedet. Vent 30 – 50 minutter så den har en chance for at køle ned og prøv igen.
Rygmassage virker ikke	Tænd på strømkanppen, tjek netledning.
Stoppede pludseligt	Tjek om der er strøm til apparatet, tjek netledning.

Produkt Specifikationer

Produkt Navn	Estilo Prime Plus
Model Nummer	OZ0978
Spænding	220-240V~, 50-60Hz, 12V = 5A
Strømforbrug	60W
Dimensioner	L805xB225xH480 (mm)
Vægt	8,65KG

Kontakt Os



IWA O ApS

Ishøjvej 2C

4700 Næstved

Danmark

E-Mail: info@iwao.dk

Telefon: +45 70 70 71 30