




Infinity Pro Massagestol

Brugervejledning

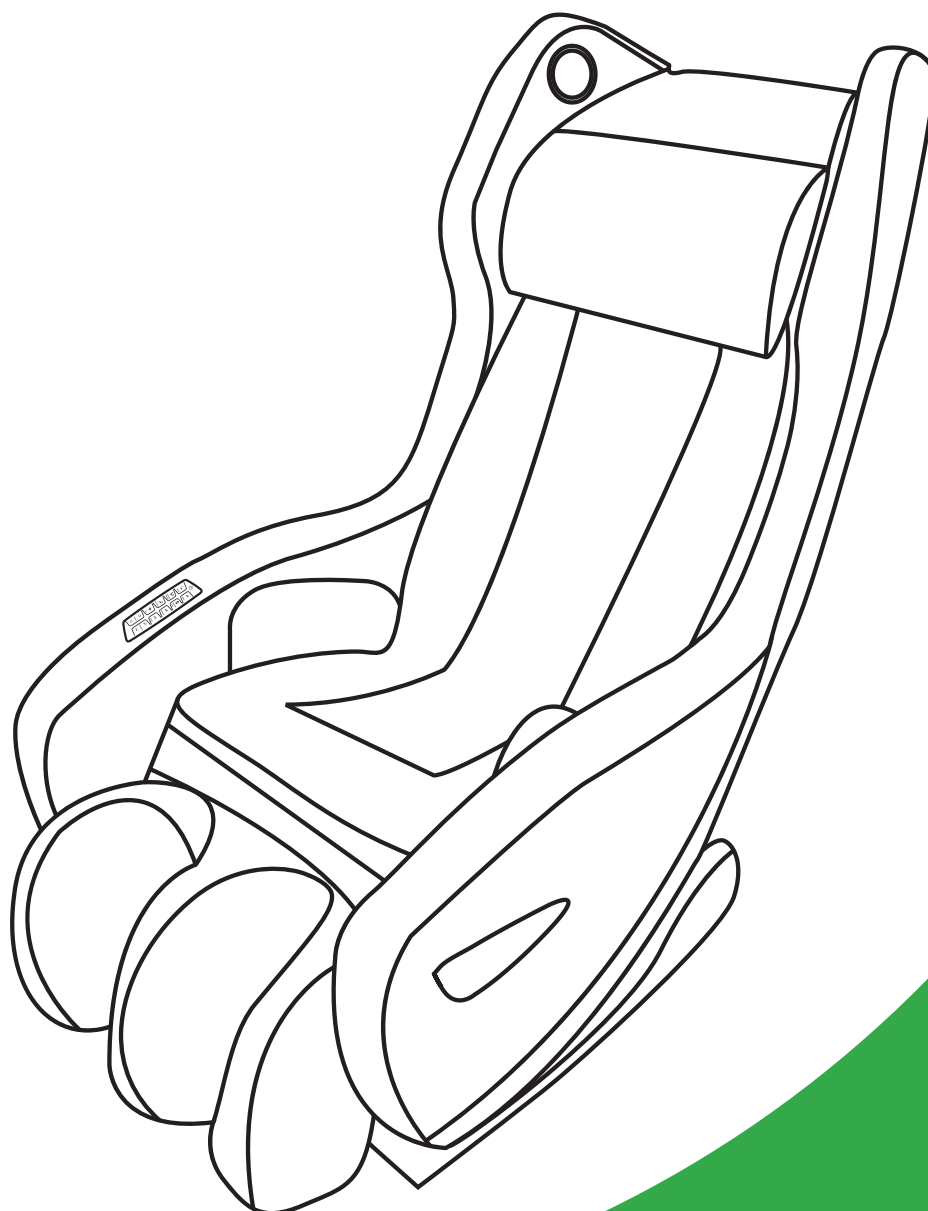

Tak fordi du købte dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning nøje for at vide, hvordan man bruger dette produkt korrekt før operationen.

Vær venligst opmærksom på de vigtige sikkerhedsadvarsler.
Behold denne manual til fremtidig brug.

INDHOLD

Sikkerhed og vedligeholdelse	side 4
Delens navne og funktioner	side 6
Sådan kommer du i gang	Side 7
Funktioner	side 8
Brugsanvisning	side 9

Sikkerhed og vedligeholdelse

1. Sikkerhedsadvarsel

- Tillad ikke at børn må røre bevægelige dele af dette produkt.
- Anvend venligst jordforbundet strømforsyning passende til dette produkt.
- Udtræk venligst stikkontakten efter brug og før rengøring for at sikre mod beskadigelse af produktet.
- Anvend venligst dette produkt som angivet i denne vejledning.
- Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet.
- Anvend ikke dette produkt udendørs.
- Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før anvendelse af produktet.
- Anvend ikke produktet på andre måder end angivet i denne vejledning.
- Anvendelse af produktet i 20 minutter per gang er anbefalet.
- Anvend ikke produktet hvis læderet er ødelagt eller beskadiget.
- Anvend ikke produktet hvis betrækket eller læderet er beskadiget.
- Anvend ikke hvis åbningen til varmelegemet er tildækket eller blokeret.
- Tab ikke noget over dette produkt.
- Fald ikke i søvn under anvendelse af dette produkt.
- Anvend ikke dette produkt i beruset tilstand eller ved følelse af ubehag.
- Anvend ikke dette produkt inden for en time efter indtagelse af et måltid.
- Anvend ikke massagefunktionen i for høj hastighed for at undgå skader.

2. Anvendelsesomgivelser

- Anvend ikke produktet i rum med høje temperaturer og fugt så som på et badeværelse.
- Anvend ikke produktet mens rummets temperatur ændres drastisk.
- Anvend ikke produktet i svært støvet eller kaustisk miljø.
- Anvend ikke på steder hvor der ikke er plads nok eller tilstrækkelig ventilation.

3. Personer, som ikke bør anvende dette produkt

- Personer, der lider af hjertesygdomme eller bærer elektronisk medicinsk udstyr såsom en hjertepacemaker, bør ikke anvende dette produkt.
- Personer, der lider af feber, bør ikke anvende dette produkt.
- Gravide kvinder eller kvinder, der har menstruation, bør ikke anvende dette produkt.
- Personer, der er skadet eller har en hudsygdom, bør ikke anvende dette produkt.
- Børn under 14 år eller mentalt ustabile personer bør ikke anvende produktet uden at være ledsaget.
- Personer, der har fået instruktioner af deres læge til at slappe af, og personer, der føler ubehag, bør ikke anvende dette produkt.
- Anvend ikke dette produkt hvis din krop er våd eller fugtig.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er intolerante over for varme, bør anvende produktet med forsigtighed.

4. Sikkerhed

- Kontroller at spændingen er egnet til dette produkt i forhold til specifikationer.
- Træk ikke stikket ud, hvis din hånd er våd.
- Undgå at der trænger vand ind i dette produkt for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af dette produkt.

Sikkerhed og vedligeholdelse

- Beskadig ikke kablerne og lav ikke ændringer i produktets cyklus.
- Anvend ikke en våd klud til at rengøre elektriske dele såsom kontakten og stikket.
- Hold afstand til produktet i tilfælde af strømafbrydelse for at undgå skader, hvis strømmen kommer pludseligt tilbage.
- Stop brug af dette produkt, hvis det ikke virker som normalt. Henvend dig venligst omgående til den lokale udbyder.
- Stop brug af dette produkt, hvis du føler ubehag. Henvend dig venligst til lægen.
- Det er ikke hensigten, at dette apparat skal bruges af personer (børn inkluderede) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden om produktet. Disse personer bør kun anvende produktet, hvis de er under opsyn eller vejledt i brug af produktet af en person, der kan tage vare for deres sikkerhed.
- Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med dette produkt.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget, skal den erstattes af leverandøren, service udbyderen eller lignende autoriserede personer for at undgå en faresituation.

5. Vedligeholdelse

- Dette produkt bør vedligeholdes af autoriserede, udstyrede personer. Brugere frarådes at skille produktet ad eller vedligeholde det selv.
- Afbryd venligst strømmen til produktet efter brug.
- Anvend ikke dette produkt, hvis kontakten har løsnet sig.
- Hvis produktet ikke skal anvendes i lang tid, så rul kablerne sammen og bevar produktet i et miljø, der er tørt og ikke støvet.
- Opbevar ikke dette produkt under høje temperaturer eller nær et ildsted og undgå længerevarende direkte sollys.
- Hvis den aftagelige strømforsyning er beskadiget, skal den erstattes af leverandøren, service udbyderen eller lignende autoriserede personer for at undgå en faresituation.
- Rengør produktet med en tør klud. Anvend hverken fortyndingsmiddel, benzen eller alkohol på produktet.
- De mekaniske dele af dette produkt er designet og produceret til dette produkt og bør ikke nødvendigvis vedligeholdes.
- Anvend ikke skarpe dele til at skubbe dette produkt.
- Hverken rul eller træk produktet på en ujævn overflade. Det skal løftes før det bliver flyttet.
- Anvend produktet med mellemrum. Dette produkt bør ikke være i anvendelse uafbrudt i længere tid.

6. Løsning af normale funktionsfejl

- Naturlige bevægelseslyde vil lyde fra motoren, når produktet er i brug.
- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, tjek strømforsyningen og kontakten for, om de er forbundet. Tjek at kontakten er tændt.
- Hvis den fastsatte operationstid for programmet er slut, slukker produktet automatisk. Hvis produktet har været i anvendelse i lang tid, vil det varmebeskyttende legeme automatisk aktivere sluk-funktionen. Produktet bør kunne anvendes efter en halv times pause.

Delens navne og funktioner



1. Hovedstøtte
2. Rygpude
3. Fjernbetjening
4. Benstøtte

Sådan kommer du igang

Tænd stolen

1

Indsæt strømstikket til en stikkontakt

Tænd for strømmen på Tænd/Sluk knappen under ryglænet på produktet

Betjeningsknap

2

Tryk på Massage program knappen på fjernbetjeningen ved højre arm og vælg et automatisk massage program der passer dit behov.

3

Stopper automatisk efter et afsluttet program.
Efter ca. 15 minutter vil massagen automatisk stoppe.

4

Stop massagen midtvejs ➡ Tryk på stop knappen ➡ Massagen stopper


Navne og funktioner for stolens komponenter

Massage programmer	Relateret funktionel beskrivelse
Air pressure	Lufttryksmassage, anbefales til personer der er trætte eller har svært ved at sove ordenligt.
Stop	Anvendes i nødsituationer, hvor massagestolen er påkrævet for at stoppe med øjeblikkelig virkning.
Tapping / kneading	Brug den menneskelige håndsimulering massageruller til at give en tapping/kneading massage til brugeren.
Heating	Indbygget varmfunktion der kan tændes eller slukkes af brugeren.

Vær opmærksom på

- ※ Tryk ikke på to eller flere taster på samme tid for at undgå fejl.
- ※ Før du starter massagefunktionen, skal du sørge for at sidde godt før du starter.
- ※ Spild ikke vand eller andre væsker ned i kontrolpanelet/fjernbetjeningen.
- ※ Ved brug må du ikke påføre nogen ekstern kraft på nogen del af produktet for at undgå skade eller produktfejl

Brugsanvisning

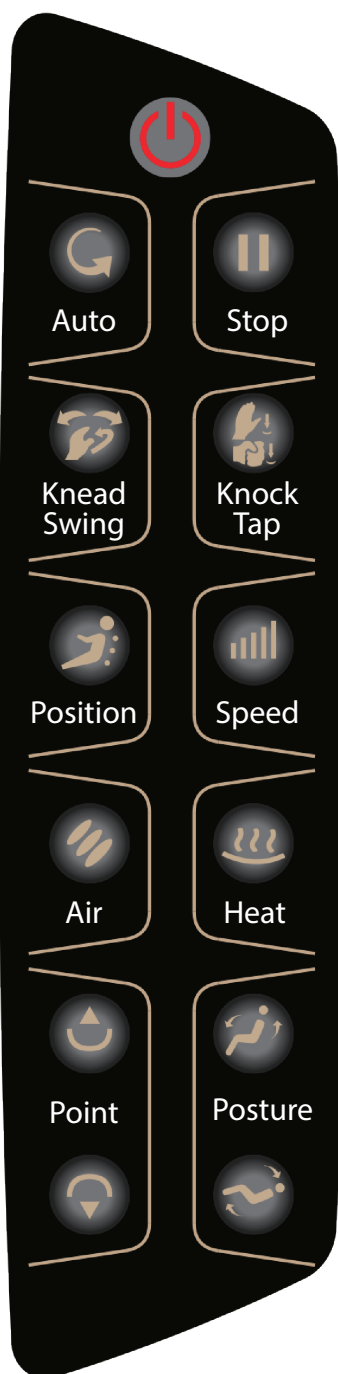

Det specifikke skærbillede referer til fjernbetjeningen for dette produkt

Brugsanvisning



Tænd/Sluk knap: Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for stolen.



Stop: Tryk på denne knap, for at stoppe et igangværende program, trykkes der på knappen igen, så vil programmet fortsætte. På grund af sikkerheden, så for knappen massagestolen til at stoppe med det samme.



Auto knap: Tryk på denne knap for at vælge skifte mellem auto mode 1 og auto mode 2.



Knead/swing knap: Tryk på denne knap for at vælge mellem tre knead/swing tilstande: "kneading function til", "swing funktion til" eller "kneading og swing funktioner fra".



Knock/Tap knap: Tryk på denne knap for at vælge mellem tre knock/tap tilstande: "knock funktion til", "tap funktion til" eller "knock og tap funktioner fra".



Position knap: Tryk på denne knap for at justere massageområdet. Vælg mellem hele kroppen, øverste krop eller nederste krop. Programmet vil udføre massagen i dette område.



Hastighed: Når det manuelle program er valgt (undtagen shiatsu), tryk på denne knap for at vælge mellem lav, middel eller høj hastighed.



Lufttryk: Tryk på denne knap for at vælge mellem lufttryksstyrke: svag, middel, stærk eller for at deaktivere lufttryk.



Varmefunktion: Tryk på denne knap for at tænde/slukke for varmfunktionen.



Fast punkt: Når du vælger det manuelle program (undtaget shiatsu), så kan du holde op- / nedknappen inde, hvorefter massagestolen vil justeres op eller ned til et ønsket fast punkt. Når knappen slippes stopper massage maskinen ud fra den aktuelle position og begynder punkt massage.



Position knap: Når knappen holdes opad (bagud) justeres ryglænets position opad (bagud). Når knappen holdes nedad bevæger stolen sig til en liggende position. Når knappen slippes stopper ryglænet ved den aktuelle position.



Brugsanvisning

Rengøring

- Inden rengøring skal du sikre at strømmen er slukket og stikket er fjernet fra stikkontakten.
- Brug en tør klud til at rengøre overfladen af stolen og fjernbetjeningen.
- De snavsede områder tørres af med en våd klud eller et neutralt rengøringsmiddel, og kan efterfølgende rengøres med tør klud.

Advarsel

- Hold stolen væk fra varme, brand eller udsættelse for direkte sollys.
- Ved rengøring af stolen må du ikke anvende organiske opløsningsmiddel, svovlsyre eller klor, for at undgå misfarvninger, der kan forekomme i revner.

Om affaldshåndtering

- Om affaldshåndtering skal du overholde de lokale kontrolforskrifter.

Hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid

- Sluk for strømkontakten, når du ikke ønsker at anvende stolen i en længere periode.
- Hold strømledningen og fjernbetjeningen i god stand, når du opbevarer stolen.
- Opbevar stolen et tørt sted efter rengøring af snavs og støv.

 Advarsel	
 Forbud mod våde kropsdele	Brug ikke stolen mens du er våd. Undgå elektrisk stød og mekaniske fejl.
 Beskyt mod vand og damp	Undgå vand og andre væsker eller bruge den ved badeværelset i tilfælde af elektrisk stød eller mekanisk fejl. Stolen må ikke udsættes for større mængder vand!
 Vær opmærksom	Vær opmærksom på at bruge stolen, mens der er andre personer eller kæledyr i nærheden under brug.
 Forbud mod demontering	Undgå at adskille, reparere stolen eller ledningen, samt fjernbetjeningen, for at undgå elektrisk stød, brand eller mekanisk fejl. Hvis ledningen er beskadiget, kontakt venligst kvalificerede fagfolk til at reparere stolen eller ledningen;
 Forbudt!	Undlad at beskadige ledninger og strømforsyning. Undgå at ledningen får skader, ved ikke at bøje, trække, vride, vikle eller ledningen. Ingen tunge genstande på ledningen. Vær opmærksom på risiko for elektrisk stød eller brand ved brug af en beskadigede strømledning.

Brugsanvisning

Sådan flyttes stolen

Tjek at alle kabler er langt fra gulvet og tilt herefter rygstøtten bagover så stolen kun hviler på det forreste af bundpladen. Træk derefter stolen hen mod dig med håndkraft. Når du er tilfreds med placeringen sættes stolen langsomt og skånsomt ned, så den står normal på gulvet.



Note: Når stolen skal flyttes, så bør du først slukke for stikkontakten og efterfølgende trække strømstikket ud af stolen hvorefter stolen kan flyttes. Sørg altid for, at der ikke ligger ting i vejen.

Specifikationer

Produkt navn	Infinity Pro massage stol	Model Nr.	Infinity Pro
Nominel effekt	96W	Anbefalet tid	15 minutter
Nominel spænding	AC-100~240V	N.W./G.W.	50KGS/65KGS
Nominel frekvens	50/60HZ	Materiale	Plast og metal
Specifikation	1450(L)*760(W)*790(H)mm	Polstring	Syntetisk læder
Funktion	Massage, kneading, knocking, shiatsu. Eliminerer muskel træthed, stimulerer blodcirkulationen, lindrer muskelstivhed og nervesmerter.		



Carelax DANMARK
din genvej til bedre velvære

Kontakt os

Carelax Danmark ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund

CVR: 38219499

Tlf.: +45 30 554 554
info@carelaxdanmark.dk
www.carelaxdanmark.dk