

# klarskov

## Montering og regulering af Ergoret



mere end bare møbler...  
- frihed til bevægelse

**Sæde og gaspatron kan let udskiftes til andre modeller**



### Udpakning

Ergoretten pakkes ud af sikkerhedsposen, og delene kontrolleres for mangler og skader.



### Sådan samler du Ergoretten

1. Sæt gaspatronen i hjulstel
2. Sæt sæde på gaspatron

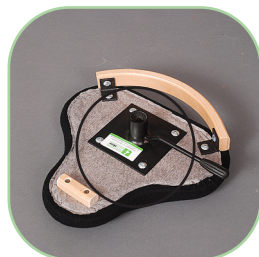
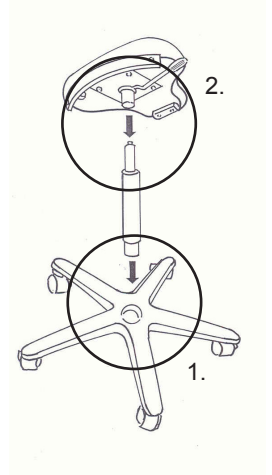


### Regulering af gaspatron

Hvis gaspatronen IKKE følger med op når håndtaget trækkes op, skal gaspatronen reguleres via skruen.

1. Skil sæde fra gaspatron igen, ved her slå hårdt på sædets bund med en hammer til sædet løsnes.
2. Tag en skruetrækker, og drej den lille skruen 1/2 omgang
3. Saml stolen igen, og afprøv om det gav resultatet
4. Hvis den ønskede virkning udebliver, gentages processen til gaspatronen er indstillet til det ønskede behov.


Vær opmærksom på at lidt ændring af skruen er nok til at få den ønskede effekt - drej henholdsvis venstre eller højre om.

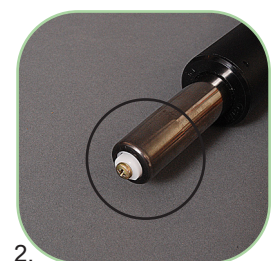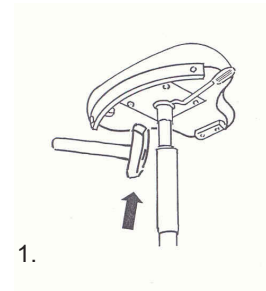

### Udskiftning af hjul

Hjulene kan let udskiftes, da de er monteret ved hjælp af tryk-system op i stellet.

1. Vend stolen og placer en skruetrækker mellem stel og hjultop.
2. Vip og vrid afstand mellem stel og hjul, og tag med hånden og hiv hjulet af.
3. Nyt hjul trykkes på plads med hånden

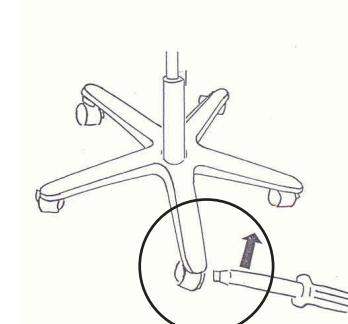

### Aktivering af gaspatron via håndtag

Sæt dig let på sædet, og afprøv gaspatron ved at hive det lille sorte håndtag op - mens du henholdsvis sætter og løfter dig fra sædet.

