


# permobil

SEATING + POSITIONING

## ROHO® DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions Operation Manual

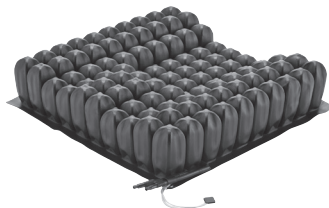

Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for future reference.

s h a p e   f i t t i n g   t e c h n o l o g y®



# permobil

SEATING + POSITIONING

## ROHO® DRY FLOATATION®-kørestolspuder Brugerhåndbog

Leverandør: Denne håndbog skal udleveres til brugeren af dette produkt.

Bruger (individ eller plejepersonale): Læs vejledningen grundigt inden produktet tages i brug og opbevar den til senere brug.

### Indholdsfortegnelse

Anvendelsesformål	72
Vigtige sikkerhedsoplysninger	72-73
Billeder af de enkelte dele	74
Justering af puden	75 - 77
Fjernelse og udskiftning af betræk Fejlfinding	78
Vedligeholdelse af betræk og pude	79 - 80
Produktspecifikationer Opbevaring, bortskaffelse og genbrug Begrænset garanti	81



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.  
USA: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • Kundeservice : orders.roho@permobil.com  
Udenfor USA: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com  
permobilus.com

ROHO-produkter kan være dækkede af en eller flere amerikanske og udenlandske patenter og varemærker, herunder ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFOLO®, Yellow Ropev, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, og LOW PROFILE®.

ROHO, Inc. tilstræber hele tiden at forbedre produkterne og forbeholder sig retten til at ændre dette dokument. Den nyeste version af dette dokument findes på permobilus.com.

© 2007, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 05/04/2018

## Anvendelsesformål

Hvert ROHO® DRY FLOATATION®-produkt i denne håndbog er en indstillelig, luftfyldt, celleopdelt støtteflade til kørestole. Der er ingen vægtgrænse, men puden skal have den korrekte størrelse i forhold til brugeren.

ROHO, Inc. anbefaler, at sundhedspersonale så som en læge eller hjemmepleje med erfaring indenfor siddestillinger, positionering og mobilitet konsulteres: 1) for at afgøre, om puden er egnet til brugerens specifikke behov; og 2) for at afgøre, om der anbefales en fast sædeplatform, hvis puden bruges på en kørestol med stropsæde.

Hvert af de følgende produkter gør brug af DRY FLOATATION®-teknologien og er beregnede til at tilpasse sig brugerens siddende stilling for at beskytte huden/blødt væv, yde positionering og sikre et miljø, der faciliterer sårheling.

- ROHO® LOW PROFILE® dobbelt kammer-pude (LOW PROFILE dobbelt kammer-pude)
- ROHO® MID PROFILE™ dobbelt kammer-pude (MID PROFILE dobbelt kammer-pude)
- ROHO® HIGH PROFILE® dobbelt kammer-pude (HIGH PROFILE dobbelt kammer-pude)
- ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®-puden (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT MID PROFILE™-puden (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- ROHO® QUADTRO SELECT HIGH PROFILE®-puden (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- ROHO® CONTOUR SELECT®-puden (CONTOUR SELECT)
- ROHO® ENHANCER®-puden (ENHANCER)

Hvert af de følgende produkter gør brug af DRY FLOATATION®-teknologien og er beregnede til at tilpasse sig brugerens siddende stilling for at beskytte huden/blødt væv og sikre et miljø, der faciliterer sårheling.

- ROHO® LOW PROFILE® enkelt kammer-pude (LOW PROFILE enkelt kammer-pude)
- ROHO® MID PROFILE™ enkelt kammer-pude (MID PROFILE enkelt kammer-pude)
- ROHO® HIGH PROFILE® enkelt kammer-pude (HIGH PROFILE enkelt kammer-pude)

*ROHO medicinske produkter er beregnet til at være en del af en behandling som helhed. Klinikerne foretager produktanbefalinger baseret på en vurdering af den individuelle medicinske og terapeutiske behov samt generelle helbred. En kliniker bør endvidere evaluere for nedsatte funktioner hvad angår visuelle og kognitive evner samt forringet læseevne for at bestemme behovet for plejepersonalets bistand med brug af produktet, heriblandt sørge for en manual med store bogstaver.*

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

### Advarsler

- Nedbrydning af hud-/blødt væv kan opstå på grund af en række faktorer, der varierer fra individ til individ. Kontrollér huden ofte, mindst én gang dagligt. Rødme, blå mærker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan indikere overfladiske eller dybe vævsskader og skal behandles. Hvis der er misfarvning af huden/blødt væv, skal BRUGEN STOPPES øjeblikkeligt. Hvis misfarvningen ikke forsvinder indenfor 30 minutter efter, at brugen er stoppet, konsultér da straks sundhedspersonalet.
- Puden og betrækket SKAL passe sammen i størrelsen og SKAL bruges som anvist i denne vejledning. HVIS DE IKKE BRUGES SOM ANVIST: 1) Fordelene ved puden kan blive reduceret eller helt forsvinde, og dermed forårsage at hud eller andet blødt væv fremstår mere udsat, og 2) brugeren kan blive ustabil og være i fare for at falde.

## Vigtige sikkerhedsoplysninger, fortsat




### Advarsler, fortsat

- Pudens **MÅ IKKE** bruges oven på eller sammen med andre produkter eller materialer, med mindre andet er angivet i denne vejledning. Det kan føre til, at brugeren bliver ustabil og kan være i fare for at falde.
- Der **MÅ IKKE** placeres andet (med undtagelse af et af ROHO leveret betræk) mellem brugeren og pudens. I modsat fald reduceres produktets funktion.
- Pudens **MÅ IKKE** bruges til at flyde på vand med (fx som redningsvest). Den vil **IKKE** holde dig oven vande.
- Vær varsom ved håndtering af pudens, fingrene kan hænge fast i metalringene i hjørnerne.
- Fordringer ifm. tests eller certificering, heriblandt for brændbarhed, er muligvis ikke længere gældende for denne enhed, når den bruges sammen med andre produkter eller materialer. Kontrollér fordringer ifm. tests og certificering for alle produkter, der bruges sammen med denne enhed.
- Pudens overflade tilpasser sig den omgivende temperatur. Træf hensigtsmæssige forholdsregler, især når pudens kommer i kontakt med ubeskyttet hud.
- Er du **IKKE SELV I STAND TIL AT UDFØRE DE HANDLINGER** der er beskrevet i denne vejledning bør du få en til at hjælpe dig.



### Forholdsregler


- BRUG **IKKE** andre pumper, betræk eller reparations sæt end de som medfølger fra ROHO, Inc. Dette kan medføre annullering af din produktgaranti.
- Pudens eller komponenterne må **IKKE** ændres. Dette kan forårsage skader på produktet og bortfald af garantien.
- LAD **IKKE** oliebaseerede cremer eller lanolin komme i kontakt med din pude, da de kan medvirke til forringelse af materialet.
- Hvis pudens eksponeres for ozon over længere tid, kan det nedbryde nogle af de materialer, der bruges til at fremstille pudens, påvirke pudens ydeevne og medføre at garantien bortfalder.
- Højdeforandringer kan kræve justeringer af din pude.
- Lad ikke pudens komme i nærheden af skarpe genstande.
- Udsæt **IKKE** din pude for stærk varme, åben ild eller varm aske.
- Hvis pudens har været udsat for temperaturer på mindre end 0°C og viser tegn på en usædvanlig stivhed, så lad pudens varme op til rumtemperatur.
- Eftersø betrækket og komponenterne for skader og udskift det såfremt det er nødvendigt.
- BRUG **IKKE** ventilene eller ISO Memory Control som håndtag. Produktet kan gå itu. Pudens skal enten bæres vha. pudens underdel eller betrækkets bærehåndtag.

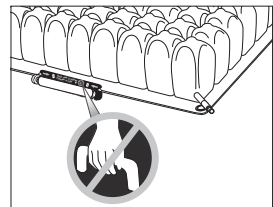

*Dette symbol betyder: "BRUG IKKE ISO FLO Memory Control som håndtag. Produktet kan gå itu."*

## Billeder af de enkelte dele

Pakkens indhold:

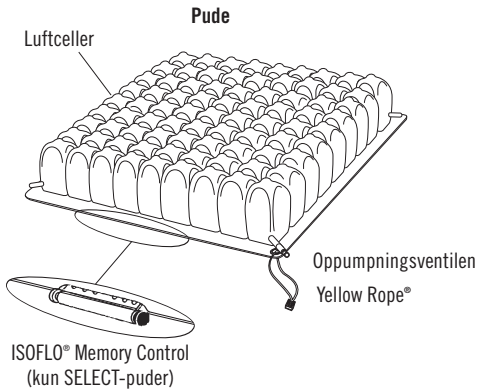

Brugerhåndbog



Produktregistreringskort





Reparationsset



Håndpumpe

Mærkatens med serienummeret er placeret på bunden af puden.

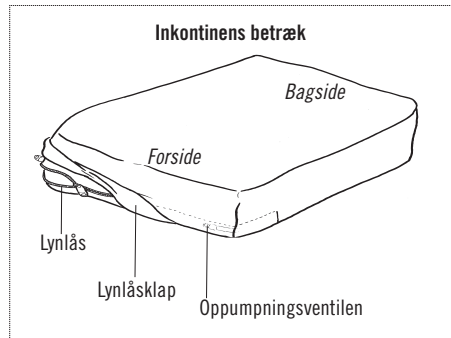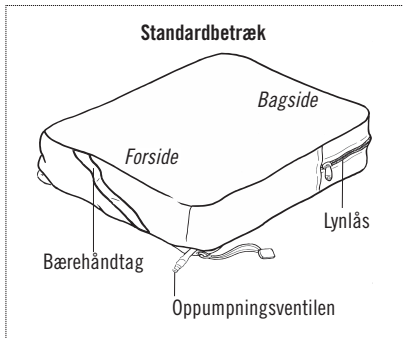

For at bestille reservedele, bedes du kontakte din produktleverandør eller ROHO, Inc.

### Materialer:

**Pude:** Neoprengummi; fremstillet uden latex

**Oppumpningsventil:** nikkelbelagt messing

**ISO FLO Memory Control:** polypropylen, polycarbonat, aluminium

**Standardbetræk:** Tovejs strækbar overside, afstandsstykker af stof i siderne, med en lynlås placeret i den bageste del af betrækket; og en skridsikker bund med burrebånd, som er med til at fastgøre puden i stolen. Se anvisningen på betrækket mht. materialets sammensætning og for overholdelse af kravene vedrørende antændelighed.

**Inkontinensbetræk:** Tovejs strækbar, vandafvisende overside og sider, med en lynlås placeret i den forreste del af betrækket; og en skridsikker bund med burrebånd, som er med til at fastgøre puden i stolen. Se anvisningen på betrækket mht. materialets sammensætning og for overholdelse af kravene vedrørende antændelighed.

## Justering af puden





### Vigtige sikkerhedsoplysninger:

- Kontrollér hyppigt luften i puden, mindst én gang dagligt!
- Anvend IKKE en pude, der indeholder for lidt eller for meget luft, da produktets fordele mindskes eller fjernes helt, hvilket fører til en øget risiko for huden og andet blødt væv. Se Fejlfinding, hvis puden ikke ser ud til at kunne holde på luften, eller hvis du ikke kan fylde luft i eller lukke luften ud af puden. Kontakt straks det kliniske plejepersonale, forhandleren eller ROHO, Inc., hvis problemet fortsætter.
- Når det er muligt, skal du bruge burrebåndene til yderligere at fastgøre puden til sædeoverfladen.


### 1. Pump puden op:

- a. Placér puden i kørestolen, sådan at luftcellerne vender opad, og betrækkets skridsikre overflade vender nedad. Rådfør dig med din terapeut angående oppumpningsventilerne og ISOFLO Memory Control (For SELECT-puder) i alternative positioner.

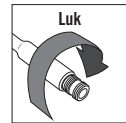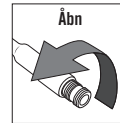

- b. For **SELECT-puder**: Før der fyldes luft i, skal du åbne ISOFLO Memory Control, så alle luftcellerne fyldes med luft. Skub det grønne håndtag til ISOFLO mod den ulåste stilling.


- c. Træk håndpumpens gummistuds ind over oppumpningsventilen. Klem omkring studsen, drej for at åbne oppumpningsventilen og fyld luft i luftcellerne.

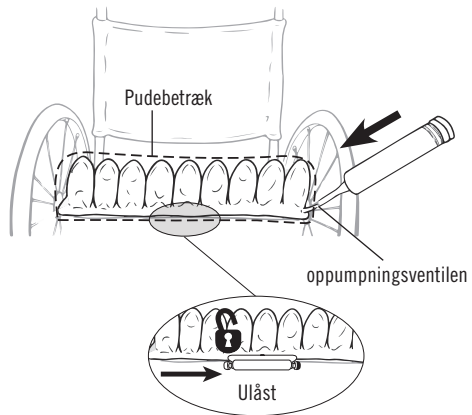

- d. Når alle luftcellerne er fyldte, og puden begynder at bule let ud, klemmes der omkring håndpumpens gummistuds, og der drejes for at lukke oppumpningsventilen helt.

- e. Fjern håndpumpen.

- f. Gentag oppumpningen af puden for alle ventiler.


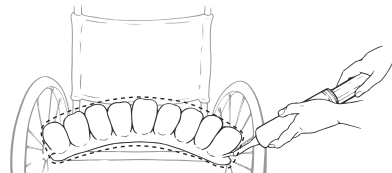


## Justering af puden, fortsat

### 2. Justér puden:

Efter puden er pumpet op tilpasses luftmængden til brugeren:


- Brugeren skal sidde i stolen i sin normale position. Pudens bund bør være centreret under brugeren.
- Lad din hånd glide ind mellem puden og brugeren. Løft benet lidt, og følg efter det laveste knoglefremspring, og sænk så benet til siddende stilling.
- Åbn ventilen for at lukke luft ud, og behold din hånd under brugerens laveste knoglefremspring.
- Luk luft ud, indtil du knap nok kan bevæge dine fingerspidser. Luk ventilen.
- Gentag justeringen af puden for alle ventiler.

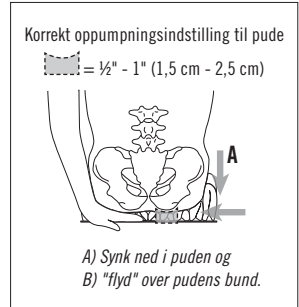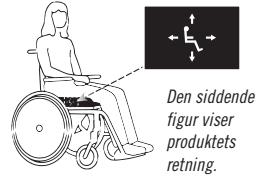

### Sådan justeres ENHANCER:

Efter puden er pumpet op tilpasses luftmængden til brugeren:

- Yderste celler: Åbn den inderste ventil og luk luft ud for komfort og placering. Luk ventilen.
- Konturformede del bagerst: Placer din hånd mellem produktet og brugeren og følg efter det laveste knoglefremspring. Åbn oppumpningsventilen og luk luft ud, indtil du næsten ikke kan bevæge fingerspidserne. Luk derefter ventilen.


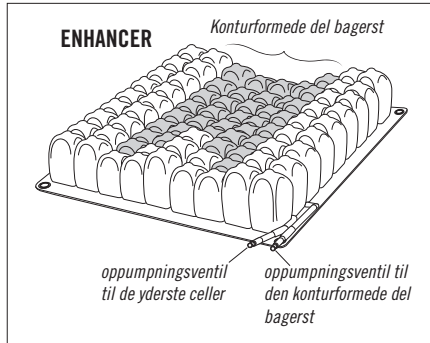


**Sådan justeres puder med dobbelt kammer:** For brugere med en skævhed i bækkenet skal siden med de dybeste knoglefremspring justeres først. For positionering for-til-bag skal den bagerste del justeres først. Kontrollér altid justeringen for hver del igen.

**Sådan justeres puder af typen SELECT:** Se næste side.



## Justering af puden, fortsat

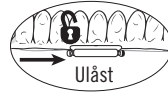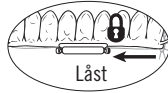

### Justering af puder af typen QUADTRO SELECT eller puder af typen CONTOUR SELECT til at tilpasses stabilisere et fastlåst bækken eller et fastlåst bagudkipet bækken:

1) Følg alle instruktioner til justering af puden i denne brugerhåndbog for at sikre, at puden justeres til en korrekt oppumpningsindstilling. 2) Brugeren skal skal i deres normale stilling, mens luften overføres gennem ISOFLO Memory Control. 3) Når luftoverførslen er foretaget, skubbes den røde knop mod den blokerede position. 4) Kontrollér endnu en gang puderummet for at sikre, at pudens oppumpningsindstilling er korrekt.

### Sådan justeres puder af typen QUADTRO SELECT for at udbedre et fleksibelt bækken eller et fleksibelt bagudkipet bækken:

- Følg hele vejledningen i justering af puden i denne brugerhåndbog for at sikre en korrekt oppumpning af puden.
- Sørg for, at ISOFLO Memory Control er i den ulåste stilling.
- Følg vejledningen nedenfor.

#### Fleksibel bækkenskævhed:

- 1) Korrigér manuelt til den ønskede bækken-stilling. (For eksempel, hvis den venstre side af bækkenet er lavere end den højre side, skal du enten få brugeren til at læne sig mod højre, eller presse nedad på den højre hofte, indtil den ønskede stilling er opnået.)
- 2) Skub det røde håndtag mod den låste stilling.
- 3) Kontrollér hvert kammer i puden igen for at sikre en korrekt oppumpning af puden.

#### Fleksibelt bagud kippet bækken:

- 1) Kontrollér, at der er cirka 2,5 cm mellemrum mellem det punkt hvor brugeren stikker dybest og sædeoverfladen. Tilføj mere luft, hvis det er nødvendigt.
- 2) Løft begge brugerens knæ for at tilføre yderligere nedadgående pres på bækkenet og for at tvinge luft frem til forenden af puden. Dette vil skabe en "brønd" (et lavere, konkavt område) til bækkenet og hjælpe med til at forhindre bækkenet i at glide fremad.
- 3) Skub det røde håndtag mod den låste stilling.
- 4) Kontrollér hvert kammer i puden igen for at sikre en korrekt oppumpning af puden.

## Fjernelse og udskiftning af betræk



**Efterse betrækket for skader og udskift det såfremt det er nødvendigt.**

Når du har et betræk på din pude hjælper det med at beskytte pudekomponenterne. Et betræk hjælper også med at holde luftcellerne sammen, hvilket kan være en hjælp ved flytninger med glidebræt.

Brug etiketten på bunden af puden og billedet på betrækket til at vende puden og betrækket rigtigt.



**Fjernelse af betræk:** Lyn betrækket op og fjern betrækket fra puden.

**Udskiftning af betræk:** Vend betrækket og puden på hovedet: Det skridsikre materiale bør vende opad, og den tillynede åbning bør vende mod dig. Luftcellerne bør vende nedad. Læg puden ind i betrækket, ved at følge vejledningen nedenfor.

Vejledning for standardbetræk	Vejledning for inkontinensbetræk
Pudens bagside bør vende mod lynlåsen.	Pudens forside (oppumpningsventilen) bør vende mod lynlåsen.
Sørg for, at alle fire hjørner på puden ligger ud over hjørneåbningerne i betrækket. Træk forsigtigt oppumpningsventilen og Yellow Rope gennem åbningerne.	Stop oppumpningsventilen og Yellow Rope ind i betrækket.
Luk lynlåsen helt. Vend puden, så luftcellerne vender opad. Puden bør ligge fladt ned indeni betrækket, med det skridsikre materiale på undersiden og alle cellerne dækket.	

## Fejlfinding

**For yderligere hjælp bedes du kontakte din udstyrsleverandør, forhandleren eller ROHO, Inc.**

<b>Er utæt</b>	Pump puden op. Efterse oppumpningsventilen/-ventilerne og slangen/slangerne for skader. Kontrollér, at oppumpningsventilen er lukket helt. Kontrollér for huller i puden. Hvis der kun ses meget små eller slet ingen huller, så følg vejledningen i det reparationsæt, der følger med produktet. Ved skader på oppumpningsventilen eller store huller eller utætheder i puden, henvises der til indlægssedlen med begrænset garanti, der følger med produktet, eller kontakt kundeservice hos din lokale forhandler.
<b>Kan ikke fylde luft i eller lukke luften ud af puden</b>	Kontrollér, at oppumpningsventilen er åben. Efterse oppumpningsventilen/-ventilerne og slangen/slangerne for skader. Når der fyldes luft i SELECT-puder: Kontrollér, at det grønne håndtag på ISOFLO Memory Control er skubbet mod midten af ISOFLO i ULÅST stilling, så alle kamre fyldes med luft.
<b>Ubehagelig eller ustabil</b>	Kontrollér at: <ul style="list-style-type: none"> <li>- puden ikke indeholder for meget luft (se Justering af puden).</li> <li>- pudens celler og oversiden af betrækket vender opad.</li> <li>- puden er centreret under brugeren.</li> <li>- puden har den korrekte størrelse i forhold til brugeren og kørestolen.</li> </ul> Giv brugeren mindst en time til at vænne sig til puden.
<b>Puden glider på kørestolen</b>	Sørg for, at pudebetrækkets skridsikre bund vender væk fra brugeren. Brug retningsetiketterne på puden og på betrækket til at vende puden rigtigt. Benyt burrebåndene til yderligere at fastgøre puden til kørestolen.

## Vedligeholdelse af betræk og pude



### Advarsel:

- Rengøring og desinficering er adskilte processer. Rengøring skal foretages før desinficering. Inden en anden bruger: Rengør, desinficer og kontrollér, at produktet fungerer korrekt.
- Følg alle sikkerhedsretningslinjer fra fabrikanten vedrørende beholder til blegemiddel og bakteriedræbende desinficeringsmiddel.
- Bemærk angående sterilisering: Høje temperaturer fremskynder ældning og skader produktets helhed. ROHO-produkterne bliver ikke pakket i steril tilstand, og det er ikke tilsigtet eller påkrævet, at de steriliseres inden brug. Hvis institutionens behandlingsprocedure kræver sterilisering: Følg først vejledningerne i rengøring og desinficering; åbn derefter oppumpningsventilen og anvend den lavest mulige steriliseringstemperatur, men overskrid ikke 70 °C, i det kortest mulige tidsrum. Må IKKE autoklaveres.

## Vedligeholdelse af betræk

**Pleje af betræk:** Tag stykkerne med burrebånd af betrækkets nederste del inden rengøring og desinficering. Vask med lignende farver.

**Sådan rengør du betrækket:** Fjern betrækket. Maskinvask i koldt vand (30 °C) med en mild sæbeopløsning på skåneprogram, eller rengør ved brug af en klud med et neutralt rengøringsprodukt og varmt vand. Tørres i tørretumbler ved lav temperatur.



**Sådan desinficerer du betrækket:** Håndvaskes i koldt vand (30 °C) ved at anvende 1 del flydende klor pr. 9 dele vand. Hold produktet vådt ved hjælp af blegemiddelopløsningen i 10 minutter, og skyl derefter grundigt. Eller vask i vaskemaskine med varmt vand (60 °C). Tørres i tørretumbler ved lav temperatur.



## Vedligeholdelse af puden



**Advarsel:** Oppumpningsventilen/-ventilerne SKAL være lukket for at sikre, at der ikke trænger vand ind i produktet under rengøring eller desinficering.



**Forsigtigt:** Brug af følgende kan forårsage skader på puden: Skuremidler (ståluld, skuresvampe); ætsende rengøringsmidler til opvaskemaskine; rengøringsmidler, der indeholder petroleum eller organiske opløsningsmidler, heriblandt acetone, toluen, butanen (MEK), benzin, kemiske rensmidler, klæbemiddelfjernere; oliebasecremer, lanolin eller fenolbaserede desinficeringsmidler; ozongas eller rengøringsmetoder, der anvender ultraviolet lys.


## Vask og desinficer puden i hånden (anbefales)

**Vask puden i hånden:** Fjern betrækket, luk ventilen/ventilerne og læg den i en stor vask. Vask i hånden, brug mild, flydende håndsæbe, opvaskemiddel, vaskemiddel eller universalgengøringsmiddel (følg vejledningen på produktets etiket). Skrub forsigtigt alle pudens overflader, ved hjælp af en blød plastikbørste, en svamp eller en klud. Skyl med rent vand. Lad lufttørre. Må IKKE udsættes for direkte sollys.



**Forsigtigt:** Skyl grundigt. Rester fra vaskemiddel kan eventuelt medføre, at luftcellerne klæber sammen.

**Desinficer puden i hånden:** Følg instruktionerne til håndvask ved at bruge 1 del klor pr. 9 dele vand. Læg produktet i blød i blegemiddelopløsningen i 10 minutter. Skyl grundigt med rent vand. Lufttørring.

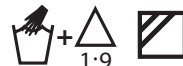

## Vedligeholdelse af betræk og pude, fortsat

### Vedligeholdelse af puden, fortsat

#### Maskinvask og desinficering af puden



**Advarsel:**

- Oppumpningsventilen/-ventilerne **SKAL** være lukket for at sikre, at der ikke trænger vand ind i produktet under rengøring eller desinficering.
- Maskinvask kan medføre slitage og skader, heriblandt snit og flænger på puden, samt løsrivelse af de påkrævede produktoplysninger. Pudens skal vaskes og desinficeres i hånden, og lufttørring anbefales på det strengeste.
- Høj vandtemperatur kan eventuelt medføre misfarvning af puden og løsrivelse af etiketten.
- **UDSÆT IKKE** puderne for temperaturer på over 70°C (158°F), da det kan beskadige pudens komponenter.
- Ved maskinvask og desinficering skal man sørge for, at vaskemaskinen er stor nok. En vaskemaskine, der er for lille, eliminerer muligvis ikke al snavs eller kontaminerende midler fra en pude.
- Brugen af en beskadiget pude reducerer eller eliminerer pudens fordele, og øger risikoen for huden og andet bløddæv.

**Før puden til maskinvaskes:**

- 1) Fjern betrækket fra puden og luk ventilen/ventilerne.
- 2) Undersøg puden for skader, og reparer eventuelle huller (der henvises til reparationssettets vejledning, som fulgte med produktet).
- 3) Fjern pletter eller lugt efter behov. Læg puden i varmt vand og desinficerende rensmiddel. Gnid blidt ved brug af en blød plastikbørste, og skyl med rent vand.
- 4) Luk luften ud af puden. Åbn oppumpningsventilen og rul puden sammen ved at starte i det modsatte hjørne for ventilen. Luk oppumpningsventilen, efter du har fjernet så meget luft som muligt.
- 5) Kontrollér for mulige skarpe kanter i vaskemaskinen, som eventuelt kan beskadige puden.

**Vask puden i vaskemaskinen**

- 1) Læg puden i en vaskepose inden den lægges i vaskemaskinen. Når puden foldes, skal man sørge for, at luftcellerne vendes udad.
- 2) Brug varmt vand (85° - 105°F / 30° - 40°C) og vaskemiddel eller rengøringsmiddel/biocid, som skåner maskine og pude.
- 3) Skåneprogram: Brug et vaskeprogram, som ikke omfatter centrifugering ved høj hastighed.



Forsigtigt: Skyl grundigt. Rester fra vaskemiddel kan eventuelt medføre, at luftcellerne klæber sammen.

**Desinficer puden i vaskemaskinen:**

Følg vaskeanvisningerne og brug varmt vand 60°C (140°F). Brug biocid (henvis til producentens instruktioner). Bleg forsigtigt.: Brug kun en opløsning med 1 del husholdningsblegemiddel pr. 9 dele vand. Skyl med rent vand.



Tag puden ud af vaskeposen og lad den lufttørre. For hurtigere tørring kan man bruge en hårtørrer, som ikke må holdes tættere end 6 in (15 cm) fra puden, og skal bruges med fejende bevægelser.



**Advarsel: Overophedning af neoprengummi kan muligvis forårsage permanente skader på produktet.**



= "Brug en normal hårtørrer."

## Produktspecifikationer

### MÅL OG VÆGTANGIVELSER FOR STANDARDPUDER:

pude	Højde	Gennemsnitlig vægt*
LOW PROFILE enkelt kammer-pude	5,5 cm	1,1 kg
LOW PROFILE dobbelt kammer-pude	5,5 cm	1,1 kg
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5,5 cm	1,1 kg
MID PROFILE enkelt kammer-pude	8,5 cm	1,4 kg
MID PROFILE dobbelt kammer-pude	8,5 cm	1,4 kg
QUADRO SELECT MID PROFILE	8,5 cm	1,4 kg
HIGH PROFILE enkelt kammer-pude	10,5 cm	1,5 kg
HIGH PROFILE dobbelt kammer-pude	10,5 cm	1,5 kg
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	10,5 cm	1,5 kg
CONTOUR SELECT	5,5 til 10,5 cm	1,6 kg
ENHANCER	5,5 til 10,5 cm	1,6 kg

\*Bemærk: De gennemsnitlige vægtangivelser er baserede på puder med 9 x 9 celler (42,0 cm x 42,0 cm).

pude	Mindste bredde			Mindste dybde			Største bredde			Største dybde		
	celler	in.	cm	celler	in.	cm	celler	in.	cm	celler	in.	cm
LOW PROFILE enkelt kammer-pude	6	11½	29,0	6	11½	29,0	13	23½	59,5	11	20	50,5
LOW PROFILE dobbelt kammer-pude	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	11	20	50,5
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5	11	28,0	6	11¾	30,0	13	24½	62,5	12	22	56,0
MID PROFILE enkelt kammer-pude	7	13¼	33,5	7	13¼	33,5	11	20	50,5	11	20	50,5
MID PROFILE dobbelt kammer-pude	8	14¾	37,5	9	16½	42,0	8	14¾	37,5	9	16½	42,0
QUADRO SELECT MID PROFILE	8	16	41,0	8	15¾	38,5	10	19½	49,5	10	18½	47,0
HIGH PROFILE enkelt kammer-pude	6	11½	29,0	6	11½	29,0	15	26¾	68,0	14	23½	59,5
HIGH PROFILE dobbelt kammer-pude	6	11½	29,0	6	11½	29,0	11	20	50,5	12	21¾	55,0
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	6	12¾	32,5	6	11¾	30,0	14	26¼	67,0	14	23¾	60,0
CONTOUR SELECT	7	14½	36,5	8	15¾	38,5	13	24½	62,5	12	22	56,0
ENHANCER	8	14¾	37,5	8	14¾	37,5	11	20	50,5	11	20	50,5

Bemærk: Der henvises til kundeservice for specifikke pudestørrelser.

Pudens forventede levetid: 5 år

## Opbevaring, bortskaffelse og genbrug

**Opbevaring:** Rengør og desinficer produktet før opbevaring. Åbn oppumpningsventilen/-ventilerne. Luk luften ud af produktet (fjern eventuelle produktsektioner). Opbevar produktet i en beholder, der beskytter produktet mod fugt, forurenende stoffer og beskadigelser.

**Bortskaffelse:** Komponenterne, som indgår i produkterne i denne håndbog, er ikke forbundet med nogen kendte miljøskadelige risici, når de anvendes hensigtsmæssigt og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale og regionale bestemmelser. Forbrænding skal udføres på et kvalificeret og godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

**Genbrug:** Kontakt et lokalt genbrugscenter for at fastlægge genbrugsmuligheder for produktet. Kontakt ROHO, Inc. for flere oplysninger om genbrug.

## Begrænset garanti

Begrænsede garantibestemmelser fra den dato, produktet oprindeligt blev købt: Puder af typen SELECT. Alle andre DRY FLOATATION-produkter: 24 måneder. Garantien dækker ikke punkteringer, flænger, brandskader eller forkert brug, og den dækker heller ikke det aftagelige betræk. Se også supplementet til Begrænset garanti, som følger med dit produkt, eller kontakt Kundeservice.



**permobil** | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)



T20200  
Print Date:

Rev. 05/04/2018  
Qty:



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

