




Invacare® **Dacapo**

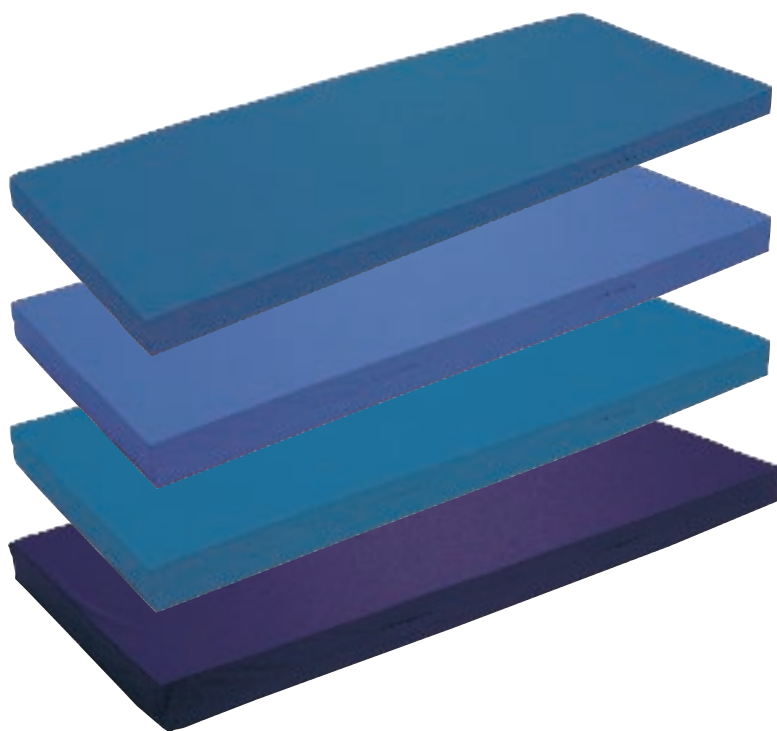

Brugermanual (N)

*Invacare® EC-Høng AIS
Ident. nr.: 1441303
Version 01 01.2003*



Tillykke

- med Deres valg af Invacare®s Dacapo madras. Dacapo Square, Dacapo Combi, Dacapo Organic og Dacapo Top madrasserne er udviklet til at give trykaflastning til brugere, der er i lav-risiko for at udvikle tryksår.

Invacare®EC-Høng er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001/EN 46001. Dette sikrer vore kunder, at produkter produceret hos Invacare®EC-Høng altid leveres i en ensartet kvalitet.

Skulle der mod forventning opstå problemer med det leverede produkt, bedes henvendelse rettes til Invacare® leverandøren.



Invacare® påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, forandres eller sættes sammen på anden vis end angivet i denne brugsanvisning.

I. Generelt

- Dacapo er **CE**-mærket i henhold til Direktiv 93/42/EØF af 22. februar 2002 om medicinske anordninger.
- Dacapo madrassen er godkendt i henhold til EN 12182:2001.
- Dacapo madrassen har gennemgået risikoanalysen i henhold til EN 1441.
- Max. brugervægt: **110 kg**.
- Brandhæmning: Dacapo sortimentet indenfor tryksårsforebyggende madrasser er alle brandhæmmede og testet efter både EN 597-1 (cigarettest) og EN 597-2 (flammetest).



Advarsel: Dette produkt er konstrueret til at give trykaflastning til brugere, der er i lav-risiko for at udvikle tryksår og til brugere der ønsker en bedre standard madras for øget komfort. Produktet kan ikke anvendes til andre formål.

2. Når Dacapo madrassen tages i brug

Placering af madrassen i sengen

På madrassen er tydeligt anført, hvilken side der skal vende op.

OBS! I forbindelse med skift af betræk er det væsentligt at sikre, at skumkernen vendes rigtigt.

OBS! Minimumshøjde

For korrekt og sikker brug af madras er det væsentligt at sikre, at der fra madrassens overflade i ukomprimeret tilstand er minimum 22 cm til overkant af sengehest i opslået tilstand (i henhold til EN 1970). På samme vis skal det sikres, at madrassens overflade er minimum 2 cm over sengehestens overkant i nedslået tilstand.

Håndtag

Må **ikke** anvendes i forbindelse med forflytning af patienter. Håndtagene må udelukkende anvendes til transport af madrassen og er specificeret til at skulle belastes af madrassens egenvægt.

3. Vedligehold/Rengøring

Anbefalet regelmæssig rengøring/afføring

Dacapobetrækket kan aftørres/rengøres med almindelige kendte rengøringsmidler.

Anbefalede desinfektionsmidler

Dacapobetrækket kan desinficeres med en spritopløsning med vand (50/50).

Af mærkningen på den enkelte madras fremgår endvidere, ved hjælp af symboler, hvorledes betrækket må vaskes og behandles.

Autoklaving

Dacapobetrækket kan autoklaveres ved 110° C under hensyntagen til følgende:

- Betrækket skal være udstrakt (må ikke sammenfoldes).
- Betræk må ikke placeres ovenpå hinanden.

4. Specifikationer

		DIMENSIONER OG VÆGT				
FLADE \ HØJDE	80 x 200	85 x 200	90 x 200	105 x 200	120 x 200	
Dacapo Combi 14 cm	10 kg	10,5 kg	11 kg			
Dacapo Square 14 cm	10 kg	10,5 kg	11 kg	13 kg	15 kg	
Dacapo Organic 12 cm	8,5 kg	9 kg	9,5 kg	11 kg	13 kg	
Dacapo Top 6 cm	5 kg	5 kg	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	

Dacapo betrækket

Dacapo betrækket består af polytherane coated polyester. Betrækket er åndbart, men samtidigt ikke-gennemtrængeligt for væsker. Betrækket er allergivenligt og behandlet mod støvmider.

5. Opbevaring

Dacapomadrassen skal opbevares frostfrit og tørt.

6. Garanti

Der er 2 års garanti på både madrasmadræk og skumkerne.



Customer Sales and Service

INVACARE A/S

Sdr. Ringvej 39
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 36 90 00 00
Fax: +45 36 90 00 01

INVACARE N.V.

Autobaan 14
B-8210 Loppem, Brügge
Phone: +32 50 83 10 10
Fax: +32 50 83 10 11

INVACARE Poirier S.A.

Les Roches
F-37230 Fondettes
Phone: +33 2 47 62 64 66
Fax: +33 2 47 42 12 24

INVACARE AB

Fagerstagatan 9 / Box 66
S-163 91 Spånga
Phone: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08

INVACARE B.V.

Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Phone: +31 318 69 5 757
Fax: +31 318 69 5 758

INVACARE S.R.L.

Via dei Pini 62
I-36016 Thiene (VI)
Phone: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034

INVACARE AS

Grensesvingen 9
P.O. Box 6230 / Etterstad
N-0603 Oslo
Phone: +47 22 57 95 00
Fax: +47 22 57 95 01

INVACARE Deutschland GmbH

Dehmer Strasse 66
D-32549 Bad Oeynhausen
Phone: +49 57 31 754 0
Fax: +49 57 31 754 150

INVACARE LTD

South Road
Bridgend Industrial Estate
UK-Bridgend, CF31 3PY
Phone: +44 1 656 664 321
Fax: +44 1 656 667 532

Manufacturer:

INVACARE EC-Høng A/S

Østergade 3
DK-4270 Høng
www.invacare.com