



## Invacare® **Sonnet Combi**

---



*Manual DK*

*Invacare EC-Høng AIS  
Ident. no.: 913988  
Version 02 09.2002*

*Invacare® Sonnet Combi*

# Brugsanvisning for Invacare® Sonnet Combi

Dette sengebord er udviklet til brug både på hospitaler og i hjemmeplejen. Invacare® **Sonnet Combi** indeholder en række funktioner og egenskaber, der er specielt rettet mod sundhedssektoren.



Fig. 1

Tillægspladen klappes ud ved at løfte i håndtaget, samtidig med at pladen vippes ned. Når tillægspladen vippes mere end 45° vil pladen låses i den valgte position. Se fig. 1.

Når pladen skal klappes sammen igen, løftes den, og den vil så glide ned til sin bundstilling.

Bordet kan betjenes fra såvel højre som venstre side af sengen.

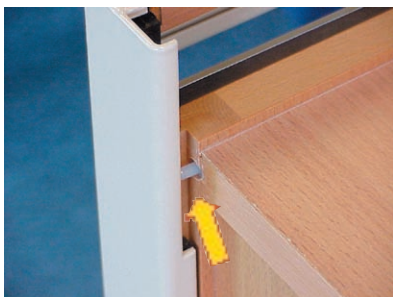


Fig. 2

Bordpladen kan monteres på begge sider af sengebordet.

Træk bordpladen lodret op, med den ene hånd. Med den anden hånd trykkes låsepalen ind, mens beslaget på bordpladen trækkes over den. Låsepalen sidder øverst på sengebordets bagside. Se fig. 2.

Bordpladen monteres på den anden side ved at trykke låsepalen ind, og føre beslaget på bordpladen ned over den.



Fig. 3

Bordpladen højdereguleres ved at løfte bordpladen til 45° og føre den til den ønskede højde. Derefter sænkes bordpladen atter til vandret.

Så snart bordpladen sænkes, låses bordet i den nye højde. Se fig 3.

# Brugsanvisning for Invacare® Sonnet Combi



Fig. 4

For at lette rengøring ved kraftig tilsmudsning, kan skuffeindsatsen afmonteres/fjernes fra bordet for eventuel rengøring i skyllerum:

Skuffen trækkes ud til den stopper, dernæst løftes skuffen op og trækkes helt ud. Indsatsen kan nu tages ud af skuffen. Se fig 4.

Efter rengøring lægges indsatsen i skuffen og skuffen skubbes/løftes ind på plads.

Bordpladen kan afmonteres/fjernes ved at trække bordpladen lodret op, med den ene hånd. Med den anden hånd trykkes låsepalen ind, mens beslaget på bordpladen trækkes over den.

Låsepalen sidder øverst på sengebordets bagside

Der kan anvendes almindelige rengøringsmidler, og sengebordet kan afvaskes med klud eller blød børste.

Der må ikke anvendes ætsende midler eller midler, der indeholder opløsningsmidler.

De aftagelige plastdele kan rengøres under rindende vand og i opvaskemaskine.

Bordet tåler ikke rengøring ved højtryksspuling.

Der er ingen af bordets bevægelige dele, der kræver smøring. De skal blot være rene for at fungere tilfredsstillende.

Sengebordet skal opbevares i rum med luftfugtighed svarende til opholdrumsklima.

Der skal være frostfrit.

Under transport skal bordpladen være klappet ned langs sengebordet. Skabslåger og skuffer skal være lukkede.



## Customer Sales and Service

---

### INVACARE A/S

Sdr. Ringvej 39  
DK-2605 Brøndby  
Phone: +45 36 90 00 00  
Fax: +45 36 90 00 01

### INVACARE N.V.

Autobaan 14  
B-8210 Loppem, Brügge  
Phone: +32 50 83 10 10  
Fax: +32 50 83 10 11

### INVACARE Poirier S.A.

Les Roches  
F-37230 Fondettes  
Phone: +33 2 47 62 64 66  
Fax: +33 2 47 42 12 24

### INVACARE AB

Fagerstagatan 9 / Box 66  
S-163 91 Spånga  
Phone: +46 8 761 70 90  
Fax: +46 8 761 81 08

### INVACARE B.V.

Celsiusstraat 46  
NL-6716 BZ Ede  
Phone: +31 318 69 5 757  
Fax: +31 318 69 5 758

### INVACARE MECCSAN S.R.L.

Via dei Pini 62  
I-36016 Thiene (VI)  
Phone: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034

### INVACARE AS

Grensesvingen 9  
P.O. Box 6230 / Etterstad  
N-0603 Oslo  
Phone: +47 22 57 95 00  
Fax: +47 22 57 95 01

### INVACARE Deutschland GmbH

Dehmer Strasse 66  
D-32549 Bad Oeynhausen  
Phone: +49 57 31 754 0  
Fax: +49 57 31 754 150

### INVACARE LTD

South Road  
Bridgend Industrial Estate  
UK-Bridgend, CF31 3PY  
Phone: +44 1 656 664 321  
Fax: +44 1 656 667 532

### INVACARE S.A.

Cl Areny s/n  
Pol.industrial de Celrà  
17460 Celrà (Girona-Spain)  
Tel: +34 972 493200  
Fax: +34 972 493220

### INVACARE Lda

Senhora de Campanhã 105  
4369-001 Porto  
Phone: +351 22 510 59 46/47  
Fax: +351 22 510 57 39

### Küschall ag

Ringstrasse 15  
4123 Allschwil  
Phone: +41 61 487 70 70  
Fax: +41 61 487 70 79



Manufacturer:

### INVACARE EC-Høng A/S

Østergade 3  
DK-4270 Høng  
[www.invacare.com](http://www.invacare.com)