

Maks: 150kg

LiftSeat er et løftesejl til manuelle løft. Sejlet er let for hjælperen at sætte på, samtidig med at det giver brugeren en følelse af tryghed i forbindelse med manuelle løft i siddende stilling. Sejlet er udformet med bendele, hvilket indebærer, at brugeren ikke sidder på sejlet, men får støtte fra halebenet op til skuldrene og under benene. LiftSeat er udformet til at tilgodese de mest almindelige manuelle løftsituationer i siddende stilling som kørestol til flysæde etc.

SystemRoMedic er en serie med forskellige modeller af forflytningshjælpemidler. Valg af hjælpemiddel bestemmes af forflytningsituationen og brugerens funktioner og behov.



Kontrol af funktion

Visuel inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af hjælpemidlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.




Læs altid manualen

Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Beskrivelse af LiftSeat

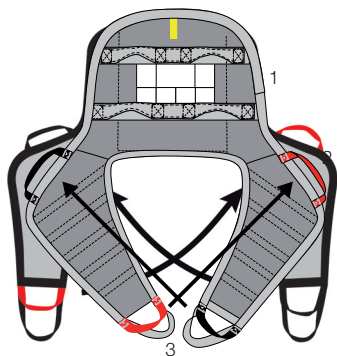


1. LiftSeat har håndtag i to sektioner på rygstøtten; vælg det håndtag, der giver den bedste arbejdsstilling.

2. Et af håndtagene foroven på benstøtterne er rødt, og det skal efter applikation møde det røde håndtag fornedet på tilsvarende sides benstøtte. På den tilsvarende side er disse håndtag sorte, og de skal efter applikation møde hinanden.


3. Forneden på benstøtterne er der to håndtag; for mindre størrelse vælg det inderste (rødt hhv. sort), for større størrelse vælg det yderste (gråt).

Placering af LiftSeat, når brugeren sidder i kørestol/stol eller seng

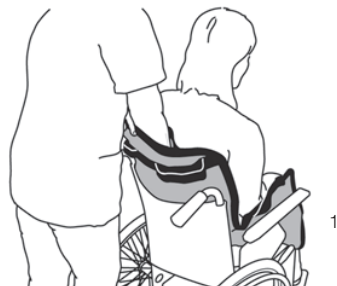

1. Hold LiftSeat med den ene hånd, og placer den anden hånd ved den nederste kant på sejlet. Det er lettere, hvis brugeren er i stand til at læne sig frem/kan lænes frem. Før løftesejlet ned bagved brugerens ryg ved at glide det langs med ryglænet på stolen/kørestolen eller sengen, ned til halebenet på brugeren er optimalt.

Vær omhyggelig med at føre løftesejlet ned ved brugerens bagdel; gør dette ved at føre sejlet ned i mellemrummet ved de bagerste hjørner på kørestolens sæde.

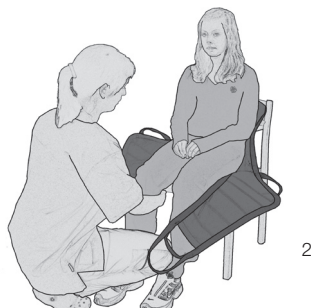


2. Træk benstøtterne frem ved lårenes yderside. Sid gerne foran og træk i den nedre kant på benstøtten, så løftesejlet glider på plads omkring brugerens bagdel. Hold lidt igen på brugerens knæ for at modvirke, at brugeren glider fremad i stolen.



3. Når du har kontrolleret, at benstøtterne er lige lange på begge sider, placerer du dem under brugerens lår. Begge benstøtter skal være under begge brugerens ben.

Ved forflytning eller løft

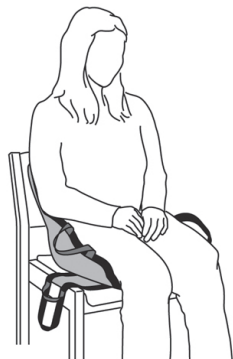

1





2

1. Vælg håndtag: På bendelene er der to alternative håndtag; vælg det mest passende håndtag afhængig af brugerens bredde.

2. Bagtil er der håndtag på to niveauer; vælg det håndtag, som giver den bedste arbejdsstilling.

Planlæg forflytningen, så løftet bliver så kort som muligt.

Forskellige placeringer ved løftet

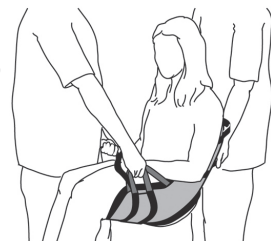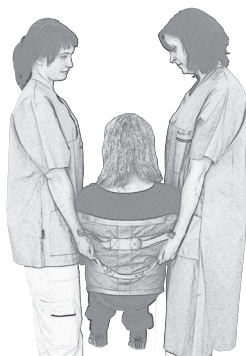


1

2

1. En hjælper på hver side.

2. En hjælper foran og en hjælper bagved.


Bortfjernelse af løftesejlet, når brugeren sidder ned

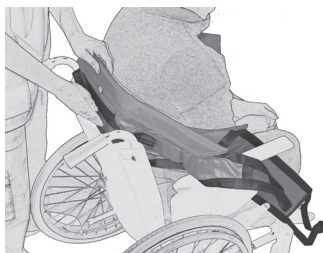

Fold benstøtten, og lad den glide ind under sig selv, når du trækker den ud på ydersiden af låret.

Træk derefter løftesejlet op bagved brugerens ryg.

Ønskes ekstra støtte bag ryggen, kan LiftSeat placeres ved hjælp af EasyGlide

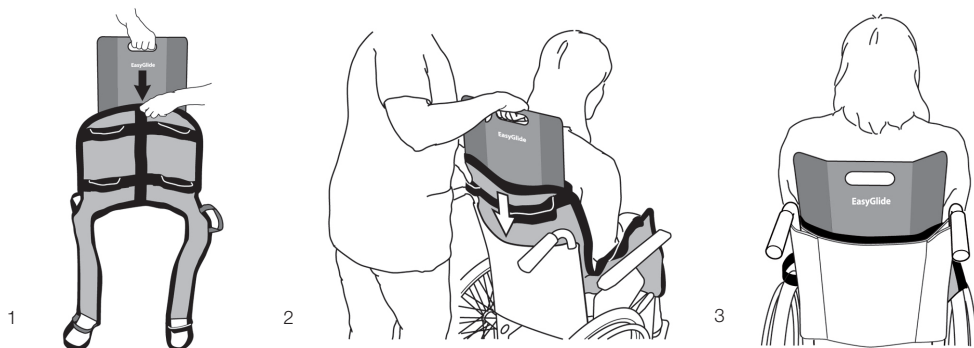

1. Placer EasyGlide i lommen på LiftSeat.
2. Tryk LiftSeat ned med EasyGlide bag brugerens ryg.
3. Behold EasyGlide bag brugeren – så giver det ekstra støtte ved forflytningen.

Vedligeholdelse:

Læs på produktetiketten.



Anvend ikke skyllemiddel. Undgå tørretumbling for optimal levetid for materialet.

	Størrelse	Anb. Brugervægt
4003	XXS/XS	15-45 kg/33-99 lbs
4006	S/M	35-90 kg/80-190 lbs
4007	L/XL	80-120 kg/180-260 lbs

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

