


# Motorrahmen

Sitting frames / Sommier motorisé

Lattoflex 292 - 295

Lattoflex 392 - 395

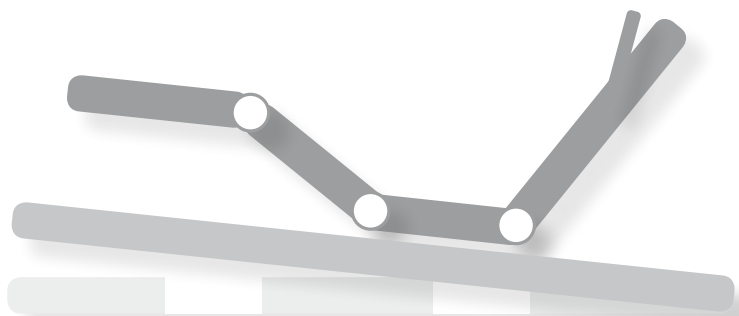

Montage- & Bedienungsanleitung

Installation and operating instructions

Instructions de montage et d'utilisation

**deutsch**

Wichtiges Dokument. Bitte sorgfältig aufbewahren!

**english**


Important document. Please keep in a safe place.

**français**


Document important. A conserver avec soin.

lattoflex®


1

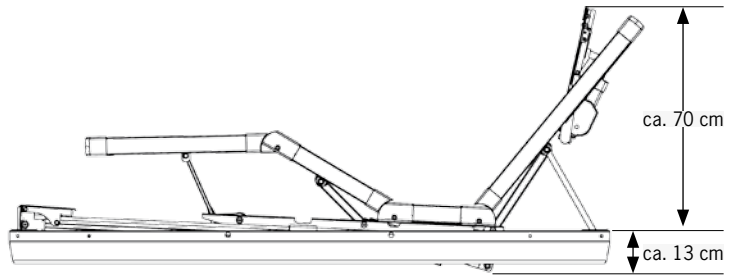


2

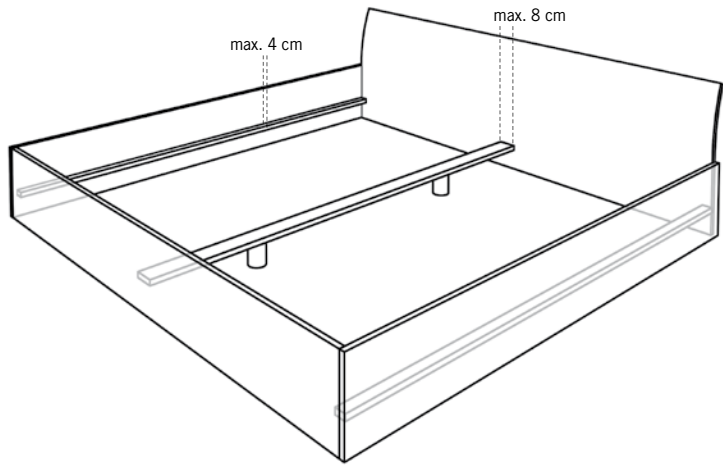

3

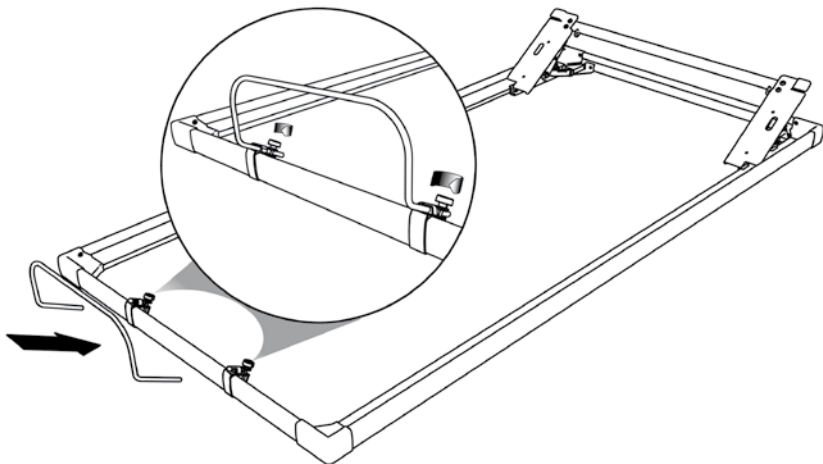

#### 4 Inbetriebnahme - Commissioning - Mise en Service

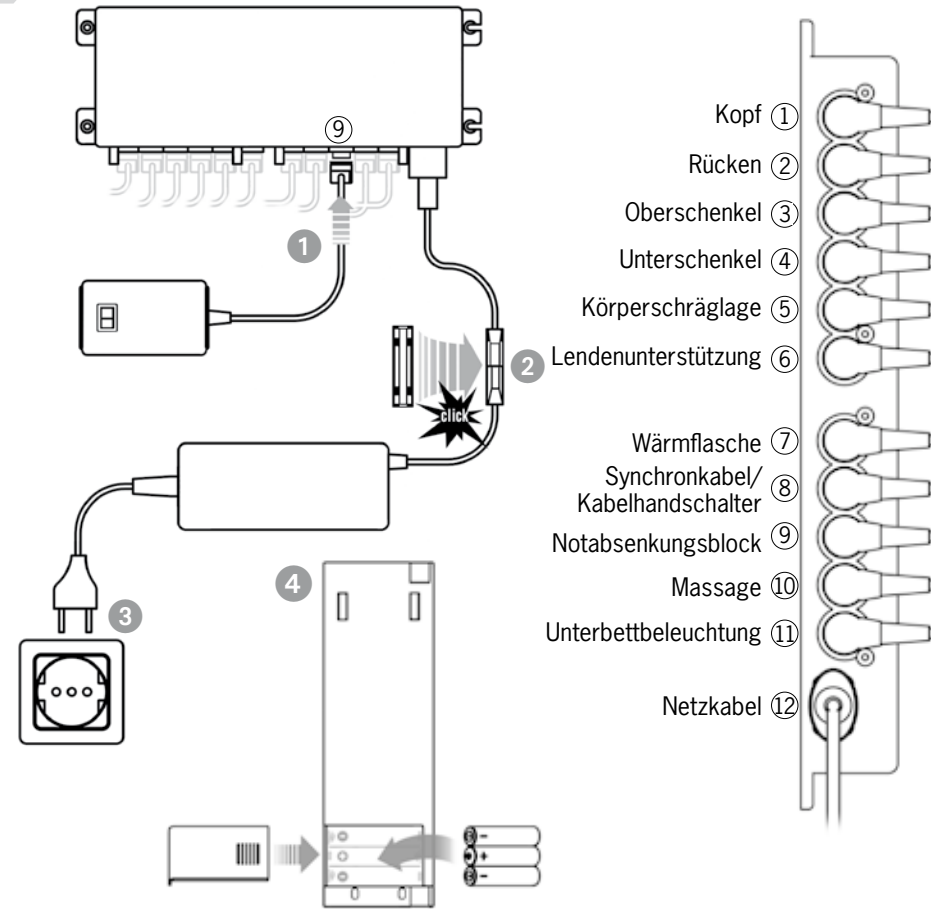

Kopf ①

Rücken ②

Oberschenkel ③

Unterschenkel ④

Körperschräglage ⑤

Lendenunterstützung ⑥

Wärmflasche ⑦

Synchronkabel/  
Kabelhandschalter ⑧


Notabsenkungsblock ⑨

Massage ⑩

Unterbettbeleuchtung ⑪

Netzkabel ⑫

#### 5 Fernbedienung - Remote Control - Télécommande

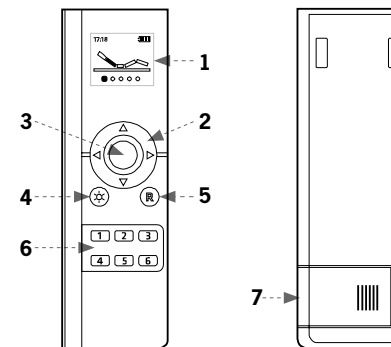

1 - Display

2 - Steuercross

3 - Menüwechsel-Taste

4 - Taschenlampe

5 - Reset

6 - Komfortasten für  
Lieblingspositionen

7 - Batteriefach




Sie haben ein Smart-  
phone? Bitte nutzen Sie  
die kostenlose Lattoflex-  
App zur Steuerung Ihres  
Motorrahmens – auch quer  
durch's Haus solange Sie  
in Ihrem WLAN-Netz sind.  
Laden Sie die Lattoflex-  
App für iPhone oder iPad  
bei itunes runter, für  
Android-Geräte bei Google  
Play. Folgen Sie einfach  
dem QR-Code:



Have you got a smart  
phone? Please use the free  
Lattoflex app to control  
your motor frame - even  
throughout the house as  
long as you are in the  
Wi-Fi network. Load the  
Lattoflex app for iPhone or  
iPad from itunes, or from  
GooglePlay for android  
devices. Simply follow the  
QR code:



Vous possédez un Smart-  
phone ? Alors veuillez  
utiliser l'appli Lattoflex  
gratuite pour commander  
votre sommier motorisé –  
même à travers la maison,  
tant que vous êtes connec-  
té à votre réseau WIFI. Télé-  
chargez l'appli Lattoflex  
pour iPhone ou iPad sur  
iTunes, pour Android sur  
Google Play. Il vous suffit  
de suivre le code QR.

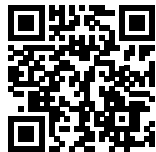

Zur Verbindung mit dem  
Motorrahmen benötigen  
Sie den WLAN-Adapter  
„Smart Remote“ (als  
Zubehör erhältlich).

You will need the Smart  
Remote Wi-Fi adapter to  
connect with the motor  
frame (available as  
accessory).

Pour vous connecter  
au sommier motorisé,  
vous devez disposer de  
l'adaptateur WIFI  
« Smart Remote »  
(disponible comme  
accessoire).

## Inhaltsverzeichnis



Montage und Anschluss .....	4
Die Lattoflex Fernbedienung .....	5
Einstellungen vornehmen und speichern .....	6
Notabsenkung .....	6
Sicherheitshinweise .....	6
Pflegehinweise .....	6
Einstellmenü .....	7
Erste Hilfe bei Problemen.....	8 - 9
Technische Daten .....	23

## Contents



Installation and connection .....	10
The Lattoflex remote control .....	11
Adjusting and saving the settings.....	12
Emergency lowering .....	12
Safety instructions.....	12
Care instructions .....	12
Settings menu.....	13
Troubleshooting .....	14 - 15
Technical data .....	23

## Sommaire



Montage et raccordement.....	16
La télécommande Lattoflex .....	17
Configurations et enregistrements .....	18
Abaissement de secours.....	18
Consignes de sécurité .....	18
Conseils d'entretien .....	18
Menu de configuration .....	19
Remèdes en cas de pannes .....	20 - 21
Caractéristiques techniques .....	23

## Montagehinweise

### Rahmentyp und Seriennummer

Das Typenschild finden Sie am Kopfende auf dem linken Längsholm unter der Kopfhochlagerung.

### Mitgeliefertes Zubehör

Montagezubehör: Matratzenhalter (Fußende), 4 Antirutschfolien

Anschlusszubehör: Funk-Fernbedienung mit Batterien (3 x AAA), Filztasche, Notabsenkungsblock, Netzgerät, Zuleitungskabel, Steckersicherung

## 1 Einlegen in ein Bett:

Bitte berücksichtigen Sie den notwendigen Platzbedarf für die verstellbaren Rahmenteile z.B. bei Dachschrägen, Bettüberbauten oder gepolsterten Kopfteilen. Für die Verstellmechanik und Antriebstechnik im Unterbau wird eine Einbautiefe (Bodenfreiheit) von ca. 13cm benötigt.

Bitte beachten Sie immer den Abstand des motorisch verstellbaren Rückenteils zum Kopfteil des Bettes. In Flachlage sollte hier ein Abstand von mindestens 1,5cm bestehen. Um ein unbeabsichtigtes Verrutschen auszuschließen, den Rahmen bitte an vorgebohrten Punkten im Metallunterbau mit dem Bett verschrauben.

## 2 Seitliche Auflageleisten dürfen maximal 4 cm breit sein (Mittelzarge 8 cm).

Bei Betten mit Dreiecksauflagen (Schenkelänge max. 15 cm) bitte den Einbausatz „Verlängerungselemente“ verwenden (als Zubehör erhältlich). Wir empfehlen für eine stabile Bettkonstruktion bei Dreiecksauflagen immer einen Auflagepunkt in der Bettmitte.

### Antirutschfolie

An den Auflagepunkten des Rahmens im Bettgestell anbringen. Die Folien verhindern Geräusche, die durch Verrutschen der Rahmen im Bettgestell entstehen können.

## 3 Matratzenhalter

Den mitgelieferten Halter am Fußende anbringen. Die Kunststoffschellen sind vormontiert.

## Anschluss und Inbetriebnahme

### 4 Bitte gehen Sie zur Inbetriebnahme Ihres Motorrahmens wie folgt vor:

- 1 Notabsenkungsblock an Buchse 9 der Steuerung anschließen. Ggf. alle weiteren Zubehörteile anschließen.
- 2 Netzgerät an die Steuerung anschließen, Steckersicherung aufclippen.
- 3 Motorrahmen ans Stromnetz anschließen.
- 4 Fernbedienung auspacken und Batterien einlegen.

### Anlernen der Fernbedienung:

Bei Auslieferung befindet sich die Fernbedienung nach dem Einlegen der Batterien automatisch im Menü zum Anlernen eines Motorrahmens.

1. Den Suchmodus durch Drücken der Mittel-taste im Steuerkreuz auslösen.
2. Innerhalb von 30 Sekunden den Taster auf dem Notabsenkungsblock kurz drücken.
3. Die Fernbedienung bestätigt das erfolgreiche Anlernen mit „Teach In Ok“, die Steuerung im Motorrahmen piept.
4. Taste R auf der Fernbedienung kurz drücken. Auf dem Display erscheint die Aufforderung zur Initialisierung:



5. Um den Anlernvorgang abzuschließen die Taste R nun so lange drücken, bis auf dem Display die Motorrahmenabbildung erscheint.

## Die Lattoflex Fernbedienung

### Bidirektionale Funkverbindung

Mit Ihrem Motorrahmen wurde eine intelligente Funk-Fernbedienung ausgeliefert. Zwischen der Fernbedienung und der Steuereinheit im Motorrahmen besteht eine bidirektionale, also beidseitige Funkverbindung. Das hat zwei entscheidende Vorteile:

- Es werden nur Motoren und Zubehörteile angezeigt, die in Ihrem Rahmen installiert sind. Nachträglich angeschlossene Komponenten werden nach einem erneuten Anlernvorgang automatisch im Menü der Fernbedienung ergänzt.
- Im Display wird zu jeder Zeit die genaue Position aller Verstellteile und der Funktionsstatus aller Zubehörteile angezeigt.

## 5 Übersicht

- 1 – Display
- 2 – Steuerkreuz
- 3 – Menüwechsel-Taste
- 4 – Taschenlampe
- 5 – Reset
- 6 – Komforttasten für Lieblingspositionen
- 7 – Batteriefach

### Batteriewechsel

Bitte halten Sie Batterien zum Wechseln bereit, sobald die Akkuanzeige nur noch einen roten Balken anzeigt. Es werden 3 Batterien oder 3 aufladbare Akkus der Größe AAA benötigt. Einfach den Batteriefachdeckel auf der Rückseite aufschieben. Auf korrekte Polarität achten.

### Schnellstart Motorrahmenbedienung

Die Fernbedienung schaltet sich bei Bewegung oder bei Tastendruck selbstständig ein. Wird für eine Dauer von 10 Sekunden keine Einstellung vorgenommen oder die Fernbedienung nicht bewegt, schaltet sie sich in den Schlaf-Modus.

Auf den 6 Komforttasten sind bei Auslieferung Voreinstellungen hinterlegt. Damit kommen Sie schnell in den Genuss des kompletten Funktionsumfangs. Die Voreinstellungen sind jederzeit änderbar und durch eigene Lieblingseinstellungen ersetzbar (s. Seite 6, Einstellungen speichern). Bei Motorverstellung: Die jeweilige Nummerntaste so lange gedrückt halten, bis der Rahmen seine Endposition erreicht hat.

Taste 1 = Lese- und Sitzposition

Taste 2 = Beinhochlagerung

Taste 3 = Relaxposition

Taste 4 = Licht an/aus (Stufe 3/10min), Option

Taste 5 = Steckdose an/aus, Option

Taste 6 = Wärmflasche an/aus (Stufe 3/15min), Option

## 6 Menü-Übersicht

Die Lattoflex-Fernbedienung vereint die Steuerung der Motorverstellungen und aller installierten Lattoflex-Komponenten in nur einer Bedieneinheit. Je nach installierten Antrieben und Funktionskomponenten erscheinen auf der Fernbedienung die verschiedenen Ebenen laut Abb. 6.

### Wechsel zwischen den Ebenen:

fortlaufend durch die „Menüwechsel-Taste“.

### Rücksprung auf die Motorverstellebene:


Immer mit kurzem Tastendruck auf die R-Taste „Reset“.

Durch Bewegung oder einen Tastendruck wird die Fernbedienung eingeschaltet. Nach dem Lattoflex-Logo ist immer die Motorverstellung zu sehen.

Unterbettbeleuchtung, Steckdosenempfänger und Wärmflasche sind als Zubehör erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lattoflex-Fachhändler.

## Einstellungen vornehmen und bei Bedarf speichern


Die Menüwechsel-Taste führt im Rundlauf durch die verschiedenen Funktionen und das Einstellmenü. Ist die gewünschte Funktion erreicht, einfach mit den Tasten „Rechts“ oder „Links“ das einzustellende Element auswählen. Dann mit den Tasten „Hoch“ und „Runter“ die Einstellung vornehmen. In jeder Menüebene kommt man auf die „Memory“-Ansicht (mehrfach Taste „Rechts“ oder „Links“ drücken).

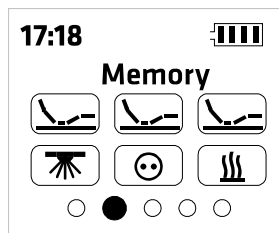

Hier können Sie die gerade vorgenommenen Einstellungen als Lieblingsposition abspeichern. Dazu im Memorymodus eine der sechs Komfort-

tasten 2 Sekunden gedrückt halten. Die Speicherung wird bestätigt durch ein Aufblinken der ausgewählten Taste auf dem Display.

## Beispiel Rahmenverstellung

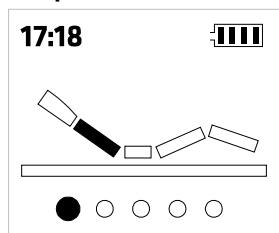

Mit den Pfeiltasten „Rechts“ und „Links“ das zu bewegendes Rahmenteil auswählen. Das ausgewählte Element ist an der gelben Markierung erkennbar. Verstellung mit den Pfeiltasten

„Hoch“ und „Runter“. Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die Motoren die gewünschte Stellung erreicht haben. Durch langes Drücken der Taste R fahren alle Motoren gleichzeitig in die Flachlage.

## Notabsenkung

Bei Stromausfall können die Motoren über den Taster auf dem Notabsenkungsblock in die Flachlage verstellt werden. Hierbei fahren

die Motoren sehr langsam und hintereinander zurück. Bitte beachten Sie, dass die Batterien bei Verwendung der Notabsenkung fast entleert werden und anschließend ausgetauscht werden müssen (2 x 9 V E Block).

## Sicherheitshinweise

Beim Betätigen und im hochgestellten Zustand nicht auf den Rahmen steigen. Der Rahmen ist so konstruiert, dass bei Betätigung normalerweise keine Einklemm- oder Quetschgefahr besteht. Achten Sie trotzdem darauf, dass sich bei Betätigung des Rahmens keine Personen, insbesondere keine Kinder unter dem Rahmen befinden oder in den Mechanismus hineingreifen. Lattoflex 292-295, 392-395 und baugleiche Modelle sind Einlegerahmen für Bettgestelle. Die Nutzung ist nur nach den Maßgaben dieser Anleitung und nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Niemals die Kabel einklemmen, scharfkantig verlegen oder durch bewegliche Rahmenteile quetschen. Beschädigte Anschlussleitungen nur gegen Originalteile ersetzen. Beschädigungsgefahr durch Kürzen der Tragholme oder durch Demontage von Beschlagteilen. Verstauen Sie keine Gegenstände unter dem Rahmen. Besonders Bettwäsche kann durch die Motoren Schaden nehmen.

## Reinigung und Pflege

Ihre Lattoflex Unterfederung braucht keine besondere Pflege. Es genügt, wenn Sie sie einfach ab und zu mit einem feuchten Tuch abwischen. Bitte verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Benzin, noch ätzende oder scheuernde Mittel. Immer den Netzstecker während der Reinigung aus der Steckdose ziehen.

Gelegentlich auftretende Geräusche an den Laufflächen der Schiebefunktion oder an Kunststofflagern können mit Silikon oder besser mit Flonium behandelt werden. Benutzen Sie in keinem Fall handelsübliche Öle oder Fette.

## Das Einstellmenü in der Fernbedienung

7 Je nach Bedarf können alle Funktionen und Parameter der Fernbedienung eingestellt und angepasst werden. Bitte vergleichen Sie diese Beschreibung mit den Abbildungen auf der hinteren Aufklappseite.

### Abbildungen 1 und 2:

Helligkeit von Display und Tastaturbeleuchtung kann 6-stufig angepasst werden.

### Abbildung 3:

Uhrzeit und Datum einstellen. Um in den Einstellmodus zu gelangen, bitte hier die Menüwechsel-Taste drücken. Nach erfolgten Einstellungen ebenso. Mit den 4 Pfeiltasten alle Einstellungen vornehmen. Anschließend wieder die Menüwechsel-Taste drücken.

### Abbildung 4:

Kindersicherung, zum Aktivieren und Deaktivieren die Menüwechsel-Taste mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. Der Status wird im Display durch das Schloßsymbol angezeigt.

### Abbildung 5:

Teach in / out: Nach Drücken der Menüwechsel-Taste kann man mit den Pfeiltasten „Rechts“ oder „Links“ folgende Funktionen auswählen: Search (neues Gerät anlernen), Remove (eingelerntes Gerät entfernen) oder Exit (hiermit verlässt man den Teach in / out – Bereich). Die gewünschte Funktion mit der Menüwechsel-Taste auswählen und ggf. den Display-anweisungen folgen.

Anlernen am Motorrahmen: siehe Seite 4.

Anlernen am Steckdoseneempfänger: Mit der Menüwechseltaste „Search“ auswählen, den Codierschalter am Steckdoseneempfänger auf POS B (Einlernen) stellen, den gewünschten Kanal (Channel) am Sender auswählen und mit der Menüwechseltaste bestätigen. Standardmäßig wird der nächste freie Kanal gewählt (max. 6). Den Codierschalter am Steckdoseneempfänger wieder auf POS A (Betrieb) stellen. Die Inbetriebnahme ist damit abgeschlossen. Siehe auch separate Anleitung.

### Abbildung 6:

Um die Fernbedienung auf Werkseinstellung zurückzusetzen wie folgt vorgehen: Durch Drücken der Menüwechsel-Taste auswählen und die nächste Abfrage mit Ja bestätigen. Jetzt müssen alle Geräte neu angelernt werden, siehe Seite 4, Anlernen der Fernbedienung.

### Ohne Abbildung: Test


Dieser Punkt beinhaltet keine relevanten Funktionen.

### Abbildung 7:

Info: Hier werden Softwarestand und Seriennummer angezeigt. Bei technischen Rückfragen diese Informationen bereithalten.

## Erste Hilfe bei Problemen

### Buchsenbelegung

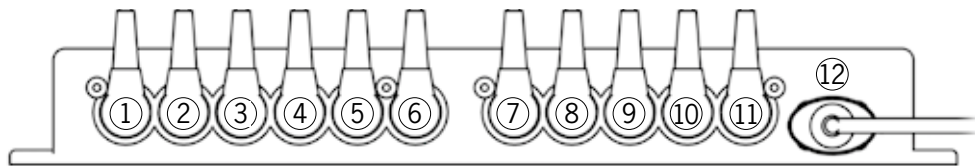

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ① Kopf                | ⑦ Wärmflasche                         |
| ② Rücken              | ⑧ Synchronkabel/<br>Kabelhandschalter |
| ③ Oberschenkel        | ⑨ Notabsenkungsblock                  |
| ④ Unterschenkel       | ⑩ Massage                             |
| ⑤ Körperschräglage    | ⑪ Unterbettbeleuchtung                |
| ⑥ Lendenunterstützung | ⑫ Netzkabel                           |

### Rahmen reagiert nicht

Ursache	Abhilfe
Netzstecker gezogen / Netzzuleitung unterbrochen.	Netzstecker einstecken / Steckverbindungen am Netzgerät prüfen.
Steckdose ohne Strom.	Sicherung im Haus prüfen.
Fernbedienung vertauscht. Fernbedienung nicht mehr angelernt.	Fernbedienung neu anlernen (Teach In).
Steuerung überhitzt durch Dauerbetrieb. Bei Betätigung ertönt ein Piepton.	Ca. 20min abkühlen lassen.

### Fernbedienung reagiert nicht, keine Display- und Tastenbeleuchtung

Ursache	Abhilfe
Batterien entladen.	Batterien wechseln, 3 x AAA.
Batterien falsch herum eingelegt.	Batterien herausnehmen, richtig einsetzen. Dabei auf + und - achten. Siehe Kennzeichnung im Gehäuse.
Fernbedienung deaktiviert.	Eine Batterie entnehmen und wieder einsetzen.
Fernbedienung defekt.	Fernbedienung tauschen.

### Ein Motor ist ausgefallen


Ursache	Abhilfe
Der Motor kann auf der Fernbedienung nicht angewählt werden.	Fernbedienung neu anlernen (Teach In).
Stecker steckt nicht richtig in der Buchse / ausgezogen.	Stecker <b>bis zum Anschlag</b> einstecken.
Einzelner Motor ist überhitzt durch Dauerbetrieb.	Ca. 20 Minuten auskühlen lassen.
1 Ausgangsbuchse an der Steuerung ist defekt.	Motor in andere Ausgangsbuchse stecken. Siehe Buchsenbelegung links. Mit der Fernbedienung das entsprechende Rahmenteil auswählen und den Motor testen.
Motor defekt	Austausch des Motors

### Notabsenkung reagiert nicht

Ursache	Abhilfe
Stecker vom Notabsenkungsblock steckt nicht richtig in der Buchse.	Stecker <b>bis zum Anschlag</b> in Buchse 9 einstecken.
Batterien im Notabsenkungsblock sind entladen.	Batterien wechseln, 2 x 9-Volt-Block (6LR61)

### Rücken- und/oder Oberschenkelmotor senken nicht ab

Ursache	Abhilfe
Rahmen stößt auf einen Widerstand und schaltet durch die Zugsicherung ab.	Motoren hoch fahren und Widerstand entfernen.

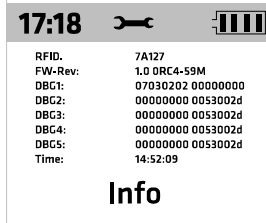

Sollten Sie zu keiner Lösung gekommen sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Lattoflex-Fachhändler. Wenn die Fernbedienung noch funktioniert, so ist es in jedem Problemfall hilfreich, die Systemdaten an Lattoflex zu übermitteln. Diese sind im Menü „Settings“ auf dem Display „Info“ zu finden. Wenn möglich ein Foto des Bildschirminhalts senden. Diese Informationen helfen zur schnellen Fehleranalyse.

## Installation instructions

### Frame type and serial number

The name plate is located at the head end on the left longitudinal beam below the raised head.

### Supplied accessories

**Installation accessories:** mattress holder (foot end), 4 non-slip foils

**Connection accessories:** radio remote control with batteries (3 x AAA), felt pocket, emergency lowering block, mains adapter, lead cable, plug fuse

### 1 Placing in a bed

Please heed the necessary space for the adjustable frame parts, e.g. in rooms with inclined roofs, superstructures over the bed or padded head sections. An installation depth of approx. 13 cm (floor clearance) is needed in the substructure for the adjustment mechanism and drive system.

Please always heed the spacing of the back part with its motorised adjustment, to the head part of the bed. There should be spacing of at least 1.5 cm here when the bed is laid flat. To rule out any unintentional slipping, please screw the frame to the bed at the pre-drilled points in the metal substructure.

### 2 Side support sections must not exceed 4 cm in width (middle frame 8 cm).

For beds with triangular supports (leg length max. 15 cm), please use the „Extension elements“ installation kit (available as accessory). For a stable bed structure, we always recommend a supporting point in the middle of the bed for triangular supports.

### Non-slip foil

Affix in the bed structure to the supporting point of the frame. The foils prevent any noise that could be caused by the frame slipping in the bed structure.

### 3 Mattress holder

Attach the supplied holder at the foot end. The plastic clamps are premounted.

## Connection and commissioning

### 4 Please proceed as follows to commission your motor frame:

- 1 Connect emergency lowering block to jack 9 of the control. Connect up all other accessory parts as appropriate.
- 2 Connect the mains adapter to the control and clip the plug fuse in position.
- 3 Connect the motor frame to the mains.
- 4 Unpack the remote control and insert the batteries

### Remote control teach-in:

On delivery, once the batteries have been positioned the remote control is automatically in the menu to proceed with teach-in for a motor frame.

1. Trigger the search mode by pressing the middle button in the control cross.
2. Within 30 seconds, briefly press the button on the emergency lowering block.
3. The remote control shows „Teach-In Ok“ to confirm that the teach-in was successful; the control in the motor frame beeps.
4. Briefly press button R on the remote control. The display tells you to reset the unit:



5. To conclude the teach-in procedure, now press button R until the picture of the motor frame appears on the display.

## The Lattoflex remote control

### Bi-directional radio connection

Your motor frame has been delivered with an intelligent radio remote control. There is a bi-directional i.e. two-sided radio connection between the remote control and the control unit in the motor frame. This offers you two crucial advantages:

- The display only shows those motors and accessories that are actually installed in your frame. Components connected up later on are automatically added to the remote control menu after a corresponding teach-in session.
- At all times, the display shows the exact position of all adjustable parts and the function status of all accessories.

### 5 Overview

- 1 - Display
- 2 - Control cross
- 3 - Menu change button
- 4 - Torch
- 5 - Reset
- 6 - Comfort buttons for favourite positions
- 7 - Battery compartment

### Changing the batteries

Make sure that you have spare batteries ready as soon as there is only one red bar in the battery display. You will need 3 batteries or 3 rechargeable batteries, size AAA. Simply push open the cover of the battery compartment on the back of the unit. Make sure you insert the batteries with the positive and negative ends pointing in the correct direction.

### Motor frame control quick start

The remote control switches on automatically when moved or when a button is pressed. If no adjustment is made for 10 seconds or if the remote control is not moved, it switches to the sleep mode.

The 6 comfort buttons are preset on delivery. This lets you quickly enjoy the full range of functions. The presets can be changed at any time and replaced by your own favourite positions (see page 6, save settings). For motor adjustment, press the corresponding number button until the frame has reached its end position.

Button 1 = reading and sitting position

Button 2 = raised legs

Button 3 = relax position

Button 4 = light on/off (stage 3 / 10 min), optional

Button 5 = socket on/off, optional

Button 6 = electrical hot-water bottle on/off (stage 3 / 15 min), optional

### 6 Menu overview

The Lattoflex remote control combines control of the motor adjustments and all installed Lattoflex components in one single control unit. The various levels shown in Fig. 6 appear on the remote control, depending on the installed drives and function components.

### Change between the levels:

by repeatedly pressing the menu change button.


**Return to the motor adjustment level:** by briefly pressing the R button (Reset).

The remote control switches on when moved or when a button is pressed. The Lattoflex logo always appears first, followed by the motor adjustment.

Underbed lighting, socket receiver and hot-water bottle are available as accessories. Please contact your Lattoflex dealer.

### Adjusting settings and saving them if necessary


The menu change button runs in a cycle through the various functions and the settings menu. On reaching the required function, simply select the element to be adjusted with the „right“ or „left“ button. Then adjust the setting with the „up“ and „down“ buttons. You can go to the „memory“ view in every menu level simply by pressing the „right“ or „left“ button.

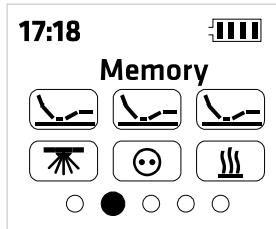

Here the settings that have just been adjusted can be saved as your favourite positions. To do so, press and hold one of the six comfort buttons

for two seconds in the memory mode. The selected button flashes on the display to confirm that the setting has been saved.

### Example: frame adjustment

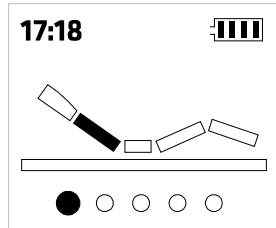

Use the „right“ and „left“ arrow buttons to select the frame part to be moved. The selected element is shown in yellow. Use the „up“ and „down“

arrow buttons to adjust the frame part. Hold the buttons until the motors have reached the required position. Press and hold the R button for all motors to move to the flat position at the same time.

### Emergency lowering

In the event of a power failure, the motors can be adjusted to the flat position with the button on the emergency lowering block. In

this case, the motors move very slowly and one after the other. Please note that the emergency lowering function almost completely discharges the batteries so that they must be replaced afterwards (2 x 9 V E block).

### Safety instructions

Do not climb on the frame when it is being adjusted and when it is raised. The frame is designed so that it normally poses no risk of getting clamped or crushed during operation. Even so, please make sure that there is nobody, in particular no child, under the frame or in a position to reach into the mechanism when raising or lowering the frame. Lattoflex 292-295, 392-395 and all equivalent models are inlay frames for bed structures. They are only intended for use according to the conditions stated in these instructions and only for domestic use.

Make sure that the cables are never clamped, placed over sharp edges or crushed between moving parts of the frame. Only use original parts to replace damaged connection leads. Shortening the support beams or dismantling attachment parts poses a risk of damage. Do not store any items under the frame. Bedding in particular can be damaged by the motors.

### Cleaning and care

Your Lattoflex spring base does not need any special care. Simply wipe it down from time to time with a damp cloth. Please do not use any solvents or benzene, or any caustic or scouring cleaning agents! Always take the mains plug out of the socket before cleaning. Use silicone or preferably Flonium to treat any noises coming from the running surfaces of the sliding function or plastic bearings. Never use commercially available oil or grease.

## The settings menu in the remote control

7 All functions and parameters of the remote control can be adjusted and adapted as required. When reading these instructions, please refer to the illustrations on the rear fold-out page.

### Fig. 1 and 2:

The brightness of the display and keyboard lighting can be adjusted in 6 levels.

### Fig. 3:

Adjust the time and date. To go to the settings mode, please press the menu change button here, and again after adjusting the settings. Use the 4 arrow buttons to adjust all settings. Then press the menu change button again.

### Fig. 4:

Child lock. To enable and disable, press and hold the menu change button for at least 10 seconds. The lock symbol shows the status in the display.

### Fig. 5:

Teach-in/out: after pressing the menu change button, use the „right“ or „left“ arrow buttons to select the following functions: Search (teach new device), Remove (remove a device after teach-in) or Exit (to quit the teach-in/out area). Select the required function with the menu change button and follow the instructions given in the display.

Teach-in at the motor frame: see page 4.

Teach-in at the socket receiver: select Search with the menu change button, adjust the coding switch on the socket receiver to POS B (teach-in), select the required channel at the receiver and press the menu change button to confirm. The next free channel is chosen as default (max. 6). Set the coding switch on the socket receiver back to POS A (operation). This concludes the commissioning procedure. Please also refer to the separate instructions.

### Fig. 6:

To reset the remote control to the factory settings, please proceed as follows: press the menu change button and confirm the next query with Yes. The teach-in procedure now has to be repeated for all devices, see page 4, remote control teach-in.

### Without illustration: test

This point does not contain any relevant functions.


### Fig. 7:

Info: this shows the software status and serial number. You should have this information at the ready when making any technical queries.



## Troubleshooting

### Jack assignment

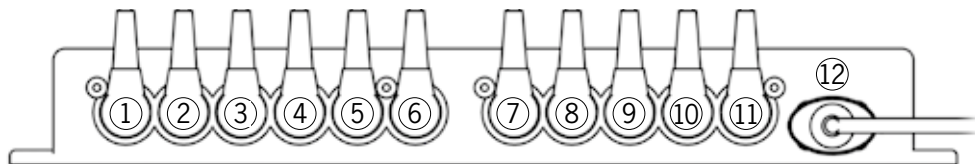

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ① Head                   | ⑦ Hot-water bottle                        |
| ② Back                   | ⑧ Synchronous cable/<br>cable hand switch |
| ③ Thigh                  | ⑨ Emergency lowering block                |
| ④ Calf                   | ⑩ Massage                                 |
| ⑤ Inclined body position | ⑪ Underbed lighting                       |
| ⑥ Lumbar support         | ⑫ Mains lead                              |

### Frame does not react

Cause	Remedy
Mains plug disconnected/ mains lead interrupted.	Connect mains plug / check plug connections on the mains adapter.
Socket without power.	Check house fuse.
Remote control mixed up. Remote control no longer in teach-in status.	Repeat teach-in process for remote control.
Control overheated because of continuous operation. Beep sounds when activated.	Leave to cool down for approx. 20 min.

### Remote control does not react, no display or keyboard lighting

Cause	Remedy
Batteries flat	Change batteries, 3 x AAA.
Batteries incorrectly inserted.	Remove batteries, insert correctly. Check + and -. See marking in housing.
Remote control disabled.	Remove a battery and insert it again.
Remote control defective.	Replace remote control.

### One of the motors is not working


Cause	Remedy
The motor cannot be selected on the remote control	Repeat teach-in process for remote control.
Plug not inserted correctly in jack / discon- nected.	Insert plug <b>as far as it will go</b> .
One of the motors has overheated because of continuous operation.	Leave to cool down for approx. 20 min.
One of the jacks on the control unit is defective.	Connect motor to another jack. See jack assignment on the left. Use the remote control to select the corresponding frame part and test the motor.
Motor defective.	Replace the motor.

### Emergency lowering does not react

Cause	Remedy
Emergency lowering block plug not inserted correctly in the jack	Insert plug in jack 9 <b>as far as it will go</b> .
Batteries in emergency lowering block are flat.	Replace batteries, 2 x 9V block (6LR61)

### No lowering of back and/or thigh motor

Cause	Remedy
Frame collides with resistance and is swit- ched off by the fuse.	Raise motors and remove resistance

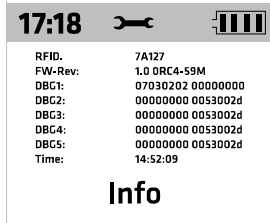

If you cannot solve the problem, please contact your Lattoflex dealer. If the remote control is still working, it can help to send the system data to Lattoflex. These can be found on the „Info“ display in the „Settings“ menu. If possible, send a photo of the screen content. This information will be helpful in making a quick analysis of the problem.

## Instructions de montage

### Type de sommier et numéro de série

La plaque signalétique se situe côté tête sur le longeron gauche sous le relèvement de la tête.

### Accessoires fournis

**Accessoires de montage :** cales pour matelas (côté pieds), 4 bandes antidérapantes

**Accessoires de raccordement :** télécommande radio avec piles (3 x AAA), pochette feutrée, bloc d'abaissement de secours, bloc-secteur, cordon d'alimentation, embout anti-arrachement

### 1 Pose dans un lit :

Tenez impérativement compte de l'espace nécessaire au déplacement des pièces réglables du sommier, p. ex. en sous-pente, lors d'une tête de lit surélevée ou d'un dossier matelassé. La mécanique de déplacement et la technique d'entraînement intégrées au châssis exigent une profondeur d'implantation (garde au sol) d'env. 13 cm.

Respectez toujours la distance de la partie dorsale à réglage motorisé par rapport à la tête de lit. La distance devrait comporter au moins 1,5 cm en position horizontale. Il est recommandé, en vue d'exclure un glissement inopiné, de fixer le sommier avec des vis au cadre de lit en servant des taraudages respectifs prévus sur le châssis métallique.

2 La largeur des barres d'appui latérales ne doit pas dépasser 4 cm (8 cm au milieu du châssis). Veuillez utiliser le jeu de pièces des « éléments de rallonge » (disponible comme accessoire) pour les lits équipés d'appuis triangulaires (longueur des branches de 15 cm maximum). Nous recommandons toujours de prévoir un point d'appui au milieu du lit afin de garantir une construction solide des lits à appuis triangulaires.

### Bande antidérapante

Appliquez-les sur les points d'appui du sommier dans le cadre de lit. Les bandes préviennent les nuisances sonores susceptibles de provenir du glissement du sommier installé dans le cadre de lit.

### 3 Cale pour matelas

Installez la cale fournie côté pieds. Les brides de fixation en plastique sont prémontées.

## Raccordement et mise en service

4 Procédez comme suit pour mettre votre sommier motorisé en service :

- 1 Raccordez le bloc d'abaissement de secours à la borne 9 de la commande. Raccordez tous les autres accessoires, le cas échéant.
- 2 Raccordez le bloc-secteur à la commande, clipsez l'embout anti-arrachement.
- 3 Raccordez le sommier motorisé au secteur.
- 4 Déballez la télécommande et insérez les piles.

### Configuration de la télécommande :

Une télécommande neuve affiche automatiquement le menu de configuration d'un sommier motorisé après l'insertion des piles.

1. Déclenchez le mode de recherche en appuyant sur la touche du milieu de la croix directionnelle.
2. Appuyez brièvement sur la touche du bloc d'abaissement de secours en l'espace de 30 secondes.
3. La télécommande confirme la configuration réussie via « Teach In OK » ; l'unité de commande intégrée au sommier motorisé émet un bip.
4. Appuyez brièvement sur la touche « R » de la télécommande. L'écran vous invite à procéder à l'initialisation :



5. Pour achever la configuration, appuyez ensuite sur la touche « R » jusqu'à ce que l'écran affiche la figure du sommier motorisé.

## La télécommande Lattoflex

### Communication radio bidirectionnelle

Votre sommier motorisé est fourni avec une télécommande radio intelligente. La télécommande et l'unité de commande intégrée au sommier motorisé sont reliées par une communication radio bidirectionnelle. Ceci a deux avantages évidents :

- La télécommande n'affiche que les moteurs et accessoires effectivement installés pour votre sommier. Le menu de la télécommande affiche automatiquement les composants que vous raccorderiez ultérieurement après leur reconfiguration.
- L'écran affiche la position exacte de toutes les pièces déplaçables et l'état de fonctionnement de tous les accessoires à tout moment.

### 5 Aperçu

- 1 – Écran
- 2 – Croix directionnelle
- 3 – Touche de changement de menu
- 4 – LED d'éclairage
- 5 – Remise à zéro
- 6 – Touches confort des positions favorites
- 7 – Compartiment à piles

### Changement des piles

Veillez prévoir des piles de réserve dès que l'affichage de l'accu ne signale plus qu'une barre rouge. La télécommande exige 3 piles ou 3 accus rechargeables de type AAA. Il suffit de repousser le capot du compartiment à piles au dos de la télécommande. Veillez à la polarité correcte !

### Démarrage rapide de la commande du sommier motorisé

La télécommande se branche automatiquement dès que vous la prenez en main ou que vous appuyez sur une touche. Elle passe en mode de veille si vous ne procédez à aucun réglage pendant une durée de 10 secondes ou si elle demeure immobile.

Des préconfigurations sont consignées aux 6 touches confort à la livraison. Elles sont destinées à vous simplifier l'accès à l'intégralité des fonctions existantes. Vous pouvez modifier les préconfigurations à tout moment et les remplacer par vos configurations favorites (voir page 18 : « Configurations et enregistrements »). Déplacement motorisé : appuyez sur la touche numérotée respective jusqu'à ce que le sommier ait atteint sa position finale.

- Touche 1 = position de lecture et assise
- Touche 2 = relèvement des jambes
- Touche 3 = position de détente
- Touche 4 = marche/arrêt de l'éclairage (niveau 3/10 minutes), option
- Touche 5 = marche/arrêt de la prise de courant, option
- Touche 6 = marche/arrêt de la bouillotte (niveau 3/15 minutes), option

### 6 Arborecence du menu

La télécommande Lattoflex réunit la commande du déplacement motorisé et tous les composants Lattoflex installés dans une seule unité de commande. Les différents niveaux selon la Fig. 6 s'affichent sur la télécommande en fonction des moteurs et composants fonctionnels installés.

**Changement entre les niveaux :** continu via la « touche de changement de menu ».


**Retour au niveau du déplacement motorisé :** appuyez toujours brièvement sur la touche « R » de remise à zéro (Reset).

La télécommande se branche dès que vous la prenez en main ou que vous actionnez une touche. Le déplacement motorisé s'affiche toujours après le logo Lattoflex.

Un éclairage sous le lit, des prises réceptrices et une bouillotte sont disponibles comme accessoires. Adressez-vous à votre distributeur Lattoflex.

## Configurations et enregistrements

La touche de changement de menu permet d'afficher les différentes fonctions et le menu de configuration en continu. Tout ce que vous devez faire, dès l'affichage de la fonction souhaitée, est de sélectionner l'élément à configurer en appuyant sur la touche « droite » ou « gauche ». Procédez ensuite à la configuration en vous servant des touches « haut » et « bas ». Chaque menu permet aussi d'accéder à l'affichage des fonctions à mémoriser (appuyez plusieurs fois sur la touche « droite » ou « gauche »).

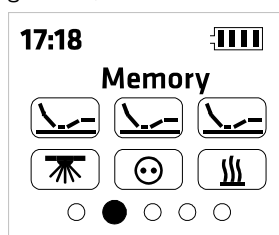

Ce menu permet d'enregistrer les configurations effectuées en tant que positions favorites. Pour ce faire, continuez d'appuyer sans interruption pendant

2 secondes sur l'une des six touches confort en mode de mémorisation. Un clignotement de la touche sélectionnée à l'écran confirme que l'enregistrement a été effectué.

## Exemple de déplacement du sommier

Sélectionner la partie du sommier à déplacer en vous servant des touches fléchées « droite » et « gauche ». Un repère jaune signale l'élément que vous avez sélectionné. Procédez au déplacement

en vous servant des touches fléchées « haut » ou « bas ». Continuez d'appuyer sur les touches jusqu'à ce que les moteurs aient atteint la position souhaitée. Tous les moteurs se déplacent simultanément en position horizontale si vous appuyez plus longtemps sur la touche « R ».

## Abaissement de secours en cas de panne d'électricité

En cas de panne d'électricité, vous pouvez déplacer les moteurs en position horizontale via les touches du bloc d'abaissement de secours.

Les moteurs se déplacent très lentement les uns après les autres dans un tel cas. Veuillez considérer qu'un tel abaissement de secours a pour effet de vider les piles presque intégralement et que vous devrez les remplacer par la suite (2 piles monobloc de 9 Volts).

## Consignes de sécurité

Ne montez pas sur le sommier en cours d'actionnement et en l'état relevé. Le sommier est conçu de sorte à exclure les risques de coincement ou d'écrasement en actionnement normal. Nous vous recommandons toutefois de vérifier que personne, et notamment aucun enfant, ne se trouve sous le sommier lors de son actionnement, ou puisse introduire quoi que ce soit dans le mécanisme.

Les produits Lattoflex 292-295, 392-395 et les autres modèles de construction identique sont des sommiers à intégrer dans des cadres de lit. L'utilisation est uniquement autorisée dans le respect de ces instructions et pour un usage personnel.

Ne coincez jamais les câbles, veillez à ne pas les faire passer sur des arêtes vives en les posant et à éviter leur écrasement par les éléments en mouvement du sommier. Ne remplacez les câbles de raccordement endommagés que par des pièces d'origine. Vous risquez de dégrader les longerons en les raccourcissant ou les armatures en les démontant. Ne rangez rien sous le sommier. Les moteurs risquent toujours d'endommager les parures de lit.

## Nettoyage et entretien

Votre sommier Lattoflex ne nécessite pas d'entretien particulier. Il suffit de l'essuyer de temps en temps avec un chiffon humide. N'utilisez ni solvant ou essence et renoncez aux produits caustiques ou abrasifs. Retirez toujours la fiche de la prise au secteur pendant le nettoyage. Traitez les nuisances sonores se présentant parfois au niveau des surfaces de déplacement de la fonction coulissante ou des paliers en plastique avec de la silicone ou, de préférence, avec du Flonium. Ne vous servez en aucun cas d'huiles ou de graisses disponibles dans le commerce.

## Menu de configuration

**7** Vous pouvez configurer et adapter toutes les fonctions et tous les paramètres de la télécommande selon vos besoins. Veuillez comparer cette description avec les figures de la page à déplier à l'arrière.

### Figures 1 et 2 :

Adaptation sur 6 niveaux de la luminosité de l'écran et de l'éclairage du clavier.

### Figure 3 :

Configuration de l'heure et de la date. Appuyez sur la touche de changement de menu pour accéder au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur cette touche après la configuration. Procédez aux configurations via les 4 touches fléchées. Réappuyez ensuite sur la touche de changement de menu.

### Figure 4 :

Sécurité enfant : appuyez au moins 10 secondes sans interruption sur la touche de changement de menu pour activer ou désactiver la sécurité enfant. L'état est affiché à l'écran via le pictogramme d'une serrure.

### Figure 5 :

Teach in / out : après l'actionnement de la touche de changement de menu, servez-vous des touches fléchées « droite » ou « gauche » afin de sélectionner les fonctions suivantes : Search (configurer un nouvel appareil), Remove (supprimer un appareil configuré) ou Exit (pour quitter le mode de configuration « Teach in / out »). Sélectionnez la fonction souhaitée via la touche de changement de menu et suivez les instructions s'affichant à l'écran, le cas échéant. Configuration sur le sommier motorisé : voir page 16.

Configuration sur la prise réceptrice : sélectionnez « Search » via la touche de changement de menu, placez le programmeur de la prise réceptrice sur « POS B » (configuration), sélectionnez le canal souhaité (Channel) sur le récepteur et validez via la touche de changement de menu. Le programme choisit habituellement le prochain canal libre (6 maximum). Remplacez le programmeur de la prise réceptrice sur « POS A » (Service). La mise en service est achevée de ce fait. Reportez-vous également aux instructions séparées.

### Figure 6 :

Procédez comme suit pour réinitialiser les configurations par défaut de la télécommande : sélectionnez via la touche de changement de menu et validez l'interrogation consécutive par « oui ». Vous devrez reconfigurer tous les appareils, voir page 16 : « Configuration de la télécommande ».

### Sans figure : test


Ce point est dénué de toute fonction importante.

### Figure 7 :

Info : affichage de la version du logiciel et du numéro de série. Veuillez vous munir de ces informations pour toute demande de renseignements techniques.

## Remède en cas de pannes

### Occupation des bornes

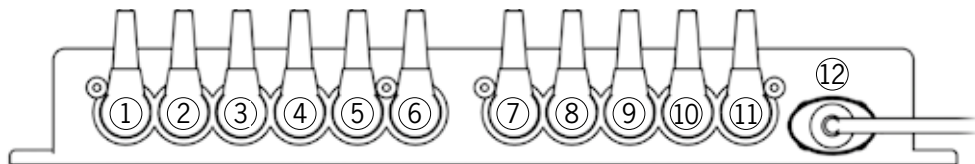

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ① Tête                  | ⑦ Bouillotte                                    |
| ② Dos                   | ⑧ Câble synchrone / interrupteur manuel à câble |
| ③ Cuisse                | ⑨ Bloc d'abaissement de secours                 |
| ④ Mollet                | ⑩ Massage                                       |
| ⑤ Relèvement des jambes | ⑪ Éclairage sous le lit                         |
| ⑥ Soutien lombaire      | ⑫ Cordon d'alimentation                         |

### Sommier ne réagit pas

Cause	Remède
Fiche de secteur retirée / ligne d'alimentation interrompue	Enfichez la fiche de secteur / vérifiez les connecteurs du bloc secteur.
Prise de courant sans courant.	Vérifiez les fusibles de la maison.
Télécommande permutée. Télécommande n'est plus configurée.	Reconfigurez la télécommande (Teach In).
Commande surchauffée en service continu. Un bip retentit lors de l'actionnement.	Patiencez env. 20 minutes jusqu'au refroidissement.

### Télécommande ne réagit pas, pas d'éclairage de l'écran et des touches

Cause	Remède
Piles déchargées.	Changer les piles, 3 x AAA.
Piles insérées dans un sens erroné.	Retirez les piles et replacez-les correctement. Veillez à la polarité correcte + et -. Voir les repères sur le boîtier.
Télécommande désactivée.	Retirez une pile et réinsérez-la.
Fernbedienung defekt.	Remplacez la télécommande.

### Panne d'un moteur

Cause	Remède
La télécommande ne peut pas sélectionner le moteur.	Reconfigurez la télécommande (Teach In).
Introduction incorrecte de la fiche de secteur dans la borne ou fiche retirée.	Enfichez la fiche <b>jusqu'à la butée</b> .
Moteur surchauffée en service continu.	Patiencez env. 20 minutes jusqu'au refroidissement.
1 borne de sortie de la commande est défectueuse.	Raccordez le moteur à une autre borne de sortie. Voir l'occupation des bornes à droite. Servez-vous de la télécommande pour sélectionner la partie respective du sommier et testez le moteur.
Moteur défectueux	Remplacement du moteur

### Abaissement de secours ne réagit pas

Cause	Remède
Fiche du bloc d'abaissement de secours n'est pas correctement reliée à la borne.	Enfichez la fiche dans la borne 9 jusqu'à la butée.
Piles du bloc d'abaissement de secours sont déchargées.	Changez les piles, 2 piles monobloc de 9 Volts (6LR61)

### Moteur du dos et/ou de la cuisse ne s'abaisse pas

Cause	Remède
Sommier rencontre une résistance et a été débranché par la sécurité de traction.	Relevez les moteurs et éliminez la résistance.

### Info

17:18		🔑	📶
RFID:	7A127		
FW-Rev:	1.0 DRC4-59M		
DBC1:	07030202 00000000		
DBC2:	00000000 0053002d		
DBC3:	00000000 0053002d		
DBC4:	00000000 0053002d		
DBC5:	00000000 0053002d		
Time:	14:52:09		

**Info**

Adressez-vous à votre distributeur Lattoflex pour peu que ces conseils ne vous permettent pas de remédier à la panne. Il est toujours utile, si la télécommande fonctionne encore, de transmettre les données du système à Lattoflex. Ces données figurent au menu de configuration (« Settings ») de l'écran « Info ». Envoyez-nous, de préférence, une photo des informations affichées. Ces informations nous permettront d'analyser les erreurs plus rapidement.

## Technische Daten

Die Motoren arbeiten mit einer Sicherheits-Kleinspannung von max. 29 V DC.	
Netzanschluss	100V – 230V, 50Hz bis 60Hz (Einphasen-Wechselstrom), max. 2,0 A
Einschaltdauer	bei maximaler Dauerlast 2min „ON“ – 18min „OFF“
Schutzklasse	IP20
Notabsenkung	2 Batterien 9V E Block
Standby	ca. 0,8 Watt
Anschlussmöglichkeiten	6 Motoren, elektrische Warmflasche, Massagesystem, LED-Unterbettbeleuchtung, Kabelhandschalter, Synchronkabel, Notabsenkungsblock

## Funk-Fernbedienung

Stromversorgung	3 Batterien 1,5V AAA, alternativ sind Akkus 1,2V einsetzbar
Funk-Frequenz	2,4 Ghz, bidirektionale Verbindung nach EN 30440-1 V1.6.1 und EN300440-2 V1.4.1. Sendeleistung <1mW
LED-Taschenlampe	0,1 Watt
Bedienbare Empfänger	Motorrahmen, max. 6 Steckdoseneempfänger
Die Produkte enthalten einen Funksender und dürfen nur im Geltungsbereich der EN 300440 betrieben werden. Ggf. sind regionale Bestimmungen einzuhalten.	

## Technical Data

The motors work with safe low voltage of max. 29V DC.	
Mains connection	100V – 230V, 50Hz to 60Hz (single phase alternating current), max. 2.0 A
Switch-on period	2 min ON at maximum continuous load, 18 min OFF
Protection class	IP20
Emergency lowering	2 x 9V E-block batteries
Standby	approx. 0.8 W
Possible connections	6 motors, electrical hot water bottle, massage system, LED underbed lighting, cable hand switch, synchronous cable, emergency lowering block

## Radio remote control

Power supply	3 x 1.5V AAA batteries or 1.2V rechargeable batteries
Radio frequency	2.4 GHz, bidirectional connection as per EN 30440-1 V1.6.1 und EN300440-2 V1.4.1, transmitting power <1mW
LED torch	0.1 W
Operable receiver	motor frame, max. 6-socket receiver
The products are fitted with a radio transmitter and may only be operated within the scope of EN 300440. Regional regulations must be heeded where applicable.	


## Caractéristiques techniques

Les moteurs fonctionnent avec un courant de sécurité à faible tension de 29 Volts C.C. maximum	
Raccord au réseau	100 V – 230 V, 50 Hz à 60Hz (courant alternatif monophasé), 2,0 A maximum
Durée de branchement	2 minutes « ON » – 18 minutes « OFF » en charge permanente maximale
Catégorie de protection	IP20
Abaissement de secours	2 piles monobloc de 9 Volts
Mode de veille	env. 0,8 Watt
Possibilités de raccordement	6 moteurs, bouillotte électrique, système de massage, LED d'éclairage sous le lit, interrupteur manuel à câble, câble synchrone, bloc d'abaissement de secours


## Télécommande radio

Alimentation en courant	3 piles de 1,5 Volts AAA, l'utilisation d'accumulateurs de 1,2 Volts est possible en alternative
Fréquence radio	2,4 Ghz, connexion bidirectionnelle selon EN 30440-1 V1.6.1 et EN 300440-2 V1.4.1, puissance d'émission < 1 mW
DEL d'éclairage	0,1 Watt
Récepteurs commandables	sommier motorisé, 6 prises réceptrices maximum
Les produits sont dotés d'un émetteur radio et leur utilisation est restreinte au domaine d'application de la norme EN 300440. Respecter les dispositions régionales, le cas échéant.	

## 6 Menüebenen - Menu levels - Niveaux du menu

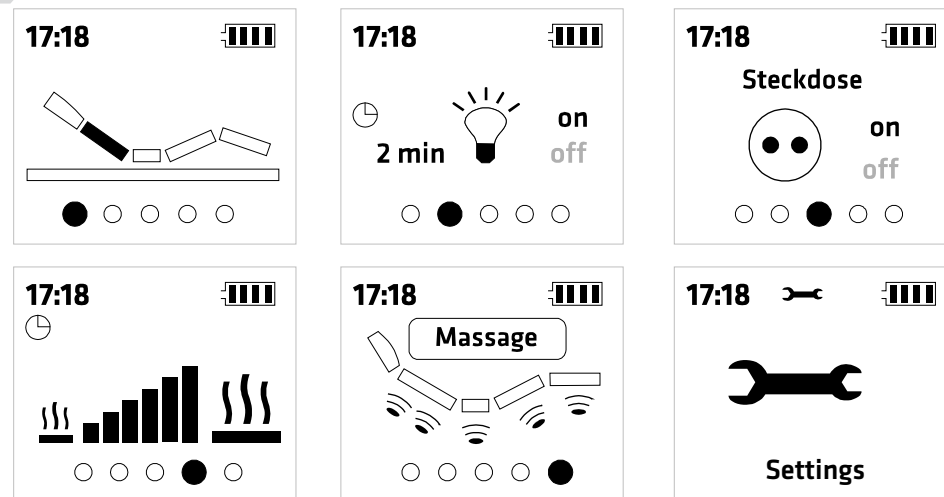

## 7 Einstellmenü - Setting Menu - Menu de configuration

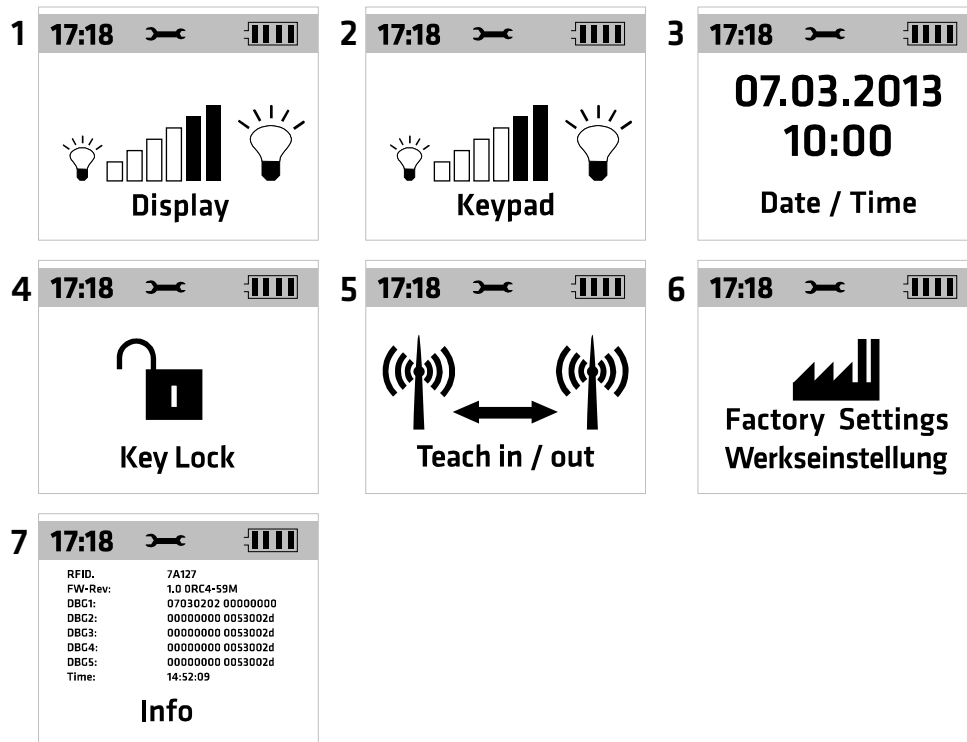

Thomas GmbH+Co. Sitz- und Liegemöbel KG · Postfach 1464 · D-27424 Bremervörde  
Tel. + 49 (0) 4761/979-0 · Fax + 49 (0) 4761/979-161 · E-Mail: info@lattoflex.com

[www.lattoflex.com](http://www.lattoflex.com)