

TRUST
CARE



LET'S STEP

Article No. LST101

SVENSKA

Ny fotpall i en modern, tilltalande design för användning i badrum. Pallen kan användas som hjälpmedel för att ta sig i och ur badkaret eller som stöd för fötterna när du tvättar dem. Let's Step har en vacker och stadig utformning för trygg och säker användning. Enkel att rengöra och väger endast 1,5 kg. Ribborna på toppen av fotpallen ger ett säkert grepp för fötterna när pallen är blöt och den är svartmålad för att lätt synas.

Varning: Är produkten defekt ska den inte användas.

Max användarvikt: Överlasta inte pallen. Högsta användarvikt är 150 kg.

Rengöring: Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit.

Dekontaminering: Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.

Reservdelar: Använd enbart originaltillbehör och originalreservdelar från Trust Care.

Tekniska data:



Material: Sits ABS, rörram aluminium, Fötter TPE

Vikt: 1,6 kg

Max användarvikt: 150 kg

Höjd: 17 cm

Färg: Sits svart, ben vita, fötter svarta

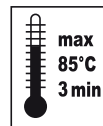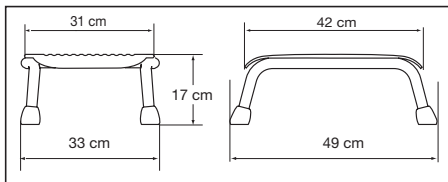

DANSK

Ny fodskammel i et moderne, attraktivt design, der kan bruges på badeværelser. Skamlen kan bruges til at komme ned i og op af badekarret eller som støtte til dine fødder, når du vasker dem.

Let's Step har et smukt og robust design og er tryk og sikker at bruge. Let at rengøre og vejer kun 1,5 kg. Ribberne øverst på fodskamlen giver et sikkert greb til fødderne, når skamlen er våd. Skamlen er også malet sort, så den er lettere at se.

Advarsel: Et defekt produkt må ikke anvendes.

Maks. brugervægt: Må ikke overbelastes. Maksimal brugervægt er 150 kg.

Rengöring: Brug rengöringsmiddel uden oplösningsmiddel, pH 5 - 9, eller 70% desinfektionssprit.

Rensning: Brug alkaline-rengöringsmiddel (pH min. 6) ved maks. 85°C i mere end 3 minutter.

Reservelele: Brug kun originalt tilbehör og originale reservelele fra Trust Care.

Tekniske data:



Materiale: Sæde i ABS, rørramme i aluminium, fødder i TPE

Vægt: 1,6 kg

Maks. brugervægt: 150 kg

Højde: 17 cm

Farve: Sorte sæde, hvidt ben, sorte fødder

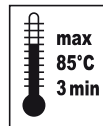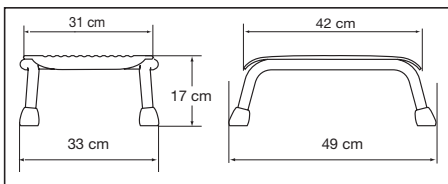

ENGLISH

A new footstool in modern, appealing design for use in bathrooms. The stool can be used as an aid to get in and out of the bathtub or as a support for your feet when you wash them.

Let's Step has a beautiful design for safe and secure use. It's easy to clean and only weighs 1.5 kg.

The ridges on the top of the footstool makes for a secure grip for your feet when the stool is wet.

Warning: A defective product must not be used.

Max user weight: Do not overload. Maximum user weight is 150 kg.

Cleaning: Use detergent without solvent, pH 5 – 9, or 70% disinfection spirit.

Decontamination: Use alkaline detergent pH min 6, in max 85°C/185°F for not more than 3 min.

Spare parts: Use only original spare parts from Trust Care.

Technical data Let's Step:



Material: Seat ABS, Tube frame aluminium, Feet TPE

Weight: 1.6 kg

Max user weight: 150 kg

Height: 17 cm

Colour: Seat black, legs white, feet black

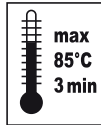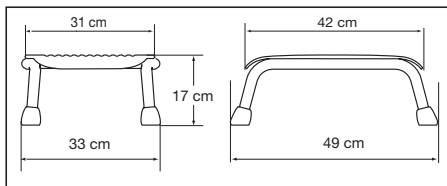

NEDERLANDS

Nieuw opstapkruijke met modern, attractief ontwerp voor gebruik in de badkamer. Dit kruijke kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het in en uit de badkuip stappen, of als voetsteun wanneer u uw voeten wast.

Let's Step heeft een mooie en robuuste vormgeving voor betrouwbaar en veilig gebruik. Eenvoudig schoon te maken en weegt slechts 1,5 kg. De ribbels bovenop dit kruijke bieden goede grip voor de voeten wanneer het kruijke nat is. Het kruijke heeft een zwarte, goed zichtbare zitting.

Waarschuwing: Een defect product mag niet worden gebruikt.

Maximaal gebruikersgewicht: Niet overbelasten. Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg.

Reiniging: Gebruik een oplossingsmiddelvrij reinigingsmiddel, pH 5 – 9, of 70% ontsmettingsalcohol.

Ontsmetting: Gebruik een alkalisch reinigingsmiddel pH min. 6 op 85°C/185°F gedurende maximaal 3 minuten.

Reserveonderdelen: Gebruik alleen originele accessoires en originele reserveonderdelen van Trust Care.

Technische gegevens:



Materiaal: Zitting ABS, buizenframe aluminium, voetjes TPE

Gewicht: 1,6 kg

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

Hoogte: 17 cm

Kleur: Zitting zwart, Poten wit, Voetjes zwart

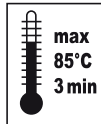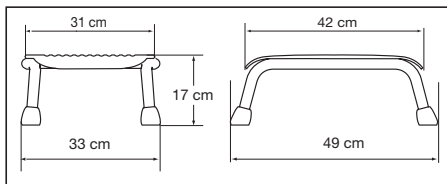

DEUTSCH

Neuer Fußhocker in modernem, ansprechendem Design für die Verwendung im Badezimmer. Der Hocker kann als Hilfsmittel zum Einstieg in die und Ausstieg aus der Badewanne oder als Abstützung für die Füße beim Waschen eingesetzt werden.

Let's Step überzeugt durch seine schöne und stabile Gestaltung und ist im Einsatz sicher und zuverlässig. Er lässt sich leicht reinigen und wiegt lediglich 1,5 kg. Die Rillen oben auf dem Fußhocker bieten den Füßen einen sicheren Halt, wenn der Hocker feucht ist. Sie sind schwarz, damit sie gut zu erkennen sind.

Warnung: Nicht auf den Duschhocker stellen!

Warnung: Defekte Produkte dürfen nicht verwendet werden.

Maximales Belastungsgewicht: Nicht überlasten! Das zulässige Höchstgewicht beträgt 150 kg.

Reinigung: Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel verwenden: pH-Wert 5 bis 9, oder 70-prozentiges Desinfektionsmittel

Sanierung: Alkalisches Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von mindestens 6 bei höchstens 85 °C für einen Zeitraum von maximal 3 Minuten verwenden.

Ersatzteile: Nur Originalzubehör und -ersatzteile von Trust Care verwenden!

Technische Daten:



Material: Sitzfläche ABS, Rohrgestell Aluminium, Füße TPE

Gewicht: 1,6 kg

Maximales Belastungsgewicht: 150 kg

Höhe: 17 cm

Farbe: Sitzfläche schwarz, Beine weiß, Füße schwarz

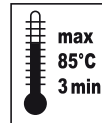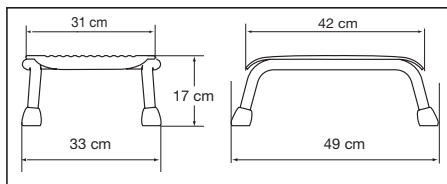

ITALIANO

Nuovo sgabello dal design moderno e accattivante, ideale per l'uso in bagno.

Lo sgabello può essere usato come ausilio per uscire dalla vasca da bagno oppure come supporto per lavare i piedi.

La struttura di Let's Step è pratica e robusta, per la massima sicurezza durante l'utilizzo. Lo sgabello è facile da pulire e pesa solamente 1,5 kg. Le nervature sulla superficie garantiscono un'ottima presa anche quando lo sgabello è bagnato. Per la massima visibilità, lo sgabello è nero.

Attenzione: Non usare mai il prodotto se è difettoso.

Portata massima: Non sovraccaricare. Portata massima 150 kg.

Pulizia: Lavare con un detersivo senza solventi con pH 5-9, oppure con alcol disinfettante al 70%.

Decontaminazione: Usare un detersivo alcalino con pH min 6 a max 85°C/185°F per non più di 3 minuti.

Ricambi: Usare solo accessori e ricambi originali Trust Care.

Scheda tecnica:



Materiale: Seduta in ABS, struttura in profilati di alluminio, piedini in TPE

Peso: 1,6 kg

Portata massima: 150 kg

Altezza: 17 cm

Colore: Seduta nera, Gambe bianche, Piedini neri

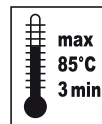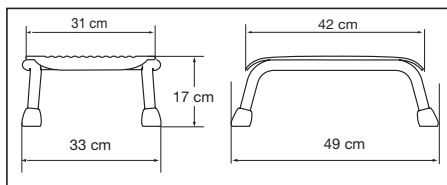

FRANÇAIS

Nouveau tabouret dans un design moderne et attirant, à utiliser dans une salle de bain ou sous la douche. Le tabouret peut aider l'utilisateur à entrer dans la baignoire ou à en sortir, ou encore servir de repose-pieds pendant la toilette.

Let's Step est à la fois esthétique et stable, pour une utilisation sûre et rassurante. Facile à nettoyer et ne pèse que 1,5 kg. Les rainures de la face supérieure du tabouret donnent une prise sécurisante sous les pieds quand le tabouret est humide. Celui-ci est peint en noir pour être facilement visible.

Avertissement: Un produit défectueux ne doit pas être utilisé.

Poids maximal de l'utilisateur: Ne pas surcharger la chaise. Le poids maximal de l'utilisateur est de 150 kg.

Nettoyage: Utiliser un détergent sans solvant, d'un pH de 5 – 9, ou un alcool de désinfection à 70 %.

Décontamination: Utiliser un détergent alcalin d'un pH minimum de 6, à une température maximale de 85 °C/185 °F et pendant 3 minutes au maximum.

Pièces de rechange: Utiliser exclusivement des accessoires d'origine et des pièces de rechange d'origine provenant de Trust Care.

Caractéristiques techniques:



Matériaux: Siège ABS, cadre tubulaire en aluminium, pieds TPE

Poids: 1,6 kg

Poids maximal de l'utilisateur: 150 kg

Hauteur: 17 cm

Couleur: Siège noirs, pieds blanc, patins noirs

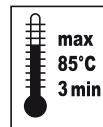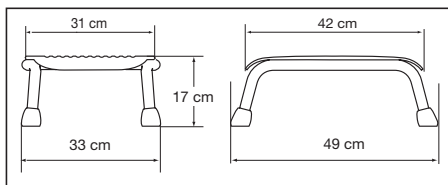

Återvinning / Genbrug / Recycling / Recycling / Recycling / Riciclaggio / Recyclage

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.

Dette produkt skal genbruges i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

This product should be recycled in accordance with national guidelines.

Dit product moet worden gerecycled in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Richtlinien recycelt werden.

Questo prodotto deve essere riciclato in conformità con le linee guida nazionali.

Ce produit doit être recyclé conformément aux directives nationales.



Garanti / Garanti / Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantie

2 års garanti mot fel i material och tillverkning.

2 års garanti mod fejl i materialer og fremstilling.

2 year warranty against defects in materials and manufacturing.

2 jaar garantie op fabricagefouten.

2 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler

2 anni di garanzia sui difetti del materiale e di fabbricazione.

2 ans de garantie contre tout défaut de matériau ou vice de fabrication.

TRUST CARE COLLECTION



LET'S ENJOY
Art no. LEN101



LET'S SING
Art no. LSG101

LET'S SHOWER
Art no. LSH101



LET'S FRISBEE
Art no. LFR101

TRUST
CARE

www.trustcare.se