

DK BRUGERVEJLEDNING
Humantechnik CM-BT2
Bluetooth Hals Slyng

Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye CM-BT2 Bluetooth headset kommunikationssystem.

Du har købt en højst avanceret og meget pålidelig elektronisk enhed. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt igennem. Her får du forklaret hvordan du gør enheden klar til brug, samt modtager informationer om alle systemets muligheder og funktioner.

Indhold

Generelle oplysninger	3
Bluetooth-radioteknologi.....	3
Indeholdt i pakken	3
Illustration af enheden.....	4
Sådan oplades »CM-BT2«.....	5
Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning	6
Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning	6
Sådan oplades »CM-BT2« via USB-porten på en computer.....	6
Driftstid for »CM-BT2«.....	6
Sådan tændes/slukkes »CM-BT2«.....	7
Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel telefon	7
Sådan frakobles »CM-BT2« telefonen.....	8
Sådan kobles »CM-BT2« igen til telefonen	9
Grundlæggende anvendelse.....	9
At foretage og besvare opkald.....	9
Sådan bruges »CM-BT2« som musikhøretelefoner sammen med telefonen.....	9
Sådan justeres lytte-lydstyrken	10
Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel computer	11
Sikkerhedslukning på halsslyngen.....	11
Tillæg	12
Sikkerhedsnoter.....	12
Vedligeholdelse og pleje	12
Garanti.....	13
Tekniske data.....	14

Generelle oplysninger

Bluetooth-radioteknologi

Bluetooth er en radioteknologi, som gør det muligt at forbinde kompatible kommunikationsenheder uden brug af kabler.

For at oprette og opretholde en forbindelse via Bluetooth, er det ikke nødvendigt at have en klar synslinje mellem enhederne (f.eks. telefon og headset).

Det er dog nødvendigt, at afstanden mellem enhederne ikke overstiger ti meter.

Forhindringer, såsom vægge eller andre elektroniske enheder, kan føre til forstyrrelser i forbindelsen, hvilket igen kan forringe kvaliteten af modtagelsen.

»CM-BT2« headset'et lever op til Bluetooth 2.1-specifikationerne, og understøtter følgende profiler:

- HSP Headset med output til samtale / musik
- HFP Håndfri trådløs telefoni
- A2DP stereo-høretelefoner
- AVRCP Audio/video fjernbetjening

Kontakt venligst producenten af dine andre enheder, for at finde ud af om de er kompatible med »CM-BT2«.

Brugen af Bluetooth-radioteknologi kan være begrænset i visse områder. Kontakt venligst dine lokale myndigheder eller tjenesteudbydere, for at få mere information.

Indeholdt i pakken

Tjek venligst, at følgende dele er inkluderet:


- »CM-BT2« headset med teleslynge
- USB-opladningskabel
- 12 V-oplader
- Strømforsyning
- Brugsvejledning
- Garantibevis

Kontakt venligst din specialforhandler eller producenten direkte, hvis der mangler dele.

Illustration af enheden

Første gang enheden anvendes

Beskrivelse af betjeningselementerne

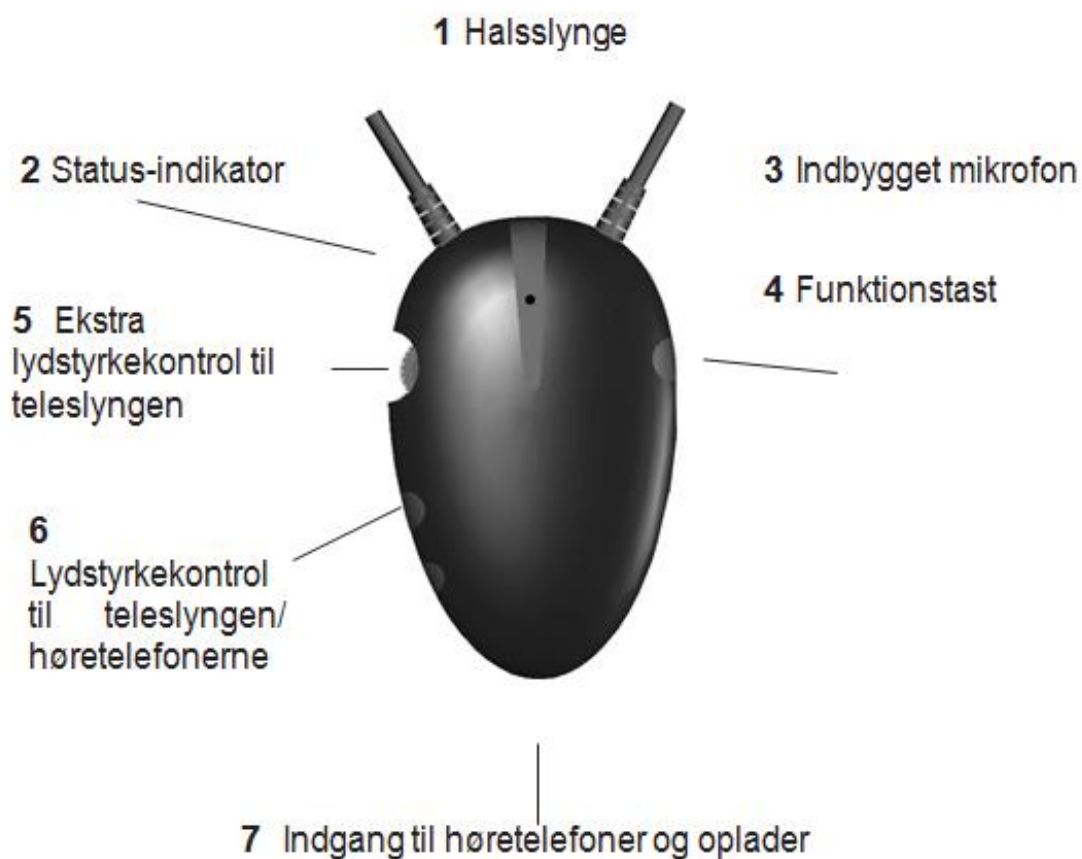

1 Hals slynge

2 Status-indikator

- Rødt lys er synligt	→	»CM-BT2« er slukket
- Rødt lys blinker langsomt	→	Advarsel: lavt batteri
- Blåt/rødt lys blinker skiftevist	→	Sammenkoblingstilstand
- Blåt lys blinker hvert 3. sekund	→	Forsøg på forbindelse
- Blåt lyst synligt i 1 sekund hver 5. sekund	→	Forbindelse oprettet med følgende enhed

3 Indbygget mikrofon

4 Funktionstast

Tænde og slukke for »CM-BT2« / Besvar opkald / afslut opkald sammenkoblingstast

5 Ekstra lydstyrkekontrol til teleslyngen

Halsslyngens lydstyrke kan øges uafhængigt ved at bruge denne drejeknap.

6 Lydstyrkekontrol til teleslyngen/ høretelefonerne

Halsslyngens/høretelefonernes lydstyrke kan indstilles ved hjælp af disse taster.

7 Indgang til høretelefoner og oplader

Denne 3.5 mm stikindgang kan bruges til at tilslutte høretelefoner eller til at oplade CM-BT2 med opladningskablet.

Sådan oplades »CM-BT2«

»CM-BT2« har et integreret, genopladeligt litium polymer-batteri. Inden første brug, anbefales det at oplade »CM-BT2« fuldt ud.



Bemærk venligst at »CM-BT2« ikke kan bruges mens den oplades


Sådan oplades »CM-BT2« via strømfor­syning

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømfor­syning.
Slut herefter strømfor­syningen til en 230V-stikkontakt.
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.



Sådan oplades »CM-BT2« via strømfor­syning

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømfor­syning.
Slut herefter strømfor­syningen til en 230V-stikkontakt.
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.

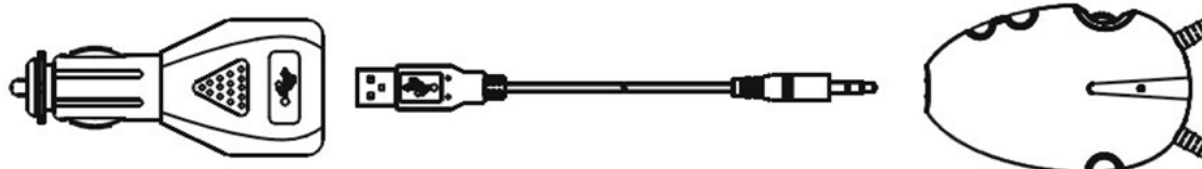

Sådan oplades »CM-BT2« via USB-porten på en computer

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til USB-porten på din computer. »CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.

Driftstid for »CM-BT2«

Under normalt brug holder »CM-BT2« til 3 timers taletid og op til 120 timers standby-tid.


Når batteriet er brugt op, vil den røde statusindikator blinke langsomt, og det er nu på tide at oplade »CM-BT2«.

Bemærk:

Driftstiden afhænger af måden hvorpå »CM-BT2« anvendes, og hvor højt lydstyrken er indstillet.

Det vil tage længere tid at oplade »CM-BT2«, hvis den ikke har været i brug i lang tid, og hvis batteriet deraf helt har afladet sig selv.

Sådan tændes/slukkes »CM-BT2«

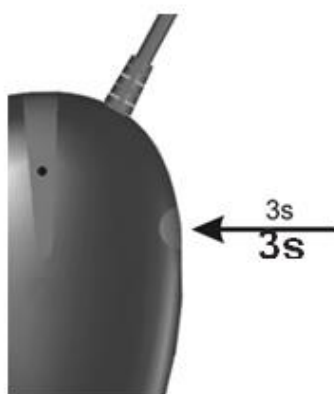


Tryk på funktionstasten **4** i ca. 3 sekunder indtil den blå statusindikator lyser op. Teleslyngen/ høretelefonerne udsender et hørbart signal for at signalere, at »CM-BT2« nu er tændt. Hvis der er en tilkoblet enhed i nærheden, vil »CM-BT2« automatisk etablere forbindelse til denne enhed.

For at slukke, tryk på funktionstasten **4** i ca. 3 sekunder indtil den røde statusindikator lyser op.

Teleslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal for at signalere at »CM-BT2« nu er slukket.

Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel telefon

Inden du kan bruge »CM-BT2« sammen med telefonen, er det nødvendigt at tilføje den til telefonens enhedsliste. For at gøre dette, skal du følge instruktionerne i telefonens brugsanvisning til hvordan man aktiverer Bluetooth.

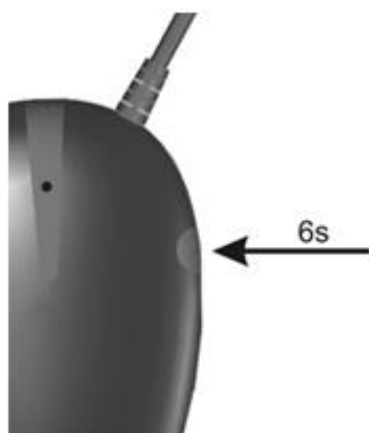

1. Sådan tændes telefonen.
2. Tryk på funktionstasten **4** på »CM-BT2« i ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde statusindikator blinker skiftevist. »CM-BT2« er i koblingstilstand i 2 minutter.

3. Aktivér Bluetooth-funktionen på telefonen, for at lede efter andre Bluetooth-enheder. Instruktioner til hvordan dette gøres, finder du i din telefons brugsvejledning.

4. Vælg »CM-BT2« fra listen over fundne enheder. Om nødvendigt, **indtast**

adgangskode „0000“ for at koble »CM-BT2« sammen med telefonen og oprette forbindelse.

5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil den blå statusindikator på »CM-BT2« blinke hurtigt fire gange, og teleslyngen og høretelefonerne vil udsende et hørbart signal.

For nogle telefoner kan det være nødvendigt at oprette forbindelsen manuelt efter at headset'et er registreret.

For flere oplysninger, se din telefons brugsvejledning. Du behøver kun at registrere »CM-BT2« på telefonen én gang. Herefter vil »CM-BT2« automatisk blive genkendt.

»CM-BT2« er forbundet med telefonen når den blå statusindikator lyser op 1 sekund ad gangen hvert 5. sekund.

»CM-BT2« vil nu blive vist i din telefons menu, som viser alle de Bluetooth-enheder, der er koblet til telefonen på nuværende tidspunkt.

Sådan frakobles »CM-BT2« telefonen

Udfør en af følgende trin for at afslutte forbindelsen mellem »CM-BT2« og telefonen (f.eks. hvis du vil slutte en anden Bluetooth-enhed til telefonen):

- Sluk for »CM-BT2« .
- Afslut forbindelsen til »CM-BT2« i telefonens Bluetooth-menu.
- Flyt »CM-BT2« mere end 10 meter væk fra telefonen.

Bemærk venligst: Du behøver ikke at slette »CM-BT2« fra telefonens liste over kompatible enheder for at afslutte forbindelsen.

Sådan kobles »CM-BT2« igen til telefonen

Den blå statusindikator blinker langsomt så snart »CM-BT2« ikke længere er forbundet med telefonen, f.eks. hvis afstanden mellem dem bliver for stor.

Så snart »CM-BT2« og telefonen igen er indenfor gensidig rækkevidde, vil »CM-BT2« automatisk tilkoble sig igen, eller dette kan gøres ved at trykke en enkelt gang på funktionstasten. Den blå statusindikator blinker i 1 sekund hvert 5. sekund, og teleslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal, når forbindelsen er genetableret.

Grundlæggende anvendelse

At foretage og besvare opkald


Sørg for, at telefonen er forbundet med »CM-BT2«, når du skal foretage opkald. Foretag opkaldet som normalt.

For at foretage et opkald, tryk kort på funktionstasten **4**.

For at afslutte opkaldet, brug telefonens knapper eller tryk på funktionstasten på »CM-BT2«.

Sådan bruges »CM-BT2« som musikhøretelefoner sammen med telefonen

Hvis din telefon er udstyret med en integreret musikafspiller, kan du også bruge »CM-BT2« til at høre musik. Så snart et indkommende opkald registreres, vil musikken blive afbrudt, »CM-BT2« vil ringe, og du kan besvare opkaldet ved at trykke på funktionstasten **4**. Musikken vil fortsætte med at spille, når du har afsluttet opkaldet.

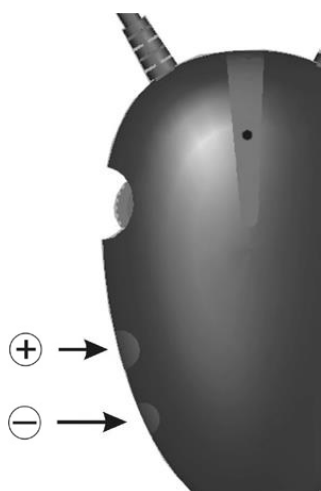


Sådan justeres lytte-lydstyrken

Tryk gentagende gange på „+“-knappen på lydstyrkeknapperne **6** for at skrue op for lyden.

Halslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal når den maksimale lydstyrke er nået.

Tryk gentagende gange på „-“-knappen på lydstyrkeknapperne **6** for at skrue ned for lyden.

Halslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal når den laveste lydstyrke er nået.

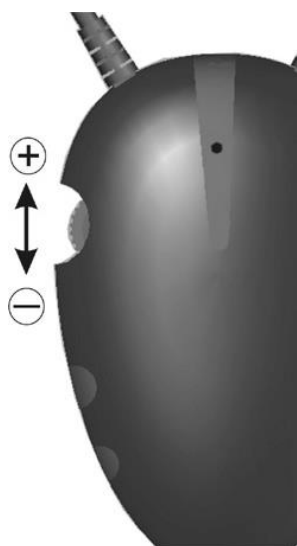

»CM-BT2« har en ekstra lydstyrkekontrol **5** til uafhængigt at skrue op for halslyngens lydstyrke. Brug drejknappen på den ekstra lydstyrkekontrol til at indstille lydstyrken.

Den ekstra lydstyrkekontrol virker kun med halslyngen, og har ingen effekt på høretelefonernes output.




Inden du bruger »CM-BT2«, bør du altid sikre dig, at lydstyrken er indstillet til et behageligt niveau for at undgå enhver form for skade som følge af høj lydstyrke. Indstil altid lydstyrken til et lavt niveau.

Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel computer

1. Tænd for din computer, og sørg for at Bluetooth-hardwaren på din computer er aktiveret. Tænd for »CM-BT2«
2. Tryk på funktionstasten 4 på »CM-BT2« i ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde statusindikator blinker skiftevis. »CM-BT2« forbliver i koblingstilstand i 2 minutter.
3. Kør Bluetooth-softwaren på din computer. Følg software- instruktionerne for at koble »CM-BT2« til.
4. Vælg »CM-BT2« fra listen over registrerede enheder. Om nødvendigt, indtast adgangskoden „0000“ for at koble »CM-BT2« sammen med telefonen og etablere en forbindelse.
5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil den blå statusindikator på »CM-BT2« blinke hurtigt fire gange, og teleslyngen og høretelefonerne vil udsende et hørbart signal.

Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport i tilfælde af mulige problemer med at bruge denne enhed sammen med din PC.

Sikkerhedslukning på halsslyngen

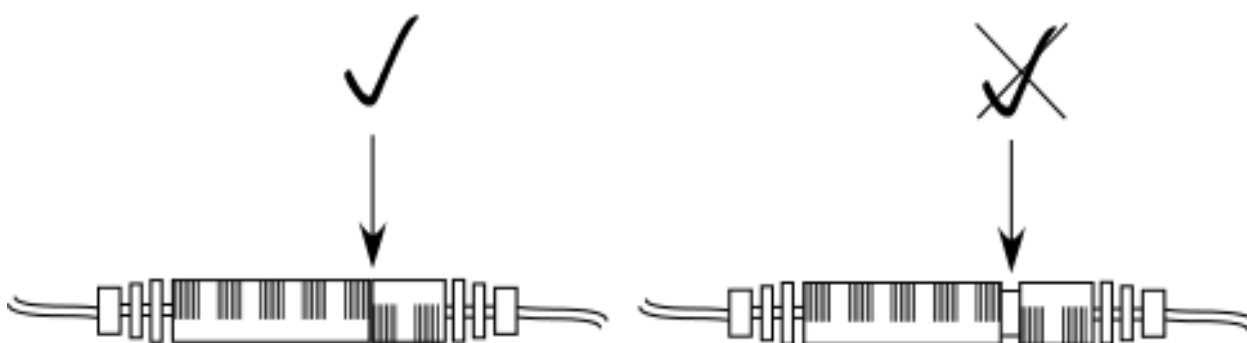

Sørg for, at sikkerhedslukningen på halsslyngen er fuldstændig lukket, for at sikre, at den fungerer korrekt.

Tillæg

Sikkerhedsnoter

»CM-BT2« er blevet produceret under brug af den nyeste teknologi og i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedsstandarder.

Vær venligst opmærksom på følgende sikkerhedsinstruktioner:

- Enheden må aldrig udsættes for følgende:
 - Varmekilder
 - Direkte sollys
 - Fugt
- Beskyt enheden mod kontakt med vand, støv, skrappe væsker og damp.
- Forbindelsestikket må kun sluttes til den passende indgang.
- Anvend kun godkendt tilbehør.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer i kommunikationssystemet, hverken af teknisk eller ikke-teknisk karakter.
- »CM-BT2«-kommunikationssystemet indeholder små dele som nemt kan sluges. Uegnet for børn under 3 år.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for ejendomsskade eller personskader som følge af ukorrekt brug eller misbrug af enheden.

Vedligeholdelse og pleje

»CM-BT2« behøver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan du tørre den af med en blød, fugtig klud. Der må aldrig bruges alkohol, fortyndervæske eller organiske opløsningsmidler.

Anbring ikke »CM-BT2« et sted, hvor den vil blive udsat for skarpt sollys over længere tid.

Herudover er det nødvendigt at beskytte den mod overdreven varme, fugt samt stærke mekaniske stød.

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet imod vandsprøjt. Beholdere med vand må ikke placeres på eller i nærheden af enheden, f.eks. blomstervaser. Det samme gælder for åben ild, såsom tændte stearinlys.



Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske enheder (gælder for landene i den Europæiske og andre europæiske lande med et separat affaldssorteringssystem).

■ Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, at dette produkt ikke må betragtes som almindelig husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation, der modtager elektriske og elektroniske enheder.

Du beskytter miljøet og dine medmenneskers helbred gennem korrekt bortskaffelse af dette produkt. Miljø og helbred bringes i fare ved forkert bortskaffelse af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at begrænse forbruget af råmaterialer. Du kan få flere informationer om hvordan dette produkt genbruges af din lokale kommune, skraldevæsen eller forhandler.



Genopladeligt batteri

Det genopladelige batteri, der følger med enheden, kan genbruges.

Bortskaf dette genopladelige batteri i receptacles designet til dette

formål, eller returnere det til en detailforretning. Bortskaf kun de batterier, der er blevet helt afladede for at sikre beskyttelse af miljøet.

Garanti

Dette produkt er meget sikkert at bruge og yder en yderst pålidelig service. Skulle der alligevel ske driftsforstyrrelser til trods for at enheden er indstillet og anvendes korrekt, kontakt da venligst din forhandler. Garantien dækker reparation af produktet samt tilbagesendelse til dig uden omkostninger. Det er af afgørende vigtighed, at du sender produktet tilbage i den originale emballage, så smid den endelig ikke ud. Garantien dækker ikke skader som er opstået grundet ukorrekt brug eller forsøg på at reparere enheden af folk, som ikke er autoriseret til det (enhedens forsegling er brudt). Reparationer udføres kun under garantien hvis garantibeviset indleveres sammen med en kopi af sælgers faktura/kvittering fra kassen. **Husk under alle omstændigheder, altid at angive produktnummeret.**

Tekniske data

Modelnavn:	CM-BT2 headset
Bluetooth-menuen.	Bluetooth-radioteknologi 2,1
Frekvensbånd:	2,4 GHz ISM-Spectrum
Frekvenshop 79 kanaler	GFSK (gaussisk Frequency shift keying)

Bluetooth profiler:	<ul style="list-style-type: none">• HSP Headset with udgang for Samtale / musik• HFP Håndfri Trådløs Telefoni• A2DP stereo-høretelefoner hovedtelefoner• AVRCP Audio / video-fjernbetjening
---------------------	--

Rækkevidde:	10m
Standby-tid:	op til 120 timer
Taletid:	op til 3 timer med teleslynge op til 13 timer med hovedtelefoner
Opladningstid:	3 timer Vægt: 49 g Mål: 48 mm x 76 mm

Denne telefon opfylder følgende EU-direktiver:

2002/95 / EG RoHS-direktivet

2002/96 / EG WEEE-direktiv

1999/5 / EG R & TTE direktivets

2004/108 / EG EMC-direktiv

2006/95 / EG Lavspændingsdirektivet



Overholdelse af direktiverne, der er anført ovenfor, bekræftes af CE-mærke på telefonen.

Erklæring om overholdelse af CE direktiver findes på internettet på www.humantechnik.com.

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.