


LEJRELET

PAD HIGH

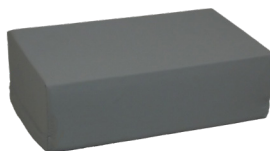

MANUAL

DANSK

Anvendelse



LEJRELET Pad High er en rektangulær pude med en blanding af polyurethane skum og viscoelastisk skum. Den benyttes i flere forskellige lejringsituationer og ved nedre hygiejne.

LEJRELET Pad High har en stor understøttelsesflade, som i kombination med det trykaflastende skum giver god trykaflastning og komfort for den sengeliggende.


Pad High kan benyttes alene eller i kombination med andre LEJRELET produkter.

Benyt LEJRELET Pad High til f.eks.:


- Understøttelse af ben ved sideleje
- Understøttelse af ben i forbindelse med nedre hygiejne
- Understøttelse af arm i sideleje
- Aflastning af hæle, ben og lænd

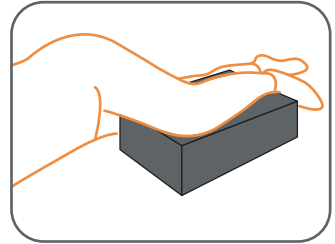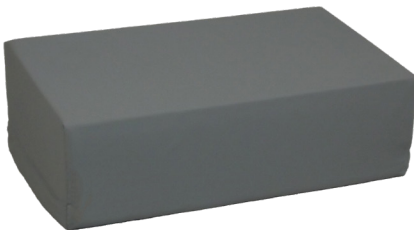


Understøttelse af ben ved sideleje

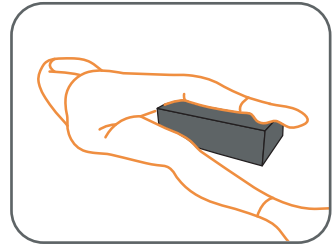

Understøttelse af ben i forbindelse med nedre hygiejne

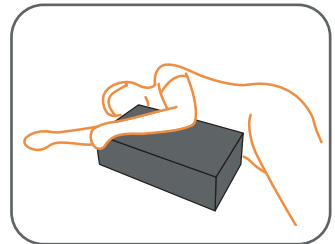

Understøttelse af arm i sideleje

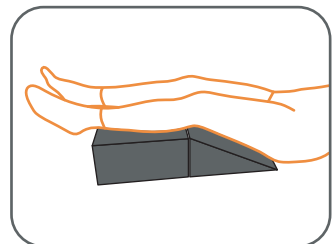

Aflastning af hæle, ben og lænd



DANSK

Teknisk information

Fyld:

LEJRELET Pad High er tryksårsforebyggende og fremstillet med en kerne af brandsikker polyurethane skum belagt med 2 cm flammehæmmende visco-elastisk skum på oversiden.

Denne kombination giver puderne en god trykafledning og komfort.

Størrelse: H 15 x B 30 x L 50

Varenr.: 5000003

HMI-nr.: 71865

Vægt: 800 g

Betræk

- Vandtæt
- Åndbart
- Strækbar i to retninger
- Antibakteriel
- Støvmide-tæt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, class 1
- Brandhæmmende

Vaske- og rengøringsanvisning

Kan aftørres med sæbevand og disinficerende væsker eller overhældes med kogende vand.



Vaskes i hånden



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Tåler ikke rens



Tåler ikke blegning

Øvrige symboler



Advarsel



Varenummer



Produktionsår- og måned



Fabrikantens navn



CE-mærkning:
Produktet opfylder alle krav i
hht. Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

SVENSKA

Användning



LEJRELET Pad High är en rektangulär kudde med en blandning av polyuretanskum och viscoelastiskt skum. Den kan användas i flera olika positionerings-situationer och vid nedre hygien.

LEJRELET Pad High har en stor stödyta som i kombination med det tryckavlastande skummet ger god tryckavlastning samt hög komfort för den som är sängliggande.


Pad High kan användas enskilt eller i kombination med andra LEJRELET produkter.

Använd LEJRELET Pad High till t.ex.:


- Stöd under ben vid sidoläge
- Stöd under ben i samband med nedre hygien
- Stöd under arm i sidoläge
- Avlastning av hälar, ben och korsrygg

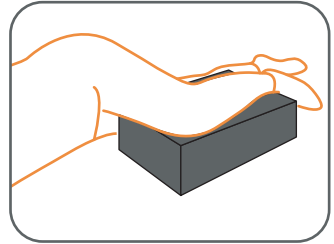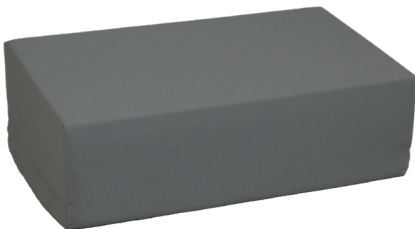


Stöd under ben vid sidoläge

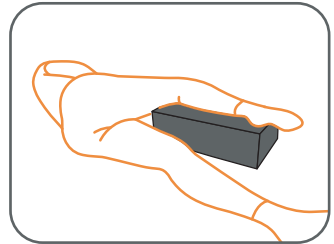

Stöd under ben i samband med nedre hygien

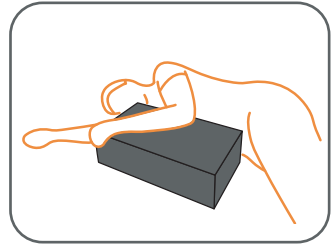

Stöd under arm i sidoläge

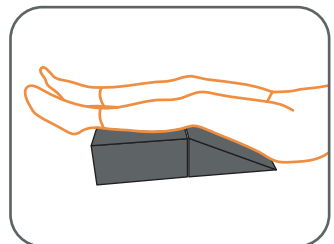

Avlastning av hälar, ben och korsrygg



SVENSKA

Teknisk information

Fyllning:

LEJRELET Pad High förebygger trycksår och tillverkas med en kärna av brandsäker polyuretanskum med 2 cm beläggning av flamskyddande viscoelastiskt skum på ovsidan.

Denna kombination ger kuddarna en bra tryckavlastning och komfort.

Storlek: H 15 x B 30 x L 50

Art nr.: 5000003

Vikt: 800 g

Överdrag

- Vattentätt
- Andningsbart
- Sträckbart i två riktningar
- Motverkar bakterier
- Dammkvalstertätt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, klass 1
- Brandhämmande

Tvätt- och rengöringsanvisning

Kan avtorkas med tvällösning och desinficerande vätskor eller avsköljas med kokande vatten.



Handtvätt



Får ej torktumlas



Får ej strykas



Ej kemtvätt



Ej blekmedel

Andra symboler



Varning



Artikelnummer



Produktionsår och månad



Tillverkarens namn



CE-märkning:
Produkten uppfyller alla krav i
enlighet med Medical Device
Regulation (EU) 2017/745

ENGLISH

Application



LEJRELET Pad High is a rectangular cushion made from a mixture of polyurethane foam and viscoelastic foam. It is used for various positioning situations and during lower hygiene procedures for the bedridden patient.

LEJRELET Pad High has a large support surface which in combination with viscoelastic foam offers good pressure relief and comfort for the bedridden patient.


Pad High can be used alone or in combination with other LEJRELET products.

Examples for use of LEJRELET Pad High:


- Support of leg in lateral position
- Support of leg during lower hygiene procedures
- Support of arm in lateral position
- Support of legs and pressure relief of heels

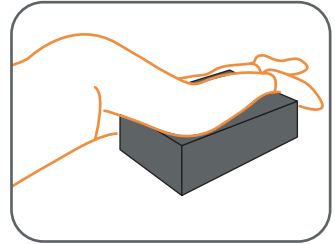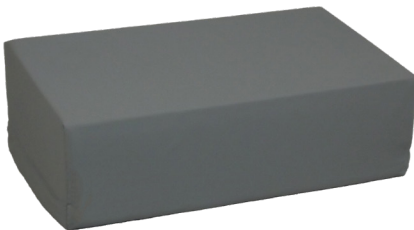


Support of leg in lateral position

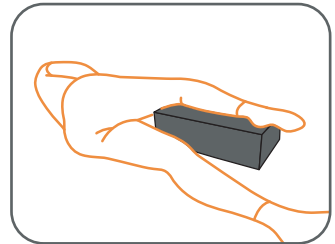

Support of leg during lower hygiene situations

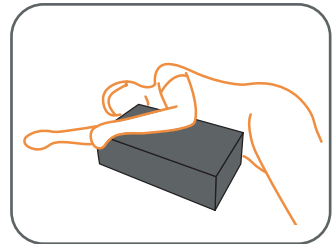

Support of arm in lateral position

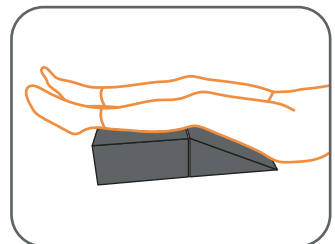

Support of legs and pressure relief of heels



ENGLISH

Technical information

Filling:

LEJRELET Pad High is pressure relieving and made with a core of polyurethane foam covered with 2 cm of flameretardant viscoelastic foam on the top.

This combination means, that the cushions are firm and supportive, yet they are still flexible and provide effective pressure relief and comfort.

Size: H 15 x W 30 x L 50

Item no.: 5000003

Weight: 800 g

Fabric

- Waterproof
- Watervapour permeable
- Two way stretch
- Anti-bacteria treated
- Tight to house dust mite
- Biocompatible
- Oeko-TEX, class 1
- Fire-retardant to crib 5

Washing and cleaning

Can be wiped with mild soap and disinfectant fluids or showered with boiling water.



Hand wash



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean



Do not bleach

Other symbols



Warning



Item no.



Year and month of manufacture



Name of manufacturer



CE marking:
The product complies with the
Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

NEDERLANDS



Gebruik

LEJRELET Pad High is een rechthoekig kussen dat wordt gebruikt voor stabilisatie, verlichting en positionering.


Pad High is gebaseerd op een anatomische weergave van de thorax en het bekken. Als Pad High bijvoorbeeld wordt gebruikt om het been in de laterale positie te ondersteunen, zorgt u ervoor dat de heupflexie neutraal wordt gehouden. Dat wil zeggen: u voorkomt lumbale rotatie, compressie in het heupgewricht en het uitrekken van het gewrichtskapsel.

Gebruik LEJRELET Pad High naar bijv.:


- Ondersteuning van het been in de laterale positie
- Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne
- Ondersteuning van de arm in de laterale positie
- Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen

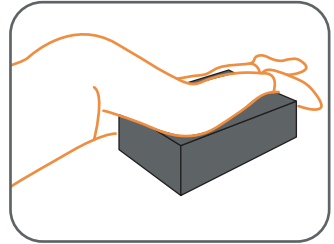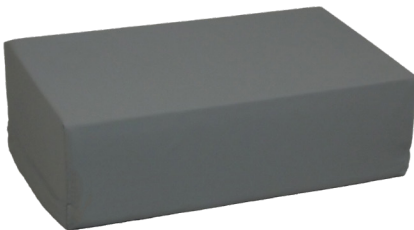


Ondersteuning van het been in de laterale positie

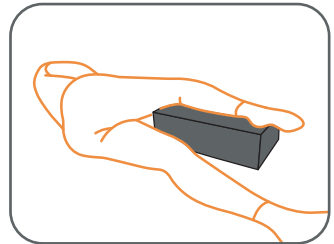

Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne

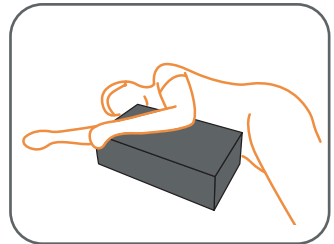

Ondersteuning van de arm in de laterale positie

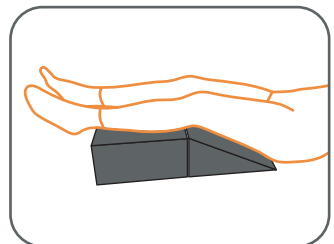

Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen



NEDERLANDS

Technische informatie

Vulling:

LEJRELET Pad High zijn gemaakt met een kern van polyurethaanschuim bedekt met 2 cm visco-elastisch schuim.

Deze combinatie maakt de kussens stevig en ondersteunend, maar ze zijn nog steeds flexibel en zorgen voor effectieve drukvermindering en comfort.

Afmeting: H 15 x B 30 x L 50

Item no.: 5000003

Gewicht: 800 g

Stof

- Waterbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Antibacterieel behandeld
- Huisstofmijt dicht
- Bio compatibel
- Öko-TEX, klasse 1
- Brandvertragend tot Crib 5

Wassen en reinigen

LEJRELET Pad High kan worden afgenomen met milde zeep, desinfectantia of overgoten worden met kokend water.



Handwas



Niet drogen in een droogtrommel



Niet strijken



Niet droog reinigen



Niet bleken

Andere symbolen



Waarschuwing



Item no.



Productiejaar en maand



Naam van de fabrikant



CE-keurmerk:
Het product voldoet aan de
Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

FRANÇAIS

Utilisation



LEJRELET Pad High est un coussin rectangulaire rembourré d'un mélange de mousses polyuréthane et viscoélastique. Il est utile dans plusieurs situations de positionnement et pour faire la toilette intime.

LEJRELET Pad High offre une grande surface de contact qui, avec le rembourrage en mousse, soulage efficacement les points de pression et procure confort à la personne alitée.


Pad High peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres produits LEJRELET.

LEJRELET Pad High est entre autres efficace pour:


- Soutien des jambes en décubitus latéral
- Soutien des jambes lors de la toilette intime
- Soutien des bras en décubitus latéral
- Soulagement des talons, des jambes, et des reins

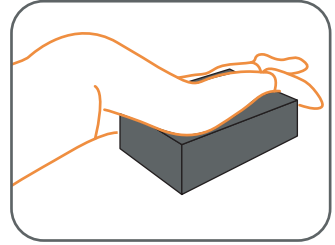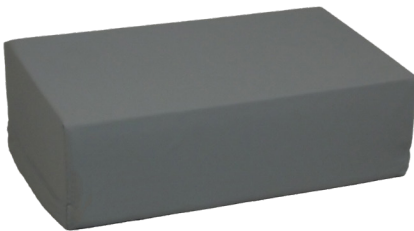


Soutien des jambes en décubitus latéral

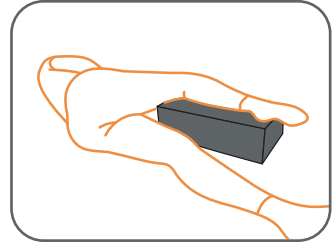

Soutien des jambes lors de la toilette intime

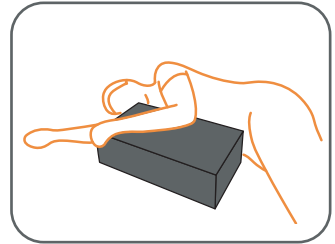

Soutien des bras en décubitus latéral

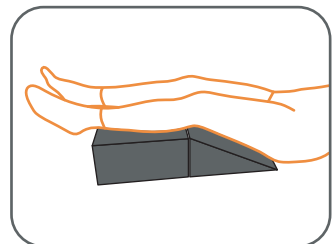

Soulagement des talons, des jambes, et des reins



FRANÇAIS

Informations techniques

Rembourrage

LEJRELET Wedge est rembourré avec un cœur de mousse polyuréthane incombustible, recouvert par de 2 cm de mousse viscoélastique ignifuge sur la partie supérieure. Il prévient la formation d'escarres.

Grâce à cette combinaison de matériaux, le coussin soulage les points de pression et apporte confort.

Instruction de lavage et de nettoyage

Peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse, des liquides désinfectants ou de l'eau bouillante.



Lavage à la main



Séchage en machine interdit



Repassage interdit



Nettoyage à sec interdit



Aucun type de blanchiment possible

Dimensions: H 15 x B 30 x L 50

Référence catalogue: 5000003

Poids: 800 g

Housse

- Imperméable
- Perméable à l'air
- Extensible dans deux directions
- Antibactérienne
- Traitée anti-acariens
- Biocompatible
- Oeko-Tex, classe 1
- Ignifugée

Autres symboles



Avertissement



Référence catalogue



Date de fabrication



Fabricant



Marquage CE:

Le produit répond à toutes les exigences conformément au règlement (UE) relatif aux dispositifs médicaux 2017/745

Nederland:

Vendlet B.V.
Einsteinweg 11H-J
3225LT Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)85-1300710
vendlet@vendlet.nl
www.vendlet.nl

Danmark:

Vendlet ApS
Egelund 33
6200 Aabenraa
Tel.: +45 9631 0050
vendlet@vendlet.dk
www.vendlet.dk