


LEJRELET

PAD LOW

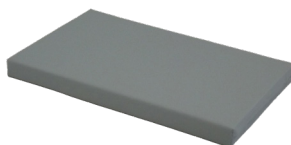

MANUAL

DANSK

Anvendelse



LEJRELET Pad Low er lavet af trykaflastende skum. Dette gør Pad Low ideel til trykaflastning og støtte i en lang række lejringsituationer.

Pad Low kan benyttes flad, sammenrullet, bøjet og foldet.


Pad Low kan benyttes alene eller i kombination med andre LEJRELET produkter.

Benyt LEJRELET Pad Low til f.eks.:


- Understøttelse af arm/hånd
- Aflastning af hæle
- Trykaflastning mellem knæ ved sideleje
- Sammenrullet, bøjet og foldet f.eks. som abduktionskile

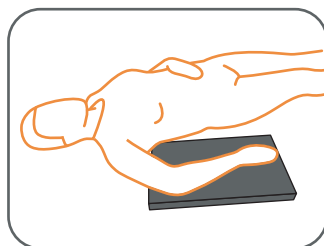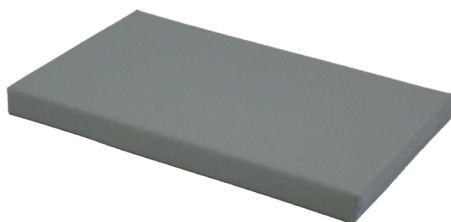


Understøttelse af arm/hånd

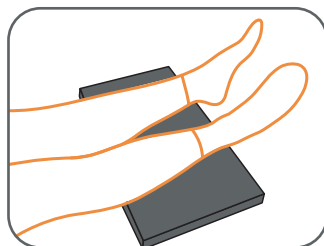

Aflastning af hæle

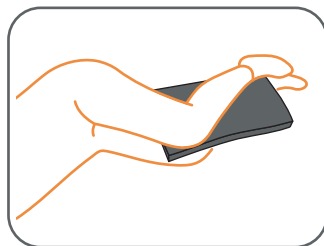

Trykaflastning mellem knæ ved sideleje

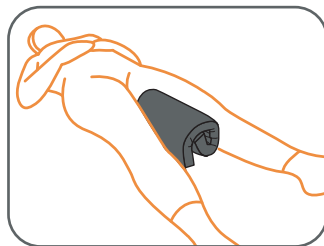

Sammenrullet, bøjet og foldet f.eks. som abduktionskile



DANSK

Teknisk information

Fyld:

LEJRELET Pad Low er tryksårsforebyggende og fremstillet af viscoelastisk skum.

Størrelse: H 4 x B 30 x L 50

Varenr.: 5000004

HMI-nr.: 71866

Vægt: 350 g

Betræk

- Vandtæt
- Åndbart
- Strækbar i to retninger
- Antibakteriel
- Støvmide-tæt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, class 1
- Brandhæmmende



Vær opmærksom på at den senge-liggende lejres således, at luftvejene holdes fri.

Vaske- og rengøringsanvisning

Kan aftørres med sæbevand og desinficerende væsker eller overhældes med kogende vand.



Vaskes i hånden



Må ikke tørretumbles



Må ikke stryges



Tåler ikke rens



Tåler ikke blegning

Øvrige symboler



Advarsel



Varenummer



Produktionsår- og måned



Fabrikantens navn



CE-mærkning:
Produktet opfylder alle krav i
hht. Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

SVENSKA

Användning



LEJRELET Pad Low är tillverkad av tryckavlastande skum. Detta gör Pad Low idealisk för tryckavlastning och stöd i en lång rad positioneringssituationer.

Pad Low kan användas plant, ihoprullad, böjd och vikt.


Pad Low kan användas enskilt eller i kombination med andra LEJRELET produkter.

Använd LEJRELET Pad Low till t.ex.:


- Stöd under arm/hand
- Avlastning av hälar
- Tryckavlastning mellan knäna vid sidoläge
- Ihoprullad, böjd och vikt t.ex. som abduktionskile

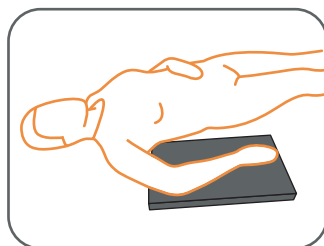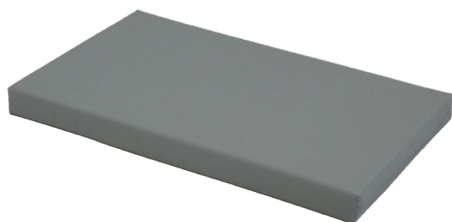


Stöd under arm/hand

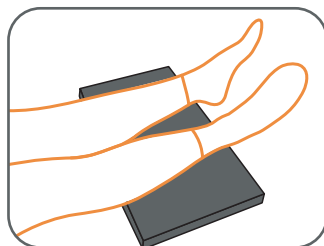

Avlastning av hälar

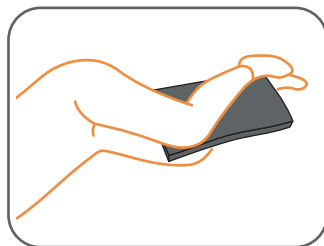

Tryckavlastning mellan knäna vid sidoläge

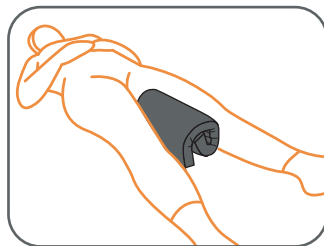

Ihoprullad, böjd och vikt t.ex. som abduktionskile



SVENSKA

Teknisk information

Fyllning:

LEJRELET Pad Low är trycksårsförebyggande och tillverkad av viscoelastiskt skum.

Storlek: H 4 x B 30 x L 50

Art nr.: 5000004

Vikt: 350 g

Överdrag

- Vattentätt
- Andningsbart
- Sträckbart i två riktningar
- Motverkar bakterier
- Dammkvalsterfritt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, klass 1
- Brandhämmande



Var uppmärksam på att den sängliggande positioneras så att luftvägarna hålls fria.

Tvätt- och rengöringsanvisning

Kan avtorkas med tvållösning och desinficerande vätskor eller avsköljas med kokande vatten.



Handtvätt



Får ej torktumlas



Får ej strykas



Ej kemtvätt



Ej blekmedel

Andra symboler



Varning



Artikelnummer



Produktionsår och månad



Tillverkarens namn



CE-märkning:
Produkten uppfyller alla krav i
enlighet med Medical Device
Regulation (EU) 2017/745

ENGLISH

Application



LEJRELET Pad Low is made from pressure relieving viscoelastic foam. This makes Pad Low ideal for pressure relief and support in several different positioning situations.

Pad Low can be used flat, bent, folded or coiled.


Pad Low can be used alone or in combination with other LEJRELET products.

Examples for use of LEJRELET Pad Low:


- Support of arm/hand
- Pressure relief of heels
- Pressure relief between knees/ankles
- Coiled, bent or folded i.e. as abduction wedge

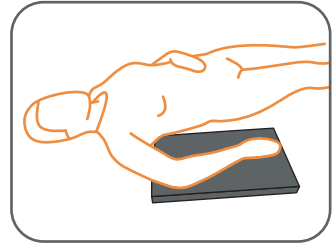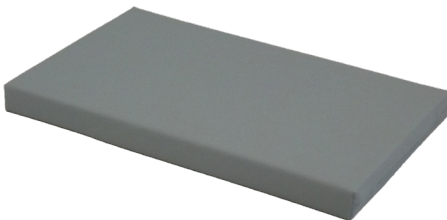


Support of arm/hand

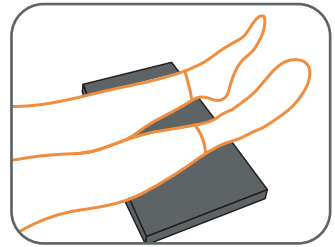

Pressure relief of heel

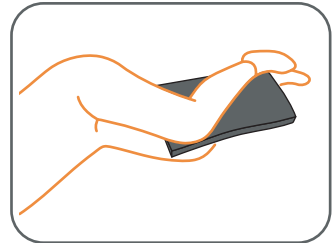

Pressure relief between knees in lateral position

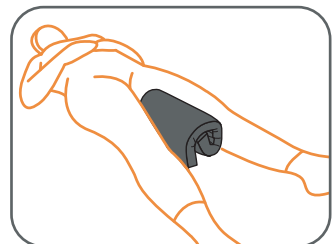

Coiled as abduction wedge



ENGLISH

Technical information

Filling:

LEJRELET Pad Low is made of visco-elastic foam preventing decubitus.

Size: H 4 x W 30 x L 50

Item no.: 5000004

Weight: 350 g

Fabric

- Waterproof
- Watervapour permeable
- Two way stretch
- Anti-bacteria treated
- Tight to house dust mite
- Biocompatible
- Oeko-TEX, class 1
- Fire-retardant to crib 5



Be aware that the patient is positioned such that airways are kept clear.

Washing and cleaning

Can be wiped with mild soap and disinfectant fluids or showered with boiling water.



Hand wash



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean



Do not bleach

Other symbols



Warning



Item no.



Year and month of manufacture



Name of manufacturer



CE marking:
The product complies with the
Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

NEDERLANDS

Gebruik


LEJRELET Pad Low is gemaakt van visco-elastisch schuim en daardoor eenvoudig te vormen en aan te passen aan de gebruiker. Dit zorgt voor optimale drukverlichting en aanpassing in situaties waar extra stabiliteit en ondersteuning nodig zijn.

Pad Low kan in verschillende situaties gebruikt worden voor positionering en drukverlichting. Pad Low kan ook worden benut om de gebruiker te beschermen tegen harde oppervlakken of scherpe randen, bij bijvoorbeeld transfers.


Pad Low kan zoals plat, opgerold, gebogen of gevouwen gebruikt worden.

Gebruik LEJRELET Pad Low naar bijv.:


- Ondersteuning van arm/hand
- Ondersteuning van onderbeen of hiel(en)
- Drukverlaging voor hielen
- Drukverlaging tussen de knieën in laterale positie
- Opgerold als abductie wig

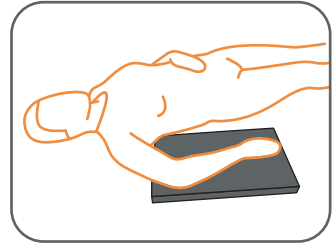



Ondersteuning van arm/ hand

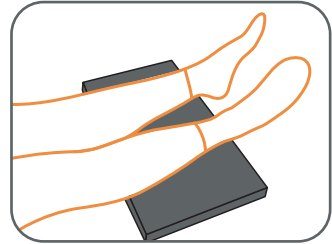

Drukverlaging voor hielen

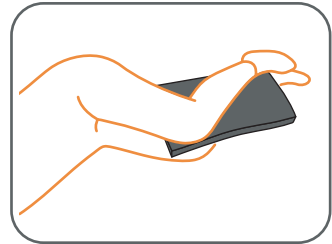

Drukverlaging tussen de knieën in laterale positie

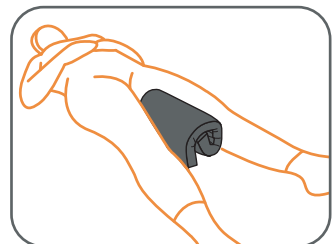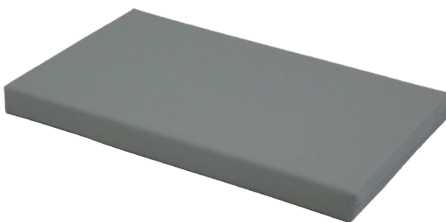

Opgerold als abductie wig

NEDERLANDS

Technische informatie

Vulling:

LEJRELET Pad Low is gevuld met visco-elastische schuimkorrels ter voorkoming van decubitus.

Afmeting: H 4 x B 30 x L 50

Item no.: 5000004

Gewicht: 350 g

Stof

- Waterbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Antibacterieel behandeld
- Huisstofmijt dicht
- Bio compatibel
- Öko-Tex, klasse 1
- Brandvertragend tot Crib 5



Houd er rekening mee dat de patiënt zo is gepositioneerd dat de luchtwegen vrij worden gehouden.

Wassen en reinigen

LEJRELET Pad Low kan worden afgenomen met milde zeep, desinfectantia of overgoten worden met kokend water.



Handwas



Niet drogen in een droogtrommel



Niet strijken



Niet droog reinigen



Niet bleken

Andere symbolen



Waarschuwing



Item no.



Productiejaar en maand



Naam van de fabrikant



CE-keurmerk:
Het product voldoet aan de
Medical Device Regulation
(EU) 2017/745

FRANÇAIS

Utilisation



LEJRELET Pad Low est fait de mousse permettant de soulager les points de pression. Il est ainsi idéal pour procurer un bon soutien dans un grand nombre de positionnements.

Pad Low peut être utilisé à plat, enroulé sur lui-même, courbé ou plié.


Pad Low peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres produits LEJRELET.

LEJRELET Pad Low est entre autres efficace pour:


- Soutien du bras ou de la main
- Soutien des jambes et soulagement des talons
- En décubitus latéral, soulagement de la pression entre les genoux
- Roulé sur lui-même, courbé ou plié, comme cale d'abduction

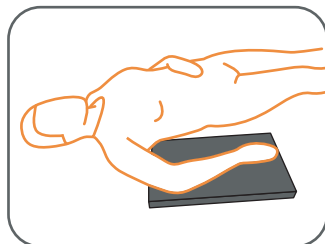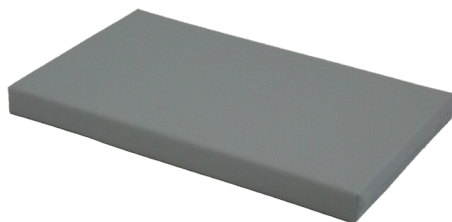


Soutien du bras ou de la main

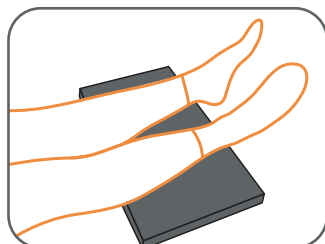

Soutien des jambes et soulagement des talons

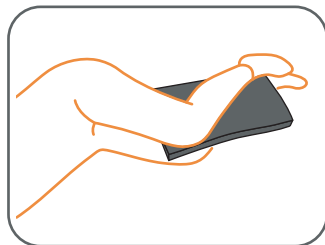

En décubitus latéral, soulagement de la pression entre les genoux

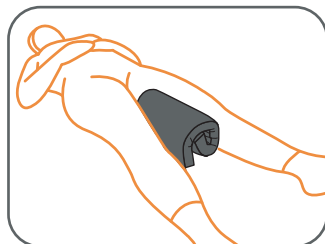

Roulé sur lui-même, courbé ou plié, comme cale d'abduction

FRANÇAIS

Informations techniques

Rembourrage

LEJRELET Pad Low est rembourré de mousse viscoélastique, et prévient la formation d'escarres.

Dimensions: H 4 x B 30 x L 50

Référence catalogue: 5000004

Poids: 350 g

Housse

- Imperméable
- Perméable à l'air
- Extensible dans deux directions
- Antibactérienne
- Traitée anti-acariens
- Biocompatible
- Oeko-Tex, classe 1
- Ignifugée



Attention, la personne alitée doit être positionnée sans blocage des voies respiratoires.

Instruction de lavage et de nettoyage

Peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse, des liquides désinfectants ou de l'eau bouillante.



Lavage à la main



Séchage en machine interdit



Repassage interdit



Nettoyage à sec interdit



Aucun type de blanchiment possible

Autres symboles



Avertissement



Référence catalogue



Date de fabrication



Fabricant



Marquage CE:

Le produit répond à toutes les exigences conformément au règlement (UE) relatif aux dispositifs médicaux 2017/745

Nederland:

Vendlet B.V.
Einsteinweg 11H-J
3225LT Hellevoetsluis
Tel. +31 (0)85-1300710
vendlet@vendlet.nl
www.vendlet.nl

Danmark:

Vendlet ApS
Egelund 33
6200 Aabenraa
Tel.: +45 9631 0050
vendlet@vendlet.dk
www.vendlet.dk



Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright 2022 Vendlet ApS