

RC-A

Fjernbetjening



Brugervejledning

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Introduktion



Denne brugervejledning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye RC-A fjernbetjening. Læs brugervejledningen grundigt, inklusiv afsnittet om advarsler. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af din nye fjernbetjening.

Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af fjernbetjeningen.

Retningslinjer for brug

RC-A fjernbetjeningen er beregnet til at hjælpe brugere af trådløse høreapparater med at bruge funktionerne i deres høreapparater.

RC-A fjernbetjeningen er beregnet til brug af børn (> 36 måneder) og voksne sammen med deres høreapparater.

Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold	7
Produktoversigt	8
Sådan isættes og udskiftes batterierne	9
Parring af fjernbetjeningen med dine høreapparater	14
Sådan fjernes parringen mellem fjernbetjeningen og høreapparaterne	20
Rækkevidde	22
Indikatorer	24
Skift program	26
Juster lydstyrken	28
Lydløs tilstand	30
Lås/lås fjernbetjeningens knapper op	32

Strophuller	34
Vedligeholdelse	35
Advarsler	36
International garanti	46
Tekniske data	50

Pakkens indhold

Kassen indeholder følgende:

RC-A



2x AAAA
batterier




Denne
brugervejledning



Produktoversigt

- 1 Volumen op
- 2 Volumen ned
- 3 Programskift
- 4 Statuslys
- 5 Batteridæksel
- 6 Fingregreb
- 7 Strophuller



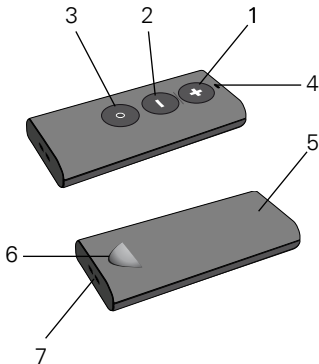


Sådan isættes og udskiftes batterierne

RC-A fjernbetjeningen bruger to Alkaline AAAA-batterier. Isæt nye batterier ifølge disse anvisninger. Batteriets levetid vil variere alt efter betingelserne. Ved almindelig brug skal batterierne skiftes ca. en gang om året. Tag evt. brugte batterier ud.



Sådan fjernes batteridækslet

1. Tryk ned på fingergrebet med tommelfingeren.
2. Skub i retning af fingergrebet med den anden tommelfinger fra den modsatte ende af batteridækslet.
3. Tag batteridækslet helt af.
4. Sæt batterierne i batteriskuffen, og sørg for at "+"-tegnet på batteriet passer til "+"-tegnet i batteriskuffen.

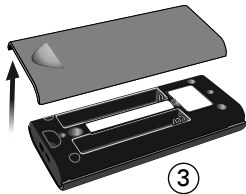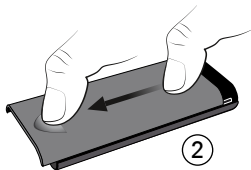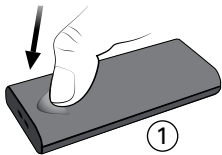

Sådan sættes batteridækslet på igen

1. Anbring batteridækslet ca. 6 mm fra toppen af RC-A fjernbetjeningen.
2. Skub batteridækslet som vist, indtil der lyder et klik.

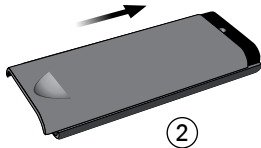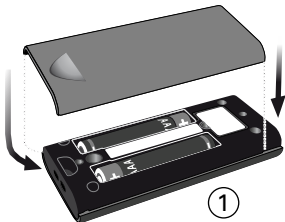

VIGTIGT

Batteridækslet må aldrig tvinges op eller i. Hvis det er nødvendigt at bruge kraft til at lukke dækslet, skal du flytte det en smule, så det klikker nemt på plads.

Parring af fjernbetjeningen med dine høreapparater


Fjernbetjeningen er en personlig enhed, der er beregnet til at blive brugt sammen med et sæt høreapparater. Fjernbetjeningen kan betjene op til to høreapparater ad gangen efter parring.

Før fjernbetjeningen kan bruges med dine høreapparater, skal enhederne parres.

Du kan vælge at parre fjernbetjeningen med enten to høreapparater på samme tid eller med ét høreapparat ad gangen. Du er nødt til at gentage parringen, hvis du vælger at parre dine høreapparaterne ét ad gangen. I vejledningen på næste side parres et sæt høreapparater med fjernbetjeningen.


Fjernbetjening klar

1. Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier virker ved at trykke på en vilkårlig knap. Hvis batterierne virker, vil fjernbetjeningens statuslys lyse, så længe knappen holdes nede.

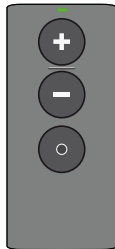


Høreapparater klar

2. Åbn og luk batteriskuffen på begge dine høreapparater.

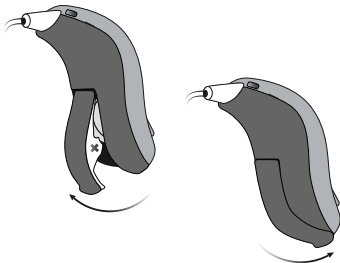


Inden for rækkevidde

3. Anbring begge dine høreapparater inden for fjernbetjeningens rækkevidde (dvs. inden for 20 cm).

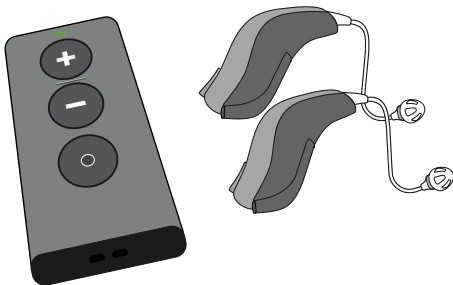

Parring

4. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for automatisk at parre med de høreapparater, der er inden for rækkevidde.

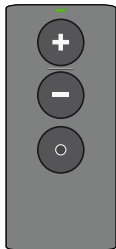


Når statuslyset på fjernbetjeningen lyser konstant grønt i 10 sekunder, er enhederne blevet parret.

Sådan fjernes parringen mellem fjernbetjeningen og høreapparaterne

Fjernbetjeningen kan parres med ét sæt høreapparater ad gangen. Hvis du får behov for at parre fjernbetjeningen med et andet sæt høreapparater, er du nødt til først at fjerne den eksisterende parring.

Slet den nuværende parring ved at holde alle tre knapper trykket ind samtidigt i 5 sekunder.

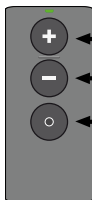

Tryk i ca. 5 sekunder for at fjerne den eksisterende parring.


Når statuslyset på fjernbetjeningen lyser konstant grønt i 10 sekunder, er parringen blevet slettet. Fjernbetjeningen er derefter klar til at blive parret igen med høreapparaterne (se side 14).

Rækkevidde

Med fjernbetjeningen kan du betjene høreapparaterne fra en afstand på op til 1,8 meter.

Fjernbetjeningen og høreapparaterne behøver ikke at befinde sig inden for synsvidde af hinanden.

Hvis du har parret to høreapparater med fjernbetjeningen, justeres begge på samme tid.

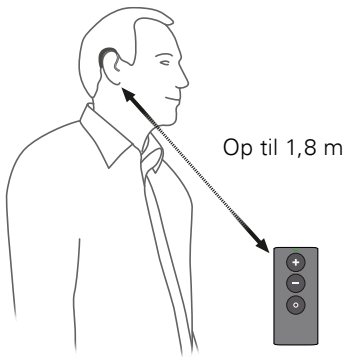

Indikatorer

Synlig indikator

Statuslyset på fjernbetjeningen lyser op, når der trykkes på en knap.



Hørbar lydindikator

Du hører en lyd i dine høreapparater, der bekræfter den udførte handling.

Lav batteristatus


Hvis batterierne næsten er løbet ud, blinker statuslyset hurtigt, når der trykkes på en knap. I dette tilfælde skal batterierne udskiftes hurtigst muligt.



Skift program

Fjernbetjeningen kan bruges til at skifte program, hvis høreapparatspecialisten har gjort mere end ét program tilgængeligt i dine høreapparater.

Du skal blot trykke på knappen til programsift på fjernbetjeningen for at bladre igennem høreapparatets programmer. Hvert tryk medfører et skift til det næste program i cyklussen.

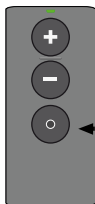

Tryk for at skifte program

VIGTIGT

Der henvises til dit høreapparats brugervejledning for yderligere oplysninger om dit specifikke høreapparats funktioner.

Juster lydstyrken

Du kan justere høreapparaternes lydstyrke med fjernbetjeningens volumenkontrolknapper.

Du vil høre en kort bekræftelse i dine høreapparater, når der skrues op eller ned for lyden.

Tryk på volumen op-knappen for at øge lydstyrken i dine høreapparater.

Tryk på volumen ned-knappen for at dæmpe lydstyrken i dine høreapparater.



Tryk på "+"
for at øge
lydstyrken



Tryk på "-"
for at dæmpe
lydstyrken

Lydløs tilstand

Brug lydløs tilstand, hvis du får brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparaterne på. Tryk og hold volumen ned-knappen inde i ca. 2 sekunder. Statuslyset vil slukke, når høreapparaterne er på lydløs tilstand.

Vend tilbage til normal indstilling

Tryk kort på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at slå lyden til i høreapparaterne igen.



Tryk i ca. 2 sekunder for at sætte høreapparaterne på lydløs tilstand

VIGTIGT

Der henvises til dit høreapparats brugervejledning for yderligere oplysninger om dit specifikke høreapparats funktioner.

Lås/lås fjernbetjeningens knapper op

For at undgå ved et uheld at trykke på fjernbetjeningens knapper, mens den ligger i din lomme, kan du låse knapperne.

Sådan låses fjernbetjeningens knapper

1. Tryk og hold volumen ned-knappen og knappen til programsift inde samtidigt i 3 – 4 sekunder.



Tryk i ca.
3 – 4 sekunder
for at låse.

2. Statuslyset vil blinke 2 gange, når knapperne er låste.

Tryk på en vilkårlig tast for at sikre dig, at knapperne er låste. Statuslyset vil blinke tre gange for at bekræfte.

Sådan låses fjernbetjeningens knapper op

1. Tryk og hold igen volumen ned-knappen og knappen til programskift inde samtidigt i 3 – 4 sekunder.
2. Statuslyset vil lyse konstant, indtil tasterne er låst op.

Strophuller

Fjernbetjeningen har to strophuller, som du kan sætte en lille strop i, så den er nemmere at bære og passe på.

1. Tag batteridækslet af (se side 10 og 11).
2. Træk en lille strop igennem strophullerne.



Vedligeholdelse

Hold fjernbetjeningen over en blød overflade, når du skifter batteri eller rengør den, så den ikke går i stykker, hvis du taber den.

VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at rengøre fjernbetjeningen. Den må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Advarsler

Før du tager din fjernbetjening i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugervejledning for at sikre den personlige sikkerhed og korrekt brug.

Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med din fjernbetjening.

Kvælningssfare og risiko for at sluge batterier eller andre små dele

- Din fjernbetjening, dens komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

Søg straks læge, hvis en person kommer til at sluge et batteri eller en anden lille del.

Advarsler

Krydskontrol

- Din fjernbetjening skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne finde på at bruge den uhensigtsmæssigt, for at sikre din personlige sikkerhed og undgå forkert brug.

Brug af stropper

- Hvis du anvender en strop, skal du sikre dig, at den er designet og egnet til formålet. Brug aldrig en snor pga. risiko for kvælning.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din høreapparatspecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og forårsage personskader.
- Forsøg aldrig at genoplade dine batterier. Brænd aldrig brugte batterier, da der er risiko for, at batterierne eksploderer.

Advarsler

Aktive implantater

- Der skal udvises forsigtighed i forbindelse med aktive implantater.
- Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, skal du kontakte producenten af dit implantat for at indhente oplysninger om risikoen for påvirkninger.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi og operation

- Læg fjernbetjeningen fra dig inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi, operation osv., da fjernbetjeningen kan tage skade af kraftig stråling.

Mulige bivirkninger

- I sjældne tilfælde kan materialer i fjernbetjeningen, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Advarsler

Varme og kemikalier

- Fjernbetjeningen må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.
- Fjernbetjeningen må ikke tørres i en mikrobølgeovn eller i andre ovne.
- Kemikalier i kosmetik, hårspray, parfume, aftershave lotion, solcreme og insektspray kan ødelægge fjernbetjeningen. Læg altid fjernbetjeningen fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager den i brug.

Brug i trafikken

- Brug af fjernbetjeningen under kørsel kan distrahere dig. Der henvises til de nationale færdselsregler vedrørende brugen af kommunikationsudstyr i trafikken.

Brug om bord på fly

- Fjernbetjeningen indeholder Bluetooth®.
Fjernbetjeningen bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

Advarsler

Interferens

- Fjernbetjeningen er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan der forekomme interferens mellem fjernbetjeningen og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarm-systemer og andre trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

Eksplosionsrisiko

- Fjernbetjeningen indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. Fjernbetjeningen er dog ikke blevet testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at fjernbetjeningen ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.

International garanti

RC-A fjernbetjeningen har fra producentens side en begrænset international produktgaranti på 12 måneder fra leveringsdatoen.

Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve enheden, men ikke på tilbehør som fx batterier, ledninger, strømforsyninger osv. Den begrænsede garanti dækker IKKE skader grundet fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fremmede objekter inde i enheden eller forkert indstilling.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din høreapparatspecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til denne begrænsede garanti.

Service

Tag din fjernbetjening med til din høreapparatspecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer.

Dato: _____ Model: _____

Garantiperiode: _____

Serienr.: _____

Din høreapparatspecialist

Tekniske data

Model	RC-3B
Driftsforhold	Temperatur: 5 °C–40 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk ved drift: 700 hPa til 1060 hPa
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur: –25 °C til 70 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende
Dimensioner	75,3 x 35 x 11,8 mm; vægt 32,7 g (inkl. batterier)

Kompatibilitet	Bernafon høreapparater med 2,4 GHz radioteknologi
Batteritype	2 x AAAA
Batterilevetid ved normal brug	12 måneder
Typisk sendeområde	Op til 1,8 m
Statusindikator	Grøn LED

Transceiver:	
Driftsfrekvens	2,402 GHz – 2,480 GHz (ISM-bånd)
Antal kanaler	39
Emissionseffekt	<10 dBm EIRP
Kanalbåndbredde	1 MHz
Modulationstype	GFSK
ITU-designator	F7D

RC-A indeholder en radiotransceiver, der bruger Bluetooth® Low Energy (BLE) og en patentbeskyttet kortdistance-radioteknologi, der begge arbejder ved 2,4 GHz. Fjernbetjeningens emissionseffekt er maks. 10 dBm EIRP i total udstrålet styrke. Fjernbetjeningen opfylder internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering af mennesker.

På grund af den begrænsede plads på fjernbetjeningen findes de relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugervejledning.

USA and Canada

This device is certified under:

FCC ID: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

Producenten erklærer hermed, at denne fjernbetjening er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten:



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com

178062/DK

< >

8,15 mm

Pladsholder for

FSC logo



^

19 mm

v

^

9,0 mm

v

< 15 mm >



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com



Affald fra elektronisk
udstyr skal håndteres i
overensstemmelse med
lokale forskrifter.



0000178062000001

bernaфон 

Your hearing • Our passion