



Netti UNIVERSAL Reinforced Tray / verstärktes Tablett

Chair width/ Sitzbreite	Description / Beschreibung	Item number / Artikelnummer
250 - 300 mm	Universal Tray	15102
350 - 430 mm	Universal Tray	1500
450 - 500 mm	Universal tray	15101



GB a reinforced tray version with a U-profile (2)


GB - Adjustment description

- Fit the tray to the width of the chair by loosening the screws (pos.7) on both sides of the adjustment rail (pos. 2).
- Pull the adjustment rail towards the front of the tray to release the guide bars (pos. 6).
- Place the tray on the arm supports of the wheelchair. Make sure to place the tray in centre of the chair.
- Place the guide bars (pos. 6) so that they go around the arm support pads.
- Place the guide bars (pos. 6) in the correct traces of the adjustment rail (pos. 2) and the adjustable bracket (pos. 4).
- Push the adjustment rail (pos. 2) back in place and fix the screws (pos. 7) in the adjustment rail (pos. 2).

DE eine verstärkte Tablett Version mit einem U-Profil (2)

DE - Anpassungsbeschreibung

- Passen Sie das Tablett an die Breite des Stuhls an, indem Sie die Schrauben lösen (Pos.7) auf beiden Seiten der Einstellschiene (Pos. 2).
- Ziehen Sie die Einstellschiene zur Vorderseite des Tabletts zum Lösen der Führungsschienen (Pos. 6).
- Stellen Sie das Tablett auf die Armstützen des Rollstuhls. Stellen Sie sicher, dass das Tablett in der Mitte des Stuhls steht.
- Platzieren Sie die Führungsstangen (Pos. 6) so, dass sie um die Armstützen herum verlaufen.
- Platzieren Sie die Führungsschienen (Pos. 6) in den richtigen Spuren der Einstellschiene (Pos. 2) und die einstellbare Halterung (Pos. 4).
- Schieben Sie die Einstellschiene (Pos. 2) zurück in die Position und Befestigen Sie die Schrauben (Pos. 7) in der Einstellschiene (Pos. 2).

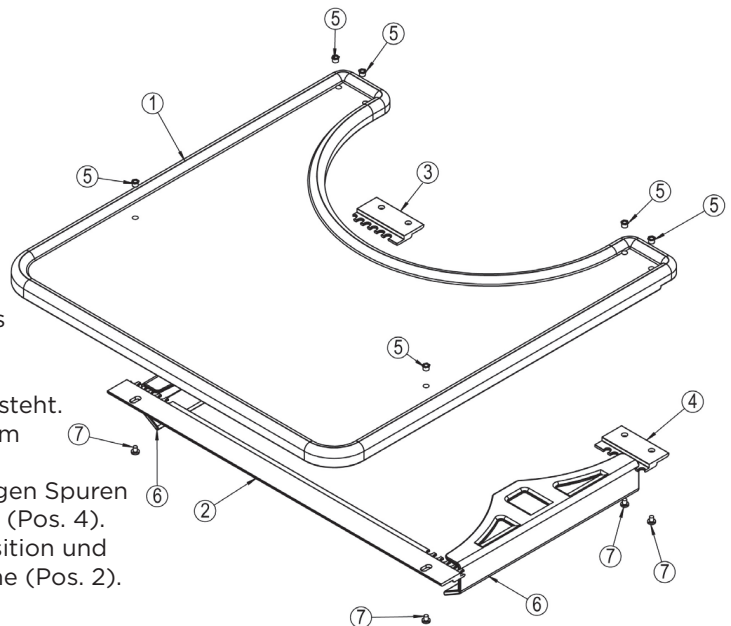

SE en förstärkt version av brickan med en U-profil (2)

SE - Justeringsbeskrivning

- Juster brickan till stolens bredd genom att lossa skruvarna (pos.7) på båda sidor om justeringsskenan (pos. 2)
- Dra justeringsskenan mot framsidan av brickan för att frigöra styrskenorna (pos. 6).
- Placera brickan på rullstolens armstöd. Se till att placera brickan i mitten av stolen.
- Placera styrskenorna (pos. 6) så att de går runt armens stödkuddar.
- Placera styrskenorna (pos. 6) i rätt spår på justeringsskenan (pos. 2) och den justerbara konsolen (pos. 4).
- Tryck tillbaka justeringsskenan (pos. 2) på plats och fixera skruvarna (pos. 7) i justeringsskenan (pos. 2).