



## Vækkeur TCL 250



## Brugervejledning





## Indhold af kassen

1. Vækkeur
  2. Snor med klemme (til fastgørelse f.eks. på puden)
  3. (stof) rejsepose
  4. Brugervejledning
- 

## TCL 250

1. Blitz / lys
2. Indikator "AM / PM"
3. Indikator "Lavt batteri"
4. Tid
5. Alarmindstillingstilstand
6. Indikator "Lydalarm tændt"
7. Indikator "Rystealarm tændt"
8. Indikator "Flash / lysalarm på"
9. Indikator "Radiostyret signalmodtagelse"
10. Snooze / baggrundsbelysningsknap
11. WAVE / ▼ -knap
12. SET-knap
13. AL SET / SELECT-knap
14. DEMO / ▲ -knap
15. Fastgørelse af snor med klemme

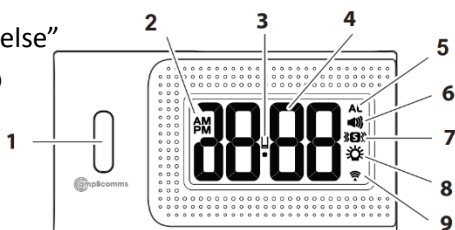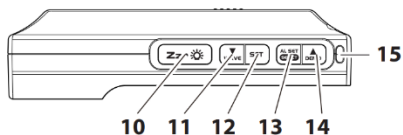

## Sikkerhedsoplysninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt og opbevar den til senere brug.
- Placer uret på en stabil overflade væk fra direkte sollys, høj varme eller fugt.

## Indsæt batterier

Uret skal bruge 3 x AA-alkaliske batterier (ikke inkluderet).

Læg uret med forsiden nedad. Skub batteridækslet nederst på uret væk.

Indsæt 3 x AA alkaliske batterier (tjek korrekte polaritet markerer "+" og "-" i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen.

**Bemærk:** Ved hyppig brug af vibrationsalarmen, lys / lommelygte og høj alarm vil batteriets levetid påvirkes markant. Det tomme batteriikon vises mellem tidscifrene, når batteriet er lavt.

---

## Dit radiostyrede ur opnår den nøjagtige tid med trådløs teknologi.

Alle radiostyret trådløse enheder, kan påvirkes af, men ikke begrænset til, følgende omstændigheder:

- Lang transmissionsafstand
- I nærheden af jernbane, højspændingsledning osv.
- Inde i betonbygninger
- For tæt på elektriske apparater
- For tæt på computere og tv'er
- Inde i bevægelige køretøjer
- I nærheden af metalliske strukturer

Placer dit ur et sted med et optimalt signal, dvs. tæt på et vindue og væk fra metaloverflader eller elektriske apparater ved parring af signal.

---

## Radiostyret tidssignalmodtagelse

Når dit ur er tændt, begynder det at modtage radio styret tidssignal. Indikatoren blinker.

- Modtagelsesignal (indikator blinker)
- Vellykket modtagelse (indikatoren bliver statisk)
- Mislykket modtagelse (indikatoren forsvinder)

## Automatisk modtagelse og manuel modtagelse

### Automatisk modtagelse:

Uret starter automatisk modtagelse hver dag kl. 01.00, 02.00, og 3:00.

Modtager den ikke radiostyrede tid signal kl. 3:00, fortsætter den til den modtager.

### Manuel modtagelse:

Tryk og hold WAVE / ▼ nede for at åbne manuel indstilling mode. Dit ur starter manuel modtagelse med et kort bip. For at stoppe funktionen skal du trykke på WAVE / ▼ og holde knappen nede igen.

---

## For at indstille tid og slumrevarighed

(standardtid kl. 0:00 og 24 timer i tidsformatet)

1. Tryk og hold SET nede, "00" -blitz, tryk på ▲ / ▼ for at indstille tidszone (op til ± 12 timer). "00" = GMT +1 time (f.eks. Tyskland) - "-01" = GMT 00 time (f.eks. Storbritannien).
2. Tryk på SET igen, timecifrene blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille tiden i timer (hold ▲ / ▼ nede for hurtigt at gå videre).
3. Tryk på SET igen, minutcifrene "00" blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille tiden i minutter (hold ▲ / ▼ nede for hurtigt at gå videre).
4. Tryk på SET igen, displayet viser tidsformat og blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge "12Hr" eller "24Hr" tid format. Hvis "12Hr" er valgt, vises AM / PM-indikatoren.
5. Tryk på SET igen, displayet viser "05" og blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge din slumretid fra 5 til 60 minutter.
6. Tryk på SET igen eller ingen knap ca. 10 sek. for at forlade funktionen.

## Sådan indstilles alarmer

1. Tryk og hold AL SET / SELECT, AL-indikatoren vises og alarmens cifre blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille alarmer i timer (hold ▲ / ▼ nede for hurtigt at gå videre).
  2. Tryk på AL SET / SELECT igen, alarmens minut cifre blinker. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille alarmer på få minutter (hold ▲ / ▼ nede for hurtigt at gå videre).
  3. Tryk på AL SET / SELECT igen, indikatoren blinker og LCD'et viser "HI" (vibration på HI-niveau). Tryk ▲ eller ▼ for at vælge vibrationsniveau.
    - HI (stærkt vibrationsniveau)
    - LO (blødt vibrationsniveau)
  4. Tryk på AL SET / SELECT igen, indikatoren blinker og LCD'et viser "HI". Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge alarmtasten.
    - LO (blød)
    - HI (højt)
  5. Tryk på AL SET / SELECT igen eller ingen knap i ca. 10 sek. for at forlade alarmindstillingsfunktionen.
- 

## For at vælge alarmtilstand

1. Tryk på AL SET / SELECT på normal visningstilstand en ad gangen for at aktivere alarmer(e), den tilsvarende alarmindikator(er) på displayet lyser:
  - : kun rystealarm er aktiveret
  - : både lyd og rysteralarm er aktiveret
  - : både lys og rystealarm aktiveres
  - : lys, lyd og rystealarm er aktiveret
2. Tryk på AL SET / SELECT-tast igen for at slukke for alle alarmer og alarmindikatorer forsvinder.

## At stoppe og nulstille alarmen

Når alarmen lyder, blinker den tilsvarende alarmindikator. Tryk på AL SET / SELECT en gang for at stoppe alarmen og nulstil den til at komme den følgende dag. Derefter forbliver den tilsvarende alarmindikator på displayet.

## At bruge snooze

Når alarmen lyder, skal du trykke en gang, alarmen stoppes midlertidigt og den tilsvarende alarmindikator fortsætter med at blinke. Alarmen tændes igen efter den indstillede snooze varighed er forbi.

## Sådan bruges baggrundsbelysningen

Under den normale tidsvisning skal du trykke kort for at dreje på displayets baggrundsbelysning i 5 sekunder. Denne funktion er ikke tilgængelig, når enheden giver et vækkesignal.

## Sådan bruges demotilstand

Tryk på ▲ / DEMO-knappen og hold den nede i 2 sek. for at udløse summer, strejkelys og ryster.

## Sådan bruges lommelygten

Under normal tid vises, tryk og hold for at dreje på lommelygten. Tryk og hold igen for at slukke for den.

## Batteristatusindikator

Når batteriniveauet er lavt, er vibrationsniveauet, alarmtonen og lysstyrken reduceret. Symbolet vises mellem tidscifrene. Udskift batterierne med nye AA-Alkaline batterier.

---

## Fejlfinding

Uret viser forkert tid eller fungerer ikke korrekt, kan det være forårsaget af elektrostatisk opladning eller udladet batterier, fjern batterierne på vækkeuret. Vent et par minutter, indsæt batterierne igen, eller udskift dem med nye batterier. Vækkeuret returnerer til fabriksindstillinger og må nulstilles.

## Tekniske data / funktioner

Anvendelse:	Ur, vækkeur
Alarmtilstande:	Summer, vibration, lys
Batterier:	3 x AA

## Specifikationer

RCC-frekvens:	77,5 KHz
Alarmvarighed:	1 minut
Snooze varighed:	5 til 60 minutter

## Standardindstillinger

Tidsformat:	24 timer
Tid:	0:00
Alarm:	6:00 (AM)
Alarm og ryster niveau:	HI
Snooze varighed:	05 (5 minutter)

---

## Bortskaffelse

Du er forpligtet til at bortskaffe forbrugsvarer korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer. Dette produkt skal bortskaffes som elektriske apparater, under de offentlige affaldsmyndigheder.

## Vedligeholdelse

- Rengør din enhed med en blød klud, der kun er fugtet med mild sæbe og vand. Brug aldrig stærke rengøringsmidler.
- Hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode, fjernes batterierne for at forhindre mulig korrosion. Bliver batterirummet korroderet eller beskidt, rengør rummet grundigt og udskift batterierne.

## Garanti

AMPLICOMMS produkter er produceret og testet i henhold til gældende regler, af nøje udvalgte materialer og med de nyeste udviklede teknologier, der sikrer problemfri funktion og en lang levetid. Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller strømforsyninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af forkert håndtering, drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for garanti. I tilfælde af reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Indsend AMPLICOMMS udstyr sammen med kvitteringen. Scantone A/S er dansk importør af AMPLICOMMS produkter, Tlf. 46 19 51 00 – [www.scantone.dk](http://www.scantone.dk)



**Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup**  
Tlf. 46 19 51 00 – [info@scantone.dk](mailto:info@scantone.dk) – [www.scantone.dk](http://www.scantone.dk)