

**REF**

Wheeleo-v2
Wheeleo-v2/9005
Wheeleo-v2/5009

Produktnavn

Wheeleo White
Wheeleo Black
Wheeleo Blue



Produceret med kærlighed i Belgien



Brugermanual	FR	2
Brugsanvisninger	NL	7
Brugsanvisninger	DE	12
Brugermanual	EN	17
Brugermanual	IT	22
Betjeningsmanual	EN	27
BRUGERMANUAL	EN	32
BRUGSANVISNINGER	GR	37
AR-instruktioner til brug		42
Brugsanvisning	DK	47



Wheeleo®
One hand for autonomy

1. Generel

InnoRehab vil gerne takke dig for dit køb af Wheeleo®. Denne brugsanvisning indeholder information om korrekt brug af produktet og vigtige sikkerhedsråd.



Læs venligst oplysningerne i denne manual omhyggeligt, før du bruger Wheeleo®. Kontakt venligst en sundhedspersonale for at sikre, at Wheeleo® passer til dine behov.

Kontakt din forhandler for yderligere information, rådgivning eller assistance.

2. Forventet standardbrug

Wheeleo® er en håndholdt enhed til at hjælpe med mobilitet for personer med gangbesvær.

3. Kontraindikationer



Må ikke anvendes af personer, hvis vægt overstiger 120 kg.
Må ikke anvendes til andre formål end dem, der er angivet i disse instruktioner.

4. Overensstemmelseserklæring

Wheeleo® er et hjælpemiddel til gang, der overholder de relevante bestemmelser beskrevet i Medicinsk Udstyrsforordning (EU) 2017/745.

5. Advarsler

Læs hele denne manual omhyggeligt, før du bruger Wheeleo®.

Kontrollér, at Wheeleo® er leveres i fuldstændig stand. Hvis den skal opbevares i længere tid, skal Wheeleo® pakkes ind og holdes væk fra varme og fugt. Wheeleo®'s levetid bestemmes af slid på dens komponentdele.

Wheeleo er designet til brug på fladt underlag og relativt jævnt underlag. Hjulene skal kunne rulle frit. InnoRehab påtager sig intet ansvar for konsekvenserne af forkert brug af produktet, manglende vedligeholdelse eller for modificeringer foretaget på Wheeleo®'s struktur.




I tilfælde af ændring i ydeevnen eller funktionsfejl på Wheeleo®, bør InnoRehab kontaktes, og produktet bør ikke bruges igen, indtil problemet er løst.

6. Beskrivelse

a. Wheeleo®

Wheeleo® er lavet af stål med en lakeret finish. Den har 4 hjul på 100 mm, der gør det muligt at dreje 360°. Den har også en mekanisme til hurtig justering af højden på håndtaget. Højden på stokken kan justeres i trin på 2 cm mellem 77,5 cm og

101,5 cm. Wheeleo® gør det muligt for brugeren at gå hurtigt, stabilt og komfortabelt. Brugers maksimale vægt er 120 kg.

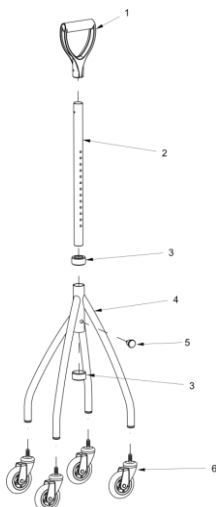


Nej.	Beskrivelse
1	Håndtag
2	Skydetube
3	Lukke ring
4	Struktur af foden
5	Justeringsplint
6	Hjul

b. Justering af højde

For at justere højden på håndtaget skal du holde justeringspinden med tre fingre og trække den ud, og derefter bruge den anden hånd til at skyde skydetuben over midtertuben for at forbinde med et højere eller lavere justeringshul. Slip stopperen for at lade den gribe fat igen. Sørg for, at hullerne i skydetuben er i linje med justeringshullet. Hvis du ikke kan gøre det alene, bed nogen om at hjælpe dig. En sundhedsperson kan rådgive om den ideelle højde til dine behov. Til mere lejlighedsvis balcestøtte anbefales en højde højere end hoften. For en mere "understøttende" type hjælp kan det være mere behageligt at justere håndtaget til samme højde som bøjningen i dit håndled. I alle tilfælde kan en professionel rådgive dig om den ideelle højde til dine behov.

Indstilling

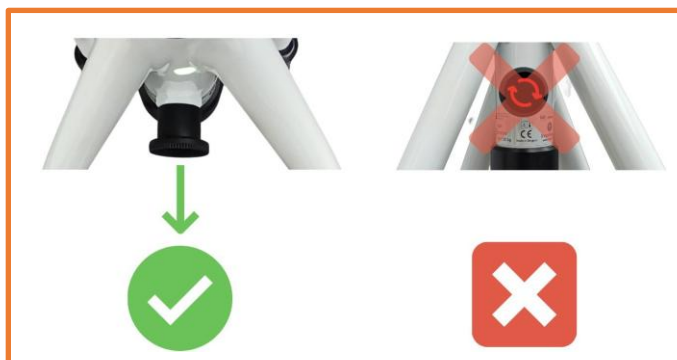


Træk i aksen af justeringspinden!

Skru ikke af!

c. Brug med højre eller venstre hånd

Der kræves ingen justering af håndtagspositionen for at bruge Wheeleo® med højre eller venstre hånd. Bare drej Wheeleo® rundt. Håndtaget er symmetrisk. På den anden side er Wheeleo® ikke helt symmetrisk. Den har en smal side og en bredere side. Den bredere side og indekseringsknappen skal være tættest på brugeren. Den grønne prik skal være synlig for brugeren.

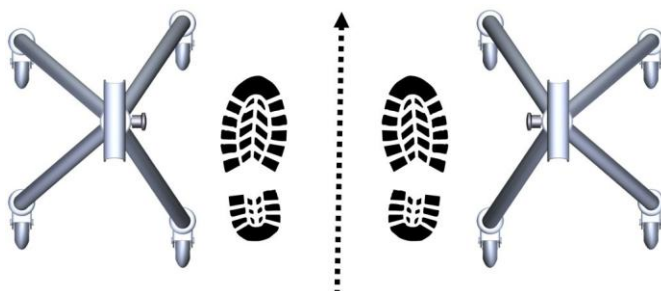

Venstre hånd

Højre hånd

7. Før brug

- Kontrollér, at Wheeleo®'s struktur ikke er beskadiget for at sikre, at den er helt sikker at bruge.
- Kontrollér, at hjulene er fast monteret og ruller glat. Hjulene skal også kunne dreje frit 360°.
- Det er rådet at være i følgeskab med en professionel, når du første gang bruger Wheeleo®, for at maksimere fordelene.
- Det er rådet at ændre stedet, hvor Wheeleo® bruges, for at reducere risikoen for fald. Gulvet skal være så glat som muligt. Det er en god idé at fjerne tæpper.
- Kontrollér, at det er den korrekte højde, og at justeringsmekanismen er korrekt positioneret.

8. Advarsler for korrekt brug



- Brug ikke, hvis din vægt overstiger 120 kg.
- Risiko for væltning: hold Wheeleo® rettet i den rigtige retning (sektion 6.c) og lad hjulene kunne bevæge sig frit. Wheeleo® er ikke egnet til gulve med overdrejet ujævne overflader, der forhindrer hjulene i at rulle glat. For eksempel (ikke-udtømmende liste) tæpper, grus, brosten, elektriske kabler, græs osv.
- Fare for væltning, når alle 4 hjul på Wheeleo® er i luften. Vip ikke Wheeleo® mere end 5° udad eller 2° indad.
- Undgå at bruge Wheeleo® på våde overflader. Vand kan beskadige lejerne og forhindre hjulene i at dreje.
- Undgå at bruge Wheeleo® udendørs på snavsede overflader (sand, støv osv.). Snavs kan også forhindre hjulene i at dreje ordentligt.
- Hvis brugen af Wheeleo® forårsager problemer (allergisk reaktion eller smerte), stop med at bruge den og kontakt sundhedspersonale.
- Fare for at klemme fingrene: Stik ikke fingrene ind i hullerne i håndtaget.
- Eventuelle alvorlige hændelser med enheden skal rapporteres til

producenten og til myndighederne i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

9. Vedligeholdelse

Wheeleo® blev verificeret og certificeret med mærket "CE - Medicinsk Udstyr Klasse 1", da den blev lanceret på markedet. Af hensyn til brugerens sikkerhed anbefales det at få enheden kontrolleret af producenten eller et godkendt laboratorium hvert 2. år. Ved reparation skal der kun bruges originale reservedele eller tilbehør. Det skal gøres regelmæssigt, og dette især hvis du bruger Wheeleo® på ujævnt underlag, der kan forårsage vibrationer, skal du kontrollere, at hjulene stadig er fast skruet. Stram dem om nødvendigt igen (14 mm topnøgle). Du kan tilføje gevindlås for at forstærke spændingen. For mere information om vedligeholdelse, besøg <http://www.wheeleo.be/registration>

10. Rengøring og desinfektion

- a. **Rengøring:** Brug en klud til at fjerne støv. Hvis nødvendigt, tilsæt en lille mængde vaskemiddel for at fjerne genstridig snavs. Tør den helt før brug.
- b. **Desinfektion:** Hvis du har brug for at desinficere udstyret, skal du bruge et desinfektionsmiddel som hydroalkoholisk gel.

Advarsel: Brug ikke syrer, alkalier eller opløsningsmidler som acetone.

11. Bortskaffelse



Smid ikke enheden i almindelige affaldscontainere. Smid Wheeleo® på et passende genbrugscenter.

Produktregistrering og vedligeholdelse :

Online: <http://www.wheeleo.be/registration>



For registrering kan du sende det udfyldte dokument på side 53

Bliv en del af Wheeleo®-samfundet for at dele dine oplevelser og få rådgivning fra andre brugere!



@wheeleo



@wheeleo.be



@wheeleo

#onehandforautonomy

Senior og moderne... Uforenelig ?



 **Wheeleo®**
One hand for your autonomy

Wheeleo®,
Din nye generation af
walking companion that
sikrer stabilitet og safety
hele vejen igennem
Din makker.

 Clinical
trial

/ru,,e-hUl., /

**GARANTICERTIFIKAT / GARANTICERTIFIKAT / GARANTI-CERTIFIKAT /
GARANTICERTIFIKAT / CERTIFICADO DE GARAN-
TÍA / GARANTICERTIFIKAT / الضمان شهادة**

Produit / Product / Produkt / Product / Prodotto / Producto / Produto / προϊόν / المنتج:



REF.....

SN.....

Datoen / Aankoopdatum / Købdato / Købsdato / Købsdato / Købsdato / Købsdato / Købsdato /
Købsdato / تاريخ:.....

Vendeur / Wederverkoper / Verkäufer / Forhandler / Venditore / Vendedor / Sælger / Leverandør / الموزع:

Adresse du vendeur / Adres wederverkoper / Adresse des Verkäufers / Reseller's address / Adres del venditore / Dirección
del vendedor / Morada do vendedor / Adres vendor / البائع عنوان:

Acheteur / Aankoper / Køber / Køber / Køber / Komprador / Kompador / Αγοραστής / بي المش:

Køberens adresse / Adres aankoper / Køberens adresse / Indirizzo dell'acquirente / Dirección del
comprador / Morada do comprador / Køberadresse / بي المش عنوان:

Email / E-mail / E-mail / E-mail / Email / E-mail / E-mail / Email / الإل بريد ال عنوان:



Et registreret varemærke af InnoRehab SRL

Avenue des Combattants, 93a | 1340 Ottignies | Belgien

+32 (0) 479 09 08 03 | info@innorehab.be | www.wheeleo.be



Produktregistrering / Produktregistrering / Produktregistrering / Produkt
Registrering / Produktregistrering / Produktregister / Produktregister /
Produktregistrering / Produktregistrering / المنتج تسجيل:

<http://www.wheeleo.be/registration>





wheeleo[®]

One hand for autonomy

Forbind dig til Wheeleo[®] community og opdag smukke historier!



@wheeleo



@wheeleo.be



@wheeleo

#onehandforautonomy

www.wheeleo.be



SCAN MIG