

Brugermanual

El kørestol



INDEKS

INTRODUKTION	Side 3-4
KONTROLKOMMANDO	Side 5
FUNKTIONERER	Side 6
HJUL OG ANTI-TIP-HJUL	Side 7
BATTERIER	Side 08-10
SIKKERHED	Side 11-15
TEKNISK SERVICE-VEDLIGEHOLDELSE	Side 16
GARANTI	Side 17-19

Bemærk: Før kørestolen tages i brug første gang, skal modtageren inspicere det fuldstændigt. Hvis du finder andre skader, mangler eller egenskaber ved kørestolen end forventet, bør du ikke bruge kørestolen for første gang, og du skal straks kontakte forhandleren, hvor du købte kørestolen.

Ethvert krav vedrørende transportskader, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet skal meddeles din distributør inden for de første 24 timer efter modtagelsen.

Efter denne periode på 24 timer eller efter at kørestolen er blevet frigivet, vil det ikke være muligt at reagere på ethvert krav om skade, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet.

Bemærk: Gem alle emballageelementer, der blev leveret med kørestolen, hvis det er nødvendigt at transportere det til reparation. Ingen transportskader accepteres for produkter, der ikke er i deres originale emballage.

GARANTI

På den anden side kan denne garanti ikke udøves i nogen af følgende tilfælde: - Manglende købsbevis. Det er vigtigt at opbevare din købskvittering for enhver garantireparation.

- Hvis udstyrets serienummer er beskadiget, er blevet fjernet eller er blevet pillet ved.

Efter det andet år fra salgsdatoen kan sælgeren kræve sagkyndig bevis, der fastslår, at den manglende overensstemmelse var til stede ved leveringen af produktet. For ethvert problem i garantiperioden:

- Kontakt forhandleren, hvor du købte kørestolen.
- Medmindre andet er angivet, skal du tage kørestolen til teknisk service. Hvis der ikke er nogen teknisk service i dit område, skal du tage dit kørestolen til den forhandler, hvor du købte det, eller du kan anmode om afhentning og levering til dit hjem ved at betale et bidrag til transportomkostningerne.

Vigtigt: Hvis kørestolen ved modtagelse af kørestolen hos Libercar tekniske service ikke finder fejl, og der ikke kræves nogen garantireparation, skal kunden ikke betale noget beløb for den tid, der er brugt til fejlfinding, men skal betale eventuelle forsendelsesomkostninger genereret.

Bemærk: Før kørestolen tages i brug første gang, skal modtageren inspicere det fuldstændigt. Hvis du finder andre skader, mangler eller egenskaber ved kørestolen end forventet, bør du ikke bruge kørestolen for første gang, og du skal straks kontakte forhandleren, hvor du købte kørestolen.

Ethvert krav vedrørende transportskader, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet skal meddeles din distributør inden for de første 24 timer efter modtagelsen.

Efter denne periode på 24 timer eller efter at kørestolen er blevet frigivet, vil det ikke være muligt at reagere på ethvert krav om skade, mangel eller manglende overensstemmelse med produktet.

Bemærk: Gem alle emballageelementer, der blev leveret med kørestolen, hvis det er nødvendigt at transportere det til reparation.

GARANTI

- Ødelagte eller manglende dele.
- Kørestolen er ikke blevet korrekt vedligeholdt.
- Fejl og skader forårsaget af usædvanlig eller intensiv brug eller udlejning til tredjemand.
- Enhver adskillelse, reparation, ændring eller modifikation, der ikke er udført af producenten eller af personale, der udtrykkeligt er autoriseret af denne.
- Punktering, deformation eller beskadigelse af hjul, dæk og slanger.
- Ukorrekt brug, misbrug, uagtsomhed eller ulykke, uanset årsagen.
- Spild af væsker og/eller fødevarer på produktet, udseende af korrosion og/eller rust,
- Ridser eller skader på karrosseri, plastik, polstring... og alle andre udvendigt udsatte dele af produktet. - Problemer med joysticks, opladere og andre elementer, der har udvendige skader (buler, ridser, løshed...). - Udførelse af justeringer eller tuning af kørestolen (hjuljustering, styring, hardwarejusteringer...).
- Vibrationer og støj i forbindelse med betjeningen af kørestolen.
- Forringelse, misfarvning, ændring eller deformation af stykkerne på grund af ældning.
- Små olielækager (simmer) fra pakninger og tætninger.
- Manglende overholdelse af forpligtelsen til at reparere kørestolen så hurtigt som muligt efter opdagelse af en fejl.

INTRODUKTION

Tiltænkt brug: Elektriske kørestole er designet og fremstillet til handicappede og er godkendt som klasse I medicinske produkter. Disse elektriske kørestole er designet til at kompensere for gangbesvær hos deres brugere, men hvis visuelle, fysiske og mentale evner ikke påvirkes til at betjene en kørestol.

I overensstemmelse med den europæiske forordning 2017/745 for klasse I medicinsk udstyr bærer dette produkt en uudslettelig CE-mærkning med oplysninger om producenten, den europæiske repræsentant og importøren.

Det er vigtigt ikke at rive eller beskadige dette CE-mærke for at garantere produktets sporbarhed.

Denne manual indeholder vigtige instruktioner om sikkerhed, håndtering og vedligeholdelse. Læs venligst omhyggeligt, før du begynder at bruge din kørestol.

Brug kun kørestolen, når det er i perfekt stand. Ellers kan du sætte din og andres sikkerhed i fare.

Stop med at bruge dit kørestol, og underret din forhandler i følgende tilfælde:

- Bremse- eller koblingssystemfejl
- Du hører mærkelige lyde eller lugter brændende lugte.
- Uventet kørestolsreaktion . Hjul i dårlig stand (slidt, punkteret, deformeret, utilstrækkeligt tryk...)
- Armlæn eller fodstøtte i dårlig stand.
- Ledninger i dårlig stand
- Køretøjet hælder til den ene side/fremad/bagud.
- Enhver anden uregelmæssighed i kørestolen.

INTRODUKTION

- Begrænset ansvar: ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af:
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen.
- Forkert montering eller installation.
- Naturligt slid.
- Uautoriserede ændringer af den originale konfiguration.
- Brug af uoriginale reservedele.
- Hvis din kørestol har et problem, og du ikke er i stand til at løse det ved at følge instruktionerne i denne manual, bedes du kontakte din forhandler.



FARE!

Dette ikon angiver, at du kan pådrage dig personskade, hvis du ignorerer instruktionerne i denne vejledning.



OPMÆRKSOMHED!

Dette ikon angiver, at du kan forårsage skade på din kørestol, hvis du ignorerer instruktionerne i denne manual.

Udstyret og billederne, der vises i denne vejledning, er vejledende og har til formål at forklare betjeningen af kørestolen, så udstyret og konfigurationen af dit kørestol kan være anderledes end billederne afhængigt af specifikationerne for den model, du har købt.

GARANTI

Sælger er ansvarlig for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterede på leveringstidspunktet, og som viser sig inden for en periode på to år fra købsdatoen.

Følgende årsager anses IKKE for manglende overensstemmelse ved oprindelsen og er derfor udelukket fra garantien:

- Dele, der lider under normalt slid i forbindelse med brugen af kørestolen. Disse elementer omfatter blandt andet batterier, bremses, motorbørster og viklinger, kobling eller elektromagnetisk bremse, affjedring, dæksler, hjul, lejer, tætninger, pakninger, pneumatiske kamre, pærer, sikringer, polstring, armlænsputer, håndtag og andre elementer Lignende. Til dette formål fastlægger producenten den normale brugstid for følgende forbrugselementer:
- Batterier: 6 måneder (batterierne i et kørestol er dets energi og fremdriftskilde, så progressivt slid i forbindelse med brugen af kørestolen er normalt). Hvis batterierne udviser en mangel på overensstemmelse ved oprindelsen, vil dette manifestere sig fra de første anvendelser med en væsentligt reduceret autonomi i forhold til det forventede. Hvis du bemærker nogen uregelmæssigheder i driften af dit batteri, skal du straks informere din forhandler. Ved batterifejl efter 6. måned og har fungeret normalt i de første 6 måneder, formodes det, at problemet skyldes normal slitage på batteriet og ikke manglende overensstemmelse ved oprindelse.

TEKNISK SERVICE—VEDLIGEHOOLDELSE

Kontakt forhandler ved evt. service eller vedligeholdelse.

- Manglende vedligeholdelse kan føre til en ulykke.
- Manglende vedligeholdelse kan føre til undgåelige nedbrud.
- Rengør og hold kørestolen ren - brug en fugtig klud.
- Efterspænd skruer løbende.
- Udsæt aldrig kørestolens elektriske system for regn, sne eller tåge.
- Opbevar kørestolen indenfor.


Fjern bip ved bak - Joystick med 4 trykknapper

For at fjerne bip-lyden når du bakker, skal du trykke på hornknappen og knappen med langsomste hastighed på joysticket,



KONTROLKOMMANDO

1. Tænd sluk
2. Batteriindikator
3. Hastighedsindikator
4. Reducer hastigheden
5. Øg hastighed
6. Deaktiver bip ved bak (tryk imens)
7. Aktiver bip ved bak (tryk imens)
8. Horn
9. Joystick

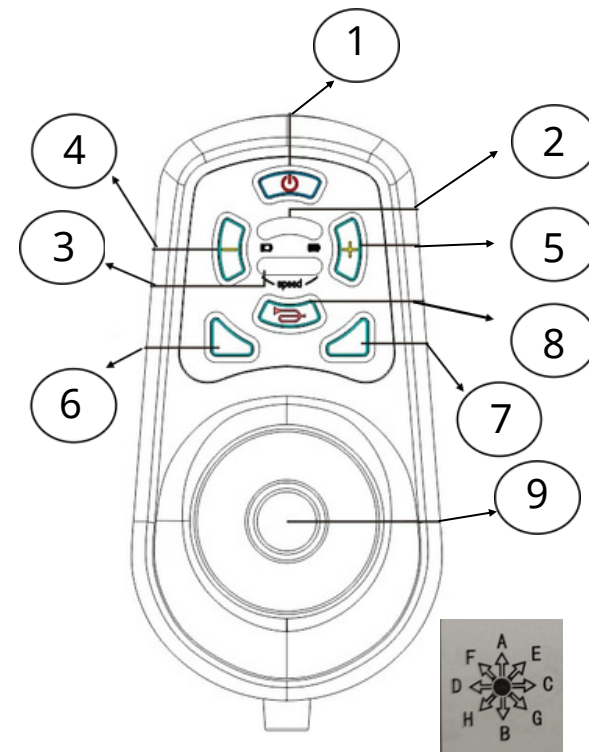

OPMÆRKSOMHED: Joysticket er et meget sart element. Læn dig ikke på joysticket, når du stiger op eller ud af stolen.

Undgå slag, da de elektriske komponenter indeni kan blive beskadiget (ikke dækket af garantien).

For at udtrække eller justere den ønskede position på joysticket skal du blot løsne strammeknappen, og når den er i den ønskede position, strammes knappen igen. Sørg for, at knappen er stram for at undgå at tabe joysticket.



FUNKTIONERER

ELEKTRISK/NEUTRAL:

Stolen kan bruges i 2 tilstande (elektrisk eller neutral) afhængigt af koblingshåndtagene. Der er 2 håndtag, og de er placeret i bagsiden af stolen (se figur).

Køretol I NEUTRAL (manuel): Fremdriftssystemet er deaktiveret, og stolen kan skubbes manuelt. For at stolen skal være i neutral, skal begge koblingshåndtag være i "manuel" position.

Køretol TILKOBLET (elektrisk): Kørestolen betjenes med joystick. For at stolen skal være i elektrisk tilstand, skal begge koblingshåndtag være i "elektrisk" position.



OPMÆRKSOMHED! FARE ULYKKE:



- Lad aldrig stolen stå i neutral på en skråning.
- Stig ikke på eller af stolen i neutral position, da den er i fri tilstand og kan bevæge sig, når den støttes og få brugeren til at falde.
- Stig ikke på eller af stolen, mens den er tændt, da der er risiko for utilsigtet at aktivere joystick-håndtaget og få brugeren til at falde.

SIKKERHED

Følg altid disse instruktioner for at køre sikkert:

Når du går op ad en skråning, prøv at holde din kørestol i bevægelse, og hvis den stopper, start meget langsomt. Når du kører ned ad en skråning, skal du reducere kørestolens hastighed til et minimum for bedre kontrol. Hvis din stol sænkes hurtigere end ønsket, skal du slippe joysticket, indtil stolen stopper. Sørg for, at den valgte hastighed er minimumshastigheden, og start forsigtigt igen.

Hvis du, når du kører op/ned ad en skråning, bemærker, at et hjul glider og ikke bremser, skal du IKKE benytte denne skråning.

Hvis du ikke er 100 % sikker på, når du står over for en skråning i fuld sikkerhed, skal du ikke benytte den, medmindre du er ledsaget af en anden person, der kan hjælpe dig i tilfælde af en hændelse eller væltning.

- Foretag ikke pludselige bevægelser eller læn dig tilbage, når du passerer over en forhindring eller rampe, da dette kan flytte tyngdepunktet og få kørestolen til at vælte.
- Kør over forhindringer med konstant hastighed (accelererer eller bremser ikke).
- På skråninger skal du ikke zig-zagge, køre din stol lige og vende front mod skråningen (ikke diagonalt) for at undgå risiko for at vælte eller falde.
- Når du skal møde en rampe eller forhindring, skal du gøre det ved den laveste hastighed.

Undlad at benytte skråninger på glat eller farligt terræn

(døråbningsgulve, der ikke hæfter godt, sne, is, våde overflader...). Bak aldrig på en stejl skråning. Dette kan forårsage alvorlig personskade.



FARE!

Den maksimale sikkerhedshældning er 12 %. Du må ALDRIG benytte en hældning på mere end 12 %.

SIKKERHED

Reducer hastigheden, før du udfører sådanne manøvrer. Accelerer først, når du er færdig med at udføre manøvren.

Bemærk venligst, at sædehøjden har stor indflydelse på tyngdepunktet. Jo højere sædehøjden er, jo større er risikoen for at vælte.

Bemærk venligst, at det elektriske kørestol som klasse A-produkt primært er beregnet til indendørs brug, så det er ikke nødvendigvis i stand til at overvinde udendørs forhindringer.

Forkert reparation eller vedligeholdelse udført af brugere/plejere eller ukvalificeret personale kan resultere i skader, alvorlig personskade eller død.

Risiko for ulykker og tab af garanti, hvis vedligeholdelsen er utilstrækkelig: Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå ulykker som følge af utilsigtet slid, er det vigtigt, at dette elektriske kørestol gennemgår et årligt eftersyn.

Brug af uegnede reservedele kan forårsage personskade eller beskadigelse.

Reservedele skal nøjagtigt matche de originale specifikationer.

Det anbefales altid at bruge originale reservedele og angive kørestolens serienummer for at lette korrekt overensstemmelse mellem reservedelene. CE-mærkningen vil være ugyldig, hvis komponenter eller tilbehør, der ikke er godkendt til dette produkt, udskiftes eller tilføjes. I dette tilfælde vil den virksomhed, der tilføjer eller udskifter komponenterne eller tilbehøret, være ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen/CE-mærkningen eller registreringen af det elektriske kørestol som et særligt design.

HJUL OG ANTI-TIP-HJUL

HJUL: Forhjulene er solide, så de kræver ingen specifik vedligeholdelse.

Hvis du kan se, at de er slidte ved brug, skal du kontakte din forhandler for at få dem udskiftet. Undgå at gå ned ad kantsten eller ramme huller, da dette kan beskadige hjulakslerne.

Baghjulene kan, afhængigt af den tilgængelige model, være solide eller med luft. I tilfælde af de er med luft, skal du kontrollere deres tryk regelmæssigt, da du ellers kan pådrage dig punktering og skader på kamrene og dækkene (ikke dækket af garantien).

ANTI-TIP-HJUL: Disse hjul forhindrer eventuel vipning bagud.



VIGTIG! FARE!

Kør ALDRIG uden at anti-tip-hjulene er aktive.

BATTERIER

Din kørestol bruger deep cycle batterier. Disse batterier er forseglede og kræver ikke vedligeholdelse eller overvågning af elektrolytniveauet. Deep cycle batterier er designet til at give en længere afladning. Dit batteri kan være gel/AGM eller Lithium. Sørg altid for at bruge den originale oplader, der fulgte med stolen. Brug aldrig en anden oplader end den originale, da den kan forårsage alvorlige hændelser (fra for tidlig batterislitage til spændingsoverbelastning eller en alvorlig ulykke).

FUNKTIONERER:

Batteriet, der giver strøm til stolen, er det batteri, der sættes i skinnen, der er placeret under sædet eller på siderne af stolen.



SÅDAN OPLADES BATTERIER:

Afhængigt af den model du har, kan du oplade batteriet gennem joysticket, gennem batteriet eller gennem begge muligheder:

- **A/** Oplad kørestolen gennem joystick: (fig. 1)
- Placer din kørestol i nærheden af en stikkontakt, og sørg for, at kørestolen er slukket.
- Sæt opladeren i stikkontakten.
- Tilslut opladeren til stolens joystick.
- **B/** Oplad kørestol direkte gennem batterier: Hvis dit batteri har et ladestik på selve batteriet, kan du oplade batteriet direkte gennem dette stik.
- Hvis du gør dette med batteriet monteret på kørestolen, skal du sørge for, at kørestolen er slukket, før du sætter opladeren i stolen.
- Hvis dit batteri er aftageligt, kan du tage batteriet med og oplade det selvstændigt.


SIKKERHED

- Kør ned ad bakke med maksimalt 50 % af den maksimalt justerbare hastighed.
- Undgå pludselig opbremsning eller acceleration på skråninger.
- Undgå så vidt muligt at køre på våde, glatte, iskolde eller fedtede overflader (såsom sne, grus, is, sand osv.).
- Forsøg aldrig at overvinde en forhindring, når du går op eller ned af en skråning.
- Forsøg aldrig at gå op eller ned af trapper.
- Nærm dig altid forhindringer i en lige linje. Sørg for, at for- og baghjulene går over forhindringen på én gang, stop ikke lige i midten.
- Undgå at ændre dit tyngdepunkt samt pludselige retningsændringer, når det elektriske kørestol bevæger sig.
- Brug aldrig det elektriske kørestol til at transportere mere end én person. Overskrid ikke den maksimalt tilladte belastning.
- Når du oplader el kørestolen, skal du altid fordele vægten jævnt.
- Forsøg altid at holde det elektriske kørestols tyngdepunkt i midten og så tæt på jorden som muligt.
- Bemærk venligst, at det elektriske kørestol vil bremse eller accelerere, hvis du ændrer kørehastigheden under kørslen.
- Kør gennem snævre områder med minimumshastighed og med forsigtighed.
- Opmærksomhed: Der er risiko for at vælte, når du drejer eller vender mod skråninger.
- Overskrid aldrig sikkerhedshældningen på 12°.

SIKKERHED

- Undgå at opbevare eller bruge kørestolen i nærheden af ild eller brændbare produkter.
- Overskrid ikke den maksimalt tilladte belastning.
- Det elektriske kørestol er kun designet til brug af en enkelt passager, hvis maksimalvægt ikke overstiger kørestolens maksimalt tilladte belastning. Brug aldrig kørestolen til at transportere læs eller mere end én person.
- Udsæt ikke kørestolen for direkte sollys i længere perioder, da dette forringer plastikoverflader, polstring, metaldele.
- Tilslut ikke nogen elektrisk enhed til det elektriske kørestol, som ikke er udtrykkeligt certificeret af producenten.
- Dæk aldrig kørestolens belysningssystem til med stoffer, tøj eller betræk, der kan brænde.
- Undgå at udsætte elektriske komponenter for vand eller andre væsker.
- Enhver manipulation af batterier skal udføres af en kvalificeret fagmand.
- Elektromagnetisk stråling: Betjen ikke radiosendere, mobiltelefoner, eller tilslut dem, mens kørestolen er tændt. Undgå at være i nærheden af radio- og tv-udsendelseskilder.
- Hvis kørestolen ved et uheld begynder at bevæge sig, eller bremserne deaktiveres, skal du straks frakoble kørestolen.
- Rapport alle hændelser med uønsket kørestolsbevægelse eller frakobling af den elektriske bremse til din forhandler.
- Benyt kun på skråninger, der ikke overstiger den maksimale sikkerhedshældning og kun med ryglænet i lodret position og sædet i den laveste position.

BATTERIER

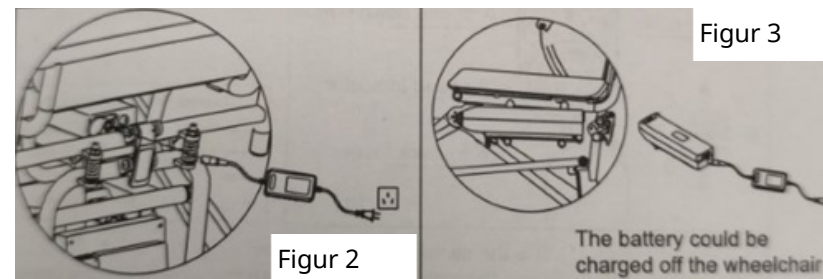

Afhængigt af din opladermodel vil du observere en af disse opladerlysskifteprocesser:

Type A oplader:

- Når du sætter opladeren i stikkontakten: lyset bliver rødt.
- Når du sætter opladeren i joysticket eller batteriet: lyset bliver orange (batteriet er ved at løbe tør).
- Når opladningen er færdig: lyset bliver grønt.

Type B oplader:

- Når du sætter opladeren i stikkontakten: lyset bliver grønt.
- Når opladeren sættes i joysticket eller batteriet: lyset bliver blå (batteriet er ved at tømmes).
- Når opladningen er færdig: lyset bliver grønt.

Under alle omstændigheder, hvis opladerlampen ikke er blevet grøn efter 8 timer efter opladning, skal du frakoble opladeren og afbryde opladningen.

Det er tilrådeligt at oplade batterierne, når du er færdig med at bruge din stol. Dette vil hjælpe med at forlænge levetiden på dine batterier. Undgå dyb afladning af dit batteri.

Hvis du bruger din stol mindre end en gang om ugen, anbefales det at lade den ugentligt op.

BATTERIER

HVORDAN OPNÅS DEN MAKSIMUM YDELSE PR. OPLADNING?

Generelt kører du aldrig under ideelle forhold (flad, fast overflade uden kurver eller skråninger). Generelt kørsel på skrånende terræn, ru overflade. Alle disse faktorer gør, at den angivne maksimale rækkevidde reduceres.

Følg følgende instruktioner for at øge din maksimale rækkevidde:

- Oplad batterierne helt før hver tur.
- Planlæg din rute på forhånd for at undgå skråninger og forhindringer.
- Begræns belastningen af stolen.



OPMÆRKSOMHED! Det er meget vigtigt, at du holder dine batterier væk fra høje temperaturer eller udsættes for solen for at undgå risiko for eksplosion eller brand. Oplad dem altid på ventilerede steder og isoleret fra andre elementer.

HVORDAN FORLÆGES BATTERIETS LEVETID?

Dybe fulde opladningscyklusser giver større ydeevne og længere batterilevetid. Hold dine batterier fuldt opladet, når det er muligt. Batterier, der er dybt afladene, som ikke oplades efter hver brug, eller som kun er delvist opladene, vil lide accelereret slid, reduceret autonomi og vil forkorte deres levetid.

OPMÆRKSOMHED! Et batteris levetid er normalt en afspejling af den pleje, det modtager.

HVORDAN SKAL JEG OPBEVARE KØRESTOL OG BATTERI?

Hvis du ikke bruger din stol regelmæssigt, anbefaler vi at lade den op mindst en gang om ugen. Hvis du planlægger ikke at bruge din stol i en længere periode, skal du oplade den helt, frakoble batterierne og opbevare din stol på et tørt sted væk fra varmekilder eller sol.

HVORDAN TRANSPORTERER MAN MIT BATTERI?

Lithium-batterier og gel-batterier kan transporteres komfortabelt, da der ikke er risiko for spild. Vi anbefaler, at du kontakter dit transportfirma, inden du foretager turen, for at finde ud af deres specifikke transportforhold.

SIKKERHED

- Brug ikke dit kørestol uden først at have læst og forstået denne brugervejledning.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende advarsler, forholdsregler eller instruktioner, skal du kontakte din forhandler, før du betjener kørestolen.
- Forkert brug, manglende vedligeholdelse, uautoriserede ændringer, brug af uegnede reservedele, kan forårsage personskade, beskadigelse eller død.
- Smid ikke tændte cigaretter eller andre brændbare genstande på kørestolen, da brand kan forårsage skade, alvorlig personskade eller død. Personen i kørestolen er i særlig risiko for død eller alvorlig personskade, fordi de muligvis ikke er i stand til at bevæge sig væk fra kørestolen. RYG IKKE, mens du bruger kørestolen.
- Benyt aldrig kørestolen under påvirkning af medicin eller alkohol.
- Sluk for kørestolen, før du stiger på eller af. Sørg for, at bremserne deaktiveres automatisk, når motorerne er frakoblet.
- Frihjulsdrift anbefales kun på plane overflader, aldrig på skråninger.
- Efterlad aldrig kørestolen på en skråning med afkoblede motorer. Sæt altid motorerne i drift umiddelbart efter, at du har skubbet på kørestolen.

Hvis du skal bremse i en nødsituation, skal du blot slippe kørehåndtaget og lade det elektriske kørestol standse fuldstændigt. Hvis kørestolen har en håndbremse, skal du trække i den, indtil den stopper.

Transporter aldrig kørestolen med passageren siddende i den.