


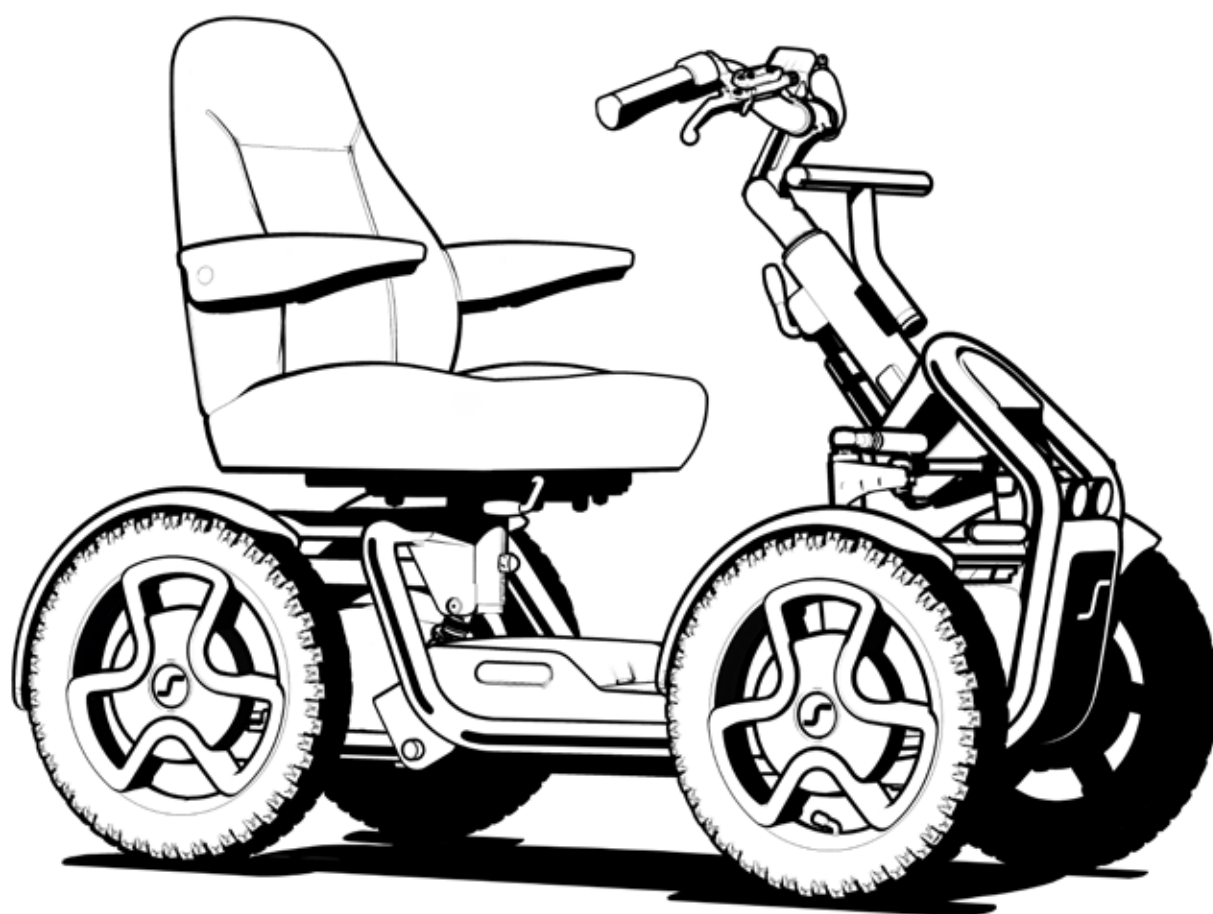

 El-scooter

000691032.DK

S800 by SCOOZY

Brugervejledning



SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til ISO-13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier, fra udvikling til produktion. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-direktiver. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af dit produkt, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din lokale, autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt du ikke har adgang til forhandleren i dit lokalområde, eller hvis du har nogle andre spørgsmål, bedes du ringe eller skrive til:

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical ApS underskrift og stempel

Indholdsfortegnelse

1.0 Brugerinformation	4
1.1 Denne brugervejledning	4
1.2 For yderligere information	4
1.3 Symboler anvendt i denne vejledning	5
2.0 Sikkerhed:	6
2.1 Symboler og mærkater anvendt på produktet	6
2.2 Sikkerhed: Temperatur	6
2.3 Sikkerhed: Bevægelige dele	6
2.4 Sikkerhed: Elektromagnetisk stråling	7
2.5 Sikkerhed: Kvælningsfare	7
2.6 Ramper til transport af el-scooteren	7
2.7 Sikkerhed: Løft af el-scooteren	7
3.0 Tilsigtet anvendelse af scooteren	8
3.1 Anvendelsesområde: Brugerens	8
3.2 Anvendelsesområde: Brugerforhold	9
4.0 Opsætning af el-scooteren	10
4.1 Sædehøjde	10
4.2 Sædedybde	10
4.3 Bagvinkel	10
4.4 Armlænets vinkel	10
4.5 Justering af styresøjle	11
4.6 Styrets højde	11
4.7 Betjeningsenhedens systemprogram	11
4.8 Tilgængelige VALGMULIGHEDER	11
4.8.1 Kontrolsystemer	11
4.8.2 Dæk	12
4.8.3 Tilbehørsstang	12
4.8.4 Monteringspunkter til universelt tilbehør til mobilitetsscootere	12
4.8.5 Sunrise Intelligence – El-scooter-forbindelse (ikke tilgængelig på alle markeder)	12
4.8.6 Hoftesele / siddepositioneringssele	13
5.0 Sådan bruges el-scooteren	14
5.1 Inspektion af el-scooter før brug	14
5.2 Sådan foretages en forflytning	15
5.3 Kørsel med el-scooteren	15
5.4 Sving	16
Brug blinklysene, når du ændrer retning	16
5.5 Brems og nødstop	16
5.6 Kørsel på en skråning	17
5.7 Forhindringer og kantsten	17
5.8 Sådan skubbes scooteren	18
5.9 Anvendelse i nærheden af vand	18

6.0 Styringsfunktioner	19
6.1 Ændring af indstillinger	20
6.2 Tænd/sluk	21
6.2.1 Tænd med nøgle	21
6.2.2 Tænd med adgangskode	21
6.2.3 Sluk	21
6.3 Lys	21
6.3.1 Forlygter, kørellys og baglygter	21
6.3.2 Blinklys	21
6.3.3 Katastrofeblink	22
6.4 Kørsel	22
6.4.1 Fremadkørsel	22
6.4.2 Bakning	22
6.4.3 Fartpilot	22
6.5 Opbremsning	22
6.5.1 Nødopbremsning ved hjælp af håndbremsen	22
6.5.2 Nødbremsning ved hjælp af stopknappen	22
7.0 Batterier, opladning og kapacitet	23
7.1 Batterier	23
7.2 Opladning af batterier	23
7.2.1 Opladerstik	23
7.3 Lithium-ion-batteri under 3 °C	25
7.4 Kørselsdistance	25
7.5 Batterigarantier	26
7.6 Aftagning af batteri	26
7.7 Afmontering af batterier før flytransport	26
8.0 Transport	27
8.1 Transport i køretøjer	27
8.2 Tag el-scooteren med toget	27
8.3 Andre transportkrav	27
9.0 Vedligeholdelse og rengøring	28
9.1 Vedligeholdelse	28
9.2 Vedligeholdelse af dæk og dæktryk	30
9.2.1 Dæktryk	30
9.2.2 Dækslid	30
9.3 Vejledning i udskiftning af dæk	30
9.4 Vedligeholdelses- og eftersynsplan	31
9.5 Belysningsvedligeholdelse	32
9.6 Rengøring og desinfektion	32
9.7 Opbevaring i længere tid	33
9.8 Opbevaringstemperatur & fugtighed	33
10.0 Fejlsøgning	34
11.0 Bortskaffelse	35
12.0 Specifikationsblade (EN 12184 og ISO 7176-15)	36
13.0 Garanti	38
14.0 Navnemærkat	39

1.0 Brugerinformation

Tak, fordi du har valgt en Sunrise Medical el-scooter. Sunrise Medicals kvalitetsprodukter er designet til at forbedre din uafhængighed og gøre din hverdag nemmere.

Som en del af vores løbende produktforbedringer forbeholder Sunrise Medical sig retten til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel.

Alle ændringer i den tilvejebragte information til eksisterende brugere skal imidlertid kommunikeres tydeligt ud til dem, hvis de er væsentlige for sikkerheden.

Det er ikke alle de tilbudte funktioner og muligheder, der passer til alle el-scooterens konfigurationer.

Alle dimensioner er omtrentlige og kan udsættes for ændringer.

El-scooterens forventede levetid er 6 år. Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på el-scooteren, medmindre sådanne er officielt godkendt af Sunrise Medical.

1.1 Denne brugervejledning

Denne brugervejledning vil hjælpe dig med at anvende og vedligeholde din el-scooter på sikker vis.


Du må ikke bruge din el-scooter før du har læst og forstået hele denne vejledning!

1.2 For yderligere information


Hvis du har spørgsmål vedrørende brug, vedligeholdelse eller sikkerhed vedrørende din el-scooter, bedes du kontakte din lokale, autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt den lokale forhandler ikke kan hjælpe, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til Sunrise Medical ApS.

For information om produktsikkerhedsbemærkninger eller produkttilbagekaldelser, fortsæt til **www.sunrisemedical.dk**

I tilfælde af, at Sunrise Medical foretager en sikkerhedsrelateret produktændring, vil alle kunder blive kontaktet og informeret om dette.

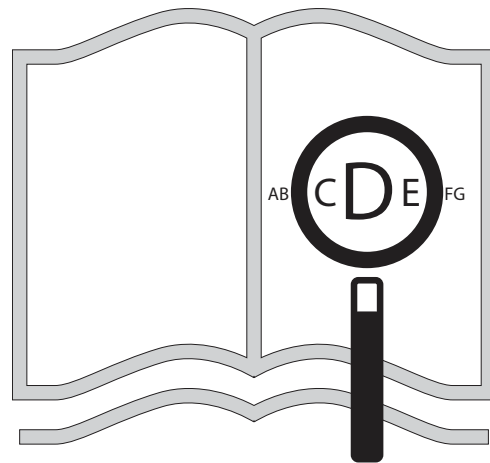

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på **www.sunrisemedical.dk**

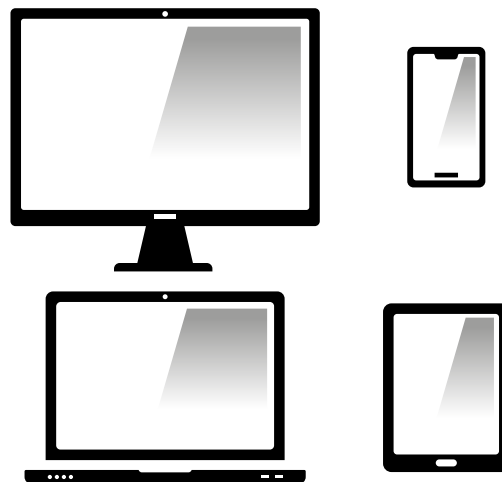

eller alternativt kan det stilles til rådighed med stor tekst.



1.3 Symboler anvendt i denne vejledning

 RISIKO!	Mulig risiko for skade, alvorlig skade eller død
 ADVARSEL!	Mulig risiko for skade
 VIGTIGT!	Mulig beskadigelse af udstyr
BEMÆRK!	Generelle råd og oplysninger om bedste fremgangsmåde
	Henviser til yderligere dokumentationsmateriale

 Som producent erklærer SCOOZY B.V. hermed, at dette produkt overholder bestemmelserne i Forordning om medicinsk udstyr (2017/745).

BEMÆRK:

Generelle brugerråd

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

Kombinationer af medicinsk udstyr (UKCA)

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med yderligere medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.Sunrisemedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret.

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med yderligere medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på www.Sunrisemedical.dk. Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

Vejledning om kombination, såsom montering, kan findes på www.SunriseMedical.dk.

2.0 Sikkerhed:

Følg altid anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler nøje! Hvis disse anvisninger ikke følges nøje, kan det resultere i personskade, beskadigelse af el-scooteren eller omgivelserne. Når det er muligt, er der medtaget sikkerhedsinformation i det relevante kapitel.

2.1 Symboler og mærkater anvendt på produktet

Skilte, symboler og anvisninger, der er klæbet på el-scooteren, udgør en del af sikkerhedsoplysningerne. De må aldrig tildækkes eller fjernes. De skal være til stede og let læselige i hele el-scooterens levetid.

Udskift eller reparér straks alle ulæselige eller beskadigede skilte, symboler og anvisninger. Kontakt din forhandler for at få assistance.

Fig. 2.1 Friløbsmærkaten er placeret oven på motorhjelm over motoren. "Enable" angiver den indstilling, hvor S800 kan bevæges frit, og "Disable" angiver den indstilling, hvor S800 er klar til at blive drevet elektrisk.

Fig. 2.2 Mærkat på gasfjederen for at forhindre, at kropsdele kommer i klemme

Fig. 2.3 Serienummeret og informationsmærkaten

Fig. 2.4 CE-mærkaten sidder på stellet under ratstammen. Alle køretøjer har en serienummerplade, der angiver produktionsåret og serienummeret.

Fig. 2.1



Fig. 2.2




Fig. 2.3

TYPE Scooter - For outdoor use	Rear axle - Front axle
NAME Sterling S800	200 kg - 70 kg
UDI YYYY-MM	MedPath Limited
10° rated slope	27 Old Gloucester Street
161 kg - max. user weight	London WC1N 3AX, UK
(01) 8720648771026	SN 001-01-01
Scoozy B.V.	
Groothandelsweg 1	
2645 EH Delfgauw, NL	

Fig. 2.4



Fig. 2.5

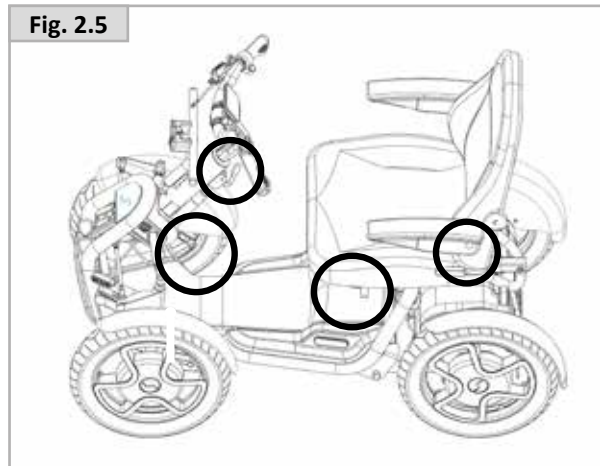

2.2 Sikkerhed: Temperatur



ADVARSEL!

- Undgå fysisk kontakt med el-scooterens motor. Motorerne er kontinuerligt i bevægelse under anvendelse og kan opnå høje temperaturer. Efter anvendelse vil motorerne køle langsomt ned. Fysisk kontakt kan forårsage forbrændinger. Lad motorerne køle ned i mindst 30 min. efter anvendelse.
- Hvis du ikke anvender el-scooteren, skal du sikre dig, at den ikke står udsat for direkte sollys i længere perioder. Visse dele af el-scooteren, såsom sædet, ryg- og armlæn, kan blive varme, hvis de har været udsat for sollys for længe. Dette kan forårsage forbrændinger eller allergiske reaktioner på huden.
- Vær opmærksom på, at meget koldt vejr og udsatte metaldele kan udgøre en fare for frostskeer, specielt hvis hænderne er våde.

2.3 Sikkerhed: Bevægelige dele (Fig. 2.5)



RISIKO!

En el-scooter har bevægelige og roterende dele. Kontakt med bevægelige dele kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af el-scooteren. Kontakt med el-scooterens bevægelige dele skal undgås.

- Hjul
- Sædets rotationsarm
- Arm til fremad-/tilbagelæning af sædet
- Justering af styresøjens vinkel
- Foldning af armlænene
- Betjening af friløbshåndtaget

2.4 Sikkerhed: Elektromagnetisk stråling



VIGTIGT!

En standardversion af din elektriske el-scooter er blevet testet mht. de gældende regler om elektromagnetisk stråling (EMC-krav). På trods af disse tests:

Kan det ikke udelukkes, at elektromagnetisk stråling kan have en indvirkning på din el-scooter. For eksempel:

- mobiltelefoni
- stort, medicinsk udstyr
- andre elektromagnetiske strålingskilder
- Det kan ikke udelukkes, at el-scooter kan interferere med elektromagnetiske felter. For eksempel:
- Butiksdøre
- Tyverialarmer i butikker
- Elektriske garagedørsåbnere

I det usandsynlige tilfælde, at sådanne problemer skulle opstå, beder vi dig straks underrette din forhandler herom.



RISIKO!

- Hvis der anvendes tovejsradioer, walkie-talkies, kortbølgeradio, amatørradio, offentlig mobilradio eller andet kraftigt sendeudstyr, bør el-scooteren standses og slukkes.
- Trådløse telefoner og mobiltelefoner inkl. modeller til håndfri betjening kan normalt anvendes uden problemer, men hvis man bemærker uregelmæssigheder i el-scooterens funktion, skal der slukkes for el-scooteren med det samme.

2.5 Sikkerhed: Kvælningsfare



RISIKO!

Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.

2.6 Ramper til transport af el-scooteren



RISIKO!

- Når du bruger en rampe, skal du sikre dig, at den kan bære den samlede vægt af scooteren og dig selv.
- Hvis der anvendes en rampe til at køre en el-scooter ind i et køretøj, skal rampen være forsvarligt fastgjort til køretøjet.
- Kør altid lige på rampen, og vær særligt forsigtig under kørslen.
- Sørg for, at rampen er egnet til den type mobilitetsprodukt, der skal transporteres.
- Maksimal rampevinkel = 10° (18%)
- Følg alle de brugervejledninger, som følger med rampen.
- Vær opmærksom på, at tilbehør monteret på el-scooteren kan påvirke den samlede stabilitet.



RISIKO!

- Sørg for, at såvel brugeren som alle ledsagere har fuldt kendskab til liftproducentens vejledning i, hvordan kørestolsliften anvendes.
- Liftproducentens anbefalinger for sikker driftsbelastning og vejledning angående vægtfordeling skal overholdes til enhver tid.
- Sørg altid for at slukke for al strømforsyning til kørestolen, mens du befinder dig på liften. Hvis du ikke gør dette, kan du ved et uheld komme til at røre ved gashåndtaget/betjeningsknapperne og få din scooter til at køre af platformen. Bemærk, at et eventuelt rullestop sidst på platformen ikke altid er nok til at afværge denne risiko.
- Sørg altid for, at brugeren er sikkert placeret i el-scooteren og ikke risikerer at falde ud, mens el-scooteren befinder sig på liften.
- Sørg altid for, at el-scooteren er indstillet til køreposition, når el-scooterliften anvendes (dvs. at hjulene er låst, så frihjulsfunktionen ikke er slået til).

2.7 Sikkerhed: Løft af el-scooteren



ADVARSEL!

- Løft ikke denne el-scooter, sæde eller batterier i dele, der kan aftages, da dette kan resultere i beskadigelse af el-scooteren eller kvæste brugeren.

3.0 Tilsigtet anvendelse af scooteren

Generel beskrivelse

Sterling S800 fra Scoozy gør det nemt at skifte fra at cykle til en el-scooter med velkendte betjeningsknapper på styret, 18-tommers hjul, avanceret affjedring og et litumbatteri. S800 er bygget med henblik på stabilitet og komfort på både by- og naturstier og tilbyder en stilfuld og tilpasselig mobilitetsløsning.

3.1 Anvendelsesområde: Brugeren

Scootere er udelukkende beregnet til brugere, der kan have svært ved at gå længere strækninger eller i længere tid, til personlig brug både indendørs og udendørs på (asfalterede og uasfalterede) fortove, gangstier, cykelstier, skovstier og veje (hvis det er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler).

Brugeren af en el-scooter skal have kognitive, fysiske og visuelle evner.

Brugeren skal kunne bedømme og korrigere konsekvenser ved handlinger i forbindelse med betjeningen af el-scooteren.

El-scooteren kan ikke transportere mere end 1 person ad gangen. Den maksimale vægtgrænse (inklusive både brugeren og eventuelt tilbehør monteret på el-scooteren) er 161 kg.

For restriktioner om brugervægt, se de tekniske specifikationer, kapitel 12.

Brugeren skal være bekendt med indholdet af denne brugermanual, før vedkommende kan køre med el-scooteren. Endvidere skal brugeren af el-scooteren have grundige anvisninger af en kvalificeret specialist, før vedkommende kører i trafik. De første sessioner i el-scooterkørsel skal øves under opsyn af en træner/rådgiver.

Indikationer

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:


- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputation)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Slagtilfælde og hjerneslader
- Neurologiske lidelser
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

Kontraindikationer

El-scooteren må ikke anvendes i tilfælde, hvor en eller flere af følgende situationer forringer den sikre drift:

- Ved synslidelser eller anden forstyrrelse af opfattelsesevnen
- Forstyrrelser i bevidstheds- eller opmærksomhedsevne
- Ukontrollerede, ufrivillige bevægelser eller ubalance, der ikke kan imødekommes
- Ustabil position i siddende stilling
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme

Fig. 3.1

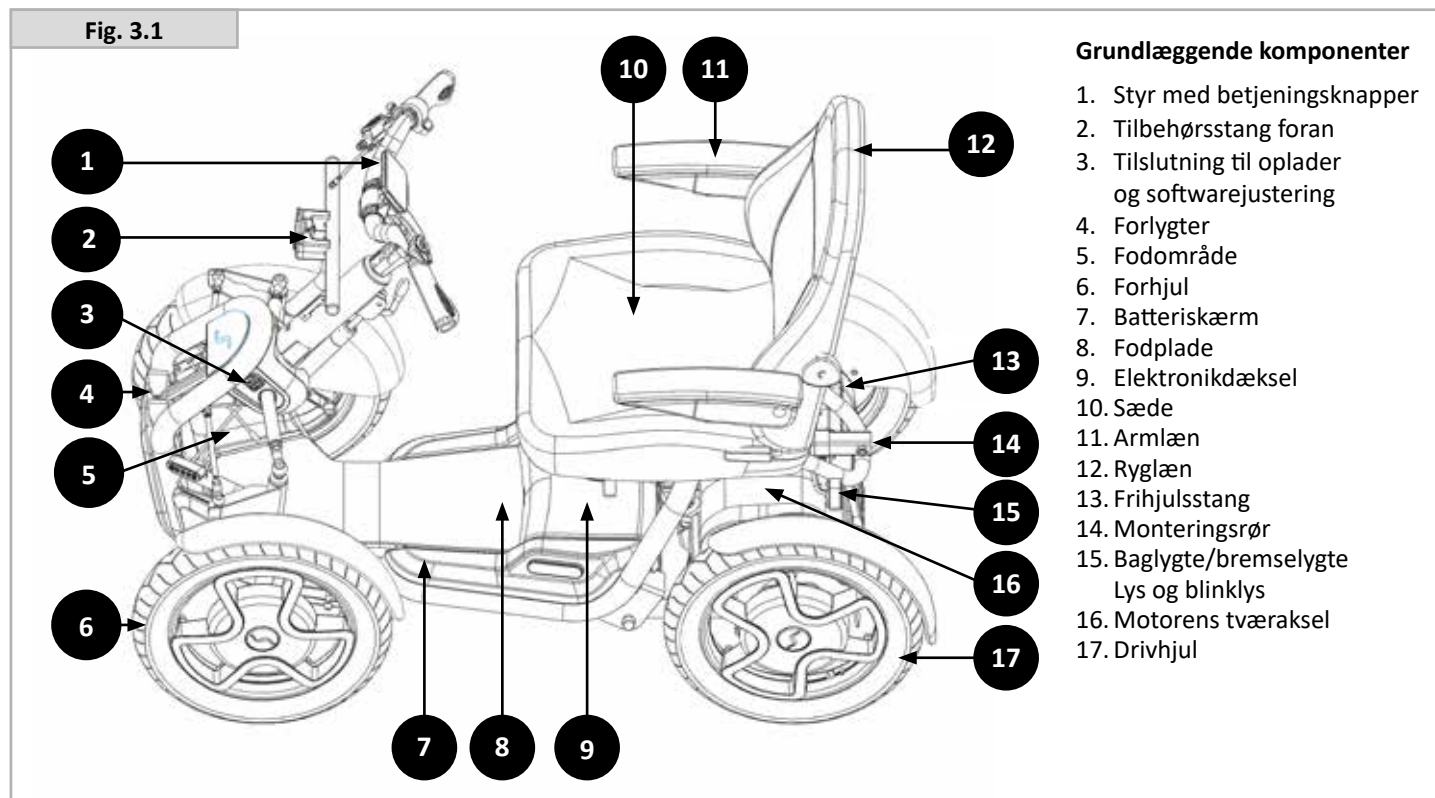

BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel på en el-scooter kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og visuelle færdigheder. Brugeren skal være i stand til at vurdere virkningerne af handlinger under betjening af el-scooteren og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til el-scooteren og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af el-scooteren og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.



ADVARSEL!

- Hvis du er påvirket af stoffer (f.eks. narkotika, alkohol eller medicin), der kan påvirke din køreevne, må du ikke køre på el-scooteren.
- Der kræves et tilstrækkeligt syn for sikkert at kunne køre en el-scooter.
- Der kan kun sidde én person i el-scooteren ad gangen.
- Børn må ikke køre el-scooteren uden opsyn.



VIGTIGT!

- Brugeren af el-scooteren er altid selv ansvarlig for at overholde de gældende, lokale sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer.

3.2 Anvendelsesområde: Brugerforhold

S800 kan anvendes som en EN12184: El-scooter af type C. El-scootere i Klasse C er normalt ganske store. De er derfor ikke nødvendigvis beregnet til indendørs brug, men kan tilbagelægge længere afstande og forcere udendørs forhindringer.

Disse modeller er beregnet til brug på offentlige steder og lignende områder, hvor der findes fortov, fodgængerstier eller gulve med hårde, faste kørselsflader. Sikkerhedsgrænserne for kørsel på skråninger og over forhindringer skal overholdes til enhver tid.

El-scooterne kan bruges på offentlig vej i henhold til de gældende færdselsregler.

Hastigheden skal tilpasses omgivelserne.



ADVARSEL!

- Kør forsigtigt på glatte veje forårsaget af regn, is eller sne!
- Tænd for lyset ved begrænset udsyn.
- Når du kører ved højere hastigheder, skal du være særligt opmærksom.
- Vælg en lavere maksimal hastighed indendørs, på fortove og i fodgængerområder.
- Kør ikke ud over høje forhindringer.
- Du må ikke fastgøre vægt til el-scooteren uden forudgående tilladelse fra en kvalificeret specialist. Dette kan påvirke produktets stabilitet negativt.



VIGTIGT!

- El-scooteren må ikke komme i kontakt med havvand: havvand er kaustisk og kan beskadige kørestolen.
- El-scooteren må ikke komme i kontakt med sand: sand kan påvirke el-scooterens bevægelige dele, hvilket resulterer i omfattende slitage af disse dele.
- El-scooteren må ikke anvendes, hvis temperaturerne er under: -25 °C eller over +50 °C.
- Du må ikke skubbe og/eller trække genstande med el-scooteren.
- Kør ikke igennem vandpytter.

4.0 Opsætning af el-scooteren

S800 kan tilpasses efter brugerens specifikke behov. Indstillingerne udføres én gang, inden el-scooteren anvendes første gang. De skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

4.1 Sædehøjde (Fig. 4.1)

Sædet er fastgjort til sadelpinden med en møtrik-og-bolt-forbindelse. Hvis det er nødvendigt, kan din forhandler eller leverandør justere sædehøjden med 2 eller 4 centimeter.

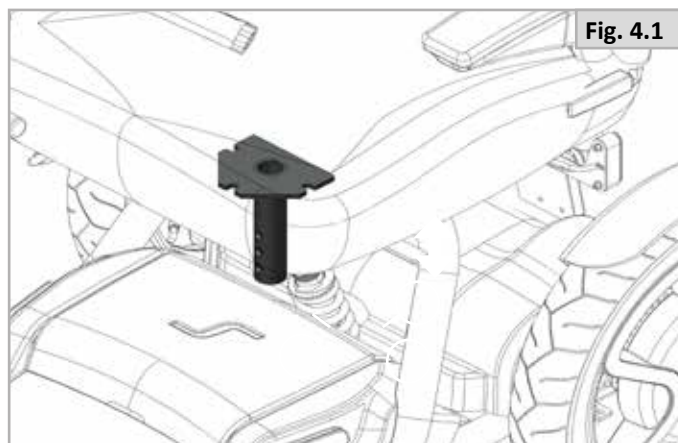


Fig. 4.1

4.2 Sædedybde (Fig. 4.2)

⚠ ADVARSEL!

- Når du flytter stolen ved hjælp af glideslæden, flytter tyngdepunktet sig. Vær opmærksom på dette, især når du kører op ad en skråning.
- Justér ikke sædets position under kørslen, da det kan medføre alvorlige skader, hvis du mister kontrollen.

1. Løft håndtaget (A) på højre side af sædet.
2. Skyd sædet fremad eller bagud.
3. Slip håndtaget, og kontrollér, at det klikker og er låst.

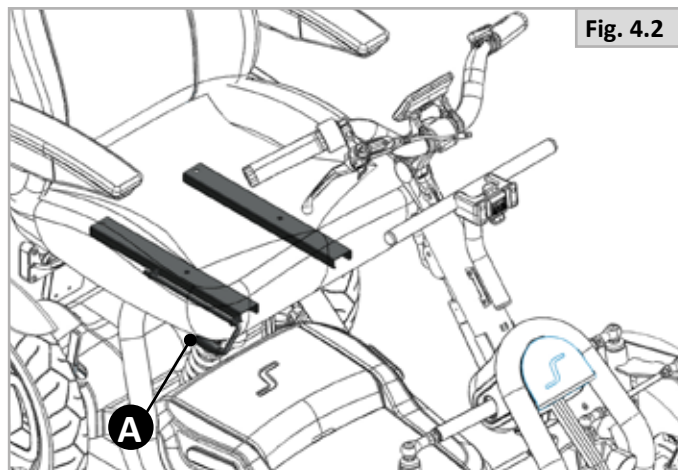


Fig. 4.2

4.3 Bagvinkel (fig. 4.3)

⚠ ADVARSEL!

- Ved justering af rygvinklen, pas på at fingrene ikke kommer i klemme.
- Justér kun ryglænet, når du sidder i stolen.

1. Sæt dig ned på sædet.
2. Løft håndtaget (A) i venstre side bag på sædet.
3. Brug overkroppen til at skubbe ryglænet bagud til den rigtige position, eller:
4. Bøj overkroppen fremad, så ryglænet automatisk bevæger sig fremad.
5. Slip håndtaget, og kontrollér, at ryglænet klikker og er låst.



Fig. 4.3

4.4 Armlænets vinkel (Fig. 4.4)

Drej justeringshjulet (A) nederst på armlænet for at hæve eller sænke armlænet til den ønskede vinkel.

⚠ VIGTIGT!

Armlænets position ændres, når ryglænet justeres.

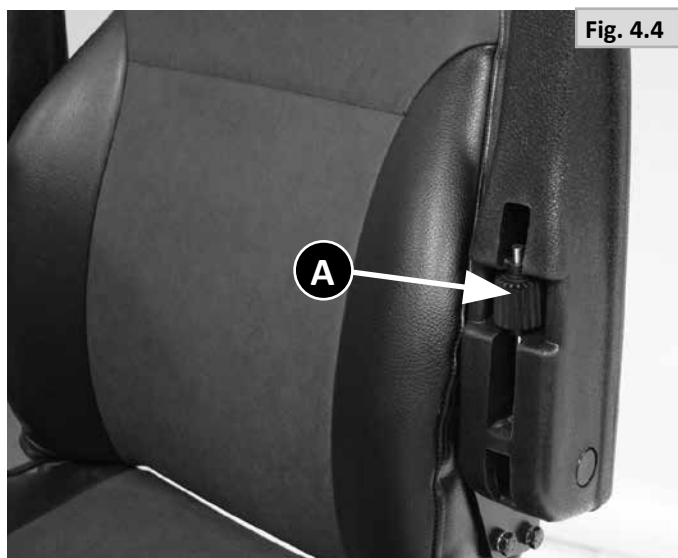


Fig. 4.4

4.5 Justering af styresøjle (Fig. 4.5)



RISIKO!

- Justér ikke ratstammens vinkel under kørslen. En gasfjeder sørger for, at styret automatisk bevæger sig fremad.
- Styresøjlen må ikke justeres, mens el-scooteren er i bevægelse, da der kan opstå alvorlige skader, hvis du mister kontrollen.
- Styresøjlen justeringshåndtag må ikke bruges til at bære udstyr såsom poser osv.
- Sørg for, at der ikke er fingre eller andet udstyr omkring den nederste styresøjle, når der foretages justeringer. Der kan opstå alvorlige skader, hvis fingrene kommer i klemme.

1. Sæt dig ned på sædet.
2. Træk håndtaget (A) mod dig.
3. Træk ratstammen mod dig selv, eller skub den væk, indtil den ønskede position er nået.
4. Slip håndtaget (A) for at låse ratstammen i den ønskede position, og kontrollér, at den er korrekt fastspændt igen.

4.6 Styrets højde (fig. 4.6)

Du kan ændre styrets højde ved at flytte frempinden højere eller lavere.

1. Tryk på knappen i venstre side af frempinden.
2. Træk hurtigudløserhåndtaget op, og indstil styret til den ønskede position.
3. Lås styret igen ved at trykke hurtigudløserhåndtaget nedad, og kontrollér, om styret er korrekt fastspændt igen.

4.7 Betjeningsenhedens systemprogram

Denne el-scooter er udstyret med et kontrolsystem, der kan programmeres ved at justere indstillingerne i systemet. Dette er en specialiseret opgave, der kræver en særlig træning, og som kun kan justeres med professionelt software. Slutbrugeren har ikke lov til at justere disse indstillinger.



RISIKO!

- Overlad kun programmeringen af el-scooteren til teknikere, der er uddannet af Scoozy eller Sunrise Medical.
- Forkerte indstillinger på styreenheden kan føre til farlig kørsel og endda forårsage skader eller personskader.
- Du bør kun ændre indstillingerne, hvis du har fuldstændig styr på kørslen med S800.

4.8 Tilgængelige VALGMULIGHEDER

Kontakt din forhandler for rådgivning om versioner samt køb og montering af ekstraudstyr og tilbehør.

4.8.1 Kontrolsystemer (Fig. 4.7)

S800 er udstyret med et lodret fingergashåndtag (A), betjeningsknapper (B) og en håndbremse/parkeringsbremse. I standardopsætningen er det lodrette fingergashåndtag og håndbremsen placeret til højre, mens knapperne er til venstre. Din forhandler kan justere betjeningselementernes placering efter anmodning.

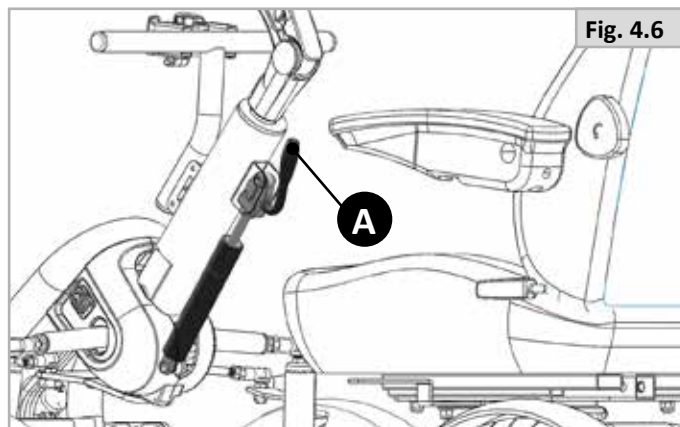


Fig. 4.6

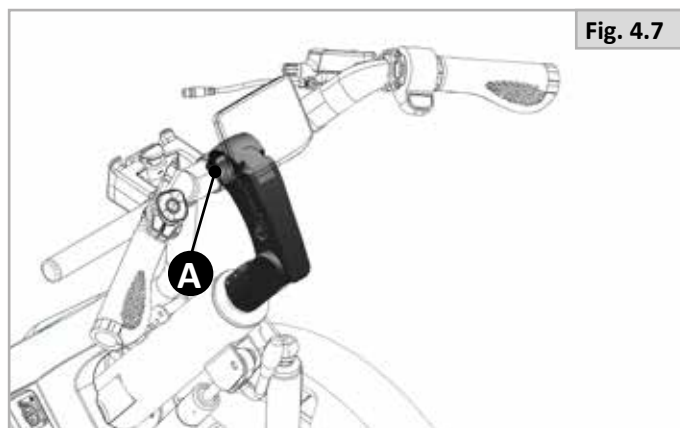


Fig. 4.7

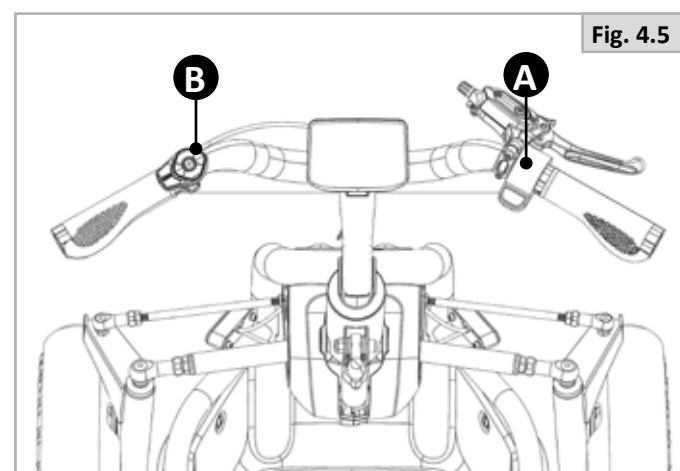


Fig. 4.5

4.8.2 Dæk

Din S800 er som standard udstyret med Trail-dæk med groft mønster, som giver godt vejgreb på ujævnt terræn og i bymiljøet.


City-dæk med glat mønster kan købes via Sunrise Medicals online reservedelskatalog.

Disse kan monteres, hvis du ikke primært vil bruge din S800 på uasfalterede stier udendørs, og de kan reducere støj.

4.8.3 Tilbehørsstang (fig. 4.8)

Den forreste tilbehørsstang kan monteres på styrstammen på S800. Følgende tilbehør kan fastgøres til denne stang, med en maksimal bæreevne på 7 kg:

- KLiCKfix-styradapter
- KLiCKfix Lamello-kurv 18 l
- Spejl (venstre og/eller højre)

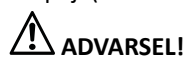

ADVARSEL!

Pas på, at tilbehør, der er monteret på tilbehørsstangen, ikke hindrer styringen eller trykker på bremsearmen, når du styrer.

4.8.4 Monteringspunkter til universelt tilbehør til mobilitetsscootere (fig. 4.9)

S800 er som standard udstyret med to monteringsrør bag på rammen (A) og under sædet (B). Disse kan bruges til at montere forskellige universelle tilbehørsdele til el-scootere, såsom et regntag, en reflekterende advarselstrekant (påkrævet i Tyskland), holder til stokke, rollator eller iltflaske. Den maksimale belastning for disse monteringspunkter er 10 kg.



ADVARSEL!

- Vær opmærksom på, at fastgjort tilbehør øger el-scooterens effektive pladsbehov.
- Pas særlig godt på, når du manøvrerer, hvis du har en rollator eller gangstativ med på el-scooteren.
- Sørg for, at lasten er forsvarligt fastgjort, inden du starter kørslen.
- Du gøres opmærksom på at det vægt du har med som bagage kan skjule baglygterne på el-scooteren. I et sådan tilfælde bør du køre på fortovet med lasten på, specielt om aftenen.



ADVARSEL!

Mens du indtager ilt, skal du overholde alle sikkerhedsregulativerne i forbindelse med brug af ilt.

- Du må ikke befinde dig i et område, hvor der bruges åben ild.
- Du må ikke ryge.
- Du må ikke bruge transmitterende enheder såsom mobiltelefoner osv.

4.8.5 Sunrise Intelligence – El-scooter-forbindelse (ikke tilgængelig på alle markeder)

Hvis Sunrise Intelligence – El-scooter-forbindelsesmodulet er installeret i din S800 Scooter, kan du forblive forbundet via STERLING-appen, som er tilgængelig i iOS App Store eller i Google Play-butik.

STERLING-appen til din S800 el-scooter tilbyder en række fordele for dig som el-scooterbruger. Download STERLING-appen for at få flere oplysninger.

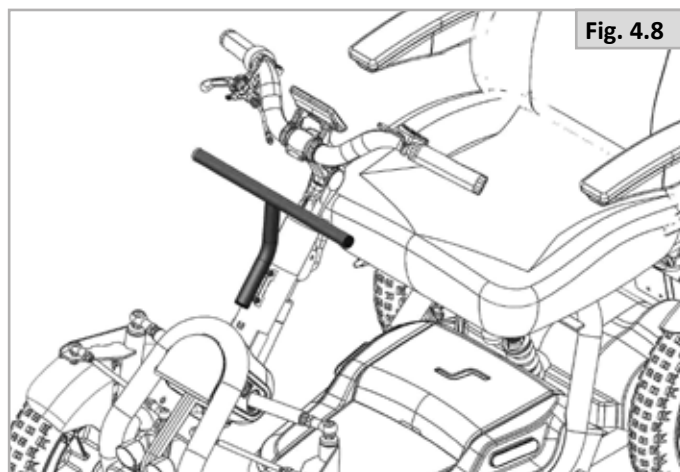


Fig. 4.8

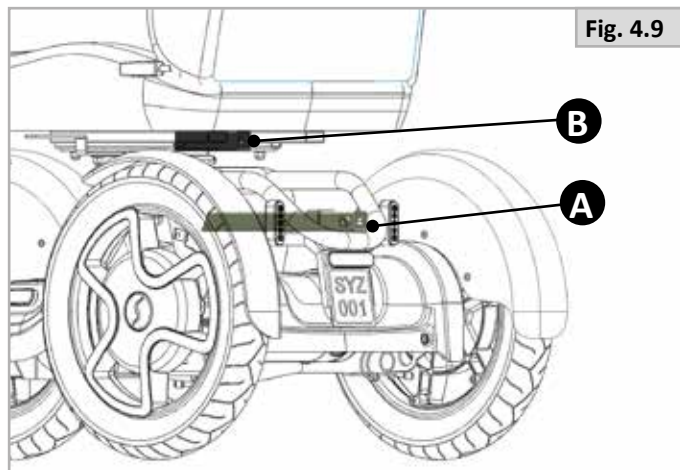


Fig. 4.9

BEMÆRK: Hvis forbindelsesmodulet er installeret, er strømforbruget i standbytilstand højere. Vær særlig opmærksom på opbevaring på mellemlangt til langt sigt, kapitel 9.7.



4.8.6 Hoftesele / siddepositioneringssele

RISIKO/ADVARSEL!

- Dette produkt må kun bruges til at placere en enkelt person i en el-scooter.
- Bær selen over tøjjet.

Montering af en hoftesele/siddepositioneringssele

Fastgør selerne til rammen ved hjælp af et webspænde til venstre og til højre. (Fig. 4.10).

1. Træk selen gennem webspændet. (Fig. 4.11)
2. Træk selestroppen rundt om rammen. (Fig. 4.12)
3. Træk nu selestroppen gennem det justerbare tre-web spænde, og indstil den ønskede længde. (Fig. 4.13)
4. Til sidst skal du føre bæltebælter tilbage gennem det justerbare tre-web spænde. (Fig. 4.14)

For komfortens skyld skal hofteselen være monteret korrekt på el-scooteren. Hvis du er i tvivl om montering eller betjening af denne funktion, bedes du kontakte din godkendte Sunrise Medical-forhandler.

Anvendelse

1. For at åbne låsen skal du trykke på den røde knap og trække låsen fra hinanden. Når låsen lukkes, indikerer et hørbart "klik", at låsen er gået korrekt i indgreb.
2. Selens længde kan justeres ved hjælp af hurtigjusteringen og fastgøres med et justerbart tre-web spænde. For at justere skal du først fjerne den løse ende af selen fra det justerbare tre-web spænde. Træk remmen lodret væk fra låsen for at justere bæltebælter. Justér hofteselen, så der højst er en håndsbredde mellemrum for at sikre komfort og sikkerhed (fig. 4.15). Håndens frihøjde skal være med hofteselen under den normale spænding, og der må ikke være store afstande eller løkker.

RISIKO/ADVARSEL!

- Sørg altid for, at hofteselen er forsvarligt fastspændt og justeret korrekt inden brug. Hvis selen er for løs, kan det få brugeren til at glide ned, og dette kan forårsage alvorlige personskader.
- Kontrollér hver måned, at udløerspændet fungerer korrekt, og at der ikke er tegn på slitage på materialet eller plastbeslagene. Defekte eller beskadigede positioneringsbælter- og seler må aldrig bruges og skal udskiftes straks.
- Bælteender: Løse bælteender kan vikle sig ind og sætte sig fast i drivhjulene (i egerne). Sørg for, at bælteenderne er sikkert fastgjort.
- Sikkerhedssele-spænde: Der er risiko for at blive klemt. Sørg altid for, at bæltebælter er korrekt fastgjort.

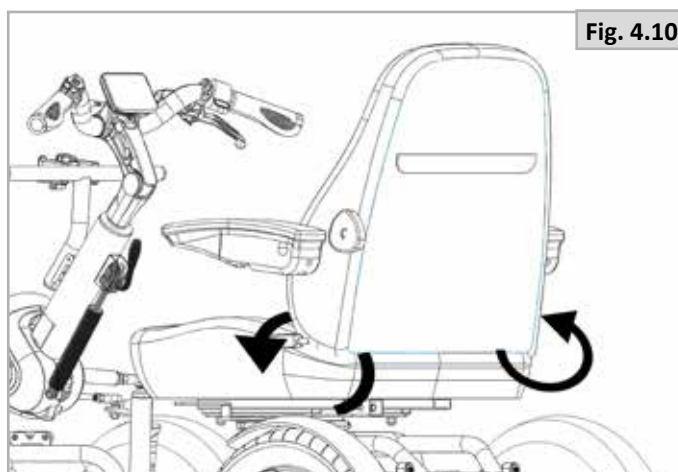


Fig. 4.10



Fig. 4.11



Fig. 4.12



Fig. 4.13



Fig. 4.14

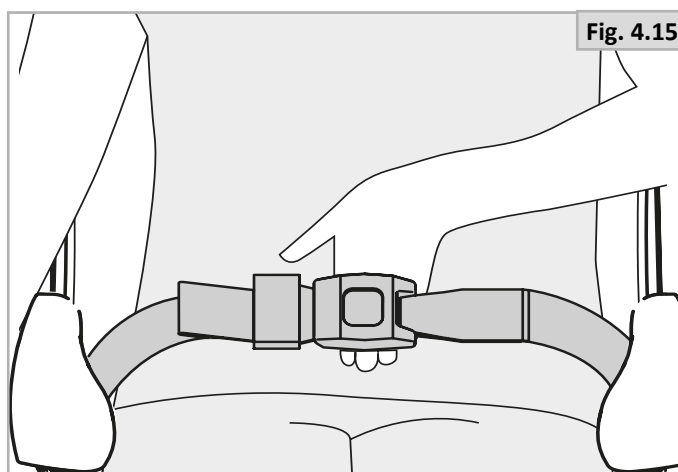


Fig. 4.15

5.0 Sådan bruges el-scooteren



- Vær opmærksom på, at du muligvis skal have justeret betjeningsenhedens indstillinger til din el-scooter.



Vægtbegrænsninger

- Brugeren samt udstyr og tilbehør og andre ting, brugeren har med, må under ingen omstændigheder veje mere end den maksimale brugervægt.
- Sæt dig aldrig i el-scooteren under vægttræning, hvis den samlede vægt (bruger plus ekstra vægte) overstiger den maksimale brugervægt.
- Hvis denne vægtbegrænsning overskrides, vil der højst sandsynlig opstå skader på sædet, rammen eller fastgørelseselementerne. Dermed udsættes brugeren og andre for risiko for alvorlige personskader som følge af, at el-scooterens funktion svigter.
- Ved overskridelse af vægtbegrænsningen bortfalder garantien.
- Der må ikke hænges indkøbsposer på el-scooterens styr, da de kan svinge og forårsage tab af styringen eller utilsigtet kørsel.
- Du må ikke have tasker eller kasser på skødet eller fodpladen, da de kan komme i klemme mellem styret eller gashåndtaget og dig selv eller mellem dine fødder og hjulene, hvilket kan medføre tab af styringsevnen eller utilsigtede køremanøvrer.
- Overbelast ikke de forreste og bageste kurve, da styring og stabilitet vil blive påvirket negativt.

5.1 Inspektion af el-scooter før brug

Udfør det følgende daglige eftersyn rutinemæssigt før kørsel:



- Sørg for, at alle betjeningsanordninger fungerer korrekt.
- Hvis du opdager en funktionsfejl på din el-scooter, skal den sendes til reparation eller nulstilling. Din forhandler kan hjælpe dig med finde fejlen og udbedre den.
- Under kørslen skal du altid sørge for at ryglænet er i opretstående position, og at sædet vender fremad.
- Du må aldrig kortslutte en elektrisk forbindelse, da det kan forårsage en eksplosion.
- El-scooteren må ikke bruges, hvis nogen af dækkene er beskadigede eller er pumpet for lidt/for meget op.
- Når du bruger mobiltelefon, skal du slukke el-scooteren.
- Du må ikke ryge når du kører på el-scooteren.
- Hvis du holder en pause i kørslen, men forbliver siddende på el-scooteren i mere end et øjeblik, skal du slukke for el-scooteren.



Tjek hjul og dæk

- Er der nok luft i dækkene? (Kapitel 9.2).
- Lavt dæktryk reducerer rækkevidden og gør styringen vanskeligere.
- Højt dæktryk medfører en ubehagelig køreoplevelse og øger risikoen for punktering.
- Kontrollér regelmæssigt dækkene for slitage og revner.

Tjek batterier

- Inden kørestolen anvendes første gang, bør batterierne oplades i 24 timer.
- Er der nok strøm på batterierne? De grønne lys på batteriopladeren skal være tændt. (Kapitel 7.2).
- Anvend ikke el-scooteren, hvis batteriets opladning er lav. El-scooteren kan stoppe pludseligt og uventet.

Tjek lygter og blinklys

- Sørg for, at lygter og blinklys fungerer korrekt, samt at lygteglassene er rene, inden du anvender kørestolen udendørs, når det er mørkt.

Kontrol af gashåndtaget

- Med styresystemet slukket skal du kontrollere, at gashåndtaget ikke er bøjet eller beskadiget, og at det vender tilbage til midten, når du trykker på det og slipper det.

Kontrol af friløbshåndtaget

- Før du tager scooteren i brug, skal du sikre dig, at friløbshåndtaget er indstillet til 'DISABLE' (kapitel 5.8).

Tjek sædet

- Sørg for, at alle puder er placeret, som de skal.
- Sørg for, at ryglænet er monteret og justeret korrekt.
- Undersøg visuelt el-scooteren for at sikre dig, at armlæn osv. er korrekt placeret, og at alle fastgørelseselementer er forsvarligt spændt.

Tjek, at der ikke kan sætte sig tøj fast

- Når du betjener el-scooteren, skal du sørge for, at dit tøj ikke kan sætte sig fast i el-scooteren (hvis det fx er for langt). Kontrollér altid inden brug, at dit tøj eller tilbehør ikke kommer i kontakt med eller vikler sig ind i hjulene og/eller andre bevægelige og/eller roterende dele på el-scooteren.

Tjek vejrforhold

- Som med mange elektriske køretøjer om vinteren og ved meget lave temperaturer har batterierne nedsat kapacitet. Dette kan påvirke den afstand, du kan køre på din S800 el-scooter.
Vær opmærksom på kørsel ved meget lave temperaturer og den reducerede rækkevidde i forhold til det, der vises på informationsskærmen.



Undgå at bære løse manchetter/ærmer, når du betjener gashåndtaget, da dette kan medføre, at disse bliver viklet ind i gashåndtaget.


5.2 Sådan foretages en forflytning (Fig. 5.1)

RISIKO/ADVARSEL!

For at gøre det så nemt og sikkert som muligt at stige ind og ud af S800 og for at forhindre fald skal du følge disse trin:

1. **Sluk:** Sørg for, at S800 er slukket under forflytninger for at undgå utilsigtede bevægelser. Hvis den er tændt, kan utilsigtet kontakt med kontrolenheden få el-scooteren til at bevæge sig uventet.
2. **Justér kørselsretning:** Drej hjulene til højre, hvis du forflytter dig fra venstre side, og til venstre, hvis du forflytter fra højre side. Dette skaber ekstra benplads.
3. **Drej sædet:** Skub sæderotationshåndtaget (A) fremad, og drej sædet, indtil det vender mod dig. Sørg for, at sædet er låst sikkert fast i sin position.
4. **Sæt sædet tilbage i fremadrettet position:** Når du har sat dig, skal du trykke på rotationshåndtaget igen og dreje sædet fremad. Sørg for, at det låser med et klik, hvilket indikerer, at det er sikkert at bruge under kørslen.
5. **Justér sædets position:** Brug sædets glidehåndtag til at flytte sædet fremad eller bagud til en behagelig position. Sørg for, at håndtaget låses sikkert fast.
6. **Fodplacering:** Placer fødderne godt i el-scooterens forreste fodområde.
7. **Justering af styresøjle:** Justér styresøjlen (B), så alle betjeningsknapper er inden for behagelig rækkevidde.

Fig. 5.1

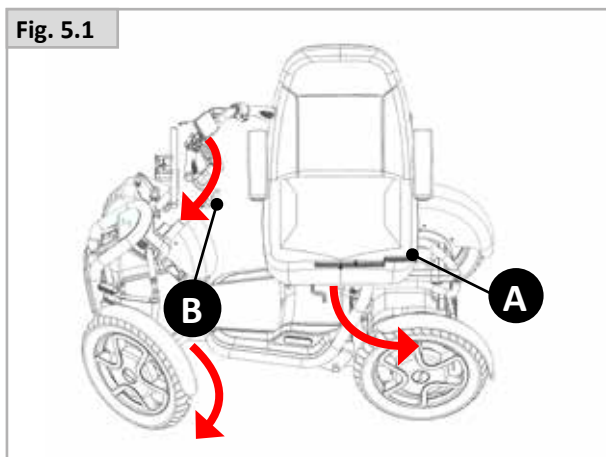

5.3 Kørsel med el-scooteren

ADVARSEL!

- Brugen af el-scooteren er til enhver tid fuldt ansvarlig for at overholde de gældende lokale sikkerhedsbestemmelser og retningslinjer.
- El-scootere styres ved hjælp af betjeningshåndtaget og kontrolpanelet (knapper), kapitel 6.

Bakspejl

ADVARSEL!

- Pas på ikke at ramme andre med spejlet. Det rager længere ud end resten af el-scooteren og medfører derfor risiko for personskade, hvis du kører for tæt på andre personer.
- Spejlet skal anvendes på modeller ved hastigheder over 6,4 km/t (4 mph) på veje i henhold til lokal lovgivning.
- Sørg altid for, at spejlet er rent og helt, så der ikke er risiko for nedsat udsyn.

Anvendelse i trafikken

Sørg altid for at vise mest muligt hensyn til andre trafikanter.

RISIKO!

- Husk, at en bilist eller en lastvognschauffør ikke er forberedt på at se en el-scooter, der bakker ned fra en kantsten og ud på vejen.
- Hvis du på nogen måde er i tvivl, bør du vente med at køre over vejen, til du er helt sikker på, at det kan gøres uden risiko.
- Sørg altid for at køre over vejen så hurtigt som muligt for at undgå andre trafikanter.
- Køb ikke hen over noget, der kan få dækkene til at punktere.
- Sørg for, at der ikke ligger ting på kørebanen, som kan sætte sig fast i el-scooterens mekanisme eller baghjulenes eger. Ellers risikerer du, at el-scooteren stopper meget brat op.
- Ved kørsel over kloakriste o.l. er der risiko for, at el-scooterens hjul sætter sig fast, så kørestolen stopper meget brat op.
- Når du bruger din el-scooter på offentlige gangstier, skal du altid være opmærksom på fodgængere og situationer, som kan kræve ekstra omtanke.
- Når du manøvrerer i begrænsede områder, herunder forretninger, skal du sørge for at vælge minimal hastighed.
- For brugerens og andre fodgængeres sikkerhed anbefaler Sunrise Medical, at når du kører på gangstier og andre vandrestier, skal el-scooterens forudindstillede hastighed indstilles til mindre end 6 km/t.

Yderligere farer

- Vær specielt opmærksom omkring små børn og kæledyr.
- Husk på, at når du kører på offentlige steder, skal du til enhver tid køre med forsigtighed og udvise hensyn til andre.
- Husk at have nøglen på dig og/eller glem ikke den adgangskode, du har indstillet, for din egen sikkerheds skyld.

Ugunstige forhold:

Bemærk, at når kørestolen anvendes under vanskelige forhold, f.eks. på vådt græs, mudder, is, sne eller andre glatte kørselsflader, er der risiko for, at el-scooteren ikke opnår sit normale vejgreb og træk.



RISIKO!

- Vi anbefaler, at du er ekstra påpasselig under sådanne forhold, især på bakker og skråninger, da el-scooteren kan blive ustabil eller skride ud med risiko for personskader til følge.
- Når du bruger en el-scooter skal du være særlig omhyggelig med løst tøj eller lange beklædningsgenstande. Bevægelige dele, som for eksempel hjul, kan blive farlige eller endda livsfarlige, hvis beklædningsdele er blevet indfiltrede.

BEMÆRK:

Meget store temperatursvingninger kan udløse kontrolsystemets beskyttelsesmekanisme. I så fald lukker kontrolsystemet midlertidigt ned for at undgå, at der opstår skader i det elektroniske system eller på selve el-scooteren.

5.4 Sving

Styring af el-scooteren er let og logisk. Husk, at du skal have god plads, når du drejer, således at baghjulene styrer udenom mulige forhindringer.

Hvis du skyder genvej over hjørnet af et fortov, kan det få baghjulet til at køre af fortovet, og dette kan give problemer, hvis hjørnet er meget ujævnt. Dette kan undgås ved at køre i en overdreven bue uden om forhindringen.

Når du styrer el-scooteren i et snævert område, som for eksempel et dørtrin eller når du vender, skal du stoppe el-scooteren og derefter dreje styret til det sted du ønsker at køre til, og derefter forsigtigt tilføre kraft. Det får el-scooteren til at dreje skarpt. Det anbefales også at sætte den forudindstillede hastighed til en lavere indstilling for at lette kontrollen i snævre områder.



RISIKO!

Forsøg ikke at udføre store sving ved fuld hastighed. Hvis du skal dreje skarpt, skal du sænke hastigheden ved hjælp af gashåndtaget eller hastighedsindstillingen. Det er især vigtigt, når du kører tværs over eller ned ad en skråning. Hvis du ikke følger dette råd, risikerer du, at el-scooteren vælter.



ADVARSEL!

Brug blinklysene, når du ændrer retning.

5.5 Bremses og nødstop

Du kan standse din el-scooter på tre måder:

- Den enkleste og sikreste måde at standse el-scooteren på er at slippe gashåndtaget. Dermed standser el-scooteren på en behersket måde og ikke alt for brat.
- Hvis du trykker på stopknappen på betjeningspanelet, bremser scooteren brat og standser hurtigt.
- Hvis du trækker i håndbremsen, mens el-scooteren er i bevægelse, vil den også standse.

I tilfælde af en alvorlig systemfejl aktiverer S800 den mekaniske sikkerhedsbremse. Dette gør det muligt for S800 at standse sikkert i enhver situation.



ADVARSEL!

- S800 kan bremse meget kraftigt. Ved fuld bremsekraft og dårligt vejgreb kan hjulene på S800 blokere, hvilket nedsætter køretøjets styrbarhed. Anvend altid bremsekraften proportionalt med hastigheden, vægten og den hældning, du kører på, uanset om du kører opad eller nedad.
- Hold altid fast i rattet med begge hænder, når du bremser, så du altid kan fortsætte med at styre.
- Deaktiver altid parkeringsbremsen, før du kører.

5.6 Kørsel på en skråning (Fig. 5.5)

Din el-scooter er konstrueret og afprøvet til at kunne anvendes på hældninger eller skrånende flader på mindst 10°.

⚠ RISIKO!

- Bremsafstande på skråninger kan være væsentligt længere end på en jævn overflade.
- Kør altid langsomt på stejle skråninger, og vær ekstra opmærksom. Kørsel på skråninger (fremad eller baglæns) er altid farligt.
- Tyngdepunktet forskydes, når du kører op eller ned ad en skråning. Vær opmærksom på dette. I visse situationer er der risiko for, at el-scooteren bliver ustabil.
- For at forbedre stabiliteten kan du læne dig forover, når du kører opad, mens sædet og ryglænet er opretstående.
- Alternativt kan du sidde oprejst, når du kører ligeud ned ad bakke, og/eller læne sædet tilbage.
- Brug aldrig friløbet på en skråning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt el-scooteren egner sig til kørsel på en skråning eller kantsten, bør du ikke forsøge at køre op eller ned ad den. Prøv at finde en anden rute i stedet.

Skråninger: opad

⚠ ADVARSEL!

- Når du kører op ad bakke, skal el-scooteren holdes i bevægelse. Undgå at køre op ad skråninger > 10° i længere tid. Dette kan medføre unormalt slid på motoren og de elektriske komponenter.
- Hvis du er stoppet på en bakke, bør du starte langsomt.
- Læn dig om nødvendigt fremover.

Skråninger: nedad

Ved kørsel ned ad bakke er det vigtigt at sørge for, at el-scooteren ikke accelererer hurtigere end den normale hastighed på jævn vej.

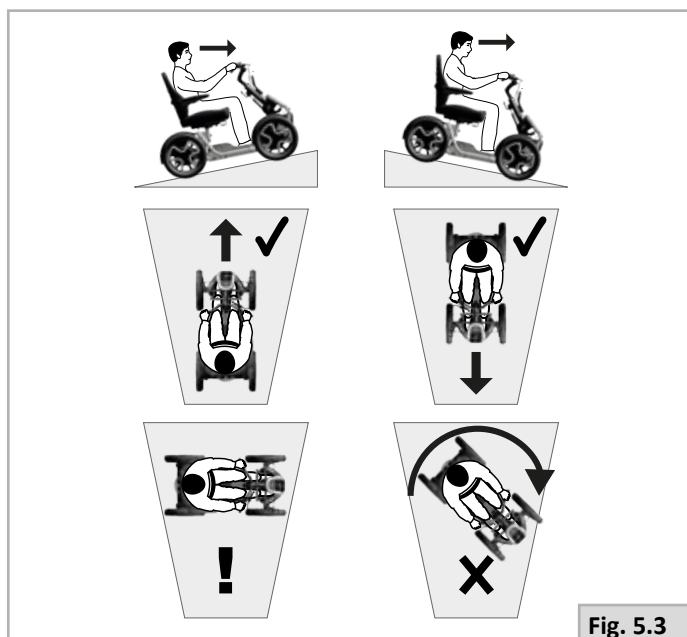


Fig. 5.3

⚠ RISIKO!

- Kør langsomt ned ad stejle skråninger (under 5 km/t), og stop med det samme, hvis du ikke føler dig tryk.
- Det er mere sikkert, at du kører langsomt ned ad stejle skråninger (under 5 km/t). Stop øjeblikkeligt, hvis du ikke føler dig tryk ved kørslen.
- Hvis el-scooteren tager fart, skal du slippe gashåndtaget for at standse al fremadgående bevægelse, derefter starte langsomt igen og undgå, at hastigheden stiger ud over et behageligt niveau.

5.7 Forhindringer og kantsten

⚠ RISIKO!

- Kør aldrig baglæns ned over en kantsten.
- Forsøg ikke at køre op eller ned ad flere trappetrin eller at anvende kørestolen på rulletrapper. Det er yderst risikabelt og kan medføre personskader eller skader på el-scooteren. Denne el-scooter er udelukkende konstrueret til at køre op ad et enkelt trin eller en kantsten.

Kantforceringer

Kør altid vinkelret (90°) på kantstenen (Fig. 5.7).

- Kør lige hen mod kantstenen eller trinnet i en 90° vinkel.
- Kør langsomt og støt fremad.
- Accelerér forsigtigt, og tag en tilløbsstrækning på 50 cm. Den maksimale tærskelhøjde, du kan køre op ad, er 10 cm. Det er bedre at køre op på fortovet via en nedsænket kantsten.
- Sørg så vidt muligt for at holde rattet lige.

Kørsel ned ad kantsten

⚠ RISIKO!

Kør langsomt og omhyggeligt forlæns med scooteren, indtil forhjulet står på kanten af kantstenen i en ret vinkel (90°). Kør så langsomt som muligt ned ad kantstenen med drivhjulene.

El-scooteren må ikke stoppes, mens den kører ned ad kantstenen. Du vil føle dig mere tryk, hvis du kan læne dig tilbage, men hvis du ikke kan, er det også ok, da el-scooteren er stabil. Så længe du holder dig inden for kørestolens begrænsning, kan du sagtens føle dig tryk.

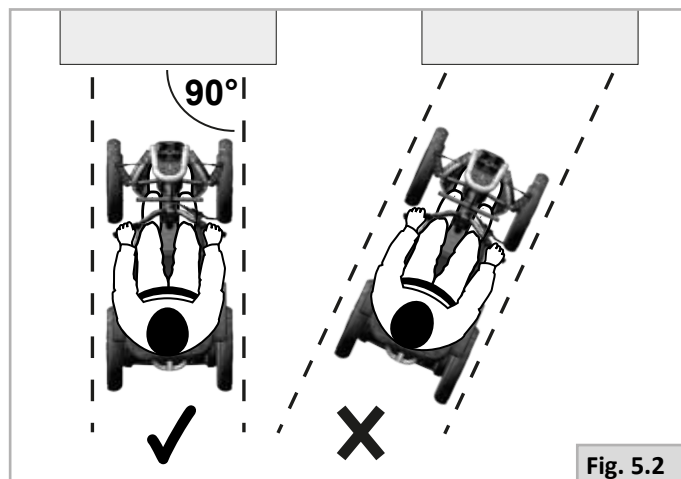


Fig. 5.2

5.8 Sådan skubbes scooteren

El-scooteren kan flyttes ved at blive skubbet. For at gøre dette skal motorerne kobles ud ved hjælp af et frihjulshåndtag. Denne funktion blev udviklet til hjælpere af el-scooterbrugere og tjener ligeledes som et nødhåndtag til frihjulet. Frihjulshåndtaget har to positioner:

DEAKTIVERING (fig. 5.8, A)

Al bevægelse, herunder bremsning, styres udelukkende af det elektroniske styresystem.


AKTIVERING (fig. 5.8, B)

Bevægelsen foretages manuelt. Bevægelsen kan også forekomme på grund af tyngdekraft (huller i vejen, kantsten, bakker eller skråninger osv.).



RISIKO!

- Frihjulshåndtaget må kun betjenes af en hjælper og aldrig af brugeren.
- En bruger må aldrig efterlades uden opsyn, mens el-scooteren befinder sig i tilstanden 'skub' (B - Fig. 5.8).
- Indstil aldrig håndtaget på positionen 'Skub' på en skråning! Når frihjulshåndtaget er indstillet på 'Skub', deaktiveres den automatiske parkeringsbremse. Dette gør det muligt for el-scooteren at rulle ned ad en hældning.
- Den automatiske parkeringsbremse virker kun, hvis håndtaget er indstillet på position 'Kørsel'.
- Når el-scooteren ikke længere bliver skubbet, skal frihjulshåndtaget straks indstilles til tilstanden 'kør'.
- For manuelt at kunne skubbe el-scooteren skal du frigøre motorbremsen.
- Du må ikke aktivere eller deaktivere motorbremsen, før strømmen til el-scooteren er slukket.
- Sørg for, at du har fuld kontrol over el-scooteren, når du udløser motorbremsen. Når du gør dette, har el-scooteren ikke nogen bremseevne.
- Sørg for, at el-scooteren befinder sig på en plan overflade, før du udløser motorbremsen.
- Bevæg kun denne el-scooter fremad i rattet og ryglænet. Når du holder i el-scooteren hér, kan du forhindre fald eller væltning.
- Kontroller, at skubbehåndtagsgrebene ikke kan dreje eller glide af.

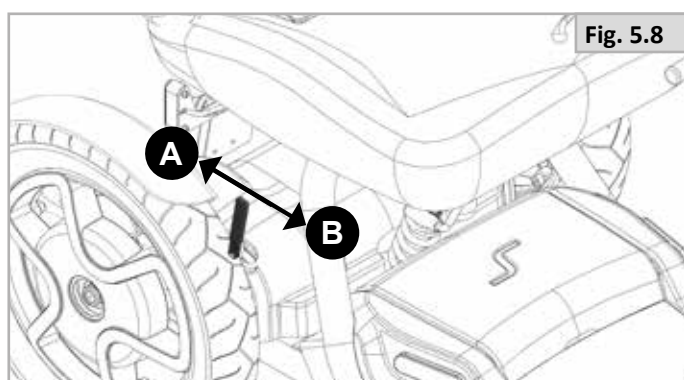

5.9 Anvendelse i nærheden af vand

Pas særligt godt på, når du bruger din el-scooter i nærheden af åbent vand. Moler, strande, havneveje, kajer og flodbredder kan være farlige.



RISIKO!

- Kør ikke langs en skrånende overflade, der fører til en kant af åbent vand.
- Hold så vidt muligt en afstand på mindst én el-scooterlængde fra kanten af det åbne vand.
- Hold øje med skjulte forhindringer såsom træerødder, kloakriste og fortøjningsringe, da du kan miste kontrollen, hvis du pludselig rammer dem.
- Brug en lav hastighedsindstilling.
- Kør aldrig baglæns mod åbent vand.
- Kør aldrig op eller ned ad stejle skråninger i nærheden af åbne vandkanter.
- Hold tilbage for fodgængere på kajer og gangstier.
- Giv signal med hornet for at lade andre personer vide, at du er der.
- Forsøg aldrig at manøvrere rundt om fodgængere, hvis du dermed kommer for tæt på vandkanten.
- Undgå dybt sand, grus, mudder og skråninger med vådt græs.
- Udvis ekstra forsigtighed i blæsevejr, da løst tøj såsom frakker eller tæpper pludselig kan flyve op og hindre kontrolenhederne eller midlertidigt blokere din udsigt.
- Kør ikke tæt på åbent vand i stormvejr.
- Når du står stille, skal du slukke for el-scooteren.
- Overhold alle lokale love, regler og regulativer.



VIGTIGT!

- Rengør altid din el-scooter grundigt, hvis den er blevet udsat for mudder, sand, salt eller andre urenheder.
- Du må ikke bruge en højtryksrenser (se afsnit 9.6).

6.0 Styringsfunktioner

Fig. 6.1

- A. Venstre håndtag
- B. Panel med knapper
- C. Justerbar stang
- D. Display
- E. Justerbar ratstamme
- F. Gashåndtag
- G. Parkeringsbremsesystem (PBS)
- H. Højre håndtag

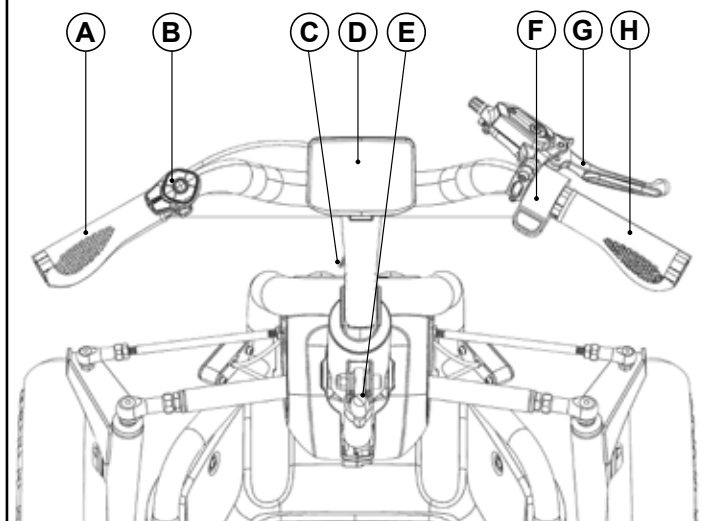


Fig. 6.2

- A. Horn
- B. DR/Fartpilot
- C. Venstre blinklys / Menu
- D. - knap
- E. Tænd-Sluk/Stop
- F. + knap
- G. Højre blinklys / Lys


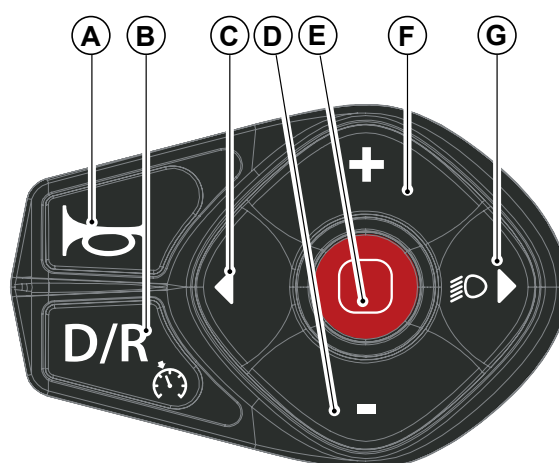


Fig. 6.3

- A. Retningspile
- B. Tid
- C. Lygter
- D. Fartpilot
- E. Batteristatus
- F. Hastighed
- G. NFC
- H. Hastighedsniveau
- I. USB-port (5 V, 500 mA)
- J. Tripmåler / Kilometertæller
- K. Gennemsnitshastighed / Maksimal hastighed
- L. Rækkevidde

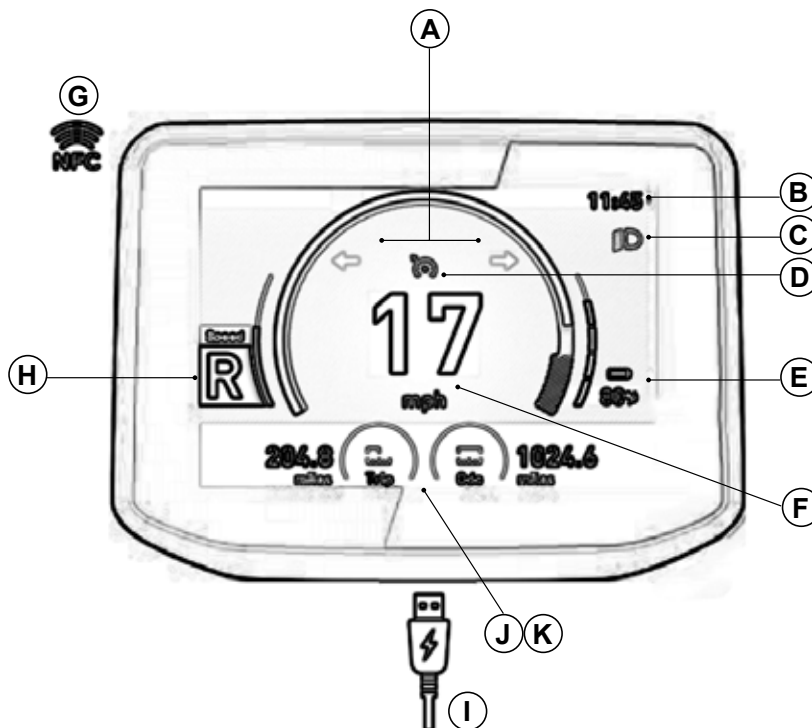

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem J, K eller L.

6.1 Ændring af indstillinger

Menu Oversigt	Handling	Instruktioner
Gå til menu	Skift indstillinger	- Tryk på knappen "venstre" i 2 sekunder for at åbne menuen. - Brug knapperne "+" og "-" til at vælge den indstilling, du vil ændre.
Displayenhed	Skift afstandsenhed (kilometer/miles)	Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte.
Baggrundsbelysningens lysstyrke	Justér skærmens baggrundsbelysning	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Justér med knapperne "+" og "-". - Bekræft ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Indstil tid	Skift tidsindstillinger	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Justér timerne med knapperne "+" og "-". - Bekræft med tænd/sluk-knappen. - Indstil minutterne med knapperne "+" og "-". - Bekræft med tænd/sluk-knappen (2B3).
Adgangskode	Aktivér/deaktivér adgangskode	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at vælge. - Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte.
	Angiv adgangskode	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Brug knapperne "+" og "-" til at vælge. - Bekræft valget med tænd/sluk-knappen. - Vælg det ønskede tal med "+"-knappen, og bekræft med tænd/sluk-knappen. Gentag dette trin for alle fire tal.
Administrér nøgler	Nøgleadministration	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Vælg den tast, du vil fjerne, med "+"-knappen. - Bekræft valget med tænd/sluk-knappen. - Vælg "Bekræft" med den "højre" blinklysknap. - Bekræft valget med tænd/sluk-knappen.
	Programmér ny nøgle	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte. - Hold NFC-mærket mod den øverste venstre del af displayets bagside
Nulstilling af kilometertæller	Nulstil kilometertælleren	- Tryk på tænd/sluk-knappen for at nulstille. - Vælg "Ja" eller "Nej" med "+"- og "-"-knapperne. - Bekræft med tænd/sluk-knappen. BEMÆRK: Dette nulstiller også maksimal hastighed, gennemsnitshastighed og køretid.
Systemoplysninger	Vis systemoplysninger	Tryk på tænd/sluk-knappen for at se.
Tilbage	Afslut menuen	Tryk på tænd/sluk-knappen for at forlade menuen.

6.2 Tænd/sluk

6.2.1 Tænd med nøgle

1. Tænd for S800 ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
2. Vent, indtil nøgleikonet vises på skærmen med teksten "scan key here" (fig. 6.4). Denne skærm vises kun, hvis adgangskoden er aktiveret.
3. Hold NFC-nøglen mod bagsiden af displayet i det øverste venstre hjørne, og vent, indtil nøgleikonet forsvinder.
4. S800 er i neutral (frigear). Læs mere under 6.4.1 Kørsel fremad.

6.2.2 Tænd med adgangskode

1. Tænd for S800 ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
2. Vent, indtil nøgleikonet vises på skærmen med teksten "scan key here" (fig. 6.4). Denne skærm vises kun, hvis adgangskoden er aktiveret.
3. Tryk på knappen "venstre blinklys".
4. Vælg det korrekte tal med knappen "+" og bekræft med tænd/sluk-knappen. (Fig. 6.5)
5. S800 er i neutral (frigear). Læs mere under 6.4.1 Kørsel fremad.

6.2.3 Sluk

Du kan slukke S800 manuelt ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder. Derudover slukker S800 automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Denne timeout-indstilling kan justeres af din forhandler.

ADVARSEL!

- Sluk ikke for el-scooteren under kørsel, medmindre der er tale om en nødsituation. (Hvis du slukker for den, kan det forkorte levetiden for el-scooterens drivkomponenter.)
- For at undgå uventede eller utilsigtede bevægelser af el-scooteren og for at spare på batteriet anbefales det, at S800 slås fra, når den står stille eller ikke er i brug.

6.3 Lys

6.3.1 Forlygter, kørellys og baglygter

Fra hastighedsniveau 3 forbliver belysningen tændt kontinuerligt. Du kan også tænde eller slukke lyset manuelt, hvis du ønsker det:

1. Tryk på knappen "Belysning" i 2 sekunder for at tænde belysningen.
2. Tryk på knappen "Belysning" igen i 2 sekunder for at slukke for belysningen.

6.3.2 Blinklys

1. Tryk på venstre eller højre blinklysknap for at tænde for blinklysene.
2. Efter 10 sekunder slukkes blinklysene automatisk igen, eller;
3. Tryk på den samme knap igen for at slukke for indikatoren.

Fig. 6.4

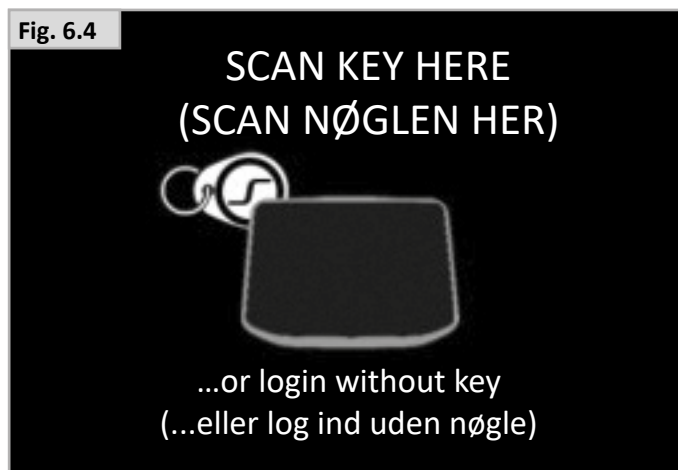


Fig. 6.5



6.3.3 Katastrofeblink

Sådan aktiveres advarselsblinkene:

1. Tryk bremsearmen ind, og sæt den i låsepositionen. Advarselsblinkene tændes automatisk efter 10 sekunder.
2. Frigør bremsearmen fra låsepositionen. Advarselsblinkene slukkes.

6.4 Kørsel

6.4.1 Fremadkørsel

S800 starter i neutral (frigear). Vælg først det ønskede kørselsniveau, inden S800 begynder at køre.

3. Køremodus og den tilhørende maksimale hastighed kan ændres ved at øge eller sænke hastighedsniveauet fra 1 til 5 med knapperne "+" og "-". Vælg et passende hastighedsniveau til hver situation.
4. Brug gashåndtaget til at køre fremad. S800 accelererer gradvist op til den indstillede hastighed.

6.4.2 Bakning

1. Slip betjeningshåndtaget. Scooteren standser.
2. Tryk på knappen "D/R" for at aktivere "Bakgear"; R vises på displayet.
3. Betjen gashåndtaget for at køre baglæns.
4. Tryk på knappen "D/R" igen for at køre fremad med det tidligere valgte hastighedsniveau.



ADVARSEL!

- Det er vigtigt, at du stopper el-scooteren, inden du ændrer retning fra fremad til bakgear.
- Sluk altid el-scooterens styresystem, før du forflytter dig ind i eller ud af el-scooteren.



RISIKO!

- Bakning kræver ekstra opmærksomhed, da synsfeltet er begrænset.

Det anbefales, at under de første sessioner med betjening af din el-scooter, at området rundt om dig er fri for forhindringer og fodgængere.

6.4.3 Fartpilot

1. Tryk på knappen "Fartpilot" i 2 sekunder, hvorefter fartpilot-logoet vises på displayet. Fartpiloten er nu aktiveret og kan bruges.
2. Hold gashåndtaget helt nede i 3 sekunder, og S800 vil opretholde den maksimale hastighed for dit aktuelle hastighedsniveau.
3. Ændr hastigheden med knapperne "+" og "-".
4. Sluk fartpiloten ved at bremse eller trykke gashåndtaget ind. Fartpiloten deaktiveres altid efter bremsning og skal genaktiveres.

6.5 Opbremsning

For at standse el-scooteren skal du blot slippe gashåndtaget, mens du holder hænderne på styret. To opbremsningstyper vil automatisk fungere i sekvens:

- Automatisk regenerativ opbremsning, som bevirker, at el-scooteren går i stå.
- Den automatiske parkeringsbremse vil aktiveres, når el-scooteren stopper. Den automatiske parkeringsbremse holder el-scooteren i stilling, også hvis du er på en bakke.

BEMÆRK: Dette er en proces i to stadier, og den er ikke øjeblikkelig. Først sætter el-scooteren farten ned og stopper, og derefter bliver parkeringsbremsen aktiveret. Når du kører videre, frigøres parkeringsbremsen automatisk. Hvis gashåndtaget midlertidigt bliver aktiveret og sluppet, bliver parkeringsbremsen udløst og derefter aktiveret igen efter ca. en 1/2 hjuldrejning.

Når du bremser, vil de meget tydelige LED-bremselygter lyse bagtil. Disse fungerer også, når el-scooterens lygter er tændt.

6.5.1 Nødopbremsning ved hjælp af håndbremsen

Hvis det usandsynlige skulle ske, at el-scooteren bevæger sig på en uønsket måde, bruges parkeringsbremsesystemets (PBS) håndbremse. Parkeringsbremsesystemet (PBS) aktiveres ved at trække i håndbremsearmen på styret, hvilket vil bremse el-scooteren til et kontrolleret stop.

Håndbremsen stopper automatisk køreenheden ved hjælp af en elektrisk forbindelse. Udløsning af håndbremsen bevirker, at køreenheden fungerer igen.

- Aktivér parkeringsbremsen ved at klemme bremsen sammen og trykke på stiften for at låse den.
- Deaktivér parkeringsbremsen ved at trykke på bremsen, så stiften springer ud.

BEMÆRK: El-scooteren vil ikke køre, hvis håndbremsen er aktiveret. Hvis el-scooteren tændes med håndbremsen aktiveret, tændes advarselsblinkene efter 10 sekunder.

6.5.2 Nødbremsning ved hjælp af stopknappen

I det usandsynlige tilfælde, at el-scooteren bevæger sig uønsket, vil et tryk på stopknappen få el-scooteren til at standse øjeblikkeligt. Selvom den er meget effektiv, er nødbremsen meget brat, og den må ikke bruges til normal anvendelse.

7.0 Batterier, opladning og kapacitet

7.1 Batterier

⚠ VIGTIGT!

- S800 bruger en af de nyeste teknologier, Li-Ion-batteripakker. Dette batteris nominelle spænding er 24 V.
- Når batterierne er slidt op, skal du bringe dem til de lokale myndigheders bortskaffelsessted.
- Når batterierne ikke længere kan genoplades, skal de tilbageleveres til genbrug, enten til Sunrise Medical eller direkte til batteriproducenten.
- Undgå at aflade batterierne helt. Hvis en af battericellerne har en meget lav spænding, kan batteriet ikke længere oplades og skal udskiftes.
- Oplad helt afladene batterier så hurtigt som muligt ved hjælp af en 24-timers cyklus.

⚠ RISIKO!

- Batteriet eller dets enkelte dele må ikke udsættes for direkte varme (f.eks. gaskaminer eller åben ild).
- Man må under ingen omstændigheder pille ved eller ændre på batterierne. Hvis der opstår tvivl i denne forbindelse, bør du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.
- Batterier kan være farlige. Kun en certificeret tekniker kan installere og vedligeholde dem sikkert og korrekt. Teknikere har de nødvendige kvalifikationer og værktøjer til at udføre installation og vedligeholdelse sikkert og korrekt.

Sikkerhedsafbrydere

I tilfælde af en kortslutning er der indbygget flere sikkerhedssystemer i din el-scooter for at beskytte de elektriske kredsløb (fig. 7.1).

1. En nulstillelig sikring på 100 A, indbygget i batteriet.
2. En 10 A glassikring indbygget i opladerkablet.

Kontakt din autoriserede Sunrise Medical-forhandler, hvis sikringerne skal udskiftes. Forhandleren vil også fastslå den oprindelige fejlårsag.

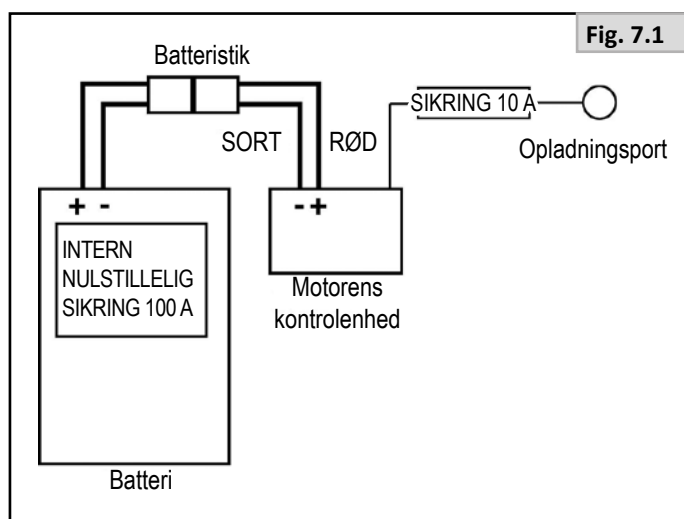


Fig. 7.1

7.2 Opladning af batterier

📖 **Batterioplader:** Den brugervejledning, der følger med opladeren, bør læses nøje. De oplysninger om generelle fremgangsmåder samt eventuel interferens i forbindelse med el-scooteren og batterierne, der er angivet i denne vejledning, gælder dog stadig.

Serviceplan for batterier

Nedenfor er vist en serviceplan for vedligeholdelsesfri batterier. Denne plan er godkendt af Sunrise Medical og batteriproducenten, for at du kan få størst mulig nytte af dine batterier. Hvis du følger en anden serviceplan, kan det medføre, at din kørestols ydeevne bliver mindre end forventet.

- Anvend kun en godkendt Sunrise Medical oplader kompatibel med den kørestol, der skal oplades.
- Oplad altid batteriet fuldt ud før første brug.
- Batterierne skal oplades hver aften, uanset hvor meget dit mobilitetsprodukt er blevet brugt i dagens løb.
- Oplad batterierne i et velventileret og tørt område.
- Hvis du lader dit køretøj stå i længere tid (mere end 15 dage), skal du oplade batterierne fuldt ud.

7.2.1 Opladerstik (Fig. 7.2)

⚠ ADVARSEL!

- Opladerstikket må kun bruges til at forbinde el-scooterens batteri-opladerstik til el-scooteren.
- Opladerstikket må ikke anvendes til strømforsyning af noget andet apparat.
- Hvis andre, ikke godkendte elektriske apparater tilsluttes, kan kontrolsystemet beskadiges eller el-scooterens EMC-egenskaber kan påvirkes.

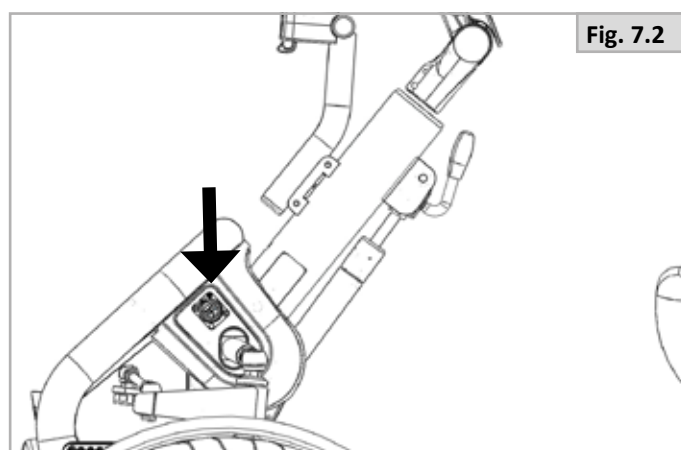


Fig. 7.2

Læsning af batteristatus

Den batteriformede indikator på displayet viser den resterende batterikapacitet i procent.

Batteristatus	Farve	Blinklys
21-100%	Grøn	Batteriet er fuldt opladet.
11-20%	Orange	Batteriet er næsten tomt. Vi anbefaler, at du oplader batteriet så hurtigt som muligt.
0-10%	Rød	Batteriet er næsten helt afladet. Oplad batteriet med det samme.

Så snart du begynder at køre, falder batteriniveauet hurtigt med 10 %. Dette skyldes batteriets og motorens elektriske funktion. Efter at have kørt ca. 1 kilometer stabiliseres batteriniveauet og falder derefter med ca. 2 % pr. kilometer. Derfor anbefaler vi, at du oplader batteriet, når det er på omkring 20 %, inden du begiver dig ud på en tur.

Displayet på S800 viser også rækkevidden i kilometer/miles baseret på batteriets opladningstilstand. Dette tal er kun vejledende og kan ændre sig under kørslen. Vær altid opmærksom på procentangivelsen, når du skal begynde at oplade.

Tilslutning af batteriopladeren

Fremgangsmåde for tilslutning af batteriopladeren samt opladning

- Sæt det runde udgangsstik fra batteriopladeren i opladerstikket (se Fig. 7.1).
- Sæt strømkablet i en stikkontakt, og kontrollér, om opladeren tænder (blåt lys).
- Batteriet er fuldt opladet, når "opladningslampen" på opladeren lyser grønt.
- Hvis du vil se nøjagtigt, hvor fuldt opladet batteriet er under opladningen, skal du tænde S800 via tænd/sluk-knappen. Displayet viser, at S800 oplades, samt batteristatus.
- Træk stikket til batteriopladeren ud af stikkontakten, og tag stikket ud af opladningsstikket.

For yderligere oplysninger om opladerens funktion, se de anvisninger, der følger med opladeren.  BATTERIOPLADER.

Afhængig af, hvor afladene batterierne er, kan det tage op til 12 timer at oplade batterierne helt igen. Du kan afbryde opladningen når som helst uden at skade lithium-ion-batteriet.

Landespecifikke oplysninger: STORBRITANNIEN

3-bensstikket til brug i Storbritannien indeholder en udskiftelig sikring. Sikringens mærkespænding er angivet på batteriopladerens mærkat.



RISIKO!

- Sørg for, at netledningen er placeret, så der ikke er risiko for, at træde på den, snuble over den eller på anden måde udsætte den for skader eller overbelastning.
 - Lad ikke batteriet ligge oven på opladeren.
 - Batteriopladeren må ikke placeres på tæpper eller andre bløde overflader. Den bør altid placeres på et solidt og fast underlag.
 - Undgå at anvende batteriopladeren, hvis den har været udsat for stød eller slag, hvis den har været tabt den på gulvet, eller hvis den på anden måde er beskadiget. Den bør i så fald indleveres til eftersyn hos en fagmand.
 - Sid aldrig med batteriet i skødet under opladningen.
 - Opladerhuset bliver varmt som led i den normale opladningsproces.
 - Undgå at skille batteriopladeren ad. Den må udelukkende repareres hos producenten. Hvis batteriopladeren sættes forkert sammen, kan dette medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
 - Risikoen for elektrisk stød nedsættes ved, at batteriopladerens stik tages ud af stikkontakten, inden der påbegyndes nogen form for vedligeholdelse eller rengøring. Det nedsætter ikke risikoen, at der slukkes for betjeningsenheden.
 - Sørg altid for at undgå rygning, gnister eller åben ild i nærheden af batterierne og batteriopladeren.
 - Du bør ikke oplade dine batterier udendørs.
- Det anbefales at anvende en røgalarm i opladningsområdet.

7.3 Lithium-ion-batteri under 3 °C

Opladning

Lithium-ion-batteriet i S800 bør ikke oplades, hvis dets kernetemperatur er under 0 °C, da dette kan beskadige batteriet. S800 er udstyret med regenerativ bremsning, hvilket betyder, at batteriet også oplades under bremsning. Derudover har batteriet i S800 en forvarmningsfunktion. Når batteritemperaturen er under 3 °C, og du begynder at oplade, vil batteriet først varme sig selv op, før opladningen påbegyndes. Denne forvarmningsproces betyder, at opladningen vil tage længere tid end normalt. Der vises en advarsel, når batteriopvarmningen er aktiv.

Anvendelse

Når batteritemperaturen er under 3 °C, og du tænder for S800 (uden at holde nøglen hen til enheden eller indtaste koden), aktiverer S800 automatisk batteriopvarmningen. Hvis du låser S800 op, vises der en advarsel på displayet, der viser den aktuelle batteritemperatur. Når batteritemperaturen når 10 °C eller derover som følge af opvarmning, forsvinder advarslen, og du kan bruge S800 som normalt. Der vises en advarsel, når batteriopvarmningen er aktiv.



VIGTIGT!

Du kan fortsætte med at bruge S800, mens den opvarmes, men dette medfører en ekstra risiko. Hvis battericellerne er under 1 °C, vil de blive beskadiget, hvis de oplades under bremsning. S800 bremser regenerativt, hvilket betyder, at batteriet oplades under bremsning. Du kan undgå at beskadige batteriet ved at:

- Vente med at køre, indtil batteriets kernetemperatur er over 1 °C.
- Kører langsomt (hastighedsniveau 1), bremses så lidt som muligt og/eller sænker farten langsomt.
- Undgå langvarig kørsel ned ad bakke.



VIGTIGT!

- Husk, at opvarmningen bruger strøm, hvilket får batteriet til at aflade hurtigere end normalt.
- Når det er muligt, anbefaler vi, at S800 opbevares et sted, hvor der ikke er frost.
- Batteriets opvarmning og afkøling afhænger i høj grad af forholdene. Derfor er det ikke muligt at forudsige, hvor lang tid det vil tage at varme op. En indikation er en stigning på +5 °C pr. time.

7.4 Kørselsdistance

Yderligere oplysninger om energiforbrug (maks. rækkevidde) findes i specifikationstabellerne bagest i denne brugervejledning.

Producenter af mobilitetskøretøjer angiver som regel den relevante kørselsdistance enten i deres salgsmateriale eller i brugsvejledningen. Af og til kan det forekomme, at forskellige producenter angiver forskellige rækkevidder, selvom batteristørrelsen er den samme. Sunrise Medical måler rækkevidden for sine køretøjer med ensartede og konsekvente metoder, men der kan opstå afvigelser pga. motorens effektivitet og den samlede belastning af kørestolen.

Distanceangivelserne er beregnet i henhold til ISO-standard 7176: Del 4: Elektriske kørestole og el-scooterens energiforbrug til bestemmelse af teoretisk distance.

Denne test udføres under kontrollerede forhold med nye, fuldt opladede batterier, på en jævn prøvekørselsflade og med en brugervægt på 100 kg. De angivne rækkevidder bør betragtes som teoretisk maksimale og kan være reducerede, hvis én eller flere af følgende omstændigheder er til stede:

- Brugervægten overstiger 100 kg.
- Batterierne er ældre og i dårligere stand end ideelt set.
- Terrænforholdene er dårlige, f.eks. med mange bakker, skråninger, mudret kørselsflade, grus, græs, sne og is.
- Køretøjet kører jævnlige op og ned ad kantsten.
- Omgivelsestemperaturen er enten meget høj eller meget lav.
- Der er forkert dæktryk i et eller flere dæk.
- Køretøjet bruges jævnlige til start/stop-kørsel.
- Der køres på tykke gulvtæpper, som også kan have indvirkning på rækkevidden.
- Der anvendes ekstraudstyr, som bruger strøm (f.eks. lygter, aktuatorer o.l.).

De batteristørrelser, der bruges på hvert Sunrise Medical-produkt, giver normalt en rækkevidde, der passer til langt de fleste kunders livsstil.

7.5 Batterigarantier

Batterigarantier er betinget af de garantiperioder, producenten har fastlagt. De fleste garantier udstedes dog i henhold til en bestemmelse vedrørende slitage. Hvis du slider batterierne op inden for seks måneder, kan der ikke kræves ombytning ifølge garantien.

7.6 Aftagning af batteri

Udskiftning og servicering af batterierne skal foretages af en kvalificeret specialist.

Hvis batterierne fejler, kontakt da din lokale forhandler.



RISIKO!

Forsøg ikke at udskifte eller servicere batterierne uden opsyn af uddannet og kvalificeret personale.



ADVARSEL!

Brug korrekt løfteteknik for at undgå skader.

1. Fjern sædet
2. Skub sædehåndtaget (fig. 5.1, A) fremad.
3. Drej stolen 45 grader.
4. Løft stolen af soklen på basen.
5. Fjern "elektronikdækslet" (fig. 3.1, 9)
6. Træk det røde strømstik ud.
7. Fjern "fodområdet" (fig. 3.1, 5) ved at skrue de 6 unbrakoskruer og de 4 bolte ud.
8. Fjern "batteridækslet" (fig. 3.1, 7)
9. Fjern de to M5-bolte, der fastgør elektronikpladen til hovedstellet. Disse bolte kan nås udefra på hovedstellet, på hver side af scooteren
10. Frakobl batteriets CAN-bus-stik (grønt, gult og rødt kabel).
11. Løft batteriet op fra under elektronikpladen, og før kablerne forsigtigt ud.



FORSIGTIG!

Flyt batteriet til et sikkert sted.

7.7 Afmontering af batterier før flytransport

- Fjern "elektronikdækslet" (fig. 3.1, 9)
- Træk det røde strømstik ud.

8.0 Transport

8.1 Transport i køretøjer

El-scooteren er ikke egnet til brug som et sæde i et køretøj.



Ikke kollissionstestet




RISIKO!

En el-scooter, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke det samme sikkerhedsniveau som køretøjets sædesystem. Det anbefales altid, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder.



ADVARSEL!

Sid ikke på el-scooteren, når den bliver transporteret (Fig. 8.1).

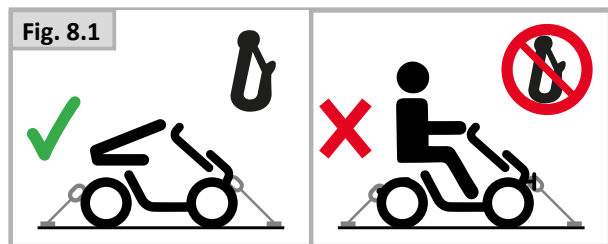

BEMÆRK: S800 overholder ikke den europæiske standard PRM-TSI, bilag M. Det kan derfor ikke garanteres, at S800 kan bruges i offentlig transport.

8.2 Tag el-scooteren med toget

Hvis du ønsker at tage el-scooteren med på toget, anbefaler vi, at du kontakter togføreren, når du planlægger din rejse. Togselskaberne har bestemmelser vedrørende plads til "el-el-scootere", hvor du kan sidde på din el-scooter på rejsen. Bemærk, at el-scooterens generelle længde kan være længere end den tilgængelige "el-scooterplads" i togvognen. Når du planlægger din rejse, skal du kontrollere med togføreren, om der er nok plads til at komme ind i togvognen og den beregnede "el-scooterplads", når du stiger på og af toget, samt at der er tilstrækkelig plads på platformen. Vi anbefaler, at du kontrollerer med togføreren at: Adgangen ved indstigning er egnet til din el-scooter; at adgangshældningen ikke er større end el-scooterens maksimale sikkerhedshældning; at eventuelle trin eller forhøjelser ikke er højere end den maksimale højde for el-scooterens kantforcering; at der er tilstrækkelig vendeplads i adgangsområdet til toget og på selve toget. De fleste togførere er hjælpsomme, hvis de har fået besked på forhånd. Vi anbefaler, at du har din brugervejledning ved hånden, når du planlægger din rejse og tager kontakt til togselskabet.

8.3 Andre transportkrav



El-scooteren kan transporteres på veje, med tog, skib eller i fly som bagage.

Før du rejser, skal du tage kontakt til rejseselskabet eller rejsearrangøren. Du kan blive bedt om at fremlægge oplysninger om el-scooteren som el-scooterens massefylde og de generelle mål. Disse oplysninger finder du i de relevante modeltabeller i afsnit 12.0.

Hvis el-scooteren transporteres med fly, kan det være nødvendigt at fjerne batterierne, da de medfølgende batterier muligvis ikke er IATA-godkendt til flytransport.

Hvis du transporterer el-scooteren med landtransport som bagage, skal den muligvis spændes fast for at undgå utilsigtet bevægelse ind i andre køretøjspassagerer i tilfælde af et pludseligt stop, eller den skal anbringes et sted, der er beregnet til bagage.

Din scooter kan fastgøres til monteringspunkterne bagpå (fig. 8.2) og til hovedstellet foran (fig. 8.3).

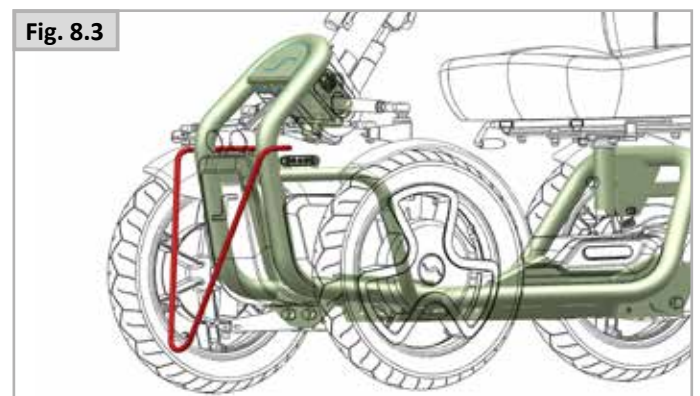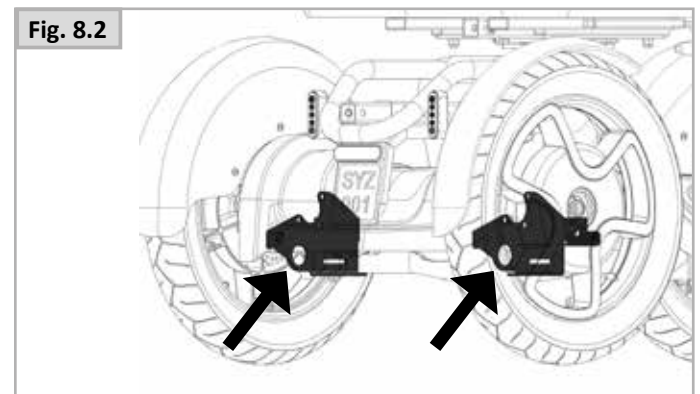

8.4 Sådan gør du din el-scooter kompakt

Du kan gøre el-scooteren kompakt til transport eller opbevaring.

Sammenklapning af ryglænet

- Træk venstre armlæn op.
- Tag godt fat i ryglænet.
- Træk håndtaget på venstre side bag på sædet opad.
- Fold ryglænet fremad, så det ligger så fladt som muligt mod sædet, og slip håndtaget.

Sammenklapning af ratstammen

- Stå ved siden af S800.
- Træk justeringshåndtaget på ratstammen nedad/mod dig selv.
- Flyt ratstammen så langt som muligt mod sædet, og slip håndtaget.

Dele, der kan fjernes uden brug af værktøj, er kurven, nakkestøtten og sædet.

Afmontering af sædet

- Skub sædehåndtaget fremad.
- Drej stolen 45 grader.
- Løft stolen af soklen på basen.

9.0 Vedligeholdelse og rengøring

El-scooterens levetid afhænger af, hvor godt den bliver vedligeholdt.

For oplysninger om specifikke indstillinger, vedligeholdelse eller reparationer bedes du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Sørg for altid at nævne model, fremstillingsår og identifikationsnummeret fra identifikationsskiltet på el-scooteren, når du kontakter din forhandler.

VIGTIGT!

El-scooteren skal serviceres af din autoriserede Sunrise forhandler én gang om året eller, ved omfattende anvendelse, hver sjette måned. For en liste over godkendte autoriserede forhandlere i dit område, bedes du kontakte Sunrise Medical ApS.

Kontaktoplysningerne til Sunrise Medical ApS kan du finde på dette hæftes forsideflap.

Nationale og internationale hjemmesideadresser finder du på omslagets bagside.

9.1 Vedligeholdelse

ADVARSEL!

- Løse fastgørelseselementer skal efterspændes ifølge installationsvejledningen.
Se (medmindre andet er angivet) den generelle tabel nedenfor for påkrævede drejningsmomenter.

Vejledning til indstilling af drejningsmoment	
M4	3,0 Nm
M5	5,9 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	48 Nm
M12	84 Nm

Bemærk: Tilspændingen skal udføres ved hjælp af en momentnøgle.

- Hvis der findes en knækket eller løs komponent, skal du straks holde op med at bruge kørestolen. Kontakt din forhandler for udskiftning.

ADVARSEL!

- Hvis du er i tvivl om el-scooterens funktioner, bedes du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.
- Efter udførelse af enhver form for vedligeholdelse eller reparation af el-scooteren skal du kontrollere, om den fungerer korrekt, inden den tages i brug.
- Ved udskiftning af selvslående møtrikker eller møtrikker/klemmer sikret med en spændskive, kontroller at en passende spændskive anvendes på fastgørelseselementet.

Daglige eftersyn

Udfør det daglige eftersyn, før du kører, som beskrevet i kapitel 5.1.

Ugentlige eftersyn

Udfør det ugentlige eftersyn, før du kører, som beskrevet nedenfor.

Kontroller parkeringsbremse

Denne kontrol bør udføres på en jævn kørselsflade med mindst én meter plads omkring el-scooteren.

- Tænd for betjeningsenheden.
- Indstil hastighedsniveauet til 1.
- Tryk gradvist på gashåndtaget, indtil du hører parkeringsbremsen gå i indgreb.
- Det kan være, at el-scooteren begynder at køre.
- Slip straks gashåndtaget. Du bør kunne høre parkeringsbremsen gå i gang (der lyder et klik) efter få sekunder.
- Gentag testen yderligere 3 gange, og tryk gradvist på gashåndtaget.

Kontrollér bremsearmens tilslutning

- Kontrollér, at bremsearmens tilslutning fungerer, ved at trykke på bremsearmen og kontrollere, at bremsekygterne tændes. Dette bidrager til at forhindre risikoen for en uopdaget sensorfejl og sikrer en sikker drift.

Kontrol af stik og kabler

- Tjek, at der ikke er nogen løse kabler, og at de er forsvarligt tilsluttet el-scooteren.
- Se efter, at alle kabler og stik er ubeskadigede og i god stand.

Kontroller betjeningsenhed

- Sørg for, at alle komponenter i gasspjældet er monteret korrekt.

Kontroller betjeningsselementer

- Tænd for el-scooteren – Kan du se en advarsel på skærmen? I givet fald er det tegn på en fejl i det elektroniske system. Se kapitel 10 for at få vejledning i almindelig fejlfinding.
- Prøv alle de elektriske funktioner, herunder lys og blinklys, for at sikre, at de fungerer korrekt.
- Kør el-scooteren i hver af kørselsprofilerne for at undersøge, om el-scooteren fungerer på samme måde som før.

Månedlige eftersyn

Udfør det månedlige eftersyn før du kører, som beskrevet nedenfor.

- Alle fastgørelseselementer skal kontrolleres hver måned for slitage, såsom løse bolte eller knækkede komponenter.

9.2 Vedligeholdelse af dæk og dæktryk

9.2.1 Dæktryk



VIGTIGT!

Hvis el-scooteren er forsynet med pneumatisk dæk, er det vigtigt, at du kontrollerer lufttrykket og efterser dækkene for tegn på slitage med jævne mellemrum.

De maksimale dæktryk er angivet i afsnit 12.0. Hvis du er i tvivl, skal du tjekke markeringerne på siden af el-scooterens dæk for vejledning.

BEMÆRK: Det er vigtigt, at der er samme mængde luft i drivhjulene som par. Det samme gælder for baghjulene. Den sikreste metode til at pumpe el-scooterens dæk op med er dækpumpen. Trykket kan kontrolleres med en almindelig trykmåler til motorkøretøjer.



RISIKO!

- Undgå at pumpe dækkene op til mere end det angivne maksimale dæktryk.
- Man må aldrig anvende en bildækpumpe på f.eks. en tankstation.
- Luften skal lukkes ud af dækkene, før de kan repareres.

9.2.2 Dækslid

Når dækkene efterses for tegn på slitage, bør man især være opmærksom på tydelige skrabemærker, ridser eller flænger, samt hvorvidt slidbanerne er slidt ned. Dækkene skal udskiftes, hvis slidbanemønsteret ikke længere er synligt over hele dækfladen.

9.3 Vejledning i udskiftning af dæk



ADVARSEL!

- Det er normalt ikke praktisk at prøve at reparere en punktering på det sted, hvor den opstod. Sunrise Medical foreslår, at du indhenter hjælp med at transportere el-scooteren enten direkte til en godkendt servicerepræsentant, eller til et sikkert sted for senere afhentning af den godkendte repræsentant.
- Hvis du er i tvivl om el-scooterens servicekrav, bedes du kontakte din autoriserede Sunrise Medical-forhandler.
- Forsøg ikke at udføre opgaver, du ikke er sikker på.
- El-scooteren skal være i friløb og deaktiveret tilstand med strømmen slukket, før hjulene løftes fra jorden.
- Der må ikke løftes mere end et hjul af jorden af gangen.
- Der må ikke bruges luftpumper med højt tryk, af typen, som findes på bilværksteder eller tankstationer, til at pumpe el-scooterens dæk op med.
- Brug altid en ny slange.

Udskiftning af slangen

- Løft hjulet ved at placere en donkraft under scooteren.
- Når den er løftet, skal du understøtte donkraften med solide klodser for at øge stabiliteten.
- Fjern hjulkappen med logoet.
- Løsn M10-møtrikken.
- Drivhjulet tages af.
- Tøm dækket helt for luft.
- Fjern de 6 M8-bolte, der holder den indre ring fast.
- Tag dækket af fælgen.
- Sæt et nyt dæk på, og saml det hele igen i omvendt rækkefølge.



Fig. 9.1

9.4 Vedligeholdelses- og eftersynsplan

Vedligeholdelses- og eftersynsplan	Dagligt	Ugentligt	Kvartalsvis	Halvårligt	Årligt
Kontrollér batterimåleren, og oplad om nødvendigt batteriet.	●				
Kontrollér, at betjeningsarmene på styret ikke er bøjedet eller beskadigede.	●				
Sørg for, at alle aftagelige dele er forsvarligt fastgjort.	●				
Undersøg, om hofteremmen er slidt, og sørg for, at spændet fungerer korrekt	●				
Kontrollér, om parkeringsbremsen klikker tændt og slukket.		●			
Kontrollér dækkene, og pump dem om nødvendigt.		●			
Sørg for, at synlige møtrikker og bolte er stramme.		●			
Sørg for, at alle ledninger og stik er i god stand og placeret korrekt, så de ikke sidder i vejen.		●			
Rengør el-scooteren og polstringen med jævne mellemrum.		●			
Efterse batteripolerne – Fjern evt. korrosion, og smør med vaseline.			●		
Efterse polstringen, sædet, hovedstøtten og armpuden for tegn på slitage.				●	
Fuldstændig inspektion, sikkerhedskontrol og service skal udføres af en autoriseret Sunrise Medical-forhandler.					●

BEMÆRK: Se S800-servicehåndbogen for yderligere oplysninger om forebyggende vedligeholdelse.

9.5 Belysningsvedligeholdelse



RISIKO!

Det har afgørende betydning for kørestolsbrugerens sikkerhed, at vedligeholdelse af lygter og blinklys udføres korrekt. Hvis dine lys og indikatorsystem viser en defekt, skal du kontakte din autoriserede Sunrise Medical forhandler.

Alle lys og indikatorer er avancerede lysdioder med lav energi, der ikke kræver vedligeholdelse. Der bruges ingen lyspærer. Disse enheders høje indre pålidelighed betyder, at det er meget usandsynligt, at de svigter ved normal brug. Hvis der opstår en fejl (f.eks. på grund af et sammenstød), skal hele den beskadigede lysenhed udskiftes. De individuelle lysdioder kan ikke udskiftes.



VIGTIGT!

- Anvend kun reservedele, der er autoriseret af Sunrise Medical.
- Vær især opmærksom på, at alle kredsløb til lygter har elektronisk sikring. I tilfælde af kortslutning reduceres spændingen til et sikkert niveau. Når fejlen er udbedret, nulstilles kontrolsystemet automatisk.

9.6 Rengøring og desinfektion

El-scooteren bør tørres af en gang om ugen med en fugtig (ikke våd) klud. Støv eller fnug, der har samlet sig på motorerne, pustes væk eller tørres af med en støveklud.



VIGTIGT!

Sørg for, at alle dele af el-scooteren tørres grundigt, hvis den bliver våd eller fugtig som følge af rengøring, eller hvis el-scooteren anvendes i våde eller fugtige omgivelser.



RISIKO!

Hvis el-scooteren anvendes af flere brugere, er det særligt vigtigt, at den bliver gjort grundigt ren for at undgå risiko for krydsinfektion.

Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel.

Producentens vejledning skal følges nøje under anvendelsen af desinficeringsmidlet.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpolestringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.



VIGTIGT!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, klor, skuremidler, syntetiske rengøringsmidler, polérvoks eller midler i sprayform.
- Der kan anvendes desinfektionsmidler, men kun i opløsninger svarende til producentens vejledning.
- Sørg for at skylle overfladerne med rent vand og at de tørres grundigt.
- Der må ikke bruges vandslange eller højtryksrensere til rengøring af din el-scooter.



ADVARSEL!

- Sørg for altid at læse etiketten på enhver form for rengøringsmidler til erhvervs- eller privatbrug.
- Brugsanvisningen skal altid følges nøje.

Rengøring af betjeningsenheden: & Controlleren

Hvis el-scooterens controller bliver snavset, kan den tørres af med en fugtig klud eller en desinficerende opløsning.

9.7 Opbevaring i længere tid

Hvis el-scooteren skal opbevares i længere tid (dvs. mere end en uge), skal du følge disse anvisninger:

- Sørg for, at el-scooteren oplades i mindst 24 timer.
- Frakobl opladeren.
- Batteriets computer bruger fortsat energi, selvom forbruget er meget lavt. Vi anbefaler, at batteriet oplades hver tredje måned for at forhindre, at det aflades for meget.
- Oplad batterierne fuldt, før du bruger S800 igen.



ADVARSEL!

El-scooteren må aldrig opbevares under følgende forhold:

- Tæt på en direkte varmekilde.
- I direkte sollys, da fortsat eksponering for UV-stråler kan svække plast- og skumdele, dvs. paneler, håndgreb osv. og gøre, at etiketterne falmer.
- I fugtige omgivelser.
- I kølige omgivelser.

Ved at undgå ovenstående kan du til en vis grad forhindre, at batteriet aflades helt, og dermed forlænger du batteriets levetid.



VIGTIGT!

- Sluk altid for S800 og lås den for at forhindre misbrug eller tyveri. Når den skal opbevares, skal du føre en kædelås gennem et hjul og, hvis det er muligt, fastgøre S800 til en fast og fikseret genstand for ekstra sikkerhed.
- Vær altid opmærksom på, hvad du fastgør S800 til, så du ikke generer andre.

BEMÆRK: For yderligere tyverisikring kan KLICKfix FindMe-holderen med AirTag monteres i skruehullerne under elektronikdækslet.

9.8 Opbevaringstemperatur & fugtighed

Opbevaringstemperatur: Min: -25° C, (-40° C uden batterier)

Max.: 65°C.

Relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende): Min. 5 % Max: 95 %.



VIGTIGT!

- Opbevar altid S800 på et tørt, rent sted, helst i en garage eller et skur.
- Hvis du opbevarer S800 et halvåbent sted, f.eks. en carport, anbefaler vi, at du bruger et (universelt) overtræk for at beskytte S800 mod vejr og vind.
- Undgå at opbevare batterier ved ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. Den ideelle opbevaringstemperatur ligger mellem +15° og +25° Celsius.

10.0 Fejlsøgning

Hvis el-scooteren ikke virker som den skal, skal de følgende punkter tjekkes:

- Kontrollér, om batterierne er opladet, ved at tilslutte opladeren.
- Tjek, om batterierne er opladede.
- Sluk for el-scooteren og tænd den dernæst igen.
- Tjek, om batteripropperne sidder korrekt på plads
- Kontrollér, om friløbshåndtaget er i positionen 'DISABLE'.
- Tjek, hvilken position hastighedsregulatoren sidder i.

10.1 Fejlkode og mulige årsager


En fejl kan angives ved en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor for fejkoder, deres betydning og løsninger. Hvis den foreslåede løsning ikke hjælper, skal du altid kontakte din forhandler for at få fejlen løst. Giv forhandleren fejlmeddelelsen.

Kode	Beskrivelse	Betydning og løsning
E01	Lavt batteri	Batterierne er tomme. Oplad batterierne.
E02	Dårlig motorforbindelse	Der er en fejl i motoren eller den tilhørende ledningsføring. Kontakt din forhandler.
E03	Kortslutning i motoren	Der er en fejl i motoren eller den tilhørende ledningsføring. Kontakt din forhandler.
E04	Timeout for strømbegrænsning/ Kontrolenheden er for varm	Motoren er for varm. Sluk for S800, vent et par minutter, og tænd den igen.
E06	Kørselsspærring	Der er en blokering, der forhindrer S800 i at køre. Sørg for, at opladeren er frakoblet.
E07	Fejl i gashåndtag	Gashåndtaget er ikke i neutral position (frigear), når S800 tændes.
E08	Fejl i kontrolenhed	Der er en fejl i kontrolenheden eller den tilhørende ledningsføring. Sluk for S800, vent 10 sekunder, og tænd den igen.
E09	Fejl i parkeringsbremsen	En kontakt til frigørelse af parkeringsbremsen er aktiveret.
E10	Høj batterispænding	Hvis du kører ned ad bakke, kan batterierne blive overopladet. Sænk hastigheden for at minimere regenerativ opladning.
E11	Batteri koldt	Batteri koldt (Læs kapitel 7.3)
E12	Batteriopvarmning	Batteriopvarmning (Læs kapitel 7.3)
E13	Batteri < -10 °C	Batteritemperatur < -10 °C (Læs kapitel 7.3)
E14	Batteri < -5 °C	Batteritemperatur < -5 °C (Læs kapitel 7.3)
E15	Batteri < -2 °C	Batteritemperatur < -2 °C (Læs kapitel 7.3)
E16	Batteri < 0 °C	Batteritemperatur < 0 °C (Læs kapitel 7.3)
E17	Batteri < 2 °C	Batteritemperatur < 2 °C (Læs kapitel 7.3)
E18	Batteri < 5 °C	Batteritemperatur < 5 °C (Læs kapitel 7.3)
E19	Batteri < 10 °C	Batteritemperatur < 10 °C (Læs kapitel 7.3)
E20	Batterikommunikation	Kommunikationsproblem med batteriet
E21	WH-Horn-RVS-fejl	Fejl i horn og/eller bakforbindelsen
E22	Fejl i WH-bremsen	Fejl i bremseledning
E23	Fejl i forlygten	Fejl i forlygte og dagslys
E24	Fejl i WH-blinklys	Fejl i indikatorlamper
E25	Fejl i WH-gasspjæld	Fejl i gassignalet
E26	Fejl i hastighedssensor	Hastighedssensoren fungerer ikke
E27-E67	Tom	Kontakt din forhandler.
E70	Displayet har mistet forbindelsen	Kommunikationsproblem med displayet. Genstart S800 ved at slukke og tænde den igen.

11.0 Bortskaffelse

Nedenstående symboler angiver, at dette produkt i henhold til den lokale lovgivning ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald. Når produktets levetid er udløbet, bør det afleveres på nærmeste kommunale genbrugsstation. Ved at sørge for, at produktet bortskaffes og genbruges korrekt, kan man både spare naturlige råstoffer og sikre sig, at produktet genbruges på en miljøvenlig måde.

Sørg for, at du er den retmæssige ejer af produktet, inden du arrangerer bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med de ovenstående anbefalinger og nationale forskrifter.

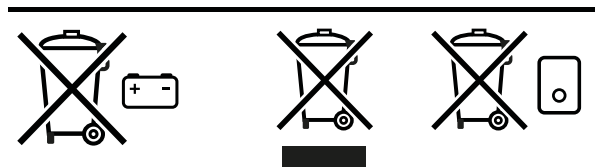

I det følgende afsnit er der en beskrivelse af de materialer, der er anvendt på el-scooteren, med henblik på genbrug af el-scooteren og dens emballage.

Vær opmærksom på eventuel lokal lovgivning angående bortskaffelse eller genbrug, som der skal tages hensyn til, når el-scooteren bortskaffes. (Dette kan omfatte rengøring eller dekontaminering før el-scooteren bortskaffes).

Aluminium: Hjul, motor/gearkasse


Stål: Fastgørelsespunkter, stel, sæde, sædestel

Plast: Håndtag, rørstopper, batterihus

Emballage: Plastposer af blød polyethylen, pap

Gummi: Dæk

Bortskaffelse eller genbrug skal foretages gennem en autoriseret agent eller et autoriseret bortskaffelsessted. Alternativt kan din el-scooter returneres til din forhandler for bortskaffelse.

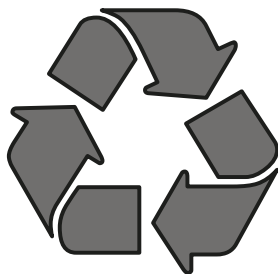

12.0 Specifikationsblade (EN 12184 og ISO 7176-15)



Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne og retningslinjerne for medicinske hjælpemidler og bærer et CE-symbol.

Produktet opfylder nedenstående krav og standarder. Disse kontrolleres af uafhængige myndigheder.

EN ISO 10993-5:2009

Biologisk evaluering af medicinsk udstyr - Del 5: Tests for in vitro-cytotoksicitet (ISO 10993-5:2009)

Standard	Definition/beskrivelse
Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745	Gældende som nævnt i Bilag 1
EN 12184: 2022	El-kørestole, el-scootere og tilhørende ladere - Krav og testmetoder
Klasse C	S800
ISO 7176-8: 2014	Krav og testmetoder vedrørende slag-, bøj- og udmatningsstyrke.
ISO 7176-9: 2009	Klimaprøvning af elektriske kørestole
ISO 7176-14: 2008	Krav og testmetoder vedrørende betjeningsenheder til elektrisk drevne kørestole
ISO 7176-21: 2009	Krav og testmetoder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet for elektrisk drevne kørestole og motoriserede scootere
EN 1021-2: 2014	Krav til antændelsesmodstand.

Test dummy-vægt	
-	-
161 kg	
Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant

Model	Sterling S800 af Scoozy		
Maks. brugervægt ¹	161 kg	354,9 lb	
EN12184-klasse:	C	-	

Beskrivelse	Metrisk system		Imperiale systemværdier & alternativ		Bemærkninger
ISO 7176-15	MIN.	MAKS.	MIN.	MAKS.	
Samlet længde	1370 mm		53,9"		
Samlet bredde	680 mm		26,8"		
Samlet højde	1080 mm (<1000 mm sammenfoldet)	1305 mm	42,5"	51,4"	uden nakkestøtte, laveste sædeposition/med nakkestøtte, højeste sædeposition
Samlet vægt	100 kg		220,5 lb		Standardkonfiguration med batterier
Transportvægt, tungeste del: Glidesæde	18 kg		-		
Dynamisk stabilitet (nominel hældning)	10°		-		
Min. bremseafstand ved maksimal hastighed	6600 mm		-		
Statisk stabilitet	15°/15°/15°		-		Nedad/opad/sidelæns
Rækkevidde (ISO 7176-15)	50 km		-		NB: Følgende aspekter har en negativ indvirkning på rækkevidden: Forhindringer, ujævnt terræn, kørsel på skråninger, eksponering over for temperaturer under frysepunktet og hyppig anvendelse af elektrisk sædestyring.
Evne til at forcere forhindringer	100 mm		3,9"		
Max. hastighed ved kørsel fremad	12,8 km/t ²		8 mph ¹		
Venderadius	1400 mm		55,1"		
Vendeplads/bakkebredde	2200 mm		86,6"		
Frihøjde	100 mm		3,9"		
Hjulstørrelse	16 x 3,0"		76/305		
Dæktryk	2,5 bar	3 bar	36 PSI	43,5 PSI	Til vægt op til 80 kg/Til vægt mellem 80 og 161 kg
Motoreffekt	1400 W				
Batteriets kapacitet	70 Ah		-		
Maksimal, tilladt ladespænding	-	28 V	-	-	
Maksimal ladestrøm	-	8 A	-	-	
Sædevinkel	3°		-		
Effektiv sædedybde	430 mm		16,9"		
Effektiv sædebredde	508 mm		20"		
Sæde til gulvhøjde	380 mm	420 mm	15"	16,5"	til el-scooterens gulvplade
Ryglænsvinkel	-30°	+25°	-	-	
Ryglænsenhøjde	500 mm		19,7"		
Sædejustering	-68 mm	+68 mm	-2,7"	+2,7"	For-bag, fra midterposition
Armlænsenhøjde	66 mm	360 mm	2,6"	14,2"	Til sædets overflade
Armlænslængde	330 mm		13"		Til ryglæn

1. Brugeren samt udstyr og tilbehør og andre ting, brugeren har med, må under ingen omstændigheder veje mere end den maksimale brugervægt.

2. S800's hastighed afhænger af batterispændingen og andre forhold og kan derfor variere. I visse lande, hvor der gælder andre regler, er den maksimale hastighed begrænset.

13.0 Garanti

DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.

Som anført i garantibetingelserne yder Sunrise Medical* sine kunder en garanti for produkter, der dækker det følgende.

Garantibetingelser:

1. Hvis en del eller dele af produktet skal repareres eller udskiftes på grund af en fabrikations- og/eller materialefejl inden for 24 måneder, vil den pågældende del eller de pågældende dele blive repareret eller udskiftet gratis. Garantien dækker kun produktionsfejl.
2. For at håndhæve garantien bedes du kontakte leverandøren af din el-scooter – f.eks. en forhandler eller sundhedsudbyder, der er godkendt af Sunrise Medical, med de nøjagtige oplysninger om problemets beskaffenhed. Hvis du anvender produktet uden for området, der er dækket af Sunrise Medicals kundeservicerepræsentant, vil reparationer eller udskiftning blive udført af en anden forhandler, der udpeges af producenten. Produktet skal repareres af en Sunrise Medical autoriseret servicemedarbejder.
3. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet indenfor denne garanti, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for produktets resterende garantiperiode i henhold til punkt 1.
4. For originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er disse dækket af en garanti på 12 måneder (efter monteringen) i overensstemmelse med disse garantibetingelser.
5. Der kan ikke rejses erstatningskrav under denne garanti, hvis en reparation eller udskiftning af et produkt, eller en del, er påkrævet af følgende grunde:
 - a. Normal slitage, som omfatter, men ikke er begrænset til, de følgende dele, hvis de er installeret: batterier, armlænsputer, betræk, dæk, bremsekloster osv.
 - b. Hvis produktet overbelastes. Se EC-etiketten vedrørende den maksimale brugervægt.
 - c. Produktet eller delen ikke er blevet vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger, som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
 - d. Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
 - e. Produktet eller delen er blevet beskadiget på grund af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
 - f. Ændringer/modifikationer, der er blevet foretaget på produktet eller delene, som afviger fra producentens specifikationer.
 - g. Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.
6. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt fra Sunrise Medical“
7. Forventet levetid

Vi vurderer en forventet levetid på 6 år for dette produkt, på betingelse af at:

 - At det udelukkende bruges til det tilsigtede formål, som er beskrevet i dette dokument.
 - Alle krav til vedligeholdelse og service overholdes.

Produktets forventede levetid kan forlænges, hvis det bruges med forsigtighed og vedligeholdes korrekt, hvis de tekniske og videnskabelige fremskridt ikke resulterer i tekniske begrænsninger.

Den forventede levetid kan også blive væsentligt reduceret ved ekstrem eller fejlagtig anvendelse.

Den faktor at vi anslår en forventet levetid for dette produkt, udgør ikke en yderligere garanti.

* Betyder den Sunrise Medical forhandler hvorfra produktet blev købt.

14.0 Navnemærkat

TYPE	Scooter - For outdoor use		Rear axle - Front axle
NAME	Sterling S800		200 kg - 70 kg
	YYYY-MM	UK/EP	MedPath Limited
	10° rated slope		27 Old Gloucester Street
	161 kg - max. user weight		London WC1N 3AX, UK
UDI	(01) 8720648771026	SN	001-01-01
			
	Scoozy B.V. Groothandelsweg 1 2645 EH Delfgauw, NL		
			
			

TYPE:	Produktnavn/SKU-nummer.
	Maksimal sikker hældning, afhænger af el-scooterindstillingen, brugerens kropsholdning og fysiske evner.
	Maks. brugervægt
	Maksimalt belastning på akslen
	UKCA-mærke
	CE-mærkning
	Angiver, at elektrisk/elektronisk udstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet.
	XXXX-XX-XX Produktionsdato
	Serienummer
	Dette symbol betyder medicinsk udstyr
	Producentens adresse
	 Ansvarlig person i Storbritannien
	 Adresse på repræsentant i Schweiz



ISO 7010-M002

Brugervejledningen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
E: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au



MedPath Limited
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
United Kingdom



Scoozy B.V.
Groothandelweg 1
2645EH Delfgauw
The Netherlands



OM_S800_EU_DK_Rev.C_2025-06-27

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr