

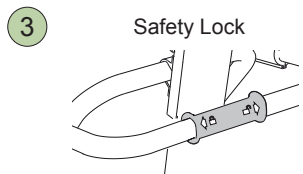


RollOn


Quick Reference Guide

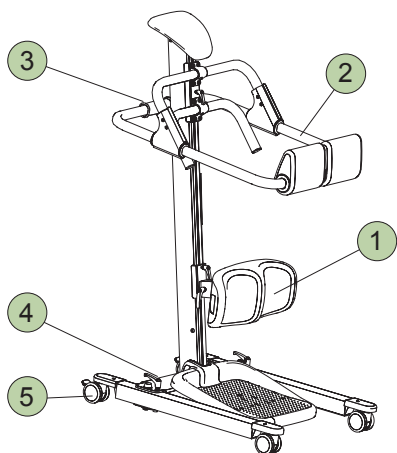

1 Lower-leg Support

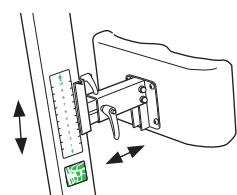


Adjustment
The height and depth of the lower-leg support are adjustable.

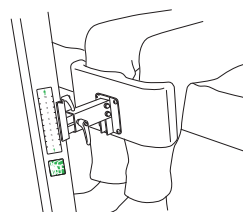


Try-out
Adjust the height of the lower-leg support so that it provides comfortable counter pressure just beneath the patient's kneecaps. If needed, the lower-leg support can also be vertically adjusted.

2 Seat Frame

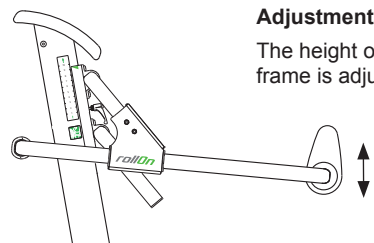


Adjustment
The height of the seat frame is adjustable.

Try-out

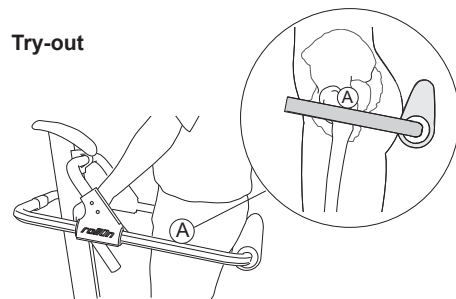


To prevent the patient from sitting on the rear supports and to prevent him/her from sliding down and out of the support, the frame should be set just under the patient's hip joints (A).

3 Safety Lock

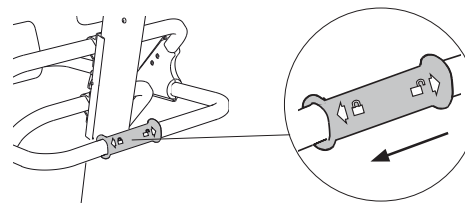


⚠ The safety lock should be in the locked position during transfer.

4 Base

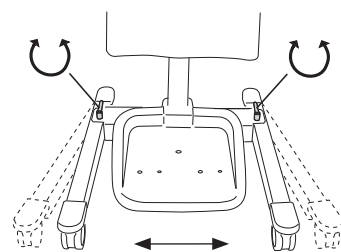

5 Locking the Wheels

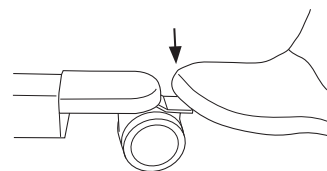

⚠ Lock the wheels during raising.

Areas of Use:

- to/from bed and chair/wheelchair
- to/from chair/wheelchair and toilet
- repositioning in a chair/wheelchair.

The RollOn bridges the gap between conventional walkers and powered sit-to-stand lifts.


Problems during Use

If the patient does not achieve a sufficiently upright position, we recommend a lift from Liko's product range; the first choice being the sit-to-stand lift Sabina.

Ergonomics

- Do not lift manually. Let the patient and RollOn do the job.
- Take it easy. Work calmly and methodically
- Don't strain your back. Work in a walking-stance with your back straight
- Don't twist your back. Move your feet
- Reduce the lever effect. Work close to the patient and the support.

Cleaning

When necessary, clean RollOn with a moist cloth.
 For more information read the Instruction Guide.

Other Quick Reference Guides

Liko's Quick Reference Guides are available for downloading at www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Manufacturer:


Liko AB
 Nedre vägen 100
 SE-975 92 Luleå
 Sweden
info@liko.se

IMPORTANT!


This Quick Reference Guide do not replace RollOn's Instruction guide, which can be downloaded from www.liko.com.

RollOn

Guía Rápida

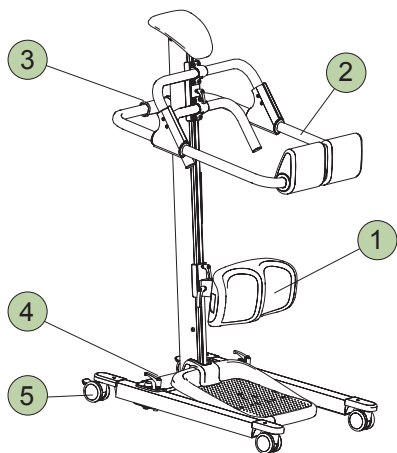

3 Bloqueo de seguridad

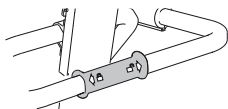

Instrucciones de seguridad


- Lea la guía de instrucciones antes de utilizar el producto.
- Antes de efectuar el traslado del paciente, asegúrese de que se han realizado los ajustes correctamente y que el paciente se encuentra seguro en el soporte de bipedestación.
- Compruebe que todas las palomillas de bloqueo estén debidamente fijadas antes de realizar el traslado del paciente.
- En su función de cuidador, usted es siempre responsable de la seguridad del paciente. Usted debe estar informado sobre la capacidad del paciente de superar el traslado con RollOn.
- **Carga máxima: 160 kg**

No deje nunca al paciente desatendido durante un traslado.

¡IMPORTANTE!


Esta guía rápida no sustituye a la guía de instrucciones de RollOn, la cual se puede descargar desde la página www.liko.com.

1 Reposapiernas

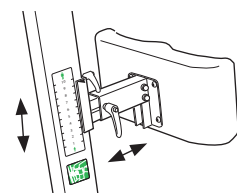

Ajuste


Se puede ajustar la altura y la profundidad de este componente.

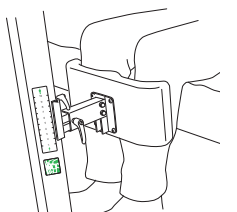

Ajuste de prueba

Ajuste la altura de forma que el reposapiernas proporcione una posición cómoda por debajo de la rótula de la rodilla. Si fuese necesario también se puede ajustar la profundidad.


2 Estructura de apoyo

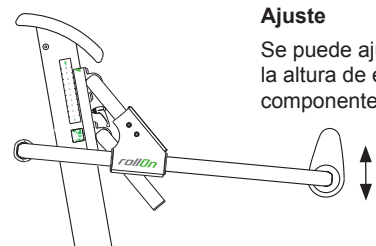

Ajuste


Se puede ajustar la altura de este componente.

Ajuste de prueba

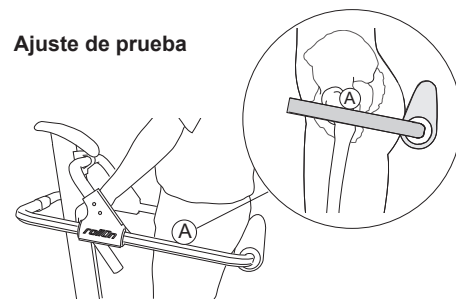


La estructura de apoyo debe situarse inmediatamente por debajo de la cadera (A), para evitar que el paciente se escurra hacia abajo o pueda sentarse en los cojines de soporte.

3 Bloqueo de seguridad

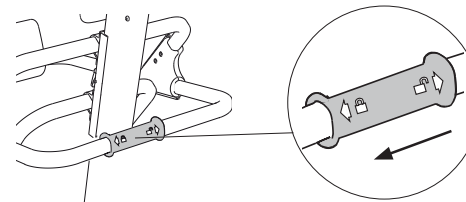


⚠ El bloqueo de seguridad deberá estar bloqueado durante el traslado del paciente.

4 Base

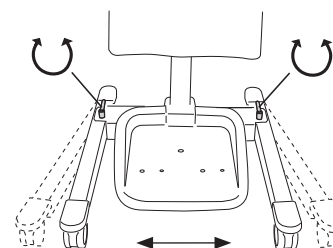

5 Bloqueo de las ruedas

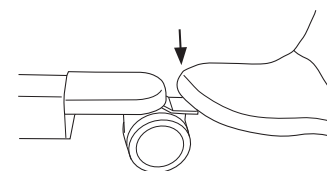

⚠ Bloquee las ruedas durante la incorporación del paciente.

Áreas de uso:

- entre la cama y la silla/la silla de ruedas
- entre la silla/la silla de ruedas y el baño
- recolocación del paciente en la parte posterior de la silla/de la silla de ruedas.

RollOn cubre el área de aplicación entre un caminador convencional y una grúa de bipedestación.

Problemas al usar este producto

Si el paciente es incapaz de incorporarse por sí mismo, recomendamos el uso de una grúa, y más concretamente nuestra grúa de incorporación Sabina.

Ergonomía

- Evite las elevaciones manuales - deje que el paciente y el soporte de bipedestación hagan el trabajo
- No se estrese - trabaje con calma y metódicamente
- Proteja su espalda - trabaje en posición erguida al caminar
- No tuerza su espalda - mueva los pies
- Minimice los movimientos de los brazos - trabaje cerca del soporte de bipedestación.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie RollOn, utilizando un trapo humedecido con agua caliente.

📖 Lea la guía de instrucciones para más información.

Otras Guía Rápidas

Las Guía Rápidas para los productos de Liko pueden descargarse desde la página www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricante:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se