




QUICKGUIDE

Humantechnik CM-BT2
Bluetooth Hals Slynge

Illustration af enheden

Beskrivelse af betjeningslementerne

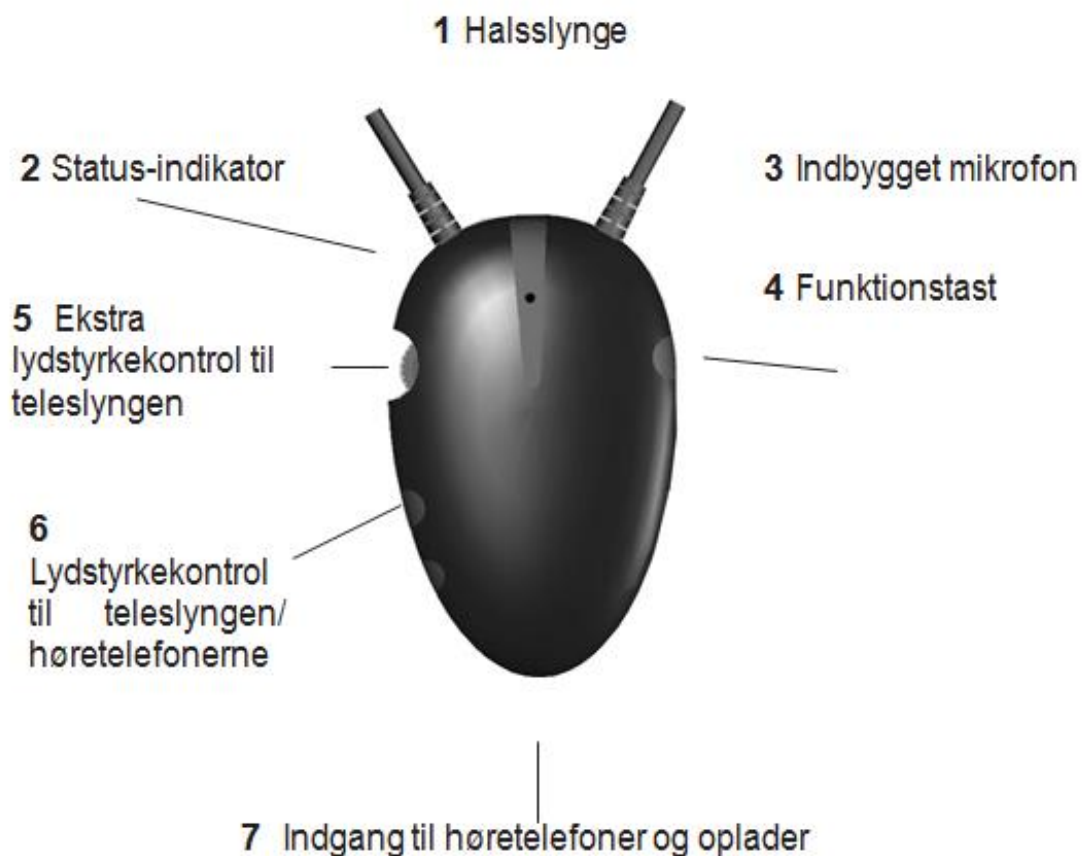

1 Halssslynge

2 Status-indikator

- Rødt lys er synligt	→	»CM-BT2« er slukket
- Rødt lys blinker langsomt	→	Advarsel: lavt batteri
- Blåt/rødt lys blinker skiftevist	→	Sammenkoblingstilstand
- Blåt lys blinker hvert 3. sekund	→	Forsøg på forbindelse
- Blåt lyst synligt i 1 sekund hver 5. sekund	→	Forbindelse oprettet med følgende enhed

3 Indbygget mikrofon

4 Funktionstast

Tænde og slukke for »CM-BT2« / Besvar opkald / afslut opkald sammenkoblingstast

5 Ekstra lydstyrkekontrol til teleslyngen

Halsslyngens lydstyrke kan øges uafhængigt ved at bruge denne drejeknap.

6 Lydstyrkekontrol til teleslyngen/ høretelefonerne

Halsslyngens/høretelefonernes lydstyrke kan indstilles ved hjælp af disse taster.

7 Indgang til høretelefoner og oplader

Denne 3.5 mm stikindgang kan bruges til at tilslutte høretelefoner eller til at oplade CM-BT2 med opladningskablet.

Sådan oplades »CM-BT2«

»CM-BT2« har et integreret, genopladeligt litium polymer-batteri. Inden første brug, anbefales det at oplade »CM-BT2« fuldt ud.



Bemærk venligst at »CM-BT2« ikke kan bruges mens den oplades


Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømforsyning.
Slut herefter strømforsyningen til en 230V-stikkontakt.
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.



Sådan oplades »CM-BT2« via strømforsyning


Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til den medfølgende strømforsyning.
Slut herefter strømforsyningen til en 230V-stikkontakt.
»CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.

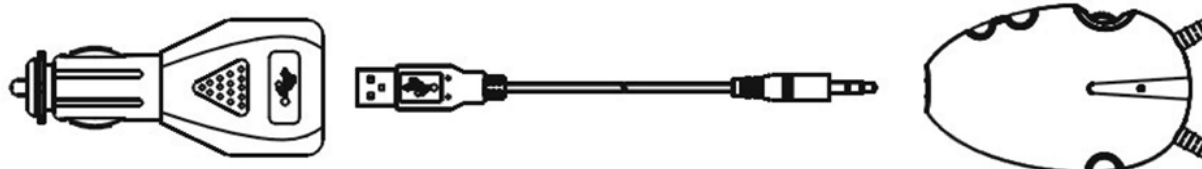

Sådan oplades »CM-BT2« via USB-porten på en computer

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til »CM-BT2« via opladningsstikket 7.
Slut den anden ende af USB-opladningskablet til USB-porten på din computer. »CM-BT2« er fuldt opladet, når statusindikatoren er slukket.

Sådan tændes/slukkes »CM-BT2«

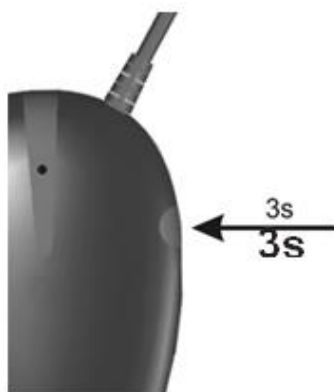

Tryk på funktionstasten **4** i ca. 3 sekunder indtil den blå statusindikator lyser op. Teleslyngen/ høretelefonerne udsender et hørbart signal for at signalere, at »CM-BT2« nu er tændt. Hvis der er en tilkøbet enhed i nærheden, vil »CM-BT2« automatisk etablere forbindelse til denne enhed.

For at slukke, tryk på funktionstasten **4** i ca. 3 sekunder indtil den røde statusindikator lyser op.

Teleslyngen/høretelefonerne udsender et hørbart signal for at signalere at »CM-BT2« nu er slukket.

At foretage og besvare opkald

Sørg for, at telefonen er forbundet med »CM-BT2«, når du skal foretage opkald. Foretag opkaldet som normalt.

For at foretage et opkald, tryk kort på funktionstasten **4**.

For at afslutte opkaldet, brug telefonens knapper eller tryk på funktionstasten på »CM-BT2«.

Sådan bruges »CM-BT2« som musikhøretelefoner sammen med telefonen


Hvis din telefon er udstyret med en integreret musikafspiller, kan du også bruge »CM-BT2« til at høre musik. Så snart et indkommende opkald registreres, vil musikken blive afbrudt, »CM-BT2« vil ringe, og du kan besvare opkaldet ved at trykke på funktionstasten **4**. Musikken vil fortsætte med at spille, når du har afsluttet opkaldet.

Sådan kobles »CM-BT2« sammen med en kompatibel computer

1. Tænd for din computer, og sørg for at Bluetooth-hardwaren på din computer er aktiveret. Tænd for »CM-BT2«
2. Tryk på funktionstasten 4 på »CM-BT2« i ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde statusindikator blinker skiftevis. »CM-BT2« forbliver i koblingstilstand i 2 minutter.
3. Kør Bluetooth-softwaren på din computer. Følg software- instruktionerne for at koble »CM-BT2« til.
4. Vælg »CM-BT2« fra listen over registrerede enheder. Om nødvendigt, indtast adgangskoden „0000“ for at koble »CM-BT2« sammen med telefonen og etablere en forbindelse.
5. Hvis sammenkoblingen var vellykket, vil den blå statusindikator på »CM-BT2« blinke hurtigt fire gange, og teleslyngen og høretelefonerne vil udsende et hørbart signal.

Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport i tilfælde af mulige problemer med at bruge denne enhed sammen med din PC.

Sikkerhedslukning på halsslyngen

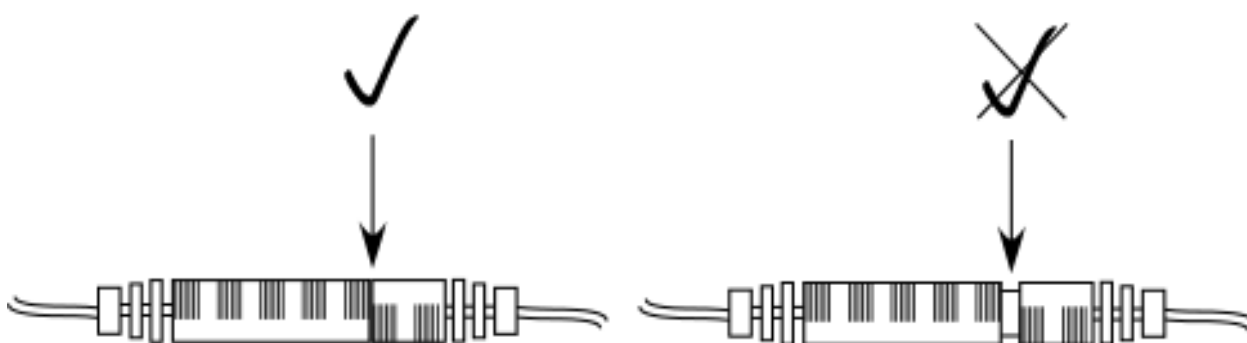

Sørg for, at sikkerhedslukningen på halsslyngen er fuldstændig lukket, for at sikre, at den fungerer korrekt.