

Manual

Gewa Control Medi Standard

SE: IR-sändare

GB: IR transmitter

Art.no 429220



ABILIA

Innehållsförteckning/Content

SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control Medi Standard	4
Inledning	4
Nyheter och förbättringar	4
Allmänt om Control Medi	5
Teckenförklaring	5
Sätta i batterier	6
Batterivarning	6
Inställningar	6
Signaler vid programmering.....	6
Avbryta programmering	6
Nivåer i Control Medi Standard.....	7
Låsa/låsa upp inställningslås	8
Öppna/stänga en nivå	8
Inläring av IR-kanaler från en annan sändare	9
Lägga in GewaLink-kanal	10
Lägga in 4096-kod.....	11
Kopiera knapp	12
Återkoppling vid knapptryckning	12
Inställning av anslagsfördröjning	13
Skapa automatisk sekvens (Macro).....	14
Repetera senaste funktion.....	15
Direktstyrning.....	15
Kanalområde	16
Märkning	17
Fastsättning av Control Medi	17
Säkerhetskopiering och återställning	18
Rengöring	18
Grundinställningar i Control Medi.....	19
Återställning till grundinställning	19
Tekniska data	20
Tekniska data	20
Tillbehör som medföljer Control Medi Standard.....	20
Övriga tillbehör till Control Medi.....	20
Säkerhet och ansvar	21
Återvinning av elavfall.....	21
Överensstämmelse med Medicintekniska Direktivet	21
Sammanställning snabbguide.....	22
GB: English Manual Gewa Control Medi Standard	24
Introduction	24

News and improvements	24
General information about Control Medi	25
Symbols.....	25
Inserting Batteries.....	26
Battery Warning Indicator	26
Settings.....	26
Alerts when programming.....	26
Cancel Programming.....	26
Levels in Control Medi Standard.....	27
Locking/Unlocking the Settings Lock.....	28
Opening/Closing a Level	28
Recording IR Channels from another Transmitter	29
Adding a GewaLink channel.....	30
Adding a 4096-code	31
Copying a button	32
Feedback when pressing buttons	32
Setting an acceptance delay.....	33
Creating an automatic sequence (Macro).....	34
Repeating the last function	35
Direct control	35
Setting the channel range.....	36
Button Labelling	37
Control Medi Holders	37
Backups and reinstallation	38
Cleaning.....	38
Default settings in your Control Medi	39
Resetting to Default settings.....	39
Technical data	40
Technical data	40
Accessories included with your Control Medi Standard.....	40
Other accessories available for Control Medi	40
Safety and responsibility	41
Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment.....	41
Conformity with the Medical Devices Directive	41
Summary and Quick guide.....	42

SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control Medi Standard

Inledning

Gewa Control Medi Standard är en programmerbar IR-sändare som ersätter vanliga fjärrkontroller till TV, DVD, stereo mm. Control Medi Standard har totalt 28 olika programmeringsplatser fördelade på fyra nivåer. Man trycker direkt på knapparna för att sända signaler, och byter nivå med *Nivå*-knappen. Det går även att ansluta en yttre manöverkontakt som kan direktstyra en knapp på sändaren.

Control Medi är en del av "Gewa Smart House"-konceptet och kan därför användas tillsammans med alla dessa produkter.

Nyheter och förbättringar

Gewa Control Medi-sändaren är en vidareutveckling av tidigare Gewa IR-sändare. Control Medi har bland annat fått en ny trevlig design och bättre räckvidd.

Control Medi finns i tre olika modeller. Den mest avancerade har 8 knappar och fyra nivåer som ger totalt 28 programmerbara platser och möjlighet att sända radio (GewaRadio). Den har också inbyggd scanning för personer som inte kan trycka direkt på knapparna. Den enklaste modellen har 2 eller 4 knappar (två olika raster).

När man trycker på en knapp så ges bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Gewa Control Medi finns i följande varianter:

Art.nr	Benämning	Beskrivning
429200	Control Medi Multi	IR/radio-sändare med scanning, 8 knappar
429220	Control Medi Standard	IR-sändare, 8 knappar
429240	Control Medi Easy	IR-sändare, 2/4 knappar (två olika raster)

Allmänt om Control Medi

Innan man börjar använda Control Medi finns det vissa saker som man bör veta:

- Control Medi levereras med GewaLink-kanaler grundinställda vilket innebär att det går att använda sändaren direkt efter att batterier har satts i. Se avsnitt *Sätta i batterier*.
- För att komma in i programmeringsläge trycker man först in *Nivå*-knappen och sedan **samtidigt** en *Funktions*-knapp. Olika *Funktions*-knappar väljs beroende av vad som ska programmeras.
- Om man ångrar en knapptryckning eller om något blir fel vid programmeringen kan man alltid trycka på *Nivå*-knappen i två sekunder. Den fungerar som *Avbryt*-knapp.
- Det är viktigt att inte vänta för länge mellan de olika stegen i programmeringen. Efter en viss tid går Control Medi automatiskt ur programmeringsläget för att spara ström.
- Om en knapp på Control Medi eller manöverkontakt hålls nedtryckt mer än 1 minut så kommer Control Medi att avbryta sändning av signal för att spara batterier.
- Inställningarna kan skyddas med inställningslås.
- Man kan bara ändra inställningar på nivåer som är upplåsta.

Bilden visar olika benämningar och funktioner som förekommer i texten.

Fig 1



Teckenförklaring

Följande symboler kommer att finnas med i texten:


- | | |
|------------|--|
| •X och •Y | Valfri knapp på Control Medi |
| •Y | Valfri knapp på annan sändare som ska läras in |
| •1...•6 | Knapp 1-6 |
| •! | Kod-knapp |
| •--- | Nivå-knapp |
| •--- 2 sek | Nivå-knapp som hålls nedtryckt i ca 2 sekunder |

Sätta i batterier

Lossa skruvarna till batteriluckan på baksidan av Control Medi med en skruvmejsel och sätt in 3 st alkaline batterier typ LR03 (AAA) 1,5V. Placera batterierna rätt polvända enligt markering i botten på batterifacket. Det är viktigt att **alkaline** batterier används som är skyddade mot läckande batterisyra och som har lång livslängd.





Batterivarning

Control Medi har inbyggd batterivarning som indikerar när batterierna håller på att ta slut. En ljudsignal  ljuder med en lång och tre korta ljudstötter som upprepas två gånger. Detta sker cirka 10 sekunder efter sändaren senast användes. Batterierna ska snarast bytas.

Inställningar

Följande stycken beskriver hur man ställer in Control Medi Standard för olika inställningsval.

För att komma in i programmeringsläge ska man trycka först på *Nivå*-knappen  och sedan samtidigt på knappen  för önskat inställningsval (se nedan). När man släpper knapparna hörs signal "Inställning", och indikeringslampan på knappen för inställningsvalet blinkar. En felsignal "Fel" ljuder om man gör ett ogiltigt inställningsval.

Tryck samtidigt	Inställningsval
 + 	Funktion
 + 	System
 + 	Återställningar

Därefter följer olika tryckningar beroende på vad som ska ställas in, se de separata beskrivningarna nedan.


Det är viktigt att inte vänta för länge mellan de olika stegen i programmeringen. Efter en viss tid går Control Medi automatiskt ur programmeringsläget för att spara ström.


Om programmeringen lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Signaler vid programmering


Vid programmering ger Control Medi återkoppling med blinkningar och olika signaler.

Signal "Inställning",  (tre stegrande toner).

Signal "Succé",  (tre positiva toner).

Signal "Fel",  (åtta negativa toner).


Avbryta programmering


För att avbryta programmeringen kan man trycka på *Nivå*-knappen  och hålla den intryckt i 2 sekunder.

Nivåer i Control Medi Standard

Control Medi Standard har totalt fyra nivåer med 7 programmerbara knappar. De är vid leverans grundinställda med GewaLink-kanalerna 16-39 på nivå 1-4, se *Tabell 1*. Det är valfritt om man vill använda en, flera eller alla fyra nivåerna. Fyra indikeringslampor visar vilken nivå man befinner sig på (se *Fig 1*).






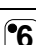


Control Medi Standard levereras med endast nivå 1 öppen, övriga nivåer är stängda. För att öppna ytterligare nivåer se avsnitt *Öppna/stänga en nivå*.

När endast en nivå är öppen så innehåller *Nivå*-knappen  automatiskt en kanal, vilket alltid är den första kanalen på nästa nivå. Därmed går det att styra åtta funktioner även om bara en nivå är öppen. Se ¹ i *Tabell 1*.

När flera nivåer är aktiva så byter man nivå genom att trycka på *Nivå*-knappen . För varje tryckning stegas en nivå.

Tabell 1: Grundinställning Gewa Link-kanaler

Tabell 1 visar vilka kanaler/koder som är inlagda i Control Medi Standard vid leverans.

GewaLink-kanalernas placering				
Knapp på Control Medi Standard	Nivå 1-4 (indikeras rött)			
	1	2	3	4
	16	22	28	34
	17	23	29	35
	18	24	30	36
	19	25	31	37
	20	26	32	38
	21	27	33	39
 2	kod	kod	kod	kod
 1	22	28	34	16

¹ Om endast en nivå är öppen blir *Nivå*-knappen automatiskt en kanal. Det är den första kanalen på nästa nivå.

² Samma kod på alla nivåerna.






OBS! Tabellen ovan visar GewaLink-kanalernas placering vid leverans. Det är möjligt att välja en annan uppsättning av GewaLink-kanaler, se *Kanalområde*.

Låsa/låsa upp inställningslås





För att skydda inställningarna i Control Medi kan man aktivera inställningslås.


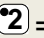
När inställningslås är aktiverat är inställningarna skyddade. Om man försöker att ändra inställningar utan att först låsa upp ges signal "Fel".

Gör enligt följande för att låsa/låsa upp Inställningslåset:

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att låsa upp inställningslåset eller  för att låsa.
4. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Låsa upp/låsa inställningslås






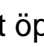

 + , , tryck sedan önskat val  eller .

 = Låsa upp.  = Låsa.



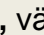
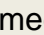



Grundinställning: Upplåst

Öppna/stänga en nivå

Control Medi har fyra olika nivåer, vilket innebär att varje knapp kan ha fyra olika funktioner. Det går att välja vilka nivåer som ska vara öppna och därigenom hur många funktioner varje knapp ska ha. Man bör stänga de nivåer man inte använder.

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på . Lampan för aktuell nivå lyser nu.
3. Stega fram till den nivå som ska öppnas eller stängas genom att trycka på .
4. Tryck på  för att stänga vald nivå eller  för att öppna vald nivå. Lampan för nivåerna förflyttas automatiskt till nästa nivå som därmed direkt kan öppnas resp. stängas.
5. Tryck på  i 2 sekunder för att avsluta.
6. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Öppna/stänga nivå

 + , , välj nivå med , tryck sedan önskat val  eller ,  2sek.






 = Stänga.  = Öppna.

Grundinställning: Nivå 1 öppen

Inläring av IR-kanaler från en annan sändare


Se till att batterierna i båda sändarna har god kapacitet. Placera inte sändarna i starkt ljus vid inläring (t.ex. solljus).

Lägg båda sändarna på ett bord med originalsändaren riktad mot den bakre gaveln på Control Medi, se bild.

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på .
3. Välj nivå där kanaler ska läras in med .
4. Välj den knapp  där kanalen ska läras in. Lampan för vald knapp lyser med fast sken och en ljudsignal "Tryck" ljuder.
5. Tryck och håll ner den knapp på originalsändaren som ska läras in i Control Medi. Släpp när lampan på vald knapp slocknar och en ljudsignal "Släpp" ljuder. Det kan ta upp till 10 sekunder. Om lampan på vald knapp åter lyser med fast sken och ljudsignal "Tryck" ljuder trycker man ytterligare en eller flera gånger tills signal "Succé" ges.










Om signal "Fel" ges har inspelningen misslyckats. Försök ytterligare en gång från punkt 4.

6. Om inläringen har lyckats med första knappen går man vidare med punkt 4 och 5 tills alla knappar är inlärd.
7. Avsluta med att trycka på  i 2 sekunder.
8. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".
9. Testa nu de inlärd funktionerna på den apparat som ska styras.



Originalsändare

Lära in IR-kanaler

 + , , välj nivå med , välj knapp , välj knapp , gå vidare eller avsluta  2 sek

Viktigt! När bara **en nivå** används blir *Nivå*-knappen automatiskt nästa nivå's första knapp, se *Tabell 1*. Det innebär att det är fullt möjligt att lära in på *Nivå*-knappen men bara när en nivå är öppen.

Lägga in GewaLink-kanal

Control Medi Standard levereras med GewaLink-kanalerna 16-39 (se *Tabell 1*). Om man vill använda en annan GewaLink-kanal på en viss knapp kan man lägga in en vald GewaLink-kanal så här:

1. Tryck först på och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på och sedan på . Lampan för aktuell nivå blinkar nu.
3. Stega fram till den nivå som GewaLink-kanalen ska läggas in på med .
4. Välj knapp där GewaLink-kanalen ska sparas.
5. Välj **Kanalområde**, = GewaLink 00 – 63. = GewaLink 64 – 127.
6. Välj **Kanalgrupp** enligt *Tabell 2* nedan.
7. Tryck på den **Knapp** som motsvarar den önskade GewaLink-kanalen i den valda kanalgruppen enligt *Tabell 2* nedan.
8. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Tabell 2: Kanalgrupp och knapp för att lägga in GewaLink-kanal

Kanalområde : GewaLink 00-63								
Knapp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp
	00	08	16	24	32	40	48	56
	01	09	17	25	33	41	49	57
	02	10	18	26	34	42	50	58
	03	11	19	27	35	43	51	59
	04	12	20	28	36	44	52	60
	05	13	21	29	37	45	53	61
	06	14	22	30	38	46	54	62
	07	15	23	31	39	47	55	63
Kanalområde : GewaLink 64-127								
Knapp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp	Kanalgrupp
	64	72	80	88	96	104	112	120
	65	73	81	89	97	105	113	121
	66	74	82	90	98	106	114	122
	67	75	83	91	99	107	115	123
	68	76	84	92	100	108	116	124
	69	77	85	93	101	109	117	125
	70	78	86	94	102	110	118	126
	71	79	87	95	103	111	119	127

Lägga in GewaLink-kanal


+ , , , välj nivå med , välj knapp , välj **Kanalområde**, välj **Kanalgrupp**, välj GewaLink-kanal.

Se *Tabell 2* för val av kanalgrupp och GewaLink-kanal.

Exempel: Man vill lägga GewaLink-kanal 28 på en viss knapp .

+ , , , välj nivå, , , , .

Lägga in 4096-kod

Control Medi levereras med en speciell kodad kanal (4096) på *Kod*-knappen  som är slumpmässigt vald. Denna kodade kanal används normalt för funktioner som kräver strikt behörighet såsom lägenhetsdörrar eller villadörrar. Koden har 4096 olika kombinationer.

Kod-knappen har vid leverans samma kod oavsett vilken nivå man befinner sig på. Behöver man lägga in en ny kodad kanal så finns det två metoder för att göra detta. Man kan ställa in 4096-kod på valfri nivå och knapp. Rekommenderat är att ha 4096-kod på *Kod*-knappen.

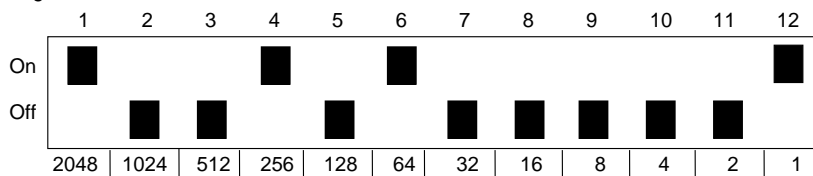
*OBS! Då man lägger in en ny kodad kanal så läggs den bara in på en nivå. Vill man använda *Kod*-knappen med samma kod på flera nivåer måste den läggas in på varje nivå.*

Första metoden är att lära in från en kodad sändare som beskrivs under avsnitt *Inläring av kanaler från en annan sändare*.























För metod två knappas en binär kod in. Den binära koden kan man själv hitta på eller så använder man en kod som redan finns inställd i en IR-mottagare eller IR-sändare.

Det finns två typer av IR-mottagare. En äldre typ av mottagare där kodinställningen görs med en 12-polig omkopplare eller nyare där IR-mottagaren är programmerbar. Principen är densamma för hur den binära koden skapas. I *fig 3* finns en 12-polig omkopplare avbildad. Omkopplarna 1, 4, 6 och 12 står i "On-läge" och övriga står i "Off"-läge.

Fig 3


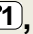

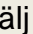

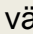

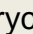


Följande exempel beskriver hur den binära koden skapas enligt metod två:

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
 2. Tryck på  och sedan på  igen.
 3. Välj nivå där 4096-koden ska läras in med .
 4. Välj knapp där 4096-koden ska sparas. (Lämpligen -knappen.)
 5. Lagg in koden genom att trycka på  respektive .
 = omkopplare i Off-läge och  = omkopplare i On-läge.
- Gör tolv tryckningar i tur och ordning: , , , , , , , , , , , , (*Fig 3*).
6. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".
 7. Koden är nu inlagd på den valda knappen. *OBS!* Koden ovan är bara ett exempel och ska vara olika för olika användare. Notera koden för eventuellt framtida behov.

*OBS! Om man har lagt in kodad kanal på *Kod*-knappen och vill använda den med samma kod på flera nivåer måste den läras in på varje nivå.*

Lägga in 4096-kod








 + , , , välj nivå med , välj knapp , tryck  eller  12 ggr.

 = Off-läge.  = On-läge.


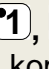
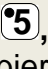
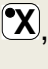

Grundinställning: Slumpvis kod

Kopiera knapp

Med Control Medi har man möjlighet att kopiera en knapps funktion till en annan knapp. OBS! Koden/kanalen ligger även kvar på ursprungsplatsen.

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på .
3. Välj nivå med  och tryck på den knapp  vars kod ska kopieras.
4. Välj den nivå med  till vilken du vill kopiera koden. Tryck på önskad knapp  som koden ska kopieras till.
5. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".









Kopiera knapp

 + , , välj nivå och knapp som ska kopieras , välj nivå och knapp  till vilken du vill kopiera koden.





Återkoppling vid knapptryckning


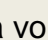

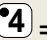
Control Medi ger alltid återkoppling i form av ljussignal när man trycker på en knapp. Man kan även få återkoppling i form av ljudsignal och vibration. Det går att få återkoppling på alla tre sätt samtidigt, eller välja vilka som ska vara på/av (ljus är alltid på).

Gör enligt följande för att ställa in ljud- och vibrationsstyrka.

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 2 blinkar.
2. Tryck på .
- 3a. Ljudstyrka:
Tryck  för att sänka volymen, tryck  för att öka volymen. Fortsätt trycka tills önskad volym ställts in.
och/eller:
- 3b. Vibrationsstyrka:
Tryck  för att minska vibrationen, tryck  för att öka vibrationen. Fortsätt trycka tills önskad vibration ställts in.
4. Avsluta med att trycka på  i 2 sekunder.
5. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Ändra styrka på ljudsignal och vibration






 + , , välj inställning, ^{2sek}.

 = Sänka volymen.  = Öka volymen.  = Minska vibration.  = Öka vibration.




Grundinställning: Ljudsignal = 1 (0 – 5) Vibration = 1 (0 – 5)

Inställning av anslagsfördröjning

Med Control Medi har man möjlighet att ställa anslagsfördröjningen vid tryck på knappar eller manöverkontakt, alltså den tid som en knapp eller manöverkontakt måste hållas nedtryckt innan funktion erhålles. Anslagsfördröjningen går att ställa från 1 till 4 där 1 är ingen fördröjning (av) och 4 är maximal fördröjning (1 sekund).

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 2 blinkar.
2. Tryck på .
3. Tryck på önskat värde för att välja anslagsfördröjning.  är av och  är max.
4. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Ställa in anslagsfördröjning

 + , , välj inställning.

 = 0 sek.  = 0,3 sek.  = 0,6 sek.  = 1 sek.











Grundinställning: Anslagsfördröjning = AV (0 sek).

Skapa automatisk sekvens (Macro)

Control Medi har möjlighet att sända sekvenser. Genom att trycka på **en** knapp utför Control Medi automatiskt en serie av knapptryckningar. T.ex. för att komma till en sida på text-TV behöver man göra minst 4 knapptryckningar. Dessa 4 tryckningar går att lära in så att endast en tryckning behöver göras. Andra tillämpningar kan vara att slå långa telefonnummer med endast en knapptryckning eller att när man svarar i telefonen så stängs ljudet samtidigt av på TV. Control Medi kan också lära sig att byta nivåer samt komma ihåg hur länge man trycker in knappen, man kan sända max 1 minut. Andra redan inlärd sekvenser kan också utgöra en del av en ny sekvens.

Det går alltid att avbryta en sändning av en sekvens genom att trycka på annan valfri knapp.

När en sekvens lärs in sänder Control Medi samtidigt det som finns på knappen. Maximalt 50 knapptryckningar per sekvens går att lära in. OBS! Den knapp som sekvensen ska ligga på får ej vara en del av sekvensen.

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att starta inspelningen.
4. Tryck på de knappar som ska ingå i sekvensen.
5. Tryck på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 1 blinkar.
6. Tryck på .
7. Tryck på  för att avsluta inspelningen.
8. Välj nivå  där sekvensen ska lagras.
9. Välj knapp  där sekvensen ska lagras.
10. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Lägga in Macro






 + , , , skapa sekvens,  + , , , välj nivå och knapp  för att spara.

Max 60sek/tryck, 50 tryck

Repetera senaste funktion



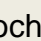
I Control Medi Standard kan ha en knapp som repeterar den senast sända funktionen.

Gör enligt följande för att lägga in repetera senaste funktion på valfri knapp:

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 2 blinkar.
2. Tryck på .
3. Tryck på  för att välja önskad nivå.
4. Tryck på önskad knapp  på den valda nivån.
5. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

För att ta bort repetera senaste funktion gör man en återställning av knappen, se *Återställning till grundinställning, återställning av en knapp*.

Repetera senaste funktion

 + , , välj nivå och knapp .




Grundinställning: AV (ingen)

Direktstyrning

I Control Medi är det möjligt att direktstyra en knapp med en yttre manöverkontakt. Man kan välja vilken knapp som ska aktiveras då man trycker på manöverkontakten.


Manöverkontakt med 3,5 mm propp ansluts till uttaget på sidan av Control Medi.

Gör enligt följande för att aktivera/avaktivera direktstyrning:




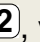

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 2 blinkar.
2. Tryck på .
- 3a. Aktivera direktstyrning.





Tryck på , och tryck på den knapp  som ska aktiveras vid tryck på manöverkontakten.

eller:

- 3b. Tryck på  för att stänga av direktstyrning.
4. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".


Aktivera/avaktivera direktstyrning

Aktivera direktstyrning:  + , , , välj knapp .

Avaktivera direktstyrning:  + , , .

Grundinställning: AV (ingen)







Kanalområde

Med Control Medi har man möjlighet att ställa in olika kanalområden som sändaren ska arbeta inom. När inställningen görs försvinner eventuellt inlärda kanaler och en ny slumpvis kod läggs in på *Kod*-knappen .

Normalt behöver man inte byta kanalområde. Om flera GewaLink-sändare ska användas i samma område och man INTE vill styra samma utrustning kan det vara nödvändigt att använda olika kanalområden.






Tabell 3 visar de olika inställningsmöjligheterna.

Tabell 3: Kanalområden




	Kanalområde, GewaLink-kanaler					
	00-23 	16-39 	32-55 	56-79 	80-103 	104-127 
Nivå 1	00-05	16-21	32-37	56-61	80-85	104-109
Nivå 2	06-11	22-27	38-43	62 ¹ -67	86-91	110-115
Nivå 3	12-17	28-33	44-49	68-73	92-97	116-121
Nivå 4	18-23	34-39	50-55	74-79	98-103	122-127

¹ Kanal 62 är en stoppkod och kan inte styra någon funktion. Däremot går det att lära in kanaler/koder på denna knapp som i sin tur kan styra någon funktion.

Gör enligt följande för att välja kanalområde:

1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 2 blinkar.
2. Tryck på .
3. Välj kanalområde  till  enligt tabell 3 ovan.
4. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Ställa in kanalområde

 + , , välj kanalområde.

 = 00-23,  = 16-39,  = 32-55,  = 56-79,  = 80-103,  = 104-127

Grundinställning: GewaLink-kanal 16-39

Märkning

Knapparna är vid leverans märkta med siffror. Märkningen kan bytas ut och ersättas med en egen utformning. På Abilias hemsida kan man anpassa märkningen med hjälp av färdiga mallar med lämpliga symboler och text.

Man kan även ladda ner dokumentet. Märkningen skrivs ut på overheadfilm eller vitt papper och sticks i fickan på Control Medi. Innan märkning sätts dit måste rastret tas bort.

Man tar bort rastret genom att greppa tag i rastret i mitten och sedan lyfta av det rakt upp, se bilden.

Till Control Medi medföljer också ett A4-ark där noteringar kan göras.



Fastsättning av Control Medi

Gummifötter sitter monterade på undersidan så att Control Medi ska kunna ligga still på plana underlag. Control Medi kan också förses med ett clips (tillbehör) för att kunna bäras hängande i fickan eller i byxlinningen.

Som extra tillbehör finns en hållare som snäpps fast på Control Medi. Denna hållare kan i sin tur monteras ihop med en bordstving/rörtving för montering på bord eller för fastsättning på rör. Hållaren går också att montera på ett rullbart golvstativ.



Ytterligare ett alternativ är att ha Control Medi hängande runt halsen. En halsrem levereras med Control Medi.

Gör enligt följande för att sätta fast halsremmen:

1. Skruva loss batteriluckan.
2. Lägg halsremmens tunna ögla i spåret runt skruvens fäste.
3. Skruva tillbaka batteriluckan.
4. Justera längden på halsremmen.

Varning!

Snörlåset är en säkerhetsdetalj som ska förhindra strypning. Kontrollera att halsremmens ändar lätt kan dras ut t.ex. om sändaren skulle fastna i något. Gör aldrig knutar på halsremmen!



Säkerhetskopiering och återställning

Man kan ansluta Control Medi till en dator för att göra en säkerhetskopia eller återställa sändaren med en sparad säkerhetskopia. Använd tillbehöret Control Tool USB interface (säljs separat). Programvara laddas ned från Abilias hemsida. www.abilia.se. Se instruktioner på hemsidan.

Rengöring

Control Medi kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol.

Alternativt kan Control Medi göras rent med en **mycket hårt urvriden trasa** som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

Varning!


Inga andra desinfektionsmedel får användas än Alsolsprit, Klorhexadinsprit eller Etanol.

Dessa vätskor är brandfarliga, hantera dem med varsamhet!



Grundinställningar i Control Medi













Vid leverans är Control Medi Standard inställd med vissa grundinställningar enligt följande:

- Anslagsfördröjning är inställd på värde AV
- Återkoppling, ljudvolym är inställd på värde 1 (0 – 5)
- Återkoppling, vibration är inställd på värde 1 (0 – 5)
- Endast nivå 1 är öppen, övriga nivåer är stängda
- GewaLink-kanaler 16-39 ligger inlagda på nivå 1-4
- En slumpvis vald kod på -knappen

Återställning till grundinställning






Med Control Medi har man möjlighet att återställa en knapp, återställa alla knappar på en nivå eller återställa hela Control Medi till grundinställning. Se *Tabell 1 Grundinställning GewaLink-kanaler* vilka kanaler som fås vid återställning. Övriga inställningar återgår också till grundinställning, se ovan.

Gör enligt följande för att återställa:






1. Tryck först på  och sedan samtidigt på . När man släpper knapparna hörs signal "Inställning" och indikeringslampan på knapp 3 blinkar.
- 2a. Återställning av **en knapp**:
Tryck på .
Välj nivå med .
Välj den knapp  som ska återställas.
eller:
- 2b. Återställning **av alla knappar på en nivå**:
Tryck på .
Välj nivå med .
Tryck på .
eller:
- 2c. Återställning till **fabriksinställning** (alla knappar på alla nivåer):
Tryck på .
Tryck i tur och ordning på knapparna , , .
3. Om åtgärden lyckats ges signal "Succé". Om det blivit fel eller tagit för lång tid ges signal "Fel".

Återställning till grundinställning






Återställning av en knapp:

 + , , välj nivå med , välj knapp .

Återställning av en nivå:

 + , , välj nivå med , .

Fabriksinställning:

 + , , , , .

Tekniska data

Tekniska data

Strömförbrukning i vila:	ca 2 μ A
Strömförbrukning vid sändning:	ca 40 mA (GewaLink-kanal)
Ingång manöverkontakt typ:	3,5 mm telepropp 2-pol
Batterilivslängd (med enbart knappar):	ca 2 år (100 sek sändning/dag med_GewaLink-kanal)
Programmeringsplatser:	28 st
Manöverkraft knappar:	< 160 gram
Räckvidd:	40-50 m (GewaLink-kanaler)
EMC-standard emission: " immunitet:	EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN(IEC) 61000-6-2:2005, EN(IEC) 61000-6-3:2007, selected parts from EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Dataanslutning:	Via 429252 Control Tool USB interface
Fysiska mått (L x B x H):	100 x 55 x 22 mm, inklusive gummifötter
Vikt inkl batterier:	105 gram
Temperaturområde (exkl batterier):	-20°C – +45°C

Tillbehör som medföljer Control Medi Standard

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Antal
429255	Control Medi Labelling 8	Märkning av knappar	1 st
-	Noteringsark	A4-ark för notering av inlärd kanal	1 st
429257	Control Medi Keyguard 8	Raster för 8 knappar	1 st
890410	Halsrem		1 st
8375	Batteri	LR03 1,5V	3 st

Övriga tillbehör till Control Medi

Art.nr	Benämning	Beskrivning
429249	Control Medi Holder 6 mm Hole	För fastsättning av Control Medi till olika stativ med ett 6 mm hål
429250	Control Medi Holder 10 mm Pipe	För fastsättning av Control Medi till 10 mm rörsystem
429251	Control Medi Belt Clip	
429252	Control Tool USB interface	Adapter för anslutning av Control Medi till PC

Säkerhet och ansvar

Abilia AB har utarbetat riskanalys för produkter i förhållande till SS-EN 14971 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som gjorts i detta dokument.

Vid idrifttagning och dagligt användande av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt som man inte får använda produkten på. Om du är osäker på om du ställt in eller satt produkten i drift korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Abilia AB är inte ansvariga för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Abilia AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Återvinning av elavfall

Control Medi innehåller elektronik som ska återvinnas efter produktens livslängd. Lämnas till miljöstation för elavfall.



Överensstämmelse med Medicintekniska Direktivet

Control Medi marknadsförs som ett tekniskt hjälpmedel för funktionshindrade och uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC vilket t.ex. inkluderar relevanta krav för EMC och elektrisk säkerhet.

Sammanställning snabbguide

Låsa upp/låsa inställningslås

+ , , tryck sedan önskat val eller .

= Låsa upp. = Låsa.

Grundinställning: Upplåst

Öppna/stänga nivå

+ , , välj nivå med , tryck sedan önskat val eller , 2sek.

= Stänga. = Öppna.

Grundinställning: Nivå 1 öppen

Lära in IR-kanaler

+ , , välj nivå med , välj knapp , välj knapp , gå vidare eller avsluta 2 sek

Lägga in 4096-kod

+ , , , välj nivå med , välj knapp , tryck eller 12 ggr.

= Off-läge. = On-läge.

Grundinställning: Slumpvis kod

Kopiera knapp

+ , , välj nivå och knapp som ska kopieras , välj nivå och knapp till vilken du vill kopiera koden.

Ändra styrka på ljudsignal och vibration

+ , , välj inställning, 2sek

= Sänka volymen. = Öka volymen. = Minska vibration. = Öka vibration

Grundinställning: Ljudsignal = 1 (0 – 5) Vibration = 1 (0 – 5)

Ställa in anslagsfördröjning

+ , , välj inställning.

= 0 sek. = 0,3 sek. = 0,6 sek. = 1 sek.

Grundinställning: Anslagsfördröjning = AV (0 sek).

Lägga in Macro

+ , , , skapa sekvens, + , , , välj nivå och knapp för att spara.

Max 60sek/tryck, 50 tryck

Repetera senaste funktion

+ , , välj nivå och knapp .

Grundinställning: AV (ingen)

Aktivera/avaktivera direktstyrning

Aktivera direktstyrning: + , , , välj knapp .

Avaktivera direktstyrning: + , ,

Grundinställning: AV (ingen)

Ställa in kanalområde

+ , , välj kanalområde.

= 00-23, = 16-39, = 32-55, = 56-79, = 80-103, = 104-127

Grundinställning: GewaLink-kanal 16-39

Återställning till grundinställning

Återställning av en knapp:

+ , , välj nivå med , välj knapp .

Återställning av en nivå:

+ , , välj nivå med , .

Fabriksinställning:

+ , , , , .

GB: English Manual Gewa Control Medi Standard

Introduction

The Gewa Control Medi Standard is a programmable IR transmitter, which replaces ordinary remote controls for TV, DVD, stereo etc. It has in all 28 different programming positions on four levels. Simply press the buttons to send signals, and change level by pressing the *Level*-button. You can also connect an external control switch that can directly control one button on the transmitter.

The Control Medi is a part of the “Gewa Smart House” concept and therefore can be used together with all of these products.

News and improvements

The Gewa Control Medi transmitter is a further development of previous Gewa IR transmitters. The Control Medi is a new design with an improved transmission range.

The Control Medi is available in three different models. The most advanced feature has eight buttons and four levels giving a total of 28 programmable positions. It also has the possibility to send radio (GewaRadio), and a built-in scanning option for people that cannot press the buttons directly. The simplest model has 4 or 2 buttons (two different keyguards).

When you press a button, confirmation is given as vibration, sound and light.

The Gewa Control Medi is available in the following variants:

Art.no	Name	Description
429200	Control Medi Multi	IR/radio transmitter with scanning, 8 buttons
429220	Control Medi Standard	IR transmitter, 8 buttons
429240	Control Medi Easy	IR transmitter, 2/4 buttons (two different keyguards)

General information about Control Medi

- To be able to use your Control Medi there are certain things that you should know:
- The Control Medi is delivered preset with GewaLink channels, meaning that it is possible to use the transmitter immediately after the batteries has been inserted. See section *Inserting Batteries*.
- To enter the programming mode, press first the *Level*-button and then **simultaneously** one of the *Function*-buttons. Different *Function*-buttons are chosen depending on what is to be programmed.
- If you press the wrong button or make a mistake when programming you can always press the *Level*-button for two seconds. It works as a *Reset*-button.
- It is important not to wait too long between the different steps when programming. After a certain time your Control Medi automatically leaves the programming mode to save power.
- If a button on your Control Medi or control switch is pressed for more than 1 minute, your Control Medi will stop transmitting to save power.
- The settings can be protected by using the Settings Lock.
- You can only change the settings of levels that are unlocked.

This picture shows the various terms and functions which are described in the text.

Fig 1



Symbols

The following symbols appear in the text throughout this manual:


- | | |
|------------|---|
| ⓧ and Ⓨ | Any button on your Control Medi |
| Y | Any button on another transmitter to be programmed |
| ①...⑥ | Button 1-6 |
| ①! | Code-button |
| ①--- | Level-button |
| ①--- 2 sec | Level-button held pressed for approximately 2 seconds |

Inserting Batteries

Unscrew the battery lid screws on the back of your Control Medi using a screwdriver and insert three AAA batteries (alkaline LR03 1.5 V). Insert the batteries according to the guidelines at the bottom of the battery compartment. Pay attention to the polarity! It is important to use long life **alkaline** batteries that are protected against leaking battery acid.











Battery Warning Indicator

Control Medi has a built-in indicator to warn you of low battery voltage. You will hear a sound alert  with one long beep and three short beeps played twice. This occurs about 10 seconds after the transmitter was last used. Replace the batteries as soon as possible.

Settings

Below is described how to program your Control Medi for different setting options.

To enter the programming mode, you should first press the *Level*-button  and then simultaneously press the button  for your desired setting option (see below). When you release the buttons a “Setting” alert is heard, and the indication lamp on the button for the setting option flashes. An “Error” alert will sound if you select an invalid setting option.

Press simultaneously	Setting option
 + 	Function
 + 	System
 + 	Reset

This is followed by different button presses depending on what is to be set, see the separate descriptions below.

It is important not to wait too long between the different steps when programming. After a certain time your Control Medi automatically leaves the programming mode to save power.

If your programming is successful, a “Success” alert will sound. If something has gone wrong or takes too long, an “Error” alert will sound.

Alerts when programming


Whilst you are programming, your Control Medi gives feedback with flashes and different alerts:

“Setting” -  (three increasing tones).

“Success” -  (three positive tones).

“Error” -  (eight negative tones).


Cancel Programming

To cancel the programming, you can press the *Level*-button  and keep it pressed for two seconds. It works as a *Reset*-button.

Levels in Control Medi Standard

Your Control Medi Standard has totally four levels with seven programmable buttons. On delivery the buttons are factory-programmed with GewaLink channels 16-39 on level 1-4, see *Table 1*. You can freely use one, several or all four levels. Four indication lights indicate the current level (see *Fig 1*).

Your Control Medi Standard is delivered with only level 1 open, other levels are closed. To open further levels, see section *Opening/closing a level*.

When only one level is open, the *Level*-button  automatically contains one channel which is always is the first channel on the next level. In this way, it is possible to control eight functions even if only one level is open. See ¹ in *Table 1*.










When several levels are active you can change to another level by pressing the *Level*-button . Each time you press the button the next level is chosen.

Table 1: Default setting Gewa Link channels

Table 1 shows the channels and codes for Control Medi Standard on delivery.

GewaLink channels position				
Button on Control Medi Standard	Level 1-4 (red indicator)			
	1	2	3	4
	16	22	28	34
	17	23	29	35
	18	24	30	36
	19	25	31	37
	20	26	32	38
	21	27	33	39
 ²	code	code	code	code
 ¹	22	28	34	16

¹ If only one level is open the *Level*-button automatically becomes one channel. It is the first channel on the next level.

² Same code on all levels.






NOTE! The table above shows GewaLink channels on delivery. It is possible to select another set of GewaLink channels, see section *Setting the channel range*.

Locking/Unlocking the Settings Lock



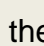


In order to protect the programmed settings in your Control Medi, Settings Lock can be activated.


When the Setting Lock is enabled, the settings are protected. If you try to change the settings without first unlocking, the “Error” alert is given.

Do as follows to lock/unlock the Settings Lock:

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press .
3. Press  to unlock the Settings Lock, or  to lock.
4. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Locking/Unlocking the Settings Lock






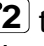

Press  + , , then press your desired option  or .

 = Unlock.  = Lock.


Default setting: Unlocked

Opening/Closing a Level

Your Control Medi has four different levels, which means that each button can have four different functions. You can select the number of levels that are open and hence, how many functions each button should have. You should close levels that are not to be used.

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press . The indicator light for the current level glows.
3. Select the level to be opened or closed by pressing .
4. Press  to close the selected level or  to open the selected level.
The indicator light for the levels automatically moves to the next level, which then directly can be opened or closed.
5. Finish by pressing  for 2 seconds.
6. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Opening/Closing a Level

Press  + , , choose level with , then press the desired option  or , then  ^{2sec}.






 = Close.  = Open.

Default setting: Level 1 open

Recording IR Channels from another Transmitter


Make sure the batteries in both transmitters are fully charged. Do not use the transmitters in intense light (e.g., sunlight) when programming.

Place the two transmitters on a table with the original transmitter directed towards the rear of your Control Medi, see picture.

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press .
3. Choose the level where the channels are to be recorded with .
4. Press the button  where the channel is to be recorded. The indicator light for the selected button glows steadily and the “Press” alert sounds.
5. Press and hold the corresponding button on the original transmitter pressed. Release the button when the indicator light for the selected button goes off and the “Release” alert sounds. This may take up to 10 seconds. If the indicator light glows again and the “Press” alert sounds, you should press the button one or more times until the “Success” alert sounds.










If the “Error” alert sounds, the recording has failed. Try again from step 4.

6. If the recording of the first button was successful, repeat steps 4 and 5 until all buttons are programmed.
7. Finish by pressing  for 2 seconds.
8. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.
9. Now test your recorded functions on the device that is to be controlled.



Original transmitter

Recording IR Channels

Press  + , , choose the level with , select button , select button , then continue or finish with  2 sec

Important! When just **one level** is used, the *Level*-button automatically becomes the next levels first button, see *Table 1*. It means that it is possible to record an IR channel on the *Level*-button, but only when just one level is being used.

Adding a GewaLink channel

Your Control Medi Standard comes with GewaLink channels 16-39 (see Table 1). If you want to use an other GewaLink channel on a certain button, you can insert a chosen GewaLink channel like this:

1. First press and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press and then press . The indicator light for the current level flashes.
3. Select the level where the GewaLink channel should be added with .
4. Select the button where the GewaLink channel is to be saved.
5. Select your **Channel range**, = GewaLink 00-63. = GewaLink 64-127.
6. Select your **Channel group** according to *Table 2* below.
7. Press the button that corresponds to your desired GewaLink channel in the selected channel group according to *Table 2* below.
8. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Table 2: Channel group and button to add GewaLink channel

Channel range : GewaLink 00-63								
Button	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group
	00	08	16	24	32	40	48	56
	01	09	17	25	33	41	49	57
	02	10	18	26	34	42	50	58
	03	11	19	27	35	43	51	59
	04	12	20	28	36	44	52	60
	05	13	21	29	37	45	53	61
	06	14	22	30	38	46	54	62
	07	15	23	31	39	47	55	63
Channel range : GewaLink 64-127								
Button	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group	Ch. group
	64	72	80	88	96	104	112	120
	65	73	81	89	97	105	113	121
	66	74	82	90	98	106	114	122
	67	75	83	91	99	107	115	123
	68	76	84	92	100	108	116	124
	69	77	85	93	101	109	117	125
	70	78	86	94	102	110	118	126
	71	79	87	95	103	111	119	127

Adding a GewaLink channel

Press + , , , choose the level with , choose the button , choose the **Channel range**, choose the **Channel group**, then choose GewaLink channel.

See *Table 2* for your choice of Channel groups and GewaLink channels.

Example: You want to add GewaLink channel 28 onto a certain button .

Press + , , , choose level, , , , .

Adding a 4096-code

Control Medi is delivered with a special coded channel (4096) on the *Code-button* (❗). The code is selected randomly. This coded channel is normally used for functions that require strict authorization such as apartment or house doors. The code has 4096 different combinations.

The *Code-button* always has the same code irrespective of which level you use. If you have to program a new coded channel there are two methods of doing so. You can set the 4096 code on any level and button. It is recommended to keep the 4096 code on the *Code-button*.

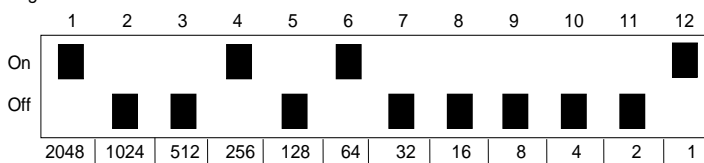
NOTE! When you add a new coded channel it is added to just one level. If you want to use the Code-button with the same code on several levels, you must add it to each level.

Method one: record the code from another transmitter, as described under *Recording IR channels from another Transmitter*.

For method two a binary code is entered. Make up the binary code yourself or else use a code that is already set in an IR receiver or IR transmitter.

There are two types of IR receivers: an older type of receiver where you set the code with a 12-pole switch, or a newer type where the IR receiver is programmable. The principle is the same when it comes to creating the binary code. *Fig 3* shows a 12-pole switch. Switches 1, 4, 6 and 12 are in the “On” position, the others are in the “Off” position.

Fig 3



The following example describes how the binary code is created according to method two:

1. First press (---) and then simultaneously press (❶). When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press (❷) and then press (❷) again.
3. Select the level where the 4096 code is to be set with (---).
4. Select the button where the 4096 code should be saved. (Button (❗) is recommended.)
5. Enter the code by pressing on (❶) or (❷).
 (❶) = switch in Off position and (❷) = switch in On position.
 Press twelve times in turn; (❷), (❶), (❶), (❷), (❶), (❷), (❶), (❶), (❶), (❶), (❶), (❷), (*Fig 3*).
6. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.
7. The code is now set on your selected button. *NOTE!* The code above is just an example and should be different for different users. Make a note of the chosen code for future usage.

NOTE! If you have added a coded channel to the Code-button and you want to use the Code-button with the same code on several levels, you must add it to each level individually.

Adding a 4096 code

Press (---) + (❶), (❷), (❷), choose the level with (---), choose the button (❗), then press (❶) or (❷) 12 times. (❶) = Off position. (❷) = On position.

Default setting: Random code

Copying a button

Using your Control Medi, it is possible to copy a buttons' function to another button.

NOTE! The code/channel remains in its original place.

1. First press and then simultaneously press . When you release the buttons the "Setting" alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press .
3. Select the level with and press the button from which the code is to be copied.
4. Select the level where the code should be copied to with . Press the button where you want to copy the code to.
5. If the action is successful, the "Success" alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the "Error" alert sounds.

Copying a button

Press + , , choose your level and button to be copied , then choose level and button to which you want to copy the code.

Feedback when pressing buttons

Your Control Medi always gives feedback in the form of light signals when you press a button. You can also get feedback as sound alerts and vibration. It is possible to get feedback from all three ways simultaneously, or you can set up what will be on or off (light is always on).

Do as follows to set the levels of sound and vibration.

1. First press and then simultaneously press . When you release the buttons the "Setting" alert sounds and the indication lamp on button 2 flashes.
2. Press .
- 3a. Sound level:
Press to lower the volume, press to increase the volume. Repeat pressing until the desired volume is set.
and/or:
- 3b. Vibration level:
Press to lower the vibration, press to increase the vibration. Repeat pressing until the desired vibration is set.
4. Finish by pressing for 2 seconds.
5. If the action is successful, the "Success" alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the "Error" alert sounds.

Set level for sound and vibration






Press + , , choose the setting, then 2sec.

= Lower volume. = Increase volume. = Lower vibration. = Increase vibration.




Default setting: Sound alert = 1 (0 – 5) Vibration = 1 (0 – 5)

Setting an acceptance delay

An acceptance delay can be set for pressing the buttons. Acceptance delay is the time a button has to be pressed for before a function is activated. An acceptance delay can be set from 1 to 4. 1 is no delay at all (off) and 4 is the maximum delay (1 sec.).

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 2 flashes.
2. Press .
3. Press your desired value for the acceptance delay,  is off, and  is max.
4. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Setting an acceptance delay

Press  + , , then choose the setting.

 = 0 sec.  = 0.3 sec.  = 0.6 sec.  = 1 sec.











Default setting: Acceptance delay = OFF (0 sec).

Creating an automatic sequence (Macro)



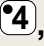



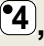


Your Control Medi is able to send sequences of codes. When you press **one** button, Control Medi automatically carries out what is equivalent to pressing several buttons. To find a TV menu page for instance you need to press several buttons. Control Medi however, can be programmed in such a way that you only need to press one button. Other available sequences are dialling long telephone numbers or muting the TV at the same time as you answer the telephone. Your Control Medi can also be programmed to change levels and remember how long the button is pressed, you can transmit for a maximum of 1 minute. Other programmed sequences can also be a part of a new sequence.

A sequence can be terminated at any time by pressing any other button.

When a sequence is programmed, your Control Medi transmits at the same time what is already on the key. A maximum of 50 button presses per sequence can be programmed. NOTE! The button used for the sequence must not be part of the sequence.

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the "Setting" alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
2. Press .
3. Press  to start the recording.
4. Press the buttons to be used for the sequence.
5. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the "Setting" alert sounds and the indication lamp on button 1 flashes.
6. Press .
7. Press  to finish the recording.
8. Select the level where you want the sequence to be with .
9. Select where you want the sequence to be with button .
10. If the action is successful, the "Success" alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the "Error" alert sounds.

Creating an automatic sequence (Macro)

Press  + , , , create the sequence,  + , , , select the level and the button  to be saved.

Max 60seconds per press, 50 presses

Repeating the last function

Your Control Medi Standard can have a button that repeats the last sent function.

Do as follows to add Repeat Last Function to a selected button:

1. First press and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 2 flashes.
2. Press .
3. Press to choose the level.
4. Press the desired button on the selected level.
5. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

To delete the Repeat Last Function, you will need to reset the button. See *Reset to default settings, reset a button*.

Repeating the last function

Press + , , choose the level and button .

Default setting: OFF (none)

Direct control

Your Control Medi can directly control a button with an external control switch. You can choose which button that should be activated when you press the control switch.

A control switch with 3.5mm plug will fit in to the side of your Control Medi.

Do as follows to activate/deactivate Direct control:

1. First press and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 2 flashes.
2. Press .
- 3a. Activate direct control.

Press , and then press the button that you want to be activated when pressing the control switch.

or:

- 3b. Press to turn off direct control.
4. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.


Activating/deactivating Direct control

Activate direct control: Press + , , , choose the button .

Deactivate direct control: Press + , , .

Default setting: OFF (none)







Setting the channel range

Your Control Medi has the option to set different channel ranges for the transmitter to operate within. When the change of channel range is applied, programmed channels will disappear and a new random code is added on the *Code*-button .

Normally, the channel range does not need to be changed. If several GewaLink transmitters are to be used in the same area and you do NOT want to control the same equipment, it may be necessary to use different channel ranges.






Table 3 shows the different settings.

Table 3: Channel range




	Channel range, GewaLink channels					
	00-23 	16-39 	32-55 	56-79 	80-103 	104-127 
Level 1	00-05	16-21	32-37	56-61	80-85	104-109
Level 2	06-11	22-27	38-43	62 ¹ -67	86-91	110-115
Level 3	12-17	28-33	44-49	68-73	92-97	116-121
Level 4	18-23	34-39	50-55	74-79	98-103	122-127

¹ Channel 62 is a stop code and cannot control any function. On the other hand you can store channels/codes on this button which in turn can control a function.

Do as follows to set the channel range:

1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 2 flashes.
2. Press .
3. Choose the channel range  to  according to table 3 above.
4. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Setting the channel range

Press  + , , choose the channel range.

 = 00-23,  = 16-39,  = 32-55,  = 56-79,  = 80-103,  = 104-127

Default setting: GewaLink channel 16-39

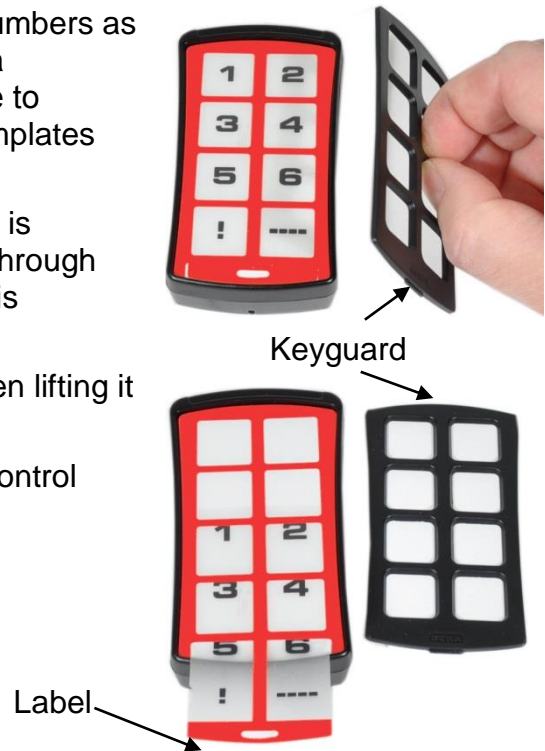
Button Labelling

The buttons on your Control Medi are marked with numbers as standard. The numbered label can be replaced with a personalised design. On Abilia's website it is possible to create your own button labels using pre-designed templates with symbols and text.

The document can also be downloaded. The labeling is printed on a clear sheet or white paper and inserted through the slit on your Control Medi. Before the button label is inserted, the keyguard must be removed.

Remove the keyguard by gripping the middle, and then lifting it straight up, see photo.

An A4 sheet for making notes is included with your Control Medi.



Control Medi Holders

Rubber feet are mounted on the underside so that your Control Medi can lie still on flat surfaces. Your Control Medi can also be equipped with a clip (accessory) which can be attached to a belt or pocket.

As an optional accessory, there is also a holder that fits to your Control Medi. This holder can be assembled for mounting on to a table or attaching to a pipe. The holder can also be mounted on a mobile stand.



Another option is to hang your Control Medi around the neck. A neck strap is supplied with your Control Medi.

Do as follows to attach the neck strap:

1. Unscrew the battery lid.
2. Place the thin loop of the neck strap in the groove around the screw mount.
3. Screw the battery lid back down.
4. Adjust the length of the neck strap.



Warning!

The string lock is a safety feature to prevent strangling. Make sure that the ends of the neck strap can be pulled out eg. if the transmitter gets caught on something. Never make knots in the neck strap!

Backups and reinstallation

Your Control Medi can be connected to a computer in order to make a backup of the settings and recordings of your transmitter. The backup copy can be used to reinstall the settings and recordings onto your transmitter. Use the Control Tool USB Interface accessory (sold separately). The software can be downloaded from Abilia's website. www.abilia.org.uk. See instructions on the website.

Cleaning

Your Control Medi can be cleaned with a damp cotton wool pad with surgical spirit, Chlorhexidine or ethyl alcohol.

It can also be cleaned with a damp cloth (weak solution of washing up liquid). Wipe dry after cleaning.

Warning!


Do not use any disinfectant except surgical spirit, Chlorhexidine or ethyl alcohol.

These liquids are inflammable, handle with care!



Default settings in your Control Medi













On delivery your Control Medi Standard will be set with certain default settings as follows:

- Acceptance delay is set to value OFF
- Feedback sound level is set to value 1 (0 – 5)
- Feedback vibration level is set to value 1 (0 – 5)
- Only level 1 is open, other levels are closed
- GewaLink channels 16-39 are on level 1-4
- A random code on the -button

Resetting to Default settings



It is possible to reset one button, reset all buttons on one level, or reset the entire Control Medi to default settings. See *Table 1 Default setting Gewa Link channels*, which shows you which channels are set after a reset. Other settings will also return to default settings, see above.

Do the following to restore:






1. First press  and then simultaneously press . When you release the buttons the “Setting” alert sounds and the indication lamp on button 3 flashes.
- 2a. Reset **one button**:
Press .
Choose the level with .
Choose the button  to be restored.
or:
- 2b. Reset **all buttons on one level**:
Press .
Choose the level with .
Press .
or:
- 2c. Reset to **factory settings** (all buttons on all levels):
Press .
Press , ,  in sequence.
3. If the action is successful, the “Success” alert sounds. If something goes wrong or takes too long, the “Error” alert sounds.

Resetting to default settings

To reset one button:

Press  + , , choose level with , then choose button .

To reset one level:

Press  + , , then choose level with , .

To reset to factory settings:

Press  + , , , , .

Technical data

Technical data

Power consumption at rest:	Approx. 2 μ A
Power consumption at transmitting	Approx. 40 mA (GewaLink channel)
Input control switch type:	3.5mm jack plug 2-pole
Battery life (button use only):	Approx. 2 years (100 seconds transmitting per day with GewaLink channel)
Programming locations:	28 places
Operating force buttons:	< 160g
Range:	40-50m (GewaLink channels)
EMC-standard emission: " immunity:	EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN(IEC) 61000-6-2:2005, EN(IEC) 61000-6-3:2007, selected parts from EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Computer Connection:	Via 429252 Control Tool USB interface
Measurements (L x W x H):	100 x 55 x 22 mm (incl. rubber feet)
Weight (incl. batteries):	105g
Operating temperature (excl. batteries):	-20°C to +45°C

Accessories included with your Control Medi Standard

Art.no	Name	Description	Qty
429255	Control Medi Labelling 8	For labeling of buttons	1 pcs
-	Note sheet	A4-sheet for noting your programmed channels	1 psc
429257	Control Medi Keyguard 8	Keyguard for 8 buttons	1 pcs
890410	Neck strap		1 pcs
8375	Battery	LR03 1.5V	3 pcs

Other accessories available for Control Medi

Art.no	Name	Description
429249	Control Medi Holder 6 mm Hole	For mounting a Control Medi to different systems with a 6mm hole
429250	Control Medi Holder 10 mm Pipe	For mounting a Control Medi to a 10mm pipe system
429251	Control Medi Belt Clip	
429252	Control Tool USB interface	Adapter for connecting a Control Medi to PC

Safety and responsibility

Abilia has conducted a risk analysis for the product with reference to SS-EN 14971 for Medical equipment. The instructions for use and the technical specifications for the product have been drawn up in respect of the safety assessments carried out in this document.

It is always important to be aware of safety when first using this product and with its subsequent use. It is not possible to describe in the instructions all the situations in which the product must not be used. If you are not sure whether you have started using the product properly or set it up correctly, please contact your supplier.

Abilia is not liable for any loss, damage or consequential loss resulting from any use, correct or otherwise, lack of follow-up, incorrect set-up, incorrect connection or similar misuse. Abilia financial liability is at all times limited to the value of the product itself.

Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment

The Control Medi contains electronics components that must be recycled. When the product is no longer of use, hand it in to a recycling centre for waste electrical and electronic equipment.










Conformity with the Medical Devices Directive

The Control Medi is marketed as a technical aid for people with disabilities and meets the requirements in the Medical Devices Directive 93/42/EEC including relevant EMC and electrical safety requirements.

Summary and Quick guide








Locking/Unlocking the Settings Lock

Press  + , , then press the desired option  or .

 = Unlock.  = Lock.

Default setting: Unlocked








Opening/Closing a Level

Press  + , , choose level with , then press the desired option  or ,  2sec.









 = Close.  = Open.

Default setting: Level 1 open

Recording IR Channels

Press  + , , choose the level with , select your button , select button , then continue or finish with  2 sec






Adding the 4096 code

Press  + , , , choose the level with , select your button , then press  or  12 times.





 = Off position.  = On position.

Default setting: Random code

Copying a button

Press  + , , choose the level and button to be copied , then choose the level and button  to which you want to copy the code.

Setting the levels for sound and vibration

Press  + , , choose setting,  2sec.

 = Lower volume.  = Increase volume.  = Lower vibration.  = Increase vibration.

Default setting: Sound alert = 1 (0–5) Vibration = 1 (0–5)

Setting the acceptance delay

Press + , , then choose setting.

= 0 sec. = 0.3 sec. = 0.6 sec. = 1 sec.

Default setting: Acceptance delay = OFF (0 sec).

Creating an automatic sequence (Macro)

Press + , , , create sequence, + , , , then select the level and button to be saved.

Max 60sec/press, 50 presses

Repeat latest function

Press + , , then choose the level and button .

Default setting: OFF (none)

Activating/deactivating Direct control

Activate direct control: Press + , , , then choose button .

Deactivate direct control: Press + , , .

Default setting: OFF (none)

Setting the channel range

Press + , , then choose channel range.

= 00-23, = 16-39, = 32-55, = 56-79, = 80-103, = 104-127

Default setting: GewaLink channel 16-39

Resetting to default settings

To reset one button:

Press + , , choose the level with , then choose the button .

To reset one level:

Press + , , then choose level with , .

To reset to factory settings:

Press + , , , , .

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se

