





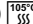


Brugsanvisning

Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE

Madras med tryksårterapi
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager systemet i brug, og overhold **advarslerne!**

Produktnavn	Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE
Leveringsomfang	<ul style="list-style-type: none">• Decubitus terapimadras med skumkerne• PU-cover (aftageligt med lynlås)•  Brugsanvisning (V02), andre sprog til brugsanvisningen kan findes her: manuals.funke-medical.eu
Angivelser / anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">• Forebyggelse af tryksår• Decubitus-behandling op til grad 3 (Seiler / EPUAP)• Smertebehandling• Til patienter med moderat risiko for liggesår
Kontraindikationer	Ikke kendt
Tilladt patientvægt min. - Maks.	0 - 140 kg
materiale	<ul style="list-style-type: none">• Kerne: PU-skum (ECOLAST®)• Cover: PU-belagt PES-bæremateriale
Dimensioner	Bredde: 80 - 100 cm; Længde: 190 - 220 cm
Produktvægt	8 kg (90/200 cm)
Hjælpsnummer (som defineret i §139 SGB V)	
Medicinsk udstyr	Klasse 1, MDR 2017/745 
Teknisk sikkerhed / flammehæmning	Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177
Testning for toksikologisk ufarlighed / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Advarsler	<ul style="list-style-type: none">• Før systemet bruges første gang, skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug").• Velegnet til justerbare liggende overflader• Sideskinnens øverste kant mindst 22 cm over den ubelastede øverste kant af madrassen
garanti	5 år på de funktionelle egenskaber (pro rata garanti)
vedligeholdelse	Ingen
Rengøringsinstruktioner (madrassaafdækning)	Betrækket kan rengøres enten ved at tørre med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol (f.eks. Bacillo) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL). Tørdesinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (klart vand). Kemo-termisk rengøring er mulig. Coveret kan autoklaveres. I hvert enkelt tilfælde er betrækket klar til genbrug. OBS: Hvis synlig snavs ikke kan fjernes og/eller der er synlige skader, skal dækslet bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.      CL II...
Rengøringsinstruktioner (kerne)	Skumkernen uden dæksel kan rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Dette kan opnås ved at gennemvæde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillo) eller ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres. Skumkernen kan genbehandles ved autoklavering i henhold til RKIs retningslinjer. I hvert enkelt tilfælde er skumkernen så klar til genbrug. OBS: hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller hvis der er synlige skader, skal skumkernen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Forbered systemet til brug	<ol style="list-style-type: none">1. Produktet er beregnet til og egnet til brug i hjemmet og institutionelle områder.2. Fjern madrassen fra kassen straks efter modtagelsen.3. Læg madrassen på sengen.4. Bemærk "DENNE SIDE OP", der er trykt på toppen af madrassen.

RKI = Robert Koch Institut; DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology; Autoklavering = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter

Producenter i betydningen af MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tlf.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 27.04.2022 09:15