

# Toilet- og badestol "Kakadu"

Varenr. 302015, 302018, 302019 og 302020

## Montage - og brugervejledning

og montering af 24" hjul som ekstra tilbehør (varenummer 302017)



**CE**

**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde

Denne montage- og brugervejledning indeholder en beskrivelse af produktet samt vigtige sikkerhedsanvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse vejledningen grundigt igennem. Det er særlig vigtigt at læse sikkerhedsanvisningerne og følge disse. Vi videreudvikler løbende vores produkter og forbeholder os derfor ret til uden varsel at foretage ændringer af produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre og handicappede personer, der har brug for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg. Produktet må kun anvendes indendørs og med den angivne max. belastning (jf. tekniske data). Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De rette henvende til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

#### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, herunder max. belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning mv. er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes indendørs på et plant og stabilt underlag.
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.
- Man må ikke læne sig forud og derved overføre vægtbelastningen til fodstøtterne. Hvis man læner sig forud SKAL fodstøtterne svinges til siden, og fødderne placeres på gulvet.
- Alle hjul SKAL hele tiden være i kontakt med underlaget under brug. Dette sikrer at produktet er i balance, hvorved uheld forebygges.
- Når produktet anvendes i stationære situationer skal hjulene låses.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

Toilet- og badestolen "Kakadu" har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har behov for siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle.

Stolen leveres i en kasse, delvis adskilt, for at spare plads under transport. Indholdet af kassen er:


- ✓ 1 ramme med sæde
- ✓ 1 ryg
- ✓ 2 fodstøtter
- ✓ 4 hjul med bremse
- ✓ 4 bolte og møtrikker for montering af hjul
- ✓ 1 toiletspand med låg og håndtag
- ✓ 1 aftageligt PU låg for at dække sædets udskæring
- ✓ 1 montage- og brugervejledning



#### 4. Tekniske data

Tekniske data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Forskel med 24"
Sædebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	---
Sæddedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sædehøjde	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	---
Sæde åbning	17 x 33 cm	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	21,3 x 40,5	---
Frihøjde	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	40 - 45 cm	---
Fribredde	32 cm	40 cm	45 cm	50 cm	---
Totalbredde	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	+ 8 cm *
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	+ 5 cm
Totalhøjde	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	---
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	---
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	+ 2,90 kg

#### Typeskilt

	<b>Shower chair</b>	
	MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	 Max. 150 kg
CE Produced <input type="text"/>	Serial no. <input type="text"/>	

Eksempel på typeskilt som er placeret nederst på rammen

## Montagebeskrivelse

Toilet- og badestolen "Kakadu" monteres som på billedet overfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:

- Tag alle dele ud af kassen og tjek at alle dele er der. Hvis der mangler noget skal der tages kontakt til forhandleren med det samme inden videre montage.
- Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet.
- Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rørende. Der er boret 2 huller (A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan nemt monteres i 3 forskellige højder. Sørg for at alle hjul er monteret i samme højde. Fastspænd boltene forsvarligt.
- Nu vendes rammen om. Lås hjulenes bremses før der forsættes.
- Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen. Fastgør ryggen ved at dreje på grebene.
- Monter låget på spanden. Skub det ind i skinnerne monteret under sædet. Gøres fra fronten af stolen. Derefter lukkes udskæringen med det aftagelige PU låg.
- Monter fodstøtterne ved at isætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i rørenderne i rammefronten. Drej derefter fodstøtten til den låser.



## Funktionsbeskrivelse

- For at aktivere bremsene trædes på bremsepedalen indtil den låser. For at deaktivere låsen vippes pedalen opad med tåen.
- Bremsene skal altid aktiveres når stolen parkeres med en bruger i den. Bremsene skal specielt altid aktiveres når der parkeres på skrånende underlag.
- Fodstøtterne kan reguleres i længden ved at løsne justeringsbolten. Herefter trækkes fodstøtten ud til den ønskede længde, hvorefter justeringsbolten spændes igen.
- Spanden bør kun bruges til personer der ikke kan anvende et normalt toilet. Inden anvendelse aftaget PU låget samt spandens låg. Efter anvendelse sættes låget på spanden før spanden fjernes. PU låget monteres igen.
- Tøm og rengør altid spanden efter anvendelse.
- For at aftage fodstøtterne aktiveres låsegrebet og fodstøtten drejes til side og tages af.
- Stolen må ikke anvendes med en bruger når fodstøtterne ikke er korrekt monteret. Brugerens fødder skal altid være på fodpladerne under transport.
- Armlænene kan svinges op. Dette gør det nemmere at flytte en bruger og er også en fordel under vask. Brugeren må ikke sidde i stolen uden opsyn når armlænene er løftet op.

## Transport af toilet- og badestolen

Toilet- og badestolen er ikke beregnet til hyppig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den og der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed til at transportere den i samlet tilstand, anbefales det at adskille den (jf. montagebeskrivelsen).

### Tilbehør (ikke for 302015):


Det er muligt på enkel vis at udskifte de 2 bageste 5" hjul med 24" hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremses, findes i tilbehørssættet (varenr. 302017).

### Montage af 24" hjul:



- Aftag de 2 bagerste 5" hjul ved at løsne boltene.
- Placer monteringsbeslagene som vist på ovenstående billede.
- Der er boret flere huller i rammen som muliggør en enkelt højdejustering. Vælg en højde og isæt og fastgør monteringsboltene med de tilhørende skiver.
- Tryk på quick release akslen der er placeret i midten af hjulene. Isæt akslen i beslagene så langt ind den kan komme og slip trykknoppen.
- Tag fat i hjulene og kontroller at de sidder ordentlig fast.
- For at tage hjulene af trykkes på trykknoppen samtidig med at der rykkes i hjulet med den anden hånd.
- Efter montage af 24" hjul kan det være nødvendigt at justere de forreste hjul så stolen fremstår vandret.

#### Montage af bremse:

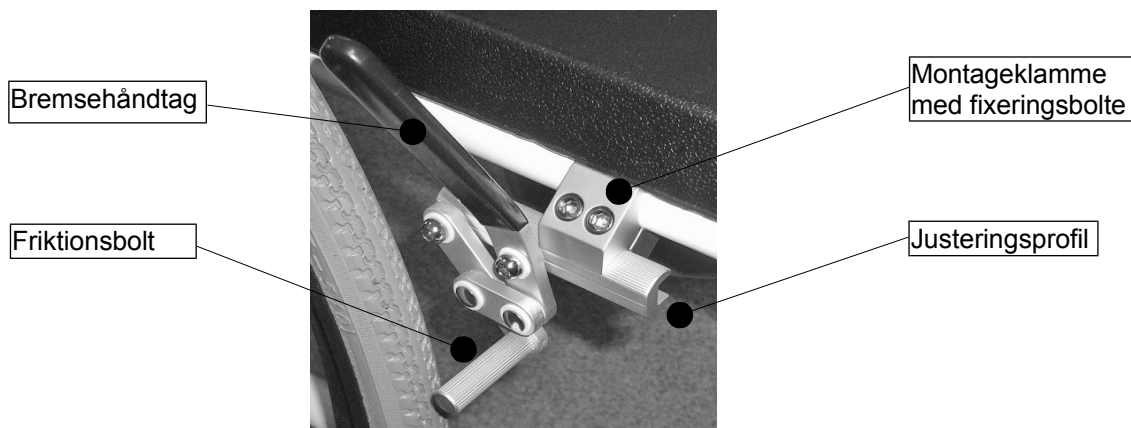

- Når 24" hjul monteres er det nødvendigt at montere normale kørestolsbremsere.
- Bremserne består af montageklammer, selve bremsen og 2 fikseringsbolte.
- Indsæt bremsens justeringsprofil i bremseklammens mindste åbning.
- Placer montageklammen på stolens horisontale rør som vist på billedet.
- Flyt bremsen indtil friktionsboltene næsten rører dækket.
- Fastgør boltene så bremsen sidder stabilt.
- For at aktivere bremserne skubbes bremsehåndtaget fremad. For at slippe bremsen trækkes håndtaget bagud.

## 5. Vedligeholdelse og pleje

### **Pleje:**

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der bør foretages af en sagkyndig.

### **Advarsel**

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en binding og ophobning af kalk på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smørreolie.

### **Advarsel**

Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme og garantien vil bortfalde.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Badestolen er ikke stabil	Hjulene er justerede til forskellige højder	Juster alle hjulene til samme højde
Hjulene drejer ikke let	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksel	Rengør hjulenes aksler for skidt

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at



### Toilet- og badestol "Kakadu"

Varenr. 302015, 302018, 302019 og 302020

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 04-07-2016

.....  
Underskrift