

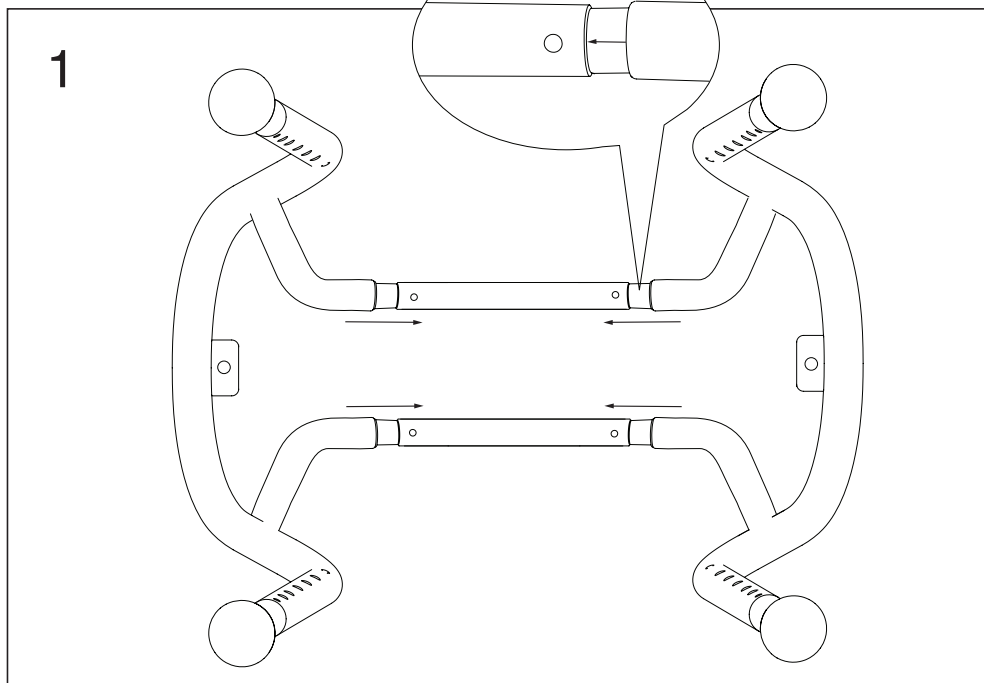
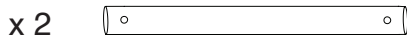
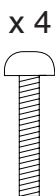


**TRUST**  
CARE

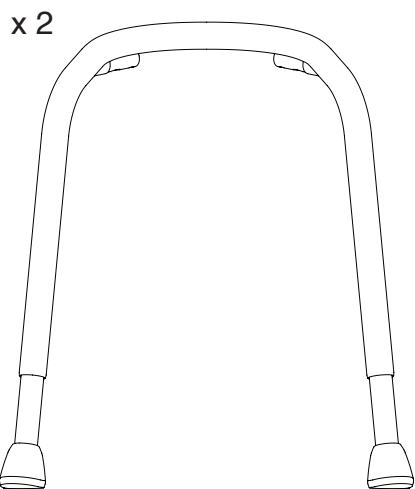





**LET'S SING**

Article No. LSG101

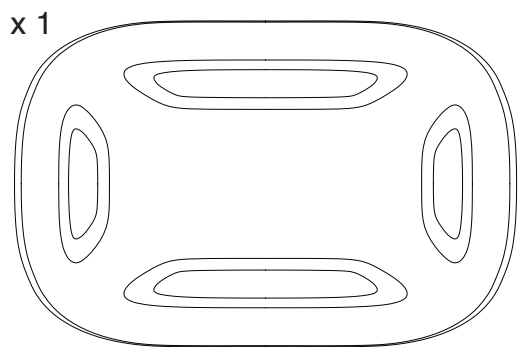

2

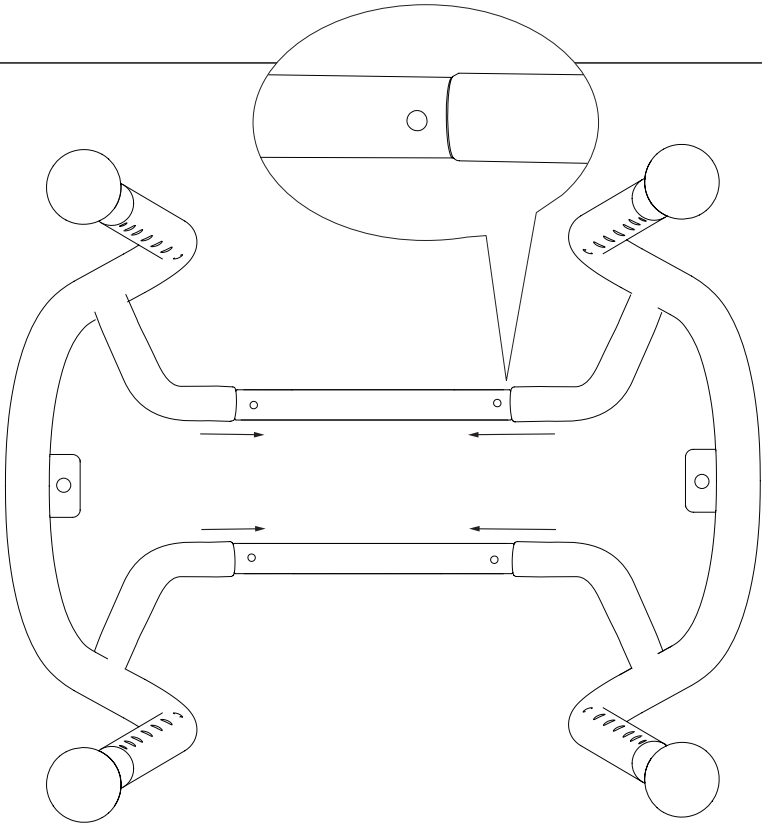

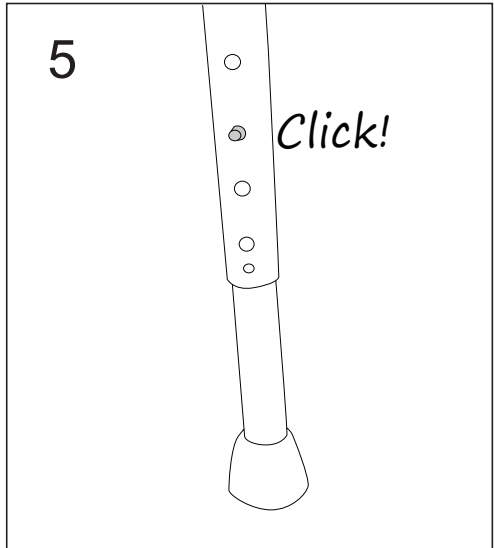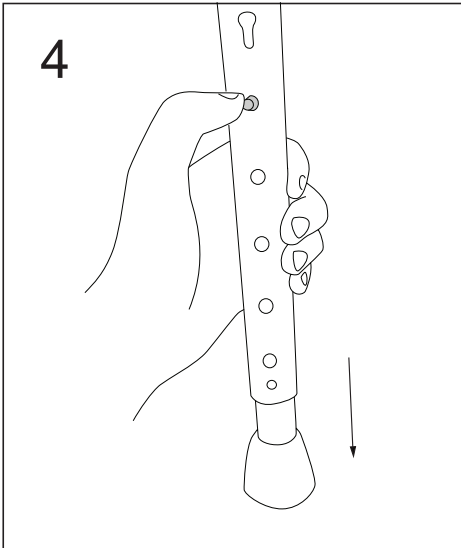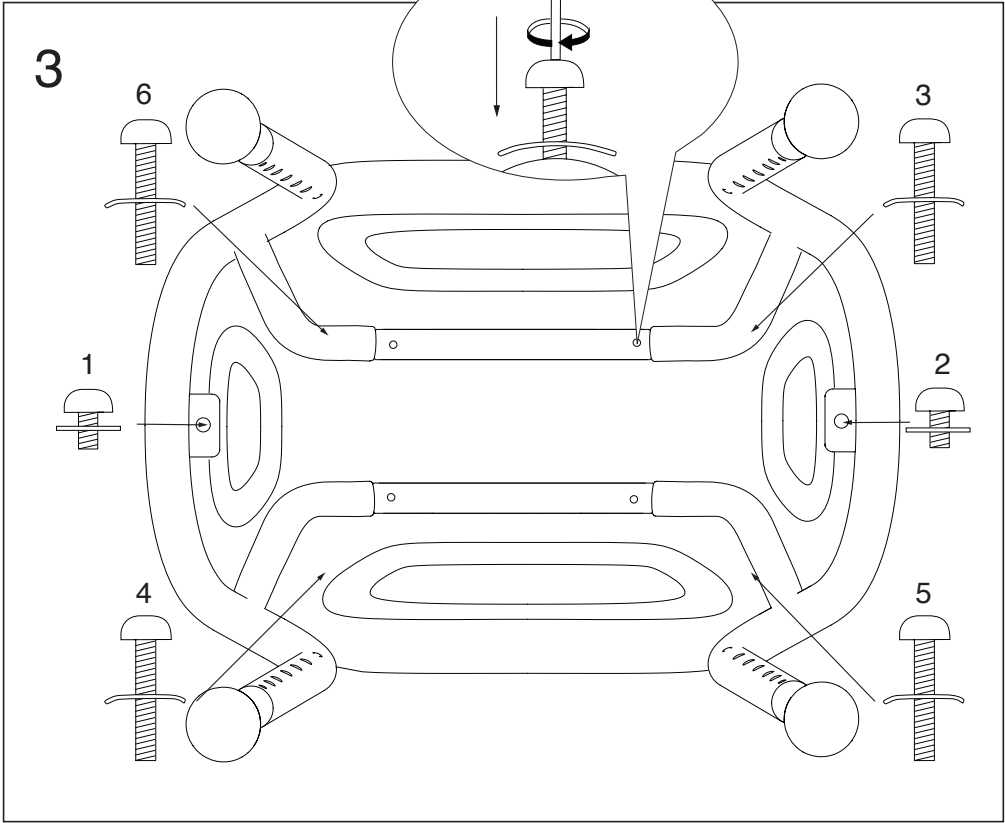

## SVENSKA

Ny duschpall i en modern, tilltalande design för användning i badrum och dusch. Let's Sing har en vacker och stadig utformning för trygg och säker användning. Det är enkelt att justera till önskad sitthöjd med tryckknapparna på benen. Det finns även som extratillbehör en praktisk trådkorg som lätt fästes under sitsen för förvaring av tvål, schampo och duschsvamp.

**Varning:** Stå inte på pallen.

**Varning:** Är produkten defekt ska den inte användas.

**Varning:** Justera alltid samtliga ben till samma höjd för att undvika fallolyckor för att pallen blir ostadig.

**Max användarvikt:** Överlasta inte pallen. Högsta användarvikt är 150 kg.

**Rengöring:** Använd rengöringsmedel utan lösningsmedel, pH 5-9, eller 70% desinficeringsprit.

**Dekontaminering:** Använd alkaliskt rengöringsmedel (minst pH 6) i högst 85°C som längst i 3 minuter.

**Reservdelar:** Använd enbart originaltillbehör och originalreservdelar från Trust Care.

### TILLBEHÖR:

**Korg:** En liten korg som fästes under sitsen.

### Tekniska data:



**Material:** Sits ABS, rörram aluminium, Fötter TPE

**Vikt:** 2,4 kg

**Max användarvikt:** 150 kg

**Höjd:** Justerbar från 45 till 56 cm

**Färg:** Sits vit, Ben svarta, Fötter svarta

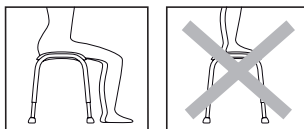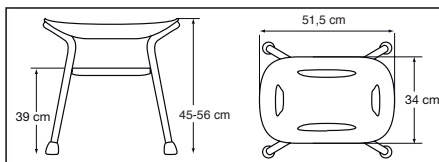

Pallen är avsedd att sitta på. Undvik att stå på pallen för att undvika fallolyckor.

## DANSK

Ny badetaburet i et moderne, attraktivt design, der kan bruges på badeværelser og til brusere. Let's Sing har et smukt og robust design og er tryk og sikker at bruge. Det er let at justere til den ønskede sædehøjde med trykknapperne på benene. Der findes også en praktisk trådkurv som tilbehør, der let fastgøres under sædet til opbevaring af sæbe, shampoo og badesvamp.

**Advarsel:** Stå ikke på badetaburetten.

**Advarsel:** Et defekt produkt må ikke anvendes.

**Advarsel:** Tilpas altid alle benene til den samme højde for at undgå faldulykker på grund af en ustabil taburet.

**Maks. brugervægt:** Må ikke overbelastes. Maksimal brugervægt er 150 kg.

**Rengöring:** Brug rengöringsmiddel uden oplösningsmiddel, pH 5 - 9, eller 70% desinfektionssprit.

**Rensning:** Brug alkaline-rengöringsmiddel (min. pH 6) ved maks. 85°C i mere end 3 minutter.

**Reserve dele:** Brug kun originalt tilbehör og originale reserve dele fra Trust Care.

### TILBEHÖR

**Kurv:** En lille kurv, der fastgøres under sædet.

### Tekniske data:



**Materiale:** Sæde i ABS, rørramme i aluminium, foder i TPE

**Vægt:** 2,4 kg

**Maks brugervægt:** 150 kg

**Højde:** Kan tilpasses fra 45 til 56 centimeter

**Farve:** Hvidt sæde, Sorte ben, Sorte foder

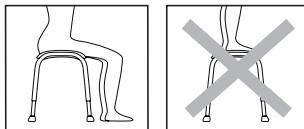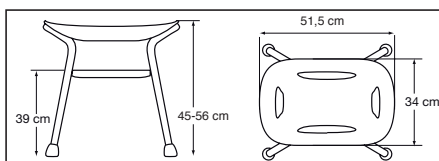

Taburetten er beregnet til at sidde på. Stå ikke på taburetten på grund af risikoen for faldulykker.

## ENGLISH

Let's Sing is a new shower stool with a modern design to be used in the bathroom and shower. Let's Sing has a beautiful and stable construction for safe and secure use. The height of Let's Sing can easily be adjusted to the desired position with the buttons on the legs. A string basket is also available as an accessory and can be attached for storing soap, shampoo and a sponge.

**Warning:** Do not stand on the bath stool.

**Warning:** A defective product must not be used.

**Warning:** Always adjust all of the legs to the same height to avoid falling accidents because of the stool becoming unsteady.

**Max user weight:** Do not overload. Maximum user weight is 150 kg.

**Cleaning:** Use detergent without solvent, pH 5 – 9, or 70% disinfection spirit.

**Decontamination:** Use alkaline detergent pH min 6, in max 85°C/185°F for no more than 3 min.

**Spare parts:** Use only original accessories and original spare parts from Trust Care.

### Accessories

**Basket:** A small basket that is fastened under the seat.

### Technical data:



**Material:** Seat ABS, Tube frame aluminium, Feet TPE

**Weight:** 2,4 kg

**Max user weight:** 150 kg

**Height:** Adjustable from 45 to 56 cm.

**Colour:** Seat white, legs black, feet Black

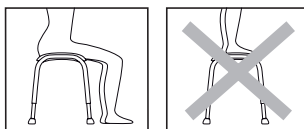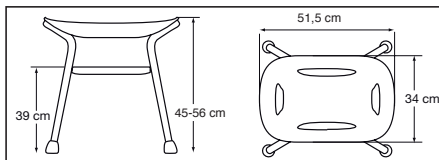

The stool is intended to sit on. Do not stand on the stool because of the risk of falling accidents.

## NEDERLANDS

Nieuw douchekrukje met modern, attractief ontwerp voor gebruik in de badkamer en onder de douche. Let's Sing heeft een mooie en robuuste vormgeving voor betrouwbaar en veilig gebruik. Dit hoogte van dit douchekrukje kan op eenvoudige wijze worden aangepast met de handige veerknoppen in de poten. Als extra accessoire is ook een handig stalen opbergmandje voor zeep, shampoo en washandjes verkrijgbaar, dat onder de zitting wordt bevestigd.

**Waarschuwing:** Dit douchekrukje niet gebruiken om op te staan.

**Waarschuwing:** Een defect product mag niet worden gebruikt.

**Waarschuwing:** Teneinde valongelukken door instabiliteit van het krukje te vermijden, moeten altijd alle poten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

**Maximaal gebruikersgewicht:** Niet overbelasten. Het maximale gebruikersgewicht is 150 kg.

**Reiniging:** Gebruik een oplossingsmiddelvrij reinigingsmiddel, pH 5 – 9, of 70% ontsmettingsalcohol.

**Ontsmetting:** Gebruik een alkalisch reinigingsmiddel pH min. 6 op 85°C/185°F gedurende maximaal 3 minuten.

**Reserveonderdelen:** Gebruik alleen originele accessoires en originele reserveonderdelen van Trust Care.

**ACCESSOIRES Opbergmandje:** Een handig opbergmandje voor bevestiging onder de zitting.

### Technische gegevens:



**Materiaal:** Zitting ABS, buizenframe aluminium, voetjes TPE

**Gewicht:** 2,4 kg

**Maximaal gebruikersgewicht:** 150 kg

**Hoogte:** Instelbaar van 45 tot 56 cm

**Kleur:** Zitting wit, Poten zwart, Voetjes zwart

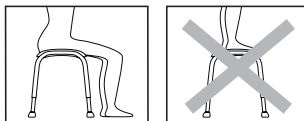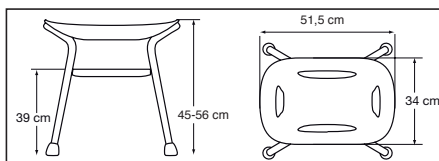

Dit krukje is alleen voor zitdoeleinden. Ga nooit op het krukje staan met het oog op het risico voor valongelukken.

## DEUTSCH

Neuer Duschhocker in modernem, ansprechendem Design für die Verwendung in Badezimmer und Dusche Let's Sing überzeugt durch seine schöne und stabile Gestaltung und ist im Einsatz sicher und zuverlässig. Die gewünschte Sitzhöhe lässt sich problemlos mit den Drucktasten an den Beinen einstellen. Als Sonderzubehör steht ein praktischer Drahtkorb zur Verfügung, der sich zur Verwahrung von Seife, Shampoo und Duschschwamm leicht unter der Sitzfläche anbringen lässt.

**Warnung:** Nicht auf den Duschhocker stellen!

**Warnung:** Defekte Produkte dürfen nicht verwendet werden.

**Warnung:** Immer alle Beine auf dieselbe Höhe einstellen, damit Stürze aufgrund eines instabilen Hockers vermieden werden.

**Maximales Belastungsgewicht:** Nicht überlasten! Das zulässige Höchstgewicht beträgt 150 kg.

**Reinigung:** Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel verwenden: pH-Wert 5 bis 9, oder 70-prozentiges Desinfektionsmittel

**Sanierung:** Alkalisches Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von mindestens 6 bei höchstens 85 °C für einen Zeitraum von maximal 3 Minuten verwenden.

**Ersatzteile:** Nur Originalzubehör und -ersatzteile von Trust Care verwenden!

**ZUBEHÖR Korb:** Dieser kleine Korb wird unter der Sitzfläche angebracht.

### Technische Daten:



**Material:** Sitzfläche ABS, Rohrgestell Aluminium, Füße TPE

**Gewicht:** 2,4 kg

**Maximales Belastungsgewicht:** 150 kg

**Höhe:** Verstellbar von 45 bis 56 cm

**Farbe:** Sitzfläche weiß, Beine schwarz, Füße schwarz

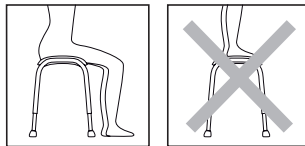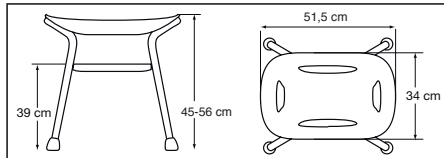

Der Hocker ist zum Sitzen vorgesehen. Aufgrund der Sturzgefahr darf nicht auf dem Hocker gestanden werden!

## ITALIANO

Nuovo sgabello per la doccia dal design moderno e accattivante, ideale per l'uso nella vasca e nella doccia. La struttura di Let's Sing è pratica e robusta, per la massima sicurezza durante l'utilizzo. Si regola facilmente all'altezza di seduta desiderata grazie ai bottoni a pressione sulle gambe. Come accessorio è disponibile un cestello da fissare sotto il sedile, per riporre sapone, shampoo o spugna.

**Attenzione:** Non stare in piedi sullo sgabello per la doccia.

**Attenzione:** Non usare mai il prodotto se è difettoso.

**Attenzione:** Regolare sempre tutte le gambe alla stessa altezza per evitare le cadute. Se le gambe sono regolate a diverse altezze lo sgabello diventa instabile.

**Portata massima:** Non sovraccaricare. Portata massima 150 kg.

**Pulizia:** Lavare con un detersivo senza solventi con pH 5-9, oppure con alcol disinfettante al 70%.

**Decontaminazione:** Usare un detersivo alcalino con pH min 6 a max 85°C/185°F per non più di 3 minuti.

**Ricambi:** Usare solo accessori e ricambi originali Trust Care.

### ACCESSORI

**Cestello:** Cestello piccolo fissato sotto la seduta

### Scheda tecnica:



**Materiale:** Seduta in ABS, struttura in profilati di alluminio, piedini in TPE

**Peso:** 2,4 kg

**Portata massima:** 150 kg

**Altezza:** Regolabile tra 45 e 56 cm

**Colore:** Seduta bianca, Gambe nere, Piedini neri

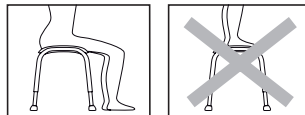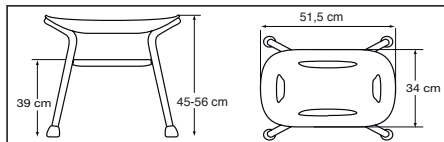

Lo sgabello è studiato per sedersi sopra. Non stare in piedi sullo sgabello, rischio di caduta!

## FRANÇAIS

Nouveau tabouret de douche dans un design moderne et attirant, à utiliser dans une salle de bain ou sous la douche. Let's Sing est à la fois esthétique et stable, pour une utilisation sûre et rassurante. Avec les boutons-poussoirs situés sur les pieds, il est simple à ajuster à la hauteur d'assise voulue. Une pratique corbeille fil, disponible comme accessoire, se fixe facilement sous le siège pour accueillir savon, shampoing et éponge de douche.

**Avertissement:** Ne pas se tenir debout sur la chaise de bain.

**Avertissement:** Un produit défectueux ne doit pas être utilisé.

**Avertissement:** Toujours ajuster tous les pieds à la même hauteur afin d'éviter toute chute accidentelle en raison de l'instabilité du tabouret.

**Poids maximal de l'utilisateur:** Ne pas surcharger la chaise. Le poids maximal de l'utilisateur est de 150 kg.

**Nettoyage:** Utiliser un détergent sans solvant, d'un pH de 5 – 9, ou un alcool de désinfection à 70 %.

**Décontamination:** Utiliser un détergent alcalin d'un pH minimum de 6, à une température maximale de 85 °C/185 °F et pendant 3 minutes au maximum.

**Pièces de rechange:** Utiliser exclusivement des accessoires d'origine et des pièces de rechange d'origine provenant de Trust Care.

### ACCESSOIRES

**Corbeille:** Une petite corbeille fixée sous le siège.

### Caractéristiques techniques:





**Matériaux:** Siège ABS, cadre tubulaire en aluminium, pieds TPE

**Poids:** 2,4 kg

**Poids maximal de l'utilisateur:** 150 kg

**Hauteur:** Réglable de 45 à 56 cm

**Couleur:** Siège blanc, pieds noirs, patins noirs

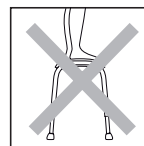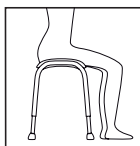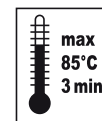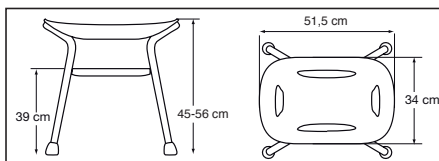

La chaise est prévue pour s'asseoir dessus. Ne pas se tenir debout sur la chaise en raison du risque de chute accidentelle.

### Återvinning / Genbrug / Recycling / Recycling / Recycling / Riciclaggio / Recyclage

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.

Dette produkt skal genbruges i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

This product should be recycled in accordance with national guidelines.

Dit product moet worden gerecycled in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Richtlinien recycelt werden.

Questo prodotto deve essere riciclato in conformità con le linee guida nazionali.

Ce produit doit être recyclé conformément aux directives nationales.



### Garanti / Garanti / Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantie

2 års garanti mot fel i material och tillverkning.

2 års garanti mod fejl i materialer og fremstilling.

2 year warranty against defects in materials and manufacturing.

2 jaar garantie op fabricagefouten.

2 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler

2 anni di garanzia sui difetti del materiale e di fabbricazione.

2 ans de garantie contre tout défaut de matériau ou vice de fabrication.





### LET'S SING BASKET

Art no. LSG107

#### SVENSK

##### Let's Sing Trådkorg.

En elegant trådkorg finns som tillbehör till Let's Sing. Enkel och praktisk att applicera under sitsen med en enkel snäppanordning. Trådkorgen är bra för att förvara tvål, schampo eller duschsvamp.

#### DANSK

##### Let's Sing-trådkurv.

En elegant trådkurv fås som tilbehør til Let's Sing. Enkel og praktisk at anvende under sædet med en simpel fastgøring. Trådkurven er fantastisk til opbevaring af sæbe, shampoo eller badesvamp.

#### ENGLISH

##### Let's Sing String basket.

An elegant string basket is available as an accessory for Let's Sing. Practical and easy to attach under the seat with a snap fastening. The string basket is good for storing schampoo or a bath sponge.

#### NEDERLANDS

##### Let's Sing opbergmandje.

Als accessoire voor Let's Sing is een elegant opbergmandje verkrijgbaar. Kan dankzij een klikbevestiging eenvoudig on-

der de zitting worden vastgezet. Dit mandje is handig voor het opbergen van zeep, shampoo of washandjes.

#### DEUTSCH

##### Drahtkorb Let's Sing.

Dieser elegante Drahtkorb ist als Zubehör für Let's Sing erhältlich. Er lässt sich dank einer einfachen Schnappvorrichtung leicht und praktisch unter der Sitzfläche anbringen. Der Drahtkorb eignet sich gut für die Verwahrung von Seife, Shampoo oder Duschschwamm.

#### ITALIANO

##### Let's Sing cestello.

Un elegante cestello per completare Let's Sing. Facile e pratico da fissare sotto la seduta con un semplice dispositivo a scatto, il cestello è utilissimo per riporre sapone, shampoo o spugna.

#### FRANÇAIS

##### Corbeille fil Let's Sing.

Une élégante corbeille fil, disponible comme accessoire pour Let's Sing. Simple et pratique à placer sous le siège, grâce à un simple dispositif à encliquer. La corbeille fil permet de ranger savon, shampooing ou éponge de douche.



**TRUST CARE COLLECTION**



**LET'S ENJOY**  
Art no. LEN101



**LET'S STEP**  
Art no. LST101

**LET'S SHOWER**  
Art no. LSH101



**LET'S FRISBEE**  
Art no. LFR101

**TRUST**  
**CARE**

[www.trustcare.se](http://www.trustcare.se)