

Støtte-/rejsningshåndtag Adam

Artikelnummer: 151060,151082

Støtte-/rejsningshåndtag Adam er med sit mønsterbeskyttede design beregnet til brug som et håndtag/drejehåndtag til støtte ved sengen alternativt ved sofa som støtte-/rejsningshåndtag.

Støtten monteres, ved at man sætter håndgrebet ind i gulvstøtten. Fastgør håndgrebet til gulvstøtten ved at fastgøre unbrakoskruerne. Juster beslagene, så de hviler op mod møbelrammen (på langs), og fastgør unbrakoskruerne med den medfølgende unbrakonøgle. Derefter fastgøres værktøjet på magneten på gulvstøttebeslaget, så det er tilgængeligt, når det er nødvendigt. Møbelrammen skal bestå af massivt træ, og rammens nederste kant skal være 2-8 cm bred (ved beslag fremstillet efter 2020-05). Sørg for korrekt installation inden brug, og at alle skruer er strammet godt til.
Højde (H) monteret: 68,5 – 78,5 cm



Teknisk specifikation

Art. nr: 151060:

Gulvstøttens bredde: 35 cm Vikt: 8,4 kg

Der skal altid følge en unbrakonøgle med gulvstøtten.




Art. nr: 151082

Håndgrebets højde:

68,5 – 78,5 cm

Vægt: 3 kg

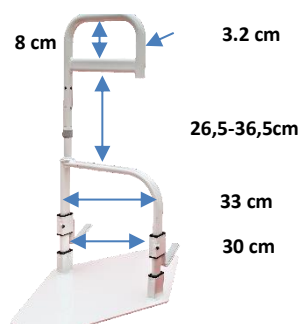

Materiale: pulverlakerede stålrør



Sikkerhedsanvisninger:

1. Produktet må ikke anvendes på anden måde, end det er beregnet til. Montering skal foretages af autoriseret personale. Swereco påtager sig intet ansvar, hvis produktet anvendes, ændres eller samles på andre måder end angivet i brugsanvisningen.
2. Håndgrebet er ikke beregnet til små børn på grund af afstanden mellem stængerne. Risiko for personskade.
3. Hvis sengen er forsynet med hævere, ex Bill, Bull, Liljan, Vivan eller lignende, skal de fastgøres til sengens ben.
4. Raising Eva bør ikke anvendes til senge med gelænder, da sådanne senge har en øget risiko for at vippe.
5. Raising Eva bør ikke anvendes sammen med en fritstående patienttrapez på grund af øget risiko for skader, hvis gulvstøtten kommer i konflikt med trapezens ben og forårsager løfteustabilitet.
6. Hvis sengen har motoriseret ryglæn og/eller benstøtte, skal der tages højde for risikoen for skader, og den bør ikke anvendes af personer med demens eller spasmer, medmindre der er foretaget en dokumenteret tilpasning/risikoanalyse.
7. Afstanden (A) mellem hovedgærdet og håndgrebet skal være mindre end 4 cm eller mere end 32 cm. Denne sikkerhedsafstand gælder også, hvis der er monteret et andet håndgreb på samme side af sengen. Se illustration.
8. Afstanden (B) mellem madras og håndgreb skal være mindre end 6 cm. Hvis sengen har bevægelige dele (motoriseret ryglæn eller benstøtte), skal afstanden (B) være større end 2,5 cm, men der er stadig en vis risiko for skader.
9. Sørg for, at håndgrebet låser på plads, når du ændrer højden/vinklen på den øverstehåndgrepedel
10. Sørg for korrekt installation inden brug, og at alle skruer er strammet godt til.
11. Den maksimale brugervægt er 150 kg



Monteringsvejledning:

1. Kontrollér sengens/sofens højde, og sørg for, at den korrekte håndgrebshøjde anvendes.
2. Sæt håndgrebet i gulvstøtten, og spænd unbrakoskruerne med den medfølgende unbrakonøgle.
3. Juster beslagene, så de hviler op mod møbeln på langs, og fastgør unbrakoskruerne med den medfølgende unbrakonøgle.
4. Sørg for, at alle skruer er strammet godt til, og at støtten er stabil.
5. Art. nr.: 15106020 **beslag**, kan monteres sikkert på møbeln, når højden mellem gulvet og møbelns underside er mindst 6 cm, og møbelns ramme er mellem 2 og 8 cm. For beslag fremstillet før 2020-05 er møbelrammemålene 2-5,5 cm.



OBS! Læs sikkerhedsinstruktionerne på side 1 før installation og brug. Sikkerhedsafstandene skal overholdes, især hvis slutbrugeren ikke er i stand til at tage imod oplysninger om risikoen for personskade. I tilfælde af spørgsmål eller tvivl bedes du kontakte Swereco for at få vejledning.

Anvisninger for vedligeholdelse: Kontrollér regelmæssigt, at unbrakoskruerne er forsvarligt fastgjort.

Produktet skal rengøres regelmæssigt og efter behov med en alkalisk sæbeopløsning, pH 5-9. Produktet kan også aftørres med 70 % isopropanol. I tilfælde af istandsættelse af produktet skal det kontrolleres, og slidte eller beskadigede dele udskiftes. Det skridsikre gummi under gulvstøtten og på beslaget skal kontrolleres og udskiftes, hvis det er nødvendigt. Reservedele kan bestilles via order@swereco.com.

Art nr: 151086 støtte-/rejsningshåndtag ADAM std komplett

Produktet indeholder:

Art. nr: 151060, gulvstøtte inkl beslag
Art. nr: 151082, Håndgreb 68,5 – 78,5 cm

Reservedele: Art. nr: 15106020 Beslag

Reservedele: (til Eva fremstillet efter 2020-05)

Art. nr: 15106022 unbrakoskrue M8x16 mm
Art. nr: 15106023 unbrakonøgle NV4 mm fzb
Art. nr: 15100013 skridsikker gummi 2 mm Eva
Art. nr: 15106025 skridsikring (til beslag) 74x20x2 mm
Art. nr: 11171004 plastbøsning, sort, til beslag
Art. nr: 15106026 magnet til unbrakonøgle 12x2 mm

Genbrug: Når produktet tages ud af brug, skal det genanvendes som metalskrot. Emballagen består af plastik og bølgepap og skal genbruges i overensstemmelse hermed.

Symboler: Forklaring af symbolerne på produktet og i brugsanvisningen.



Max 150 kg

Maksimal brugervægt.



Kan vaskes med alkalisk sæbe, pH 5-9.



Maks 85 °C i højst 3 minutter.



Produktet overholder EU-direktiv MDR 2017/745 og 2007/47/EF om medicinsk udstyr.

Fremstillet af:
Swereco AB
Vagnvägen 4
SE-364 42 Lenhovda
Sverige
Tel: +46 (0)8 5000 52 40
www.swereco.com



Enhver alvorlig hændelse opstået under brugen skal indberettes til Swereco AB.