

explore 5

User Guide



Humanware™

see things. differently.

HURTIG START GUIDE – DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S

1. Tilslut det medfølgende USB kabel til strømforsyningen.
2. Hold din nye Exploré 5 således at skærmen er vendt mod dig. Vær sikker på at det taktile USB symbol på selve USB kablet, i enden med micro USB stikket, vender væk

fra dig. Forsigtigt kan du tilslutte micro USB kablet til strømforsyningsporten i venstre side af din Exploré enhed, og herefter sætte strømforsyningen i en stikkontakt.

Vigtigt: Vær forsigtig og rolig når du tilslutter kablet til strømforsyningsporten.

3. Lad din enhed oplade 100 procent. Din enhed kan blive varm under opladning – dette er ganske normalt.

4. Så snart din Exploré enhed er fuldt opladet kan du forsigtigt fjerne USB tilslutningen.
5. Tryk på **Tænd / Sluk tasten** for at starte med at bruge din Exploré enhed.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hurtig Start Guide – DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S.....	3
Afsnit 1 – Produktbeskrivelse	1
Introduktion.....	1
Kassens indhold	4
Fysisk beskrivelse	5


Afsnit 2 – Benyt din Exploré 5	8
Sluk for Exploré 5.....	11
Forstørrelses Tilstand	12
Zoom ind og ud	12
Ændring af kontrast.....	14
Læselinjer og Læsemasker	17
Autofokus.....	19

Frys billedet.....	21
Zoom i et billede.....	23
Galleri Tilstand	24
Tag billeder og gem dem i Galleriet.....	24
Tilgå og Gennemse billeder i Galleriet..	25
Slet billede fra Galleri	26
Brug en ekstern skærm	28

Afsnit 3 – Eksportering af billede til computer	30
Afsnit 4 – Konfigurere Exploré 5	32
Tilgå, navigering og ændringer af Indstillinger	32
Gennemse Software / Hardware numre ...	39
Gendan fabriksindstillinger	40
Afsnit 5 – Opdater din Exploré 5	41

Afsnit 6 – Genoplad din Exploré 5	43
Afsnit 7 – Fejlfinding.....	51
Afsnit 8 – Rengør din Exploré 5.....	58
Rengøring af LCD Skærmen	58
Rengøring af Exploré 5's kabinet	62
Appendiks A – Sikkerhedsinstruktioner	64
Appendiks B – Tekniske specifikationer	68

Appendiks C – Kundesupport.....	71
Appendiks D – FCC Informationer.....	72
Appendix E – Warranty (ENGELSK)	77



AFSNIT 1 - PRODUKTBESKRIVELSE

INTRODUKTION

Stort tillykke med din nye Exploré 5 enhed fra HumanWare - den brugervenlige, tyndeste og mest mobile elektroniske, håndholdte lup, med en stor og klar 5 tommer skærm.

Da vi selv hos HumanWare er brugere af forstørrelsesenheder, herunder elektroniske lupper, ved vi at ud over at have den bedste

billedkvalitet, skal en god elektronisk lup også være simpel, bærbar, behagelig at bruge og skal altid være klar når du har brug for den, hvorend du er. Din Exploré 5 som du sidder med i hånden blev designet med netop de parametre som fokuspunkter, fordi vi sætter en ære i at tilbyde dig et kvalitetsprodukt som imødekommer dine behov og dine forventninger.

Vi beder dig venligst om at gennemgå og læse hele denne brugervejledning førend du begynder at tage din nye Exploré enhed i brug. Såfremt du har spørgsmål til dit produkt,

kontakt venligst HumanWare Kundeservice eller din forhandler.

Endnu engang stort tillykke med dit nye værktøj. Du vil være i gang med at læse trykt tekst inden længe!

Copyright 2018 ejes af Technologies HumanWare Inc., alle rettigheder forbeholdes. Brugervejledningen må ikke kopieres helt eller delvist, ej heller opbevares i datasystemer eller søgesystemer, uden skriftlig tilladelse fra Technologies HumanWare Inc.

KASSENS INDHOLD


**Du finder i
kassen
følgende:**

Exploré 5 - Den elektroniske lup
Bæretaske
Strømforsyning
USB kabel
Håndledsrem
Brugervejledning (Engelsk)
Garantidokument
Microfiber renseklud
HDMI Kabel

FYSISK BESKRIVELSE

Fronten

1. Kontrast tast
2. Zoom Ind tast
3. Zoom Ud tast
4. Frys billede tast
5. Ankerring

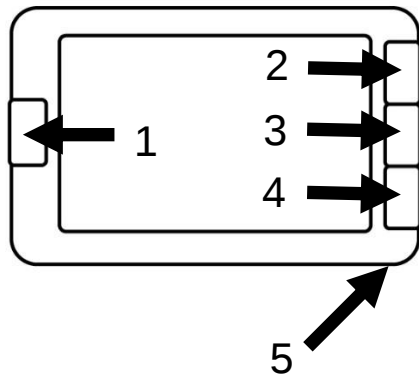


Bagsiden

1. Tænd / Sluk tast

2. Kamera


3. LED'er

4. Håndtag

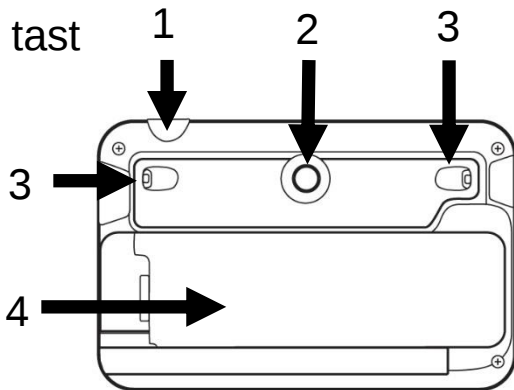


Venstre kant

1. Micro USB port
(til USB opladnings
kabel)

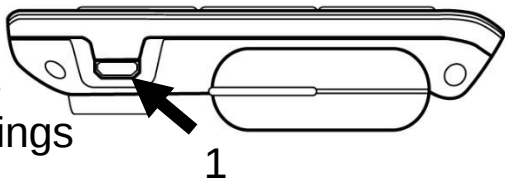


Højre kant

1. HDMI port
(tilslutning af ekstern skærm)

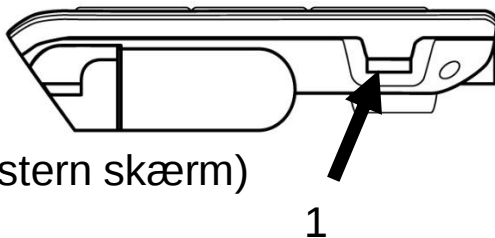


AFSNIT 2 - BENYT DIN EXPLORÉ 5

For at begynde at bruge din Exploré 5 enhed skal du blot trykke på **Tænd / Sluk tasten** placeret på toppen af enheden, ude på kanten, i højre side. Du kan holde din Exploré enhed i hv
en tablet. lle holde

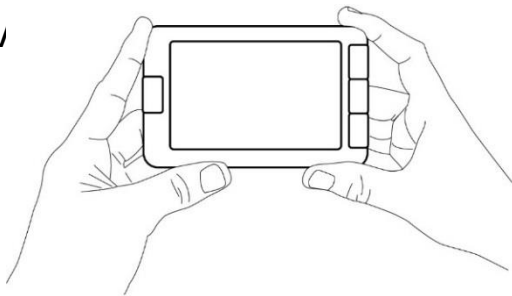

Alternativt kan du også starte ved at strække håndtaget ud, som du ville holde en almindelig lup, hvorved din Exploré 5 automatisk vil tænde.

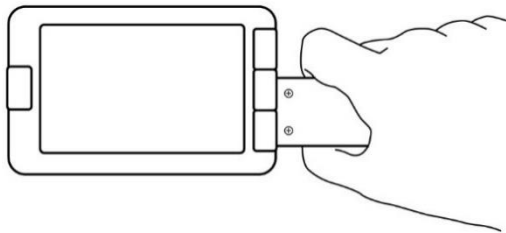

Det er også muligt at benytte din elektroniske lup ved at skubbe håndtaget vertikalt fremad, som en læsestand, og placere den over det du ønsker at læse eller se på.



Efter et par sekunder vil din Exploré 5 automatisk tænde og vise dig billedet fra kameraet. Du befinder dig nu i Forstørrelses Tilstand.

SLUK FOR EXPLORÉ 5

Når du ønsker at slukke for din enhed skal du blot trykke på **Tænd / Sluk tasten**. Du har også mulighed for, såfremt håndtaget er ude, at folde håndtaget helt ind, hvorved din Exploré 5 automatisk vil slukke.

FORSTØRRELSSES TILSTAND

Forstørrelses Tilstand er den generelle og universelle funktion for din elektroniske lup. Hold blot din enhed over teksten eller det objekt du ønsker at forstørre op og du er i gang.

ZOOM IND OG UD

For at zoome ind skal du blot trykke, eller trykke og holde, på **Zoom Ind tasten** indtil du

lander på en forstørrelse der passer dig. Tilsvarende kan du zoome ud ved at trykke en enkelt gang, eller trykke og holde, på **Zoom Ud tasten**, igen indtil du lander på den rette forstørrelse.

ÆNDRING AF KONTRAST

Din Exploré 5 tilbyder dig muligheden for at justere på kontrast for bedre at kunne tilpasse sig dit behov og dine præferencer. For at ændre kontrast skal du blot trykke på **Kontrast tasten**, indtil du lander på den kontrast du ønsker at bruge.

De tilgængelige kontraster er som følger:

- Farve, Sort på Hvid, Hvid på Sort, Sort på Gul samt Gul på Sort.

Yderligere kontraster som du har mulighed for at aktivere:

- Sort på Orange, Orange på Sort, Sort på Cyan, Cyan på Sort, Sort på Lilla, Lilla på Sort, Sort på Grøn, Grøn på Sort, Blå på Gul, Gul på Blå, Hvid på Blå, Blå på Hvid.

Det er muligt at aktivere disse (og deaktivere andre) kontraster inde i Menuen.

LÆSELINJER OG LÆSEMASKER

Med din Exploré 5 enhed kan du tilføje en horisontal læselinje eller læsemaske direkte i dit skærmbillede, som kan gøre læsning nemmere.

For at tilføje og / eller fjerne en læselinje, tryk og hold **Kontrast** og **Zoom Ind** tasten samtidigt.

For at tilføje og / eller fjerne en læsemaske, tryk og hold **Kontrast** og **Zoom Ud** tasten samtidigt.

AUTOFOKUS

Din Exploré 5 har en indbygget autofokus funktion som du enten kan have **låst** eller **ulåst**, direkte fra Menuen.

Når autofokus funktionen er angivet til **Ulåst** (som standard), vil din Exploré 5 dynamisk og helt automatisk justere fokus i forhold til det objekt du kigger på.

Når autofokus er angivet til **Låst** og du benytter din enhed på et bord vil din Exploré 5 holde den aktuelle fokus uanset hvad der sker foran kameraet.

Når autofokus er angivet til **Låst** og du holder din forstørrelsesenhed som en tablet, eller ved brug af håndtaget, vil den holde fokus omkring 6 centimeter foran selve kameraet.

Bemærk venligst: For at nulstille fokusfeltet når autofokus er angivet til **Låst** skal du blot

trykke på **Frys billede tasten** en gang for at fryse billedet, efterfulgt af tryk på **Frys billede tasten** igen for at vende tilbage til Forstørrelses Tilstand.

Bemærk venligst: Autofokus er angivet til **Låst** som standard når du benytter den indbyggede læsestand.

FRYS BILLEDET

Med din Exploré 5 har du mulighed for at fryse et billede mens du befinder dig i Forstørrelses

Tilstand, så du derved har nemmere ved at læse - en meget brugbar funktion når du læser etiketter eller skriver på mærkater. For at fryse et billede skal du blot trykke en gang på **Frys billede tasten** efter du har justeret din forstørrelsesenhed i forhold til dét du ønsker at læse. Dette vil tage et billede af det du har rettet kameraet mod. Billedet vil blive vist på skærmen indtil du vælger at returnere til Forstørrelses Tilstand.

Det kan du gøre ved blot at trykke på **Frys billede tasten** igen.

ZOOM I ET BILLEDE

For at zoome ind på et billede du har frosset skal du blot trykke, eller trykke og holde, på **Zoom Ind tasten** indtil du lander på en forstørrelse der passer dig. Tilsvarende kan du zoome ud ved at trykke en enkelt gang, eller trykke og holde, på **Zoom Ud tasten**, igen indtil du lander på den rette forstørrelse.

GALLERI TILSTAND

TAG BILLEDER OG GEM DEM I GALLERIET

For at gemme et live eller frosset billede til dit Galleri skal du blot trykke og holde på **Frys billede tasten** i et halvt sekund. På skærmen bliver teksten "Gemmer" præsenteret kortvarigt, hvilket indikerer at billedet nu er gemt i din Exploré 5's Galleri.

TILGÅ OG GENNEMSE BILLEDER I GALLERIET

Du kan tilgå din Exploré 5's Galleri gennem Menuen. Alternativt kan du tilgå Galleriet direkte ved at trykke og holde på **Frys billede** og **Kontrast tasterne** samtidigt, mens du befinder dig i Forstørrelses Tilstand.

Du kan navigere i Galleriet ved at benytte **Zoom Ind** og **Zoom Ud tasterne**.

For at forlade Galleriet skal du blot trykke på **Kontrast tasten**.

SLET BILLEDE FRA GALLERI

For at slette et billede fra Galleriet i din Exploré enhed skal du tilgå Galleriet ved at trykke og holde på **Frys billede** og **Kontrast tasten** samtidigt mens du befinder dig i Forstørrelses Tilstand.

Naviger til billedet som du ønsker at slette (hvilket du ved brug af **Zoom Ind** og **Zoom Ud**

tasterne), hvorefter du trykker og holder på **Frys billede tasten**.

Her kan du vælge at slette billedet eller at afbryde - Slet ved at trykke på **Zoom ind tasten**. Du kan afbryde ved at vælge Annullér ved **Zoom Ud tasten**.

Ønsker du at slette alle dine billeder på en gang skal du navigere ind i Menuen og vælge elementer Slet Galleri.

BRUG EN EKSTERN SKÆRM

Har du brug for et større billede har du med Exploré 5 mulighed for at få det aktuelle billed vist på en ekstern skærm, såsom en TV skærm. Dette kan du gøre ved blot at tilslutte din Exploré 5 enhed til den eksterne skærm ved brug af et HDMI kabel. Se venligst under Appendisk B for en oversigt over understøttede HDMI formater.

Bemærk venligst: Du skal være opmærksom på at når du har benyttet din Exploré 5 sammen med en ekstern enhed tilsluttet via HDMI, skal du altid genstarte din Exploré 5.

AFSNIT 3 - EKSPORTERING AF BILLEDE TIL COMPUTER

For at eksportere billeder fra Galleriet som befinder sig i din Exploré 5 enhed til din computer skal du tilslutte den til computeren ved brug af det USB kabel der fulgte med. Du bør kunne aflæse "PC Tilsluttet" i skærmbilledet på din Exploré enhed. Du har nu rig mulighed for at kopiere og indsætte

billederne fra Galleriet til din computer ved brug af din computers filhåndtering.

Når du har tilsluttet din Exploré enhed til en almindelig computer vil den fungere akkurat som en almindeligt USB hukommelses dangle, som et eksternt drev. Galleri billederne finder du i "Images" mappen i din Exploré 5.

Når du kopierer og sletter billeder fra din enhed må du aldrig fjerne USB tilslutningen, da det kan resultere i tab af data.

AFSNIT 4 - KONFIGURERE EXPLORÉ 5

TILGÅ, NAVIGERING OG ÆNDRINGER AF INDSTILLINGER

Tryk og hold på **Kontrast tasten** for at tilgå Menuen. Du kan nu navigere i menulisten ved at trykke på **Zoom Ind tasten** for at navigere op og **Zoom Ud tasten** for at navigere ned.

For at aktivere et element skal du trykke på **Frys billede tasten**. For at springe tilbage til den forrige menuliste kan du trykke på **Kontrast tasten**, eller trykke og holde på samme tast for at vende helt tilbage til Forstørrelses Tilstand.

I menuen finder du følgende elementer:

- **Galleri** (Tilgå dine billeder)
- **Autofokus:** Ulåst*, Låst (Låst* ved Læsestand)

- **Indstilling af lysstyrke** (Juster på skærmens lysstyrke): 1 til 9 (8*)
- **Automatisk sluk** (Angiv hvor længe enheden skal forblive tændt): 1 minut, 2 minutter, 5 minutter* samt 10 minutter
- **Foretrukket zoom** (Juster på standard forstørrelses niveau når den tænder): Foregående (det niveau som var aktiveret senest), 2x* til 22x

- **Kontrast (med undermenuer)**
 - **Foretrukket kontrast** (Angiv hvilken kontrast din Exploré enhed skal starte med): Foregående* (senest benyttede kontrast), Farve, Aktiverede kontraster
 - **Menu** (Juster kontrast for menuen): Sort på Hvid, Hvid på Sort, Sort på Gul, Gul på Sort, Sort på Orange, Orange på Sort, Sort på Cyan, Cyan på Sort, Sort på Lilla, Lilla på Sort, Sort

på Grøn, Grøn på Sort, Blå på Gul, Gul på Blå, Hvid på Blå, Blå på Hvid.

- **Aktiveret kontrast** (Angiv hvilke farvekontraster der skal være tilgængelige i Forstørrelses Tilstand):
Sort på Hvid, Hvid på Sort, Sort på Gul, Gul på Sort, Sort på Orange, Orange på Sort, Sort på Cyan, Cyan på Sort, Sort på Lilla, Lilla på Sort, Sort på Grøn, Grøn på Sort, Blå på Gul, Gul på Blå, Hvid på Blå, Blå på Hvid.

- **Lys** Tændt*, Lav, Slukket
- **Sprog:** English (US)*, English (UK), French, Spanish, German, Dutch, Danish, Polish, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Norwegian (Bokmål), Italian, Swedish, Finnish, Russian, Czech, Japanese, Korean, Icelandic, Estonian, Turkish, Lithuanian, Hungarian, Latvian, Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Hebrew, Georgian, Farsi, Kurdish.

- **Skærm:** 50Hz, 60Hz*
- **Slet Galleri**
- **Fabriksindstillinger**
- **Om** (Gennemse information om din enhed):
Dato og Tid, Software, Hardware,
Serienummer.

GENNEMSE SOFTWARE / HARDWARE NUMRE

For at få oplyst din Exploré enheds software og hardware version skal du tilgå Menuen ved at trykke og holde på **Kontrast tasten**.

Naviger ned til Om elementet ved at benytte **Zoom Ud tasten** hvorefter du trykker på **Frys billede tasten** for at få præsenteret din Exploré 5's aktuelle software og hardware versionsnumre.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

Du har mulighed for at gendanne indstillingerne på din Exploré enhed - det gør du ved at tilgå Menuen ved at trykke og holde på **Kontrast tasten**. Naviger ned til Fabriksindstillinger ved at benytte **Zoom Ud tasten** og tryk efterfølgende på **Frys billede tast**. Naviger til Ja elementet og tryk på **Frys billede tasten** igen for at bekræfte.

AFSNIT 5 - OPDATER DIN EXPLORÉ 5

Besøg venligst websitet:

<http://support.humanware.com/en-europe/support/explore> for at downloade den seneste version af softwaren til Exploré 5. Tilslut din enhed til din computer ved brug af det medfølgende USB kabel. Ved at gøre brug af din computers filhåndteringssystem skal du kopiere den downloadede fil direkte ind på

roden af din Exploré 5's hukommelse. Når overførslen er udført skal du på sikker vis fjerne tilslutningen til din computer. Sluk for din Exploré 5 enhed og tænd den igen. Din enhed påbegynder automatisk opdateringen under opstart.

AFSNIT 6 - GENOPLAD DIN EXPLORÉ 5

Vigtigt: Batteriet i din enhed kan blive varm under opladning. Dette er helt normalt. Oplad aldrig din enhed tæt på en varmekilde.

For at oplade batteriet ved brug af et almindeligt strømstik:

- Tilslut det medfølgende micro USB kabel til den medfølgende strømforsyning. Efter skal du forsigtigt tilslutte micro USB kablet til din Exploré 5 enhed og sæt selve strømfor syningen i en stikkontakt.
- Lad din enhed oplade 100 procent. Det vil tage omkring 3,5 time at oplade enheden fuldstændig fra 0 procent.

For at oplade batteriet ved brug af en computer:

- Tilslut micro USB kablet til din Exploré og sæt den anden ende af USB kablet ind i din computers USB port.

Under en opladningsproces vil ikonet som du ser nedenfor blive præsenteret kortvarigt når batteriet påbegynder opladningen og / eller din enhed er tændt.



Ikonet med et lyn betyder at din enhed er ved at blive opladet. Det efterfølgende ciffer indikerer i procent hvor meget strøm der er på batteriet.

Grundet en lavere spænding vil det tage længere tid at oplade fra din computers USB

port. I nogen tilfælde kan du opleve at der ikke kan oplades fra en computers USB port, som er afhængig af mængden af strøm som computeren genererer. Den mest effektive metode til at oplade din enhed er ved at bruge det medfølgende micro USB kabel og tilslutte det til den inkluderede strømforsyning og videre til en stikkontakt.

Til trods for at det forlænger opladningstiden kan du sagtens benytte din enhed mens den er tilsluttet en strømforsyning.

Bemærk venligst at såfremt batteriet er fuldstændig afladet og / eller ikke er blevet benyttet i en lang periode kan du opleve en forsinkelse på op til et par minutter før du kan se nogen former for aktivitet på og med din enhed. Dette er helt normalt.

Bemærk venligst også at ligesom med alle andre elektroniske enheder vil din Exploré 5 blive varm når du benytter den, eller når den bliver opladet – dette er ganske normalt. Selvom der ingen risiko er, anbefales det at

undgå længere tids kontakt med det grå område på bagsiden af din enhed, da denne fungerer som en køleplade.

Forholdsregler for batteri:

- Forsøg ikke at skille ad eller ændre på batteriets fysiske form.
- Benyt kun den medfølgende strømforsyning fra HumanWare.
- Der er risiko for overophedning, brand eller eksplosion såfremt batteriet udsættes for

ild, varme, slag eller sættes i kontakt med vand eller hvis dens terminaler kortsluttes.

AFSNIT 7 - FEJLFINDING

MIN EXPLORE 5 TÆNDER IKKE

Tryk og hold på **Tænd / Sluk tasten**. Såfremt din enhed stadig ikke tænder kan det være at batteriet skal oplades.

Forbind det medfølgende USB kabel til strømforsyningen og sæt denne ind i et vægstik eller forbind kablet til en USB port i en tændt computer. Såfremt batteriet i din enhed

er helt afladet kan det sagtens tage flere minutter før din BrailleNote Touch viser nogen former for livstegn.

Yderligere information finder du i **Afsnit 6**.

SKÆRMEN ER SORT

Såfremt enheden ligger på et bord eller en anden flad overflade kan billedet være sort. Løft din Exploré op for at se om det løste problemet.

Såfremt det ikke løser problemet skal du prøve at genstarte din enhed.

EXPLORE 5 SLUKKER AUTOMATISK

Dette er forventeligt og en funktion der gør at enheden sparer på batteriet. Som standard vil din Exploré 5 enhed automatisk slukke efter 5 minutter med inaktivitet. Du har mulighed for at justere på denne standard indstilling til

enten 1 minut, 2 minutter, 5 minutter eller 10 minutter.

FARVERNE ER SVÆRE AT SE

Først skal du sikre dig at der er tilstrækkeligt med omgivende lys.

Vælg dernæst en anden farvekombination ved at trykke på **Kontrast tasten** mens du befinder dig i Forstørrelses Tilstand.

DER ER MEGET GENSKIN

Juster på vinklen af det objekt du kigger på for at få en anden retning og derved reducere genskin.

MIN EXPLORÉ 5 REAGERER SLET IKKE

Vær sikker på at din Exploré 5 ikke er tilsluttet noget via USB kablet - hvis den er, fjern tilslutningen. Tryk og hold **Tænd / Sluk tasten** i 10 sekunder. Din enheds system vil lukke

ned. Herefter, tryk på **Tænd / Sluk tasten** i et sekund for at tænde for din Exploré 5 igen.

ANDRE PROBLEMER

Gendan indstillingerne til Fabriksindstillinger

Tilgå Menuen ved at trykke og holde på **Kontrast tasten**.

Naviger ned til Fabriksindstillinger ved at benytte **Zoom Ud**, benyt **Frys billede tasten** til at aktivere elementet. Naviger til Ja elementet og tryk på **Frys billede tasten** igen for at bekræfte.

AFSNIT 8 - RENGØR DIN EXPLORÉ 5

RENGØRING AF LCD SKÆRMEN

Vær sikker på at din enhed er slukket og alle tilslutninger er fjernet.

Vær også sikker på at du kun gør brug af en microfiber klud ligesom den der fulgte med.

Forsigtigt og roligt skal du føre microfiber kluden rundt på LCD skærmen.

Såfremt du vælger at rengøre LCD skærmen på din enhed med flydende rengøringsmiddel skal du sikre dig at det er designet til rengøring af LCD skærme. Destilleret vand, isopropanol og en eddike-vand-blanding (ikke mere end 10 procent eddike) er alle sikre rengøringsmidler til LCD skærmen.

Benyt kun en minimal mængde rengøringsmiddel for at undgå spild og at det trænger ind i enheden. Såfremt væske trænger ind kan det skade din Exploré enhed. Vær sikker på ikke at efterlade væskerester på skærmen. Gentag den forrige anvisning for skidt og snavs som umiddelbart er svære at fjerne.

Gør aldrig brug af rengøringsmidler til husholdningen til at rengøre din Exploré 5.

Sprøjt aldrig væsker direkte på LCD skærmen.

Benyt aldrig rengøringsmidler der indholder ætanol, ethylsyre, ammoniak, acetone eller methylchlorid.

Benyt aldrig toiletpapir til at rengøre LCD skærmen.

RENGØRING AF EXPLORÉ 5'S KABINET

Vær sikker på at din enhed er slukket og alle tilslutninger er fjernet.

Hvis nødvendigt kan du gøre brug af en lettere fugtig klud til rengøring af enhedens ydre kabinet.

Vær sikker på ikke at efterlade væskerester på enheden. Gentag de forrige steps for skidt og snavs som umiddelbart er svære at fjerne.

Gør aldrig brug af slibende materialer, sprays, alkohol eller opløsningsmidler til at rengøre din Exploré 5's kabinet.

APPENDIKS A - SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Stir aldrig direkte på LED lyskilderne placeret på bagsiden af din forstørrelsesenhed.

Hold enheden væk fra vand og høj fugtighed. Nedsænk aldrig enheden i vand.

Sørg altid for at slukke helt for din Exploré 5 førend du påbegynder en rengøring.

Benyt altid kun kabler der fulgte med din Exploré 5.

Batteri:

Din Exploré 5 har et indbygget genopladeligt Li-Ion batteri. Batterier skal udskiftes af en kvalificeret HumanWare tekniker.

- Anvend eller efterlad ikke din enhed i nærheden af varme kilder eller ild. Opbevar ikke din enhed ved høje temperaturer.
- Benyt kun USB kompatibel strømforsyning til at oplade batteriet.
- Forsøg ikke at skille ad eller ændre på enhedens fysiske form.

- Sænk aldrig enheden ned i vand og undgå at den bliver våd.
- Slå eller kast aldrig med din enhed.
- Stik ikke noget i eller slå på enheden med skarpe genstande, en hammer eller andet.
- Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader.
- Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt

området med rent rindende vand for at undgå skader.

APPENDIKS B - TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fysiske størrelse: 89 x 139,4 x 21,3
millimeter

Skærm: 5" WVGA (800 x 480) LCD

Vægt: 228 gram

Strømforsyning: Micro USB, 5V. Max
spænding 1.5A

Batteritid: 3 timer

Ladetid: 3,5 time (når enheden er slukket),
4,75 timer (når enheden er tændt)

HDMI Kompatibilitet:

Understøttede HDMI formater:

1280x720p 60Hz, 50Hz

1920x1080p 60Hz, 50 Hz, 24Hz

1920x1080i 60Hz, 50Hz

Ingen understøttelse af DVI emulation.

Driftsbetingelser:

Temperaturer: 10°C til 40°C

Fugtighed: 20% til 80%

Transport- og Opbevaringsmiljø:

Temperaturer: -20°C til 60°C

Fugtighed: 10% til 95%

APPENDIKS C - KUNDESUPPORT

For at modtage support skal du venligst kontakte din forhandler, eller dit nærmeste HumanWare Kontor.

Globalt: support@humanware.com

Nordamerika: 1 (800) 722-3393

us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415 800

eu.support@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600

au.sales@humanware.com

APPENDIKS D - FCC INFORMATIONER

FCC Erklæring:

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC Reglerne. Brugen af enheden er underlagt de to følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, deri også inkluderet interferens der kan forårsage uønsket brug.

FCC Advarsel

Ændringer eller modifikationer der ikke skrifteligt godkendes den ansvarshavende kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret

Bemærk venligst: Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC Reglerne. Disse grænser er designet til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens

i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for

udstyret, opmuntres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder:

—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne.

—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager.

—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er tilsluttet.

—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp.

Bemærk venligst: Denne enhed blev testet ved brug af afskærmede kabler med perifere enheder. Afskærmede kabler skal benyttes med enheden for at sikre overensstemmelser.

APPENDIX E - WARRANTY (ENGELSK)

HumanWare warrants Exploré 5, effective from the date of purchase, to be free of any defects in material and workmanship for a period of 2 years unless otherwise required by law in the country or region of purchase.

This warranty is non-transferable and applies to all cases where the damage is not a result of improper use, mistreatment, or negligence.

Improper use is use of this device other than described in this manual. In no event shall HumanWare or its distributors be liable for indirect or consequential damages.

No replacement or repair covered by the warranty will be carried out unless the system is accompanied by a copy of the original bill of purchase. Please keep your original receipt. If the system has to be returned, please use the original packaging.

[Slut på dokument VER-16-2018-03-27]

Customer support

For customer support, please contact the HumanWare office nearest you or visit our Website at: www.humanware.com

Global: support@humanware.com

North America: 1 (800) 722-3393
us.support@humanware.com

Europe: (0044) 1933 415 800
eu.support@humanware.com

Australia / Asia: (02) 9686 2600
au.sales@humanware.com



ACCD-0137
REV 10