



Instruktionsmanual

Allevia Classic
Allevia Harmony

Velkommen

Kære kunde,

Tak fordi du købte et Danrehab sundhedsprodukt. Før du bruger denne madras, skal du læse og forstå alle instruktionerne i denne manual. Alle handlinger og håndtering af madrassen skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.

Sørg venligst for, at manualen er tilgængelig for brugere og operatører gennem hele sengens levetid.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på:

Danrehab A/S

T.: +45 8644 7355

E-mail: info@danrehab.dk

Designpolitik og ophavsret

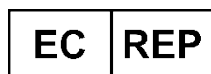
® og ™ er varemærker tilhørende Accora Ltd, medmindre andet er angivet. Da vores politik er en politik om løbende forbedring, forbeholder vi os retten til at ændre design uden forudgående varsel. © Accora Ltd 2023.

Allevia Classic & Allevia Harmony madrasserne klassificeres som Klasse 1 medicinsk udstyr i henhold til Medical Device Regulation 2002 med ændret og Medical Device Regulation 2017/745.



Meddelelse til brugeren

Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, som påvirker brugeren eller patienten, bør brugeren eller patienten rapportere den alvorlige hændelse til producenten af medicinsk udstyr (eller distributør), og i Den Europæiske Union bør brugeren også rapportere den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig.



Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Irland, K67 E0A2 T:
+353 (0)1 695 0614



Generelle advarsler

1. Hav denne brugsanvisning tilgængelig til fremtidig reference.
2. Disse instruktioner skal overholdes for at sikre sikker og effektiv brug af dette tilbehør samt for brugerne og omsorgspersonernes sikkerhed.
3. Denne madras skal placeres og bruges i overensstemmelse med disse instruktioner og instruktionerne fra sengeproducenten.
4. Fodgrafikken på madrassen skal vende opad.
5. Denne madras må ikke udsættes for røg, åben ild, ekstreme temperaturer, brandfarlige gasser eller andre farlige stoffer eller situationer.
6. Accora kan ikke holdes ansvarlig for skader, personskader eller ulykker som følge af uautoriserede ændringer, ikke-ægte reservedele, uagtsomhed eller brug, der strider mod denne manual, og som kan medføre alvorlig skade eller død.
7. Når du fører kabler til andet elektronisk udstyr, der bruges sammen med sengen, skal du sikre, at kablerne ikke kan klemmes, knuses eller beskadiges af madrassen.
8. Patienter skal vurderes af en kvalificeret person, før de bruger denne madras, for at sikre, at den er egnet til deres behov.
9. Hvis der monteres siderækker på sengen, og afstanden fra toppen af den u-komprimerede madras til toppen af siderækværket er mindre end 220 mm, skal der foretages en risikovurdering for at sikre tilsvarende sikkerhed.
10. Stofbetrækket skal bruges sammen med denne madras.

Tiltænkt brug: -----

Allevia-madrassen bruges til at give patientkomfort og reducere risikoen for tryksår.

Teknisk specifikation -----

Delnummer	Beskrivelse	Vægtgrænse
VISMAT-0-FM7-000	Allevia Classic Madras, 90 cm x 200cm x 15cm. Passer Altida Std, FB1, FB2, FB6, CB1.	160 kg 25 sten
VISMAT-0-FM7-100	Allevia Classic madras 105 cm x 200 cm x 15 cm. Passer til Altida bred, FB6 105 cm.	178 kg 28 sten
VISMAT-0-FM8-000	Allevia Harmony Madras, 90 cm x 200 cm x 15 cm. Passer til Altida Std, FB1, FB2, FB6, CB1.	160 kg 25 sten
Danrehab: 10141	200x90x15 cm, Passer til FB2 og Juniorkit.	
VISMAT-0-FM8-100	Allevia Harmony Madras, 105 cm x 200 cm x 15 cm. Passer bredt i Altida, FB6 105 cm.	178 kg 28 sten
Danrehab: 10142	200x105x15 cm, Passer til FB Bariatri.	

Brandfarlighedstests

BS 7177 Medium Risiko

Tilpasning: -----

1. Sørg for, at madrassen passer til sengens størrelse.
2. Tag madrassen ud af kassen og pak den ud.
3. Sæt madrassen på sengen med grafikken opad.
4. Hvis den er monteret, skal madrassen sidde korrekt mellem madrasguiderne.
5. Hvis der monteres siderækker på sengen, og afstanden fra toppen af den u-komprimerede madras til toppen af siderækværket er mindre end 220 mm, skal der foretages en risikovurdering for at sikre tilsvarende sikkerhed.

Rengøring og desinfektion: -----



ADVARSEL

Sengen skal afbrydes fra strømforsyningen, når den rengøres eller desinficeres.

Alle funktioner SKAL testes og godkendes af en kompetent person efter rengøring eller desinfektion.

Sengen og tilbehøret SKAL rengøres og desinficeres, før sengen kan genbruges til en anden patient.

Tør med et mildt vaskemiddel eller passende desinfektionsmiddel (f.eks. isopropanolbaseret Bacillol, DGHM-listede produkter som ECOLAB Incidin OxyWipe S XL).

Klor (maks. 5000 ppm) kan bruges. Følg op med en fugtig klud (klart vand). Kemotermisk rensning er mulig, selvom overfladerynker kan forekomme. Alternativt autoklave i henhold til RKI-retningslinjerne.

Hvis snavs eller skader er synlige, bortskaffes dækningen i henhold til nationale regler.

Madrassen er ikke egnet til automatiske sengevaskere, trykvand, sprøjtning, brusebad eller damprensning.

Regelmæssig rengøring er påkrævet, også mellem patientens forbrug.

Accora er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert rengøring eller uegnede desinfektionsmidler.

Daglig inspektion-----

Daglig visuel inspektion anbefales kraftigt og kan udføres af omsorgsperson, bruger eller en anden person.

Følgende kontrol skal udføres:

1. Sørg for, at madrassen sidder korrekt på sengen.
2. Sørg for, at madrassen er ren, og at betrækket ikke er revet itu.





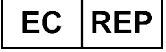




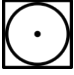



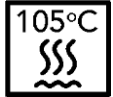
Garanti: -----

Madrassen har en garantiperiode på to [2] år.

Bortskaffelse: -----

Forurenet skum og overtræk bør bortskaffes etisk i overensstemmelse med lovkrav til bortskaffelse af klinisk affald.

Symboltabel:

	CE-mærkning er dokumentationen for, at medicinsk udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning. 2017/745
	Producent
	Medicinsk udstyr 2017/745 i overensstemmelse med EU's forordning om medicinsk udstyr.
	Se manual før brug af produktet
	EC Repræsentant
	Positionen af patients fødder
	Brandsikkerhedsetiket
	UKCA Mærkning I Forordning 2002 at udstede overensstemmelse til britiske medicinske produkter som ændret
	Lot nummereret
	Tørretumbler ved lav varme
	Må ikke stryges
	Maskine vask max. 95 grader
	Blid rengøring med PCE
	Damp/autoklave ved en tempereret temperatur på 105 grader Celsius.

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell Cambridge
SG8 5QP Storbritannien
T: +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care

danrehab
improving care

Distributed by:

Danrehab A/S
Vejlevej 15, Ølholm
7160 Tørring
Danmark
T: + 45 8644 7355
info@danrehab.dk
www.danrehab.dk