



Sengehest

Hævning

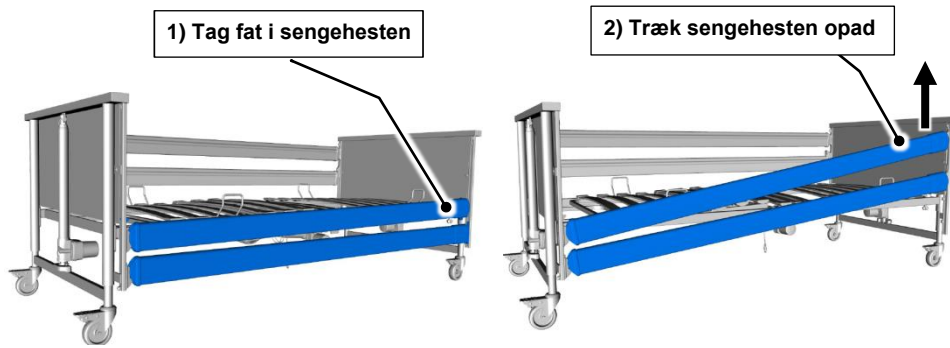

- 3) Kontroller, at sidestængerne er sikkert låst på plads ved at trykke på dem.
- 4) Gentag processen på den anden side.


Sænkning

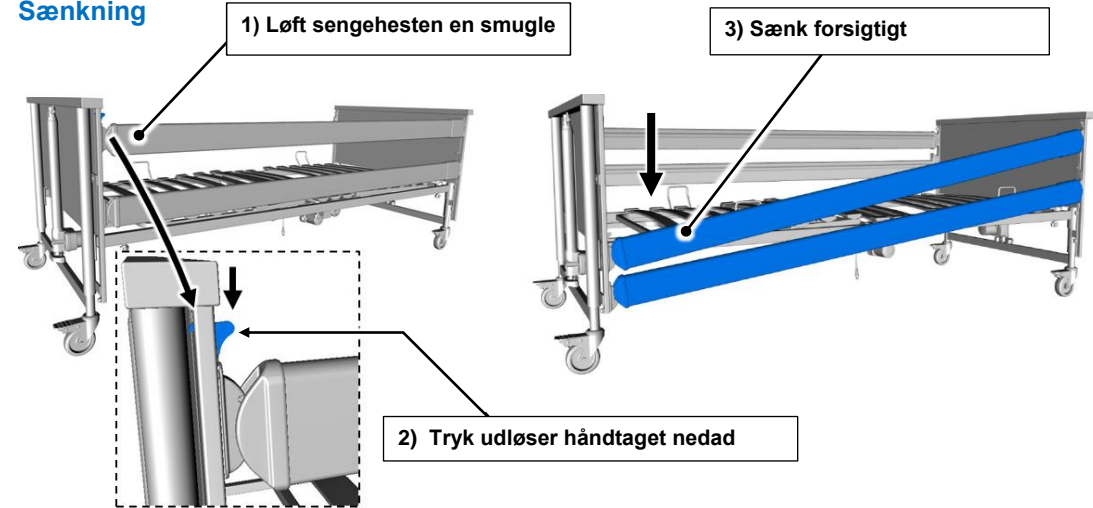


- 4) Gentag processen på den anden side.

Trekantet håndtag til sengelaggen

Justering vandret

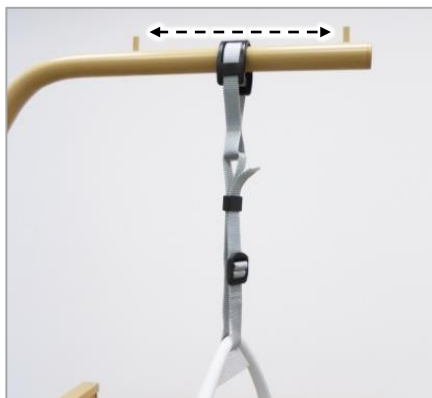

Justering lodret

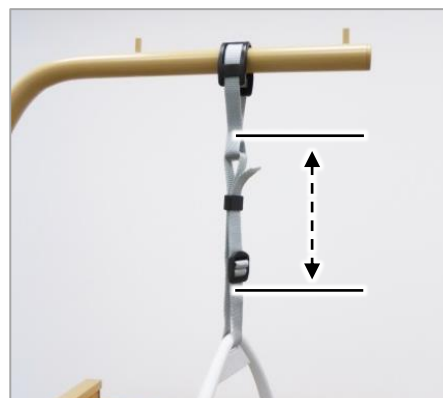

Betjening (forkortelse / forlængelse)


Træk stroppen ① gennem spændet ② :

Forkortelse: Træk i enden af stroppen ③ opad

Forlængelse: Træk i det trekantede håndtag ④ ned

i Maksimal vægt kapacitet 75 kg.

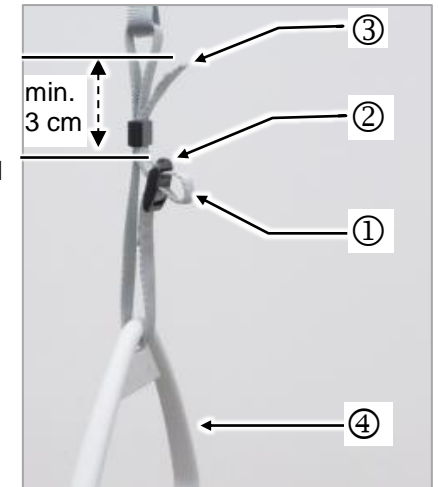

i Sørg for, at båndets ende rager mindst 3 cm ud over toppen af spændet, når stroppen forlænges.




Quick Start Guide - Dali Plejesenge

Bluetooth-håndsæt (trådløs) (I Dali-standard, Dali-low-entry og Dali-Wask)

- 1: Ryglæn
- 2: Senge højde
- 3: Knæknæk
- 4: Komfort position
- 5: Magnetisk sensor (kan identificeres ved skydeskive symbol)
- 6: Sove position
- 7: Batteri indikator
- 8: LED
- 9: Locking symbol

 = hævnning
 = sænkning

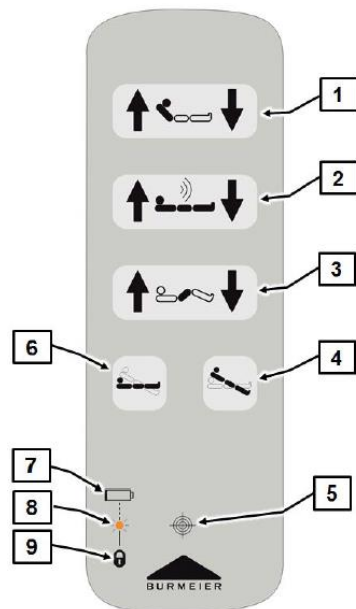


Forklar håndsættets funktioner til beboeren!

- Sengen reagere så læng som den tilsvarende knap trykkes inde.
- Med undtagelse af komfort position og soveposition, der fungerer alle sengens justeringsmuligheder i alle retninger.
- Håndsættet er vandtæt og kan tørres rent med en klud.
- Håndsættet kan hænges på sengen med sin elastiske krog.


Låsefunktion - Bluetooth-håndsæt


Bemærk venligst:



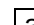



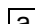

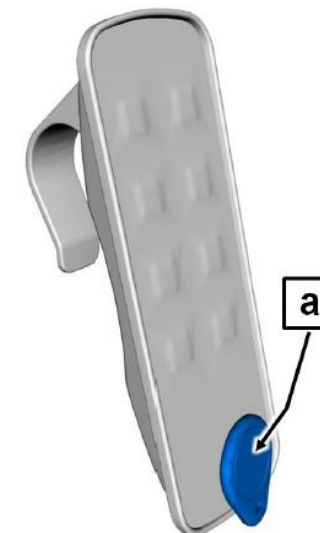Der er en magnetisk sensor i bunden af håndsættet.

En løs magnet  (en del af leveringen) kræves for at låse eller låse funktioner op.


Fortsæt som følger for at låse / låse op justeringer på håndsættet:

1. Hold magneten  til magnet sensoren integreret i den manuelle switch
2. Derefter låses / låses den ønskede funktion op.
 - Tryk på højre knap på håndsættet for at låse det.
 - For at låse op skal du trykke på venstre knap (se følgende tabel).



Unlock	Function	Lock
	Ryglæn	
	Sengehøjden	
	Knæknæk	
	Sove position / Komfort position	


Kobling af håndsæt med kontrolenheden (kun i Dali standard, wash and low-entry)

-  Bemærk: Før sengefunktionerne kan justeres, skal håndsættet kobles (tilsluttes) med kontrolenheden.
- Kobling er kun nødvendig, når sengen tages i brug, Bluetooth-håndsættet udskiftes og/eller kontrolenheden udskiftes.


Fortsæt som følger:

1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten.
 - Hvis strømforsyningen allerede var i stikket, skal du fjerne strømkilden fra stikkontakten og vente ca. 10 s, og sæt det i igen.
2. Inden for 20 sekunder skal du trykke på de to knapper for op / ned madrasbasishøjde samtidigt (inden for 0,5 s) i mindst 5 sekunder.
 - LED'en på kontrolenheden lyser orange i 4 sekunder, hvis koblingen var vellykket.
 - LED'en på kontrolenheden blinker orange 4 gange, hvis koblingen ikke var vellykket. I dette tilfælde skal du gentage trin 1 og 2.

Batteri - Bluetooth-håndsæt

-  Bluetooth-håndsættet drives af et CR 2032 lithium-batteri.
- Når batteriet er lavt, blinker LED-displayet på håndsættet gult 4 gange hver gang der trykkes på knappen. Batteriet skal derefter udskiftes inden for et par dage.

Fortsæt som følger:

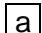1. Åben Batteri dækslet  på bagsiden af håndsættet.
 - Her kan der bruges en mønt eller lignende på dækslet for at åbne dette.
2. Fjern det gammel batteri
3. Indsæt det nye batteri (observer polariteten).
4. Luk batteri dækslet igen.



Kabelhåndsat

(In the Dali standard, Dali low-entry and Dali econ)

Operation

Følgende gør sig gældende:

Hæv: ↑ Sænk: ↓

i Af sikkerhedsmæssige årsager håndsettet er udstyret med en låsefunktion.

Drej låsen med uret til den låste position ved hjælp af låse nøglen.
Farven på det respektive display ændres fra grønt til gult.



i Drej ikke låse nøglen med magt! Låsen eller håndsettet kan blive beskadiget.

funktion frigivet:
Låsen er vandret
Farven på displayet: Grøn
Knapperne kan betjenes ("klik" lyde)


Funktion låsen:
Låsen drejede ca. 15° med uret
Farve på display: gul
Tasterne er låst

Hjul - betjening

Advarsel! Brug kun låsen til hjulene med foden.
Bær lukkede sko, når du betjener sengen for at undgå fodskader.

Bevægelse: Løft pedalen op **a** med toppen af din fod.

Brems: Pres pedalen **a** ned med din fod.

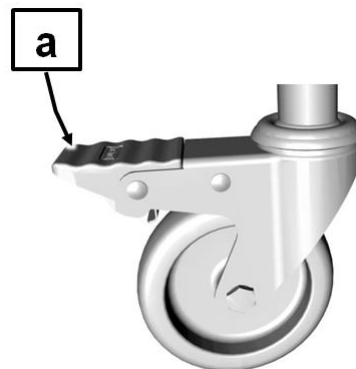

ADVARSEL

Denne Quick Start Guide erstatter ikke hovedvejledningen til Dali-plejesengen.
Læs hovedvejledningen omhyggeligt og overhold sikkerhedsinstruktionerne!