

QUICK GUIDE: Careturner V3.1-kipsystem



OPUS 1 | 085EW | 090EW | 085DW | 090DW | 085CW | 090CW | 085C | 090C

OPUS 7 | 20085 | 51085 | 30085 | 52085 | 50085 | 60085 | 61085

- ⚠ Careturner er specialdesignet til OPUS 1-plejesenge og OPUS 7-hospitalssenge i bredderne 85 og 90 cm.
- ⚠ Af sikkerhedshensyn anbefales det ikke, at brugeren/patienten selv betjener Careturner, medmindre fagligt uddannet personale har vurderet og dokumenteret, at vedkommende kognitivt kan bruge håndbetjeningen uden risiko for at bringe sig selv i fare.
- ⚠ Observer **ALTID** brugerens/patientens oplevelse ved brug af Careturner.
- 👤 Før du benytter Careturner, **SKAL** Brugsanvisningen læses grundigt og sikkerhedsanvisningerne følges.

GENEREL INFO: STYREBOKS

**TÆND**
Tryk på **ON/OFF** i 3 sekunder =
Display tænder og viser 3 streger.



**SLUK**
Kør i plan. Tryk herefter på **ON/OFF**
i 3 sek. = System og display slukker.




**NULSTIL**
Tryk 1 x på **ON/OFF** = Går i plan og
offline og display viser 3 streger.



**NØDSTOP**
Tryk nødstop ind = Position stoppes.
Deaktiver nødstop og tryk 1 x på
ON/OFF = Går i plan og display
viser 3 streger.



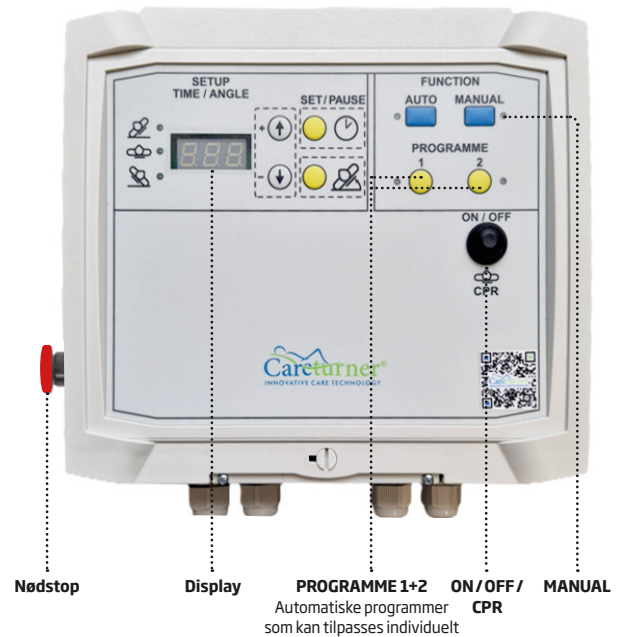

MANUEL BRUG: HÅNDBETJENING

**AKTIVER**
Tryk på **MANUAL** i 3 sekunder =
Display og diode tænder og viser 2x0.



**DEAKTIVER**
Tryk 1 x på **ON/OFF** = Diode slukker,
går i plan og offline og display viser
3 streger.



Bemærk! Under kørsel, kan vinklen aflæses i styreboksens display.

**KRAMME- OG VUGGEPOSITION**

Ved at køre begge vinger op samtidigt, kan man
opnå en beroligende kramme- og vuggeposition.

Summen af de to vinkler kan køres op til 90 grader.
Gradtal for begge vinger kan aflæses i displayet.




**Funktionen må KUN bruges af
uddannet personale.**

**Der er klemfare, hvis begge
vinger hæves samtidig.**



Tryk for aktivering.

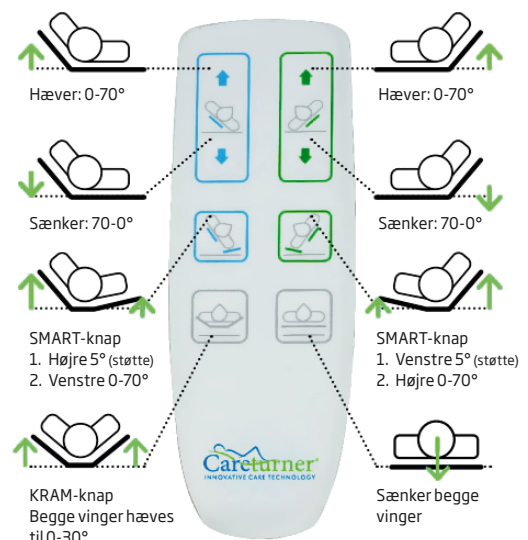

**SMART-KNAP TIL
MANUEL FORFLYTNING**

Anvend SMART-knap (samkørsel) ved manuelle
forflytninger fra flad position til siden eller fra
side til side. Der løftes med modhold.

**Observer ALTID brugerens oplevelse
ved brug af Careturner.**



AUTOMATISK BRUG: STYREBOKS

Systemet kan sættes til at køre automatisk vha. den forprogrammerede blå AUTO-knap eller de gule programmerbare knapper PROGRAMME 1 (P1) eller PROGRAMME 2 (P2).

Funktion AUTO: Fabriksindstillet program. Kan **IKKE** ændres. Kører hver halve time uden modhold.

PROGRAM 1 (P1): Tom ved levering. Kan programmeres individuelt af særligt trænet personale.




PROGRAM 2 (P2): Tom ved levering. Kan programmeres individuelt af særligt trænet personale.

⚠️ **Careturner må KUN betjenes af uddannet personale som er trænet i brugen.**

⚠️ **Programmering/omprogrammering af systemet SKAL foretages af særligt uddannet personale.**

⚠️ **Begge sengeheste SKAL være oppe og iført sengehestovertræk ved automatisk drift.**


📖 **Læs Brugsanvisningen grundigt og følg sikkerhedsanvisningerne.**

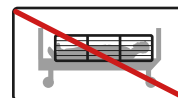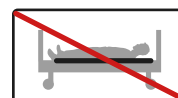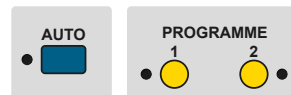

START INDIVIDUELT INDSTILLET AUTO-PROGRAM (P1/P2)

Tryk på **P1** eller **P2** i 3 sekunder = Diode tænder og det valgte program ses i displayet, hvorefter det starter.

Eksempel på start af P1:

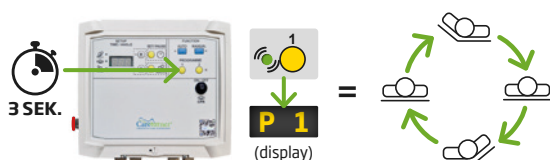

Bemærk! Når programmet er startet, kan minutter til næste bevægelse aflæses i displayet.


STOP INDIVIDUELT INDSTILLET AUTO-PROGRAM (P1 / P2)

Tryk 1 x på **ON/OFF** = Program stopper og begge vinger går i plan.



SÆT AUTO-PROGRAM PÅ PAUSE


Tryk på den gule **SET-knap** i 3 sekunder = Program sættes på pause, vingerne går i plan og den manuelle tilstand aktiveres.

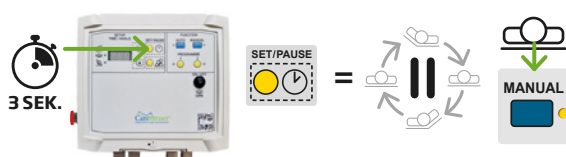

👉 I pausefunktion vil Careturner genstarte det aktiverede program efter 30 min. inaktivitet.

GENSTART AUTO-PROGRAM

Tryk på den gule **SET-knap** i 3 sekunder = Program starter igen.

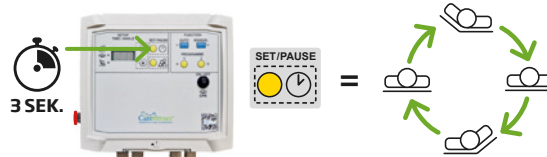

SIKKERHEDSREGLER, RENGØRING OG SERVICE

📖 Læs **ALTID** Brugsanvisningen og Servicevejledningen for både Careturner og seng og følg deres anvisninger nøje.

⚠️ **Sørg ALTID for, at slutbruger/en/patienten er anbragt i midten af sengen, når automatisk kørsel anvendes.**

⚠️ **Udfør ALTID en risikovurdering af slutbrugerens/patientens tilstand og bevægelsesevne.**

⚠️ **Careturner kan følge sengen i vaskeanlæg/maskine.**



Fabrikant

Careturner

Careturner A/S
Silovej 16-18
2690 Karlslunde
Danmark

Forhandler

able

able nordic a/s
Mågevej 16
8370 Hadsten
Danmark