



Q2ROLLER®

Anordning til lateral vending

Brugervejledning

Gå ind på www.HoverMatt.com for at se andre sprog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tilsluttet anvendelse og forholdsregler	2
Komponentoversigt – Q2Roller	2
Komponentoversigt – Air Supply	2
Air Supply betjeningsfunktioner	3
Brugsanvisning	3
Produktspecifikationer/nødvendigt tilbehør	4
Rengøring og vedligeholdelse	5
Returnering og reparation	5

Tilsluttet anvendelse og forholdsregler

INDIKATIONER FOR BRUG

Patienter, som ikke er i stand til at vende sig eller positionere sig sidelæns.

Som lejringsanordning efter bugleje i stedet for pude-, skum- eller gel-lejringsanordninger.

Hjælp til patienter med at sætte sig på sengekanten.

KONTRAINDIKATIONER

Patienter med thorax-, cervix- eller lumbalfrakturer, der anses for ustabile.

TILSIGTET MILJØ

Hospitaler og institutioner

FORHOLDSREGLER


- Sørg for, at Q2Roller opfylder patientens behov før anvendelse.
- Det anbefales at være mindst to plejepersoner om at betjene Q2Roller. En plejeperson kan dog betjene Q2Roller, hvis sengehestene er hævet.
- Sørg for, at ventilerne ikke er i kontakt med patienten, mens denne befinder sig på Q2Roller.
- Produktet må kun anvendes af uddannet personale.

- Brug kun fastgørelsesanordninger og/eller tilbehør, som er godkendt af HoverTech International.
- Brugsanvisningen til Q2Roller skal følges.
- Kun til brug med den justerbare knap til HT-Air-luftforsyning.
- Sørg for, at patienten er centreret på Q2Roller før oppustning. Indikator for reference midterlinje på Q2Roller.
- Plejepersonalet skal sikre, at patienten er under opsyn og stabiliseret under oppustning og tømning af Q2Roller eller under oppustning ved vinkler over 30 grader.
- Må ikke vaskes i vaskemaskine.
- Der henvises til de produktspecifikke brugsanvisninger angående betjening.


FORHOLDSREGLER – HOVERTECH INTERNATIONAL AIR SUPPLY

- Før elledningen på en måde, så den ikke udgør nogen fare.
- Undgå blokering af luftindtag på Air Supply.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Åbn ikke Air Supply.

Komponentoversigt – Q2Roller

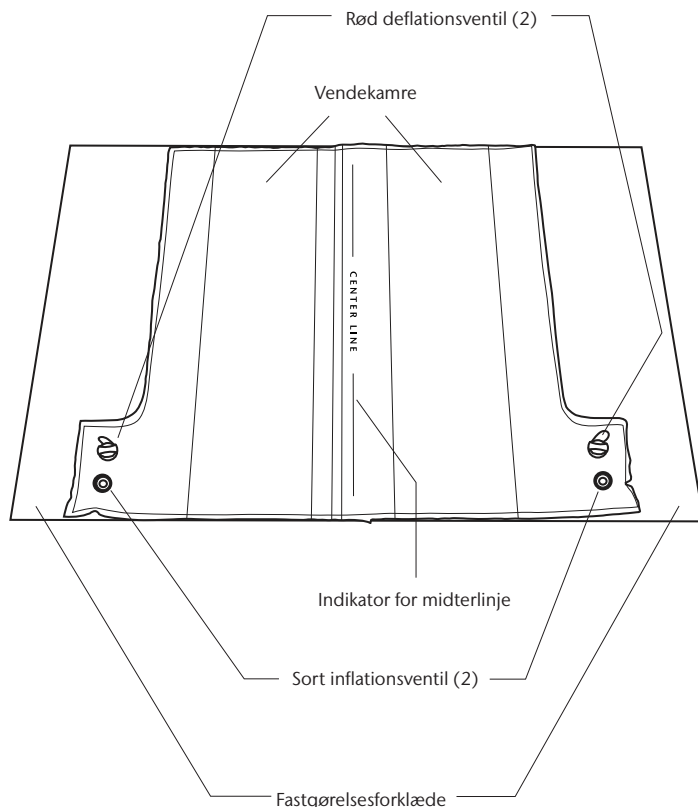


Komponentoversigt – Air Supply

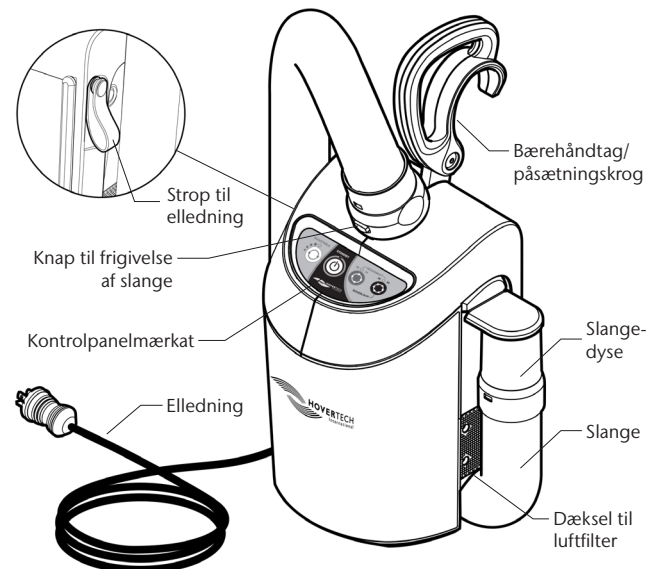

ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med jævnstrøm.
HT-Air er ikke beregnet til brug med HoverJack-batterivognen.

FORSIGTIG: INGEN DELE, DER KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
Kun kvalificeret servicepersonale må udføre reparationer på HoverTech International Air Supply.

Air Supply betjeningsfunktioner

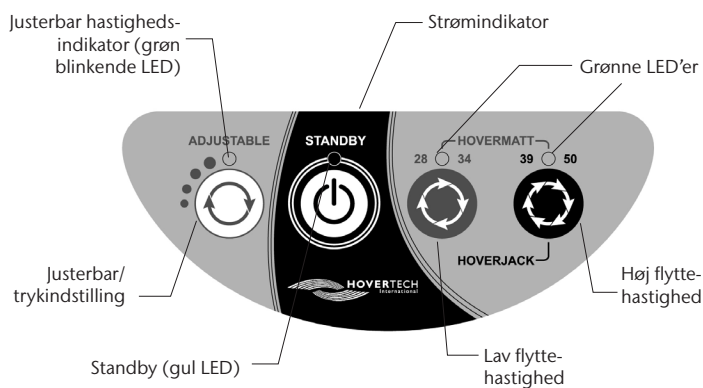

Den JUSTERBARE betjeningsfunktion har fire forskellige indstillinger. Hvert tryk på knappen øger lufttrykket og oppustningshastigheden. Den grønne blinkende LED angiver oppustningshastigheden med antallet af blink (dvs. to blink svarer til den anden oppustningshastighed).



STANDBY: Bruges til at stoppe oppustning/luftstrøm (gul LED angiver STANDBY-tilstand).

Brugsanvisning

1. Sørg for, at de røde deflationsventiler er lukket tæt, før oppustningen påbegyndes.
2. Anbring Q2 Roller på sengemadrassen, og centrér ved hjælp af midterlinjeindikatoren.
3. Stop fastgørelsesforklædet på Q2 Roller ind under sengemadrassen for at holde den på plads under brug.
4. Fjern bagbeklædningen fra klæbestrimlerne på Q2R-puden, og centrér den oven på Q2Roller (hvis patienten allerede ligger på madrassen, placeres anordningen og puden under patienten ved hjælp af rulle teknik).
5. Sørg for, at patienten er centreret på enheden, at alle sengeheste er oppe, eller følg hospitalets protokol.
6. Find inflationsventilen på den MODSATTE side af venderetningen, og placer luftforsyningsslangen over ventilen. Tryk på den JUSTERBARE knap på HT-Air tastaturet for at starte luftstrømmen. Tryk om nødvendigt på denne knap op til 3 gange mere for at øge luftstrømmen og oppustningshastigheden.
7. Når vendingen er udført, fjernes slangen fra ventilen, og der trykkes på STANDBY-knappen på Air Supply panelet for at stoppe luftstrømmen. Kammeret behøver muligvis ikke at være pustet helt op for at opnå den ønskede position.
8. Fjern den røde hætte fra deflationsventilen for hurtigt at tømme Q2Roller. Tryk midten af den sorte inflationsventil ned for langsomt at tømme eller justere kammeret.

Anvendelse som lejringsanordning efter bugleje:

1. Følg trin 1-4 ovenfor.
2. Klargør patienten til bugleje.
3. Anbring patienten i bugleje på Q2Roller, og sørg for, at patienten er centreret.
4. Pust kamrene op og juster dem, så trykket aflastes helt, og anbring patienten i korrekt bugleje i henhold til institutionens protokol.

Advarsel: Brug ikke Q2Roller til bugleje. Brug andre foranstaltninger til at anbringe patienten i bugleje – Kun til lejrning efter bugleje.

Sådan sættes patienten på sengekanten:

Vær mindst 2 plejepersoner om opgaven. Brug klinisk dømmekraft til at afgøre, om patienten er i stand til og klar til at sidde på sengekanten.

1. Følg trin 1-4 for at vende patienten sideværts.
2. Med 1 plejeperson på hver side af patienten pustes kammeret helt op på den modsatte side af, hvor patienten i sidste ende skal sidde, for at vende patienten helt. Bøj patientens knæ for at opnå komfort.
3. Hæv sengens hovedende så højt, som det er muligt, og sænk sengen til gulvet, så patientens fødder berører gulvet, når vedkommende sidder på sengekanten. Begge plejepersoner kan nu hjælpe patienten på samme side, da det fuldt oppustede kammer støtter patientens ryg.
4. Den ene plejeperson bistår med at skubbe patientens ben til siden af sengen, mens den anden puster det tømte kammer helt op og sikrer, at patienten ikke glider ned ad sengekanten.
5. Når kammeret er pustet helt op, og patienten sidder oprejst, stabiliseres patienten, og derefter åbnes tømningensventilen. Mens kammeret tømmes for luft, skal det sikres, at patienten stadig sidder oprejst. Den plejeperson, der styrer benene, fortsætter med at føre benene til sengekanten, efterhånden som kammeret tømmes helt for luft. Stabiliser patienten.

Produktspecifikationer/nødvendigt tilbehør

Q2ROLLER® ANORDNING TIL LATERAL VENDING

Materiale:	Polyuretanlamineret uvævet, nylon uvævet
Udformning:	HF-svejset
Bredde:	Kamre: 118 cm (46,5") (kombineret kammerbredde) Forklæde: 183 cm (72")
Længde:	Kamre: 113 cm (44,5") Forklæde: 112 cm (44")

LATEXFRI

Modelnr.: HTR-200
Vægtgrænse: (600 lbs) 272 kg
Til brug hos en enkelt patient

NØDVENDIGT TILBEHØR:

Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A

HOVERCOVER HALV STØRRELSE

Materiale:	Ikke-vævet, åndbart PE
Udformning:	Termisk limning
Bredde:	101 cm (40")
Længde:	101 cm (40")

Modelnr.: HTR-CHX-5PACK (5 stk.)
Modelnr.: HTR-CHX-CASE (50 stk.)

Rengøring og vedligeholdelse

RENGØRING

Q2Roller er beregnet til brug til en enkelt patient. Hvis enheden bliver snavset, skal den tørres helt af med et bakteriedræbende rengøringsmiddel (phenol-desinfektionsmiddel, kvaternær opløsning eller et andet desinfektionsmiddel på mellemniveau i henhold til facilitetens procedure) for at desinficere. Det bedste resultat opnås ved at følge rengøringsmiddelproducentens anbefalede hviletid og brugsanvisning. Påfør bakteriedræbende rengøringsmiddel direkte på svært tilgængelige områder. Lad det lufttørre. Må ikke vaskes i vaskemaskine.

INFEKTIONSKONTROL

Q2R-underlaget anbefales til at dække Q2Roller for at forhindre, at enheden bliver snavset (kan også købes separat). Andre materialer, såsom puder eller lagner, kan også placeres oven på Q2Roller for at holde den ren.

Hvis Q2Roller anvendes til en isoleret patient, skal hospitalet anvende de samme protokoller/procedurer, som anvendes til sengemadrasser og/eller linned på den pågældende patientstue.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFORSYNING

Se brugsanvisningen til Air Supply for reference.

BEMÆRK: KONTROLLER DE LOKALE/NATIONALE/INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FØR BORTSKAFFELSE.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Før brug skal Q2Roller inspiceres visuelt for at sikre, at der ikke er synlige skader, der kan gøre Q2Roller ubrugelig.

Q2Roller skal efterses regelmæssigt for at sikre følgende:

- Alle inflationsventiler er selvforseglenede uden tegn på lækage
- Der er ingen huller eller revner i Q2Roller

Hvis der findes skader, der kan medføre, at Q2Roller ikke fungerer efter hensigten, skal Q2Roller kasseres.

Returnering og reparation

Alle produkter, der returneres til HoverTech International (HTI), skal have et returgodsgodkendelsesnummer (RGA) udstedt af virksomheden. Ring til (800) 471-2776 og spørg efter et medlem af RGA-teamet, som vil give dig et RGA-nummer. Ethvert produkt, der returneres uden et RGA-nummer, vil medføre forsinkelse af reparationstiden.

Returvarer sendes til:
HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
Attn: RGA# _____
Telefon: 800-471-2776
Fax: 610-694-9601



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com