

ZOID PSV[™]

Det oplagte valg af pude til aktive kørestolsbrugere med moderat risiko for tryk.



VARILITE PSV ventil tager gættteri og usikkerhed væk når puden skal justeres, ventilen justerer puden automatisk. Enkelthed forbedrer forståelse. Vælg Zoid PSV med god samvittighed, velvidende at bruger og hjælper nemt kan justere Zoid PSV for optimal trykaflastning og stabilitet, **FØRSTE GANG – HVER GANG!**

Uafhængig forskning har vist at
VARILITE luft-skum kombinationspuder
har markedets mest optimale
stød- og vibrationsdæpende teknologi.

ZOID PSV™


Konisk designet, lav profil, stabil, komfort og enkelthed har gjort Zoid PSV til den foretrukne trykafastende pude for den aktive kørestolsbruger. Alle Zoid PSV puder er kun 6 cm høje og den største af Zoid PSV puderne vejer kun 567 gram! Pudens koniske form gør den ideel til fastrammekørestole og pudens betræk er designet til at beskytte lårene på brugere med korte hamstrings eller til dem der trækker benene ind under stolen.

1. Luft-skum kombinationspuden er designet med tre forskellige skumtyper for bedst mulig trykfordeling og stabilitet. Den sammensatte Zoid skum er coated med et specielt strækbart betræk, der holder puden lufttæt. Betrækket er modstandsdygtigt mod punktering og er vandtæt. En ventil frigør luft så brugeren kan synke ned i skummet. Skummet vil tilpasse sig brugeren og vægten vil blive fordelt over så stort et areal af puden som muligt og derved opnåes maksimal trykfordeling.

2. Positioneringsstøtten i ekstra fast skum forbedrer sideværts stabilitet og siddende balance. Den sammensatte Zoid skum yder optimal støtte, når brugeren synker ned i puden. Den sammensatte skum vil lave en base med konturer der passer den enkelte bruger perfekt. Skummets placering og opbygning gør at brugeren får optimal støtte, samt bækken og lår holdes i ønsket stilling. Der er ingen abduktionsseparator i midten af puden så benene bedre kan presses mod midten i den koniske pude.

3. PSV Ventil til justering af luft volumen. Zoid PSV benytter VARILITE's nye revolutionerende patentanmeldte PSV ventil. Siddende på en luftfyldt pude, kan bruger eller hjælper åbne PSV ventilen til en forudindstillet position. Når PSV ventilen måler at, ønsket nedsynkning i puden er nået, stopper PSV ventilen med at lukke luft ud. PSV ventilen kan nu lukkes og puden er perfekt justeret.

4. Betræk Smart og funktionelt. Leveres i strækbart stof der går rundt om forkanten for at undgå generende syninger. Netformet skum der øger luftgennemstrømningen så fugt hurtigt forsvinder. Betrækkets underside af non-slip materiale er forsynet med ekstra velcro for at sikre puden ligger fast. VARILITE betræk er produceret i overensstemmelse med ISO 7176-16 brandhæmmende standard for polstrede kørestols komponenter. Kan maskinvaskes på 60° C.

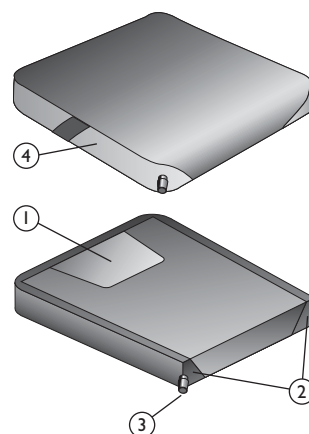

VARILITE's PSV ventil tager gæsteri og usikkerhed væk, når puden skal justeres og gør det automatisk! Enkelthed forbedrer brugerens forståelse. En terapeut eller siddestillingskyndig kan vælge Zoid PSV med god samvittighed, velvidende at bruger eller hjælper nemt kan justere Zoid PSV for optimal trykafastning, **FØRSTE GANG - HVER GANG!**