

**VICAIR**<sup>®</sup>


# *Vicair*<sup>®</sup> Liberty



Komfort og trykaflastning



**Vicair Liberty** puderne er velegnet til kørestolsbrugere med lav risiko for at udvikle tryksår. **Vicair Liberty** kan anvendes til forskellige formål, hvor perfekt form og let trykfordeling ønskes. **Vicair Liberty** puderne er behagelige at anvende, er ca. 40 mm høj og vejer kun 300-400 gram. **Vicair Liberty** er let at flytte fra stol til sæde, og kan tages med i byen ved behov for aflastende og komfortabel siddeflade.

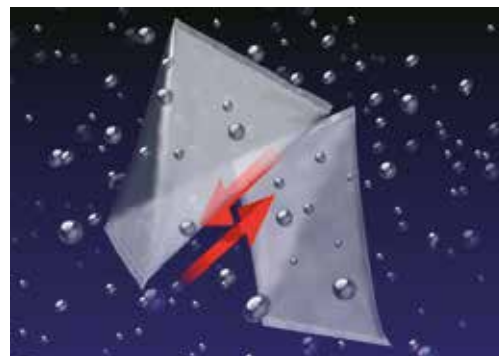

## Vicair teknologi

Invacare **Vicair Liberty** puderne benytter sig af Invacare **Vicair Technology™**. En unik og innovativ metode til støtte af kroppen. Hundredevis af små luftfyldte celler kaldet **SmartCells™**, er lagt i et tyndt lag silikone i et vinylbetræk. Dette gør, at luftcellerne let glider mod hinanden og derved former sig efter kroppens konturer.

## Perfekt form og trykfordeling

**Vicair Liberty** puden indeholder udover silikone og **SmartCells** også luft, der presses ud gennem en ventil, hvorved puden former sig helt efter brugerens konturer. **Vicair Liberty** puden anvendes til brugere, der har behov for komfort og ved forebyggelse af tryksår hos brugere i lavrisiko for at udvikle tryksår.

## Egenskaber og tilbehør



### Vicair Liberty PT

2 kammer pude, der forhindrer tendens til fremadskridning. Det forreste kammer fungerer som en kile, der reducerer shearkræfterne.



### Klar til brug

**Vicair Liberty** er altid klar til brug uden yderligere tilpasning. Ved hjælp af en ventil, vil overskydende luft automatisk forsvinde, når man sætter sig. Og **SmartCells** og dermed puden tilpasser sig og understøtter brugerens form.







### Komfortabelt betræk

Vælg **Vicair Liberty** med et tyndt og strækbart sort betræk, der let kan afmonteres for vask. Samtidig udnyttes **Vicair Liberty's** evne til trykaflastning og komfort

## Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk). For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

	Max. brugervægt	Rengøring af betræk:
 Vicair Liberty 400x400, 400x450, 430x430, 450x400, 450x450, 450x500, 500x450, 500x500 mm	 0,3 - 0,4 kg	 150 kg
		 60°

## Farve



Sort

Til Vicair Liberty PT findes et betræk, der kan vaskes ved 60°. Selve Vicair Liberty PT kan afvaskes med mild sæbevand eller med et desinficerende middel. Se vaskevejledning i brugsanvisningen.

Tlf.: 3690 0000  
 Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
 Denmark

