

Produktkatalog

- ramper



Stepless
by Guldmann



Ramper der øger mobiliteten

Verdenen er fuld af niveauforskelle.

Overalt er der forhindringer, der besværliggør dagligdagen for mange med nedsat mobilitet som f.eks. kørestolsbrugere, gangbesværede, folk med klapvogne, sækkevogne etc. Selv et lille dørtrin kan være en forhindring.

Stepless har et bredt sortiment af ramper, der spænder fra små dækplader over dørtrinsramper til smalle/brede ramper og stationære rampesystemer. Vi tilbyder også Lite ramper, som er fremstillet af glas- og grafitfiber, hvilket gør ramperne blandt de letteste på markedet.

Med det brede rampeprogram kan vi finde netop den rampe, som passer til det enkelte behov.

Over 30 års erfaring

Stepless er et brand fra V. Guldmann A/S, som har over 30 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler, der er udviklet og designet til at forbedre menneskers livskvalitet. Alle produkter er blevet sikkerhedstestet og fremstår i et sikkert og tidløst design, der passer ind i både offentlige og private miljøer. Vi har egen projektafdeling

samt et landsdækkende montage- og serviceteam. Vi er altid opdateret med de gældende bygningsreglementer og lovgivninger.

På vores hjemmeside **www.guldmann.dk** kan du finde yderligere informationer og billeder af vores produkter og løsninger.

Har du brug for løfteplatforme, trappe-lifte, platformselevatore, løsninger til offentlig transport eller en special løsning, kan vores løfteplatforms-/elevatorkatalog rekvireres.

TRANSPORTABLE RAMPER	4
Fast rampe	5
Længdeforskydelig rampe	5
Sammenklappelig rampe	5
Længdeforskydelig kuffertrampe	6
EasyFold Pro rampe	6
EasyFold Pro3 rampe	6
Lite rampe	9
Bred fast rampe	10
Bred sammenklappelig rampe	10
Dørtrinsrampe	10
Valg af rampelængde	11
Tekniske specifikationer	12
DØRTRINSRAMPER	14
Excellent rampekits	15
DÆKPLADE	17
STATIONÆRT RAMPESYSTEM	18

Ramperne er til brug ved forcering af trin og kantsten, når kørestolen skal ind i bilen, eller hvor der ellers er behov for udligning af mindre niveauforskelle.



Ramperne har fået nyt foldbart håndtag!



Fast rampe

Velegnet ved ensartede niveauforskelle, ved behov for lavest mulig vægt, og hvor rampen ofte bruges på samme sted.

Varenr. 30000-xxx



Længdeforskydelig rampe

Fleksibel rampe, der kan bruges på mange steder og ved forskellige niveauspring, hvor højde og længde kan variere – fylder kun lidt, når den ikke er i brug.

Varenr. 30015-xxx



Sammenklappelig rampe

Velegnet ved ensartede niveauforskelle. Fylder kun lidt, når den ikke er i brug, og er nemmere at transportere end de faste ramper.


Varenr. 30020-xxx



Længdeforskydelig kuffertrampe

Perfekt til udligning af høje niveauforskelle. En bred rampe, der er nem at trække ud til ønsket længde. Foldes i bredden, forskydes i længden og optager dermed mindre plads end andre lange rampe; også under transport og ved opbevaring.

Varenr. 30070-xxx

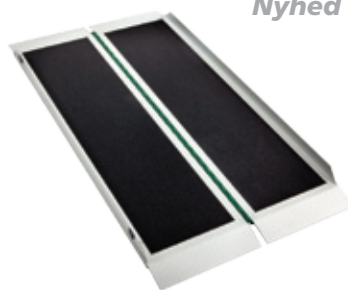


Nyhed

EasyFold Pro rampe

Ny bred rampe i et enkelt og let design til høje belastninger. Med en max. belastning på 350 kg er ramperne ideelle til bl.a. el-kørestole og scootere. Rampen kan nemt foldes på midten, så den fylder mindre ved opbevaring. Håndtaget gør det lettere at positionere rampen. Bæres og transporteres som en kuffert.

Varenr. 30080-xxx

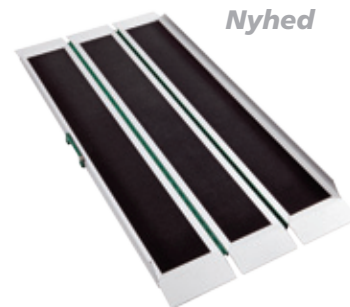

Nyhed

EasyFold Pro3 rampe

Ny 3-foldig rampe, der i udfoldet stand har en bred køreflade, men som fylder minimalt ved transport og opbevaring. Rampens lås sikrer at rampen forbliver sammenklappet under transport. Rampens høje max. belastning på 350 kg gør den velegnet til bl.a. el-kørestole og scootere.

Varenr. 30085-xxx





Lite rampe

Lav vægt – let at transportere

Stepless Lite ramperne er blandt de letteste på markedet grundet en unik materialesammensætning bestående af glas- og grafitfiber.

Den særlige materialesammensætning har samme egenskaber som en tenniskester: Let og stærk.

Høj sikkerhed – let at håndtere

Kørefladen har en skridsikker belægning. Stepless Lite ramper er nemme at folde ud og sammen. Ramperne har kun et enkelt foldeled, og det er nemt for såvel brugere som hjælpere at anvende rampen.


Den lave vægt (for 70 cm rampen kun 3,5 kg) betyder også, at rampen kan transporteres bag på kørestolen uden stabilitetsproblemer.

Stepless Lite ramper er et oplagt valg til brugere/hjælpere, der ønsker minimal vægt, eller til den aktive kørestolsbruger. Tages nemt med på rejsen eller på byturen.



Varenr. 30100-xxx




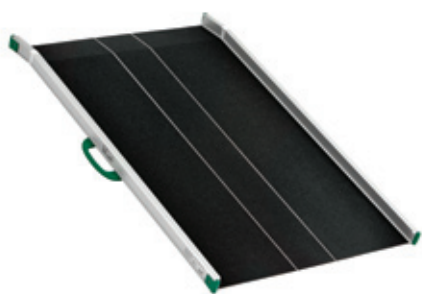

Bred fast rampe

Velegnet hvor rampen ligger permanent eller altid bruges samme sted. Giver øget sikkerhed for både bruger og hjælper. God til scootere og el-kørestole, hvor høj komfort er afgørende.


Varenr. 30030-xxx

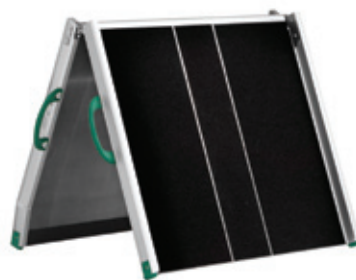

Bred sammenklappelig rampe

Velegnet hvor rampen bruges på samme sted samt til placering i biler. Giver øget sikkerhed for både bruger og hjælper. God til scootere og el-kørestole, hvor høj komfort er afgørende. Den sammenklappelige rampe fylder mindre end den brede faste rampe, når den ikke er i brug.

Varenr. 30040-xxx

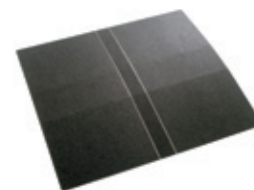

Dørtrinsrampe

Dørtrinsrampen placeres ovenpå det eksisterende dørtrin og letter derved opkørsel på begge sider.

Materiale: Bukket 3 mm aluplade med skridsikker sort belægning.

Varenr. 39167 / 77

Valg af rampelængde

Vælg altid den længst mulige rampe. Jo længere rampe, jo mindre stigning og jo lettere er rampen at forcere. Generelt anbefales følgende rampelængder i forhold til de angivne stigninger:


Selvkørt manuel kørestol: Maksimal stigning 1:7.

Hjælper-skubbet manuel kørestol og el-kørestole: Maksimal stigning 1:5.



Hældningsdiagram 1:5

Niveauforskel, cm

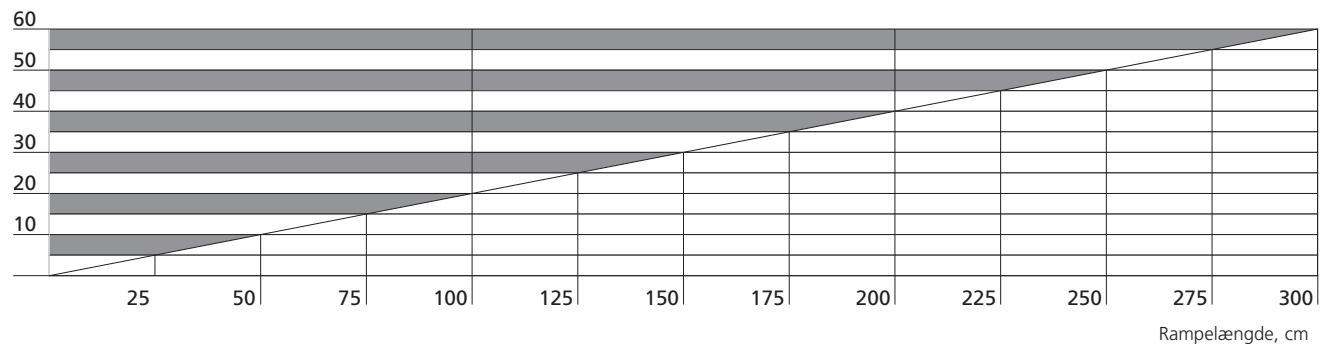

Tekniske specifikationer

Varenr.	Type	Max/min længde cm	Indvendig bredde cm	Udvendig bredde max cm	Bredde foldet max cm	Max belastning kg/sæt	Egen- vægt kg/stk
Fast rampe							
30000-050	Fast rampe	50	18,2	26	-	350	1,5
30000-105	Fast rampe	105	18,2	26	-	350	3,2
30000-130	Fast rampe	130	18,2	26	-	350	3,9
30000-155	Fast rampe	155	18,2	26	-	350	4,7
30000-200	Fast rampe	200	18,2	26	-	200	6,0
Længdeforskydelig rampe							
30015-100	Længdeforskydelig rampe	100/67,7	18,2	27,9	-	350	4,3
30015-150	Længdeforskydelig rampe	150/92,7	18,2	27,9	-	350	5,7
30015-200	Længdeforskydelig rampe	200/117,7	18,2	27,9	-	350	7,2
30015-250	Længdeforskydelig rampe	250/142,7	18,2	27,9	-	200	8,6
30015-300	Længdeforskydelig rampe	300/167,7	18,2	27,9	-	200	10,1
Sammenklappelig rampe							
30020-110	Sammenklappelig rampe	110/58	18,2	26,0	-	350	4,0
30020-160	Sammenklappelig rampe	160/83	18,2	26,0	-	350	5,7
30020-210	Sammenklappelig rampe	210/108	18,2	26,0	-	350	7,2
30020-260	Sammenklappelig rampe	260/133	18,2	26,0	-	200	8,6
30020-310	Sammenklappelig rampe	310/158	18,2	26,0	-	200	10,1
Længdeforskydelig kuffertrampe							
30070-180	Længdeforskydelig kuffertrampe	183/112	76	82	40,5	325	16,4
30070-210	Længdeforskydelig kuffertrampe	213/127	76	82	40,5	325	18,9
30070-240	Længdeforskydelig kuffertrampe	244/143	76	82	40,5	325	21,4
30070-300	Længdeforskydelig kuffertrampe	305/173	76	82	40,5	200	26,4
EasyFold Pro rampe							
30080-095	EasyFold Pro rampe	93,5	76	77,6	39,8	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro rampe	118,5	76	77,6	39,8	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro rampe	148,5	76	77,6	39,8	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro rampe	178,5	76	77,6	39,8	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro rampe	208,5	76	77,6	39,8	350	15,8

Varenr.	Type	Max/min længde cm	Indvendig bredde cm	Udvendig bredde max cm	Bredde foldet max cm	Max belastning kg/sæt	Egen- vægt kg/stk
EasyFold Pro3 rampe							
30085-165	EasyFold Pro3 rampe	163,5	76	78,6	27,3	350	13,4
Lite rampe							
30100-000	Kørestolstaske til 70 cm rampen						
30100-070	Lite rampe	70	73	73	36,5	300	3,5
30100-085	Lite rampe	85	78	78	39	300	4,0
30100-125	Lite rampe	125	76	78	39	300	6,0
30100-165	Lite rampe	165	76	78	39	300	7,5
30100-205	Lite rampe	205	76	78	39	300	9,5
Bred fast rampe							
30030-100	Bred fast rampe	100	77	88	-	325	9,7
30030-125	Bred fast rampe	125	77	88	-	325	12,1
30030-150	Bred fast rampe	150	77	88	-	325	14,4
30030-200	Bred fast rampe	200	77	88	-	325	19,1
30030-300	Bred fast rampe	300	77	88	-	200	28,6
Bred sammenklappelig rampe							
30040-150	Bred sammenklappelig rampe	150/78	77	88	-	325	17,5
30040-200	Bred sammenklappelig rampe	200/103	77	88	-	325	22,2
30040-250	Bred sammenklappelig rampe	150/128	77	88	-	200	26,9
30040-300	Bred sammenklappelig rampe	300/153	77	88	-	200	31,7
Dørtrinsrampe							
39167	Dørtrinsrampe	67 x 60 x 2,5	-	-	-	350	3,4
39177	Dørtrinsrampe	77 x 60 x 2,5	-	-	-	350	4,3

Dørtrinsramperne benyttes ved forcering af dørtrin. Ved at lægge rampen foran dørtrinnet kan niveauforskellen overvindes.



Excellent rampekits – dørtrinsramper til mange formål

Stepless lancerer en helt ny serie af de populære Excellent rampekits, der giver endnu bedre tilpasningsmuligheder. De nye kits fås nu i 2 bredder: 75 cm og 100 cm og leveres også i en udendørs udgave med SlipStop -mærket "S". Slipstop er en ekstra skridsikring af udendørsramper.

Dørtrinsramperne sælges i kits, hvilket gør det nemt at håndtere og montere dem. De to øverste lag leveres løst med, da det giver mulighed for nøjagtig tilpasning i højden. Kit-ramperne fås i flere udgaver og til niveauforskelle op til 15 cm. Leveres komplet med vejledning, tilbehør til opstilling og individuel tilpasning.

I kit-serien findes også den dobbeltsidige dørtrinsrampe med hjørneafrundning, som har fået den samme jævne køreflade som de nye kits.

Excellent ramperne er et grønt produkt – de er 100% PVC-fri, 100% giftfri og kan klare op til flere tons i belastning.



Excellent rampekits

75 cm bredde

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12100	Kit 0 – op til 2,4 cm	75 x 12,5 x 2,4
11-12101	Kit 1 – op til 4,2 cm	75 x 25 x 4,2
11-12102	Kit 2 – op til 7,8 cm	75 x 50 x 7,8
11-12103	Kit 3 – op til 11,4 cm	75 x 75 x 11,4
11-12104	Kit 4 – op til 15 cm	75 x 100 x 15
11-12105	Kit Add-on1 – repair ¹⁾	75 x 6,2 x 1,5

75 cm bredde med SlipStop (udendørs brug)

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12112	Kit 1S – op til 4,2 cm	75 x 25 x 4,2
11-12113	Kit 2S – op til 7,8 cm	75 x 50 x 7,8
11-12114	Kit 3S – op til 11,4 cm	75 x 75 x 11,4
11-12115	Kit 4S – op til 15 cm	75 x 100 x 15

¹⁾ Kit Add-on1 - repair set

Bruges til ekstra højdejustering på op til 1,5 cm på
Kit 1-4 eller som reparationssæt ved flytning af Kit 1-4.

²⁾ Kit Add-on100 - repair set

Bruges til ekstra højdejustering på op til 1,5 cm på
Kit 101-104 eller som reparationssæt ved flytning af Kit 101-104.

100 cm bredde

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12106	Kit 100 – op til 2,4 cm	100 x 12,5 x 2,4
11-12107	Kit 101 – op til 4,2 cm	100 x 25 x 4,2
11-12108	Kit 102 – op til 7,8 cm	100 x 50 x 7,8
11-12109	Kit 103 – op til 11,4 cm	100 x 75 x 11,4
11-12110	Kit 104 – op til 15 cm	100 x 100 x 15
11-12111	Kit Add-on100 - repair ²⁾	100 x 6,2 x 1,5

100 cm bredde med SlipStop (udendørs brug)

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12116	Kit 101S – op til 4,2 cm	100 x 25 x 4,2
11-12117	Kit 102S – op til 7,8 cm	100 x 50 x 7,8
11-12118	Kit 103S – op til 11,4 cm	100 x 75 x 11,4
11-12119	Kit 104S – op til 15 cm	100 x 100 x 15

Dørtrinsrampe med hjørneafrundning


Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12501	Komplet dobbeltsidig dørtrinsrampe med hjørneafrundning.	
	Mål på den lave side:	100 x 12,5 x 2,1
	Mål på den høje side:	125 x 25 x 3,9

Ved brug af dækplader fjernes dørtrinnet og dækpladerne lægges fuldstændigt i plan med gulvet, således at en forhindring helt undgås.

Dækplade – til dørtrin

Et dørtrin udgør en forhindring for kørestole, rollatorer og andre kørende hjælpemidler. Denne forhindring fjernes permanent ved at afmontere det eksisterende dørtrin og montere en Stepless dækplade over det hul, der derved opstår.

Materiale: Extruderet aluminium med indbygget skridsikring (riller).

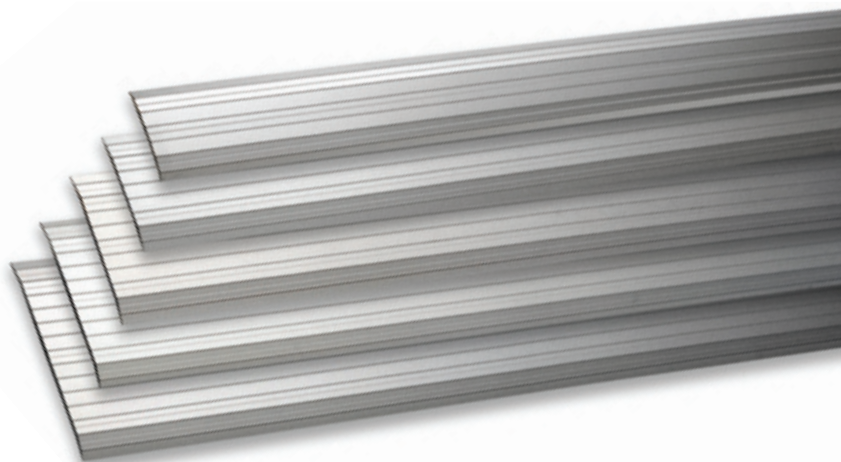

Varenr.	Type	Længde x bredde, cm
780105	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	180 x 10,5
780130	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	180 x 13,0
780155	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	180 x 15,0
780180	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	180 x 18,0
780199	Dækplade alu-farve, aluminium (uden riller)	180 x 5,0
780200	Dækplade alu-farve, aluminium	180 x 8,0
780201	Dækplade alu-farve, aluminium	180 x 10,5
780202	Dækplade alu-farve, aluminium	180 x 13,0
780204	Dækplade alu-farve, aluminium	180 x 15,0
780206	Dækplade alu-farve, aluminium	180 x 18,0

Belastning 500 kg

Rampesystemet benyttes ved permanent opstilling af stabile og sikre udendørs ramper.



Stationært rampesystem

Stepless tager udfordringen op imod traditionelle tunge rampesystemer. Rampesystemet er let at håndtere og passer flot ind i de fleste omgivelser.

Høj styrke – lette moduler

Rampesystemet, som er fremstillet af aluminium, kan klare en belastning på op til 385 kg.

Med aluminium systemet er der taget højde for det stigende krav og ønske om at forbedre arbejdsmiljøet, hvor moduler skal veje mindre, men samtidigt skal klare en større belastning.

Let at håndtere

For at gøre bestillingen lettere findes der rampekits, som bliver leveret komplet med gelændere, støtteben, skruer etc.

Høj fleksibilitet

Modulerne kan sættes sammen og designes, så rampesystemet passer til brugerens behov og ønsker.

Recirkulering

Den modulære konstruktion og lange levetid på 15 år gør rampesystemet ideelt til recirkulering.

Let at montere

Installation og nedtagning af rampesystemet er simpel og let.

Skridsikker belægning

Den integrerede skridsikre belægning er venlig over for børn, førerhunde og høje hæle, da belægningen i platform- og rampemoduler er fri for farlige kanter og huller.

Hurtig levering

Modulerne lagerføres og kan derfor leveres indenfor kort tid.



Stepless – Adgang for alle

Under Stepless varemærket sælger vi tilgængelighed. Tilgængelighed der giver gangbesværede, kørestolsbrugere og andre på hjul adgang til deres omverden.

- Transportable ramper & dørtrinsramper
- Stationære rampesystemer
- Løfteplatforme
- Trappelifte
- Platformselevatore

Guldmann – Tid til omsorg

Under Guldmann varemærket beskæftiger vi os primært med forbedring af arbejdsmiljøet overalt indenfor sundhedssektoren, hvor mennesker der har behov for hjælp skal forflyttes, løftes og lejes.

G2 – Frihed for den enkelte

Under G2 varemærket leverer vi mobilitet.

Mobilitet der giver gangbesværede og kørestolsbrugere frihed til at vælge at tage del i livet omkring dem.

Guldmann Consulting – Kompetenceudvikling

Skræddersyede uddannelseskoncepter, projektføreløb, temadage, foredrag, analyser og evalueringer indenfor ergonmi. Det er især det fysiske arbejdsmiljø vedrørende forflytning, mobilisering og rehabilitering af borgere/patienter som er vores speciale.



Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S

Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

Tlf. +45 8741 3100

Fax +45 8741 3131

E-mail info@guldmann.com

www.guldmann.dk

V. Guldmann A/S

Park Allé 382

DK-2625 Vallensbæk

Tlf. +45 8741 3100

Fax +45 8741 3131