



etac[®]
Creating Possibilities

etac[®]

Etac Lille Viking

Smidig og fleksibel hjælpemotor til manuelle kørestole

Etac Lille Viking

Lille Viking er en populær hjælpemotor til montering på manuelle kørestole. Nu er det slut med at skubbe kørestolen op ad bakke og holde igen på vejen ned. Det eneste ledsageren skal gøre er at gå bag stolen og styre den.

Hjælpemotoren vælges til den enkelte kørestol, og der monteres beslag på stolen, som vil gøre til- og frakobling af motoren enkel via en snapkobling. Kørestolen vil nu være el-drevet og ledsagerstyret. Den betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på stolens skubbehåndtag.

Hjælpemotoren "trækker" kørestolen fremad, hvilket giver optimal trækraft og gode køreegenskaber. Samtidig forlænger hjælpemotoren kørestolens levetid. Under kørslen bærer hjælpemotoren sin egen vægt, og på den måde er det ikke nødvendigt at tage højde for den i kørestolens bæreevne.

Lille Viking giver nye muligheder for både bruger og ledsager.




Kombinationsoversigt

Kørestole	Sædebredde	Mest anvendte kombinationer*
Cross og Twin	37,5 - 47,5 cm	Lille Viking Lav for bøjle, varenr. 28616 Lille Viking monterings sæt, varenr. UB200624K
Cross Cross 5, Cross 6 og Transit Cross XL og Cross 5 XL Twin	50,0 - 57,5 cm 50 cm 50 - 60 cm 50 - 55 cm	Lille Viking Lav for bøjle, varenr. 28616 Lille Viking monterings sæt, varenr. UB200624L
Prio	40 - 55 cm	Lille Viking Lav for bøjle, varenr. 28616 Lille Viking monterings sæt, varenr. 82920
Cougar	Min. 38,0 cm	Lille Viking Flad for bøjle, varenr. 28618 Lille Viking monterings sæt, varenr. UB200624T
Multi Frame		Lille Viking Flad for bøjle, varenr. 28618 Lille Viking monterings sæt, varenr. UB200624T

* Der vil kunne forekomme indstillinger på stole, hvor der kan være behov for at vælge en anden type motor eller monterings sæt. Bemærk også, at det kan være nødvendigt at justere stolens højde.

Detaljer

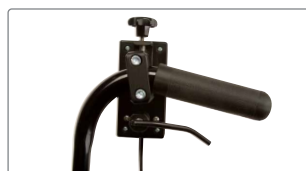


Manøvrering

Motoren styres forlæns eller baglæns via det nemt tilgængelige håndtag på kontrolboksen, lige under skubbehåndtaget.



Batteri-indikator

Motoren er udstyret med en indikator, der viser strømforbruget.

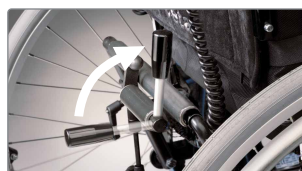

Nem frakobling

Ved at skubbe håndtaget op løftes motoren fra underlaget, og kørestolen kan manøvreres uden hjælpemotor.

Tilbehør



Skubbebøjle, højderegulerbar Cross, Cross XL

SB 35,0 cm	25578-01
SB 37,5 cm	25579-01
SB 40,0 cm	25580-01
SB 42,5 cm	25581-01
SB 45,0 cm	25582-01
SB 47,5 cm	25730-01
SB 50,0 cm	25583-01

Bestilling og tekniske data

	Lille Viking Lav for bøjle	Lille Viking Flad for bøjle
Varenr.	28616	28618
HMI-nr.	128882	128885
Højde	330 mm	360 mm
Bredde inkl. batterier	310 mm	310 mm
Længde	550 mm	580 mm
Totalvægt	19 kg	19 kg
Vægt motorenhed	10 kg	10 kg
Batteridel	9 kg	9 kg
Vedligeholdelsesfrie GEL-batterier	12 Ah	12 Ah
Ladeapparat	24 V/2,5 Amp	24 V/2,5 Amp
Ladetid	8-12 timer	8-12 timer
Maks. kørselsstrækning med fuldt opladede batterier **	20 km	20 km
Maks. hastighed	6 km/t forlæns, 3,2 km/t baglæns	6 km/t forlæns, 3,2 km/t baglæns
Bremselængde ved maks. hastighed *	1 m	1 m
Stigningskapacitet	8°	8°
Maks. forhindringshøjde forlæns	50 mm	50 mm
Motor	300 W/24 V	300 W/24 V
Udveksling	1/20	1/20
Dækdimension, punkteringsfrie	2,50-3 (210 x 65)	2,50-3 (210 x 65)
Driftstemperatur	-25° til +50°	-25° til +50°
Klassificering	Klasse B, indendørs og udendørs anvendelse	Klasse B, indendørs og udendørs anvendelse
Maks. brugervægt	Det for kørestolen anførte, dog maks. 150 kg	Det for kørestolen anførte, dog maks. 150 kg
Maks. sidehældning	> 20°	> 20°
Maks. hældning opad (ekskl. tipsikring)	6°	6°
Maks. hældning nedad	> 20°	> 20°
Dynamisk stabilitet (ekskl. tipsikring)	3° opad	3° opad
<p>* Vær opmærksom på, at underlag og hældning kan påvirke bremselængden markant. ** Kørselsstrækningen påvirkes bl.a. af kørestolens indstilling, brugerens vægt og det terræn, som hjælpemotoren kører i.</p>		



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities