

Visit Lommevibrator

BE1470/BE1230



Funktioner

Mærkbare vibrationer
Lydløs og diskret

Klar signal identifikation
Anvender LED-lamper og vibrationsmønstre

Let og bærbar
Bær den på bæltet eller på tøjet

Udskiftelig frontetiket
Nem at tilpasse

Valgfrit tilbehør til oplader
Ladestander og pudevibrator

Nem at bruge i dagtimerne

Person søgeren fra Bellman & Symfon er en del af Visit smart home-systemet, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem. Den advarer dig med blide vibrationer, når døren eller telefonen ringer, når dit barn har brug for dig, eller hvis der skulle opstå brand.

Lommevibratoren bruger farvet lys til at differentiere kald fra senderne. Virker i op til 3 uger pr. batteriskift. Den er robust i brug og

nem at fastgøre i bæltet eller sætte på tøjet. Har en lang rækkevidde fra senderne. Vær dog opmærksom på at den ikke er uden for rækkevidde, når du bruger den.

Tilbehør til lommevibrator

Ladestander med fast strøm og stik til pudevibrator. Husk! Brug altid genopladeligt batteri ved brug af ladestander.



Tekniske specifikationer




Dimensioner og vægt

Højde:	86 mm
Width:	57 mm
Dybde:	29 mm
Vægt:	70 g (inkl. batteri)



Knapper og styring

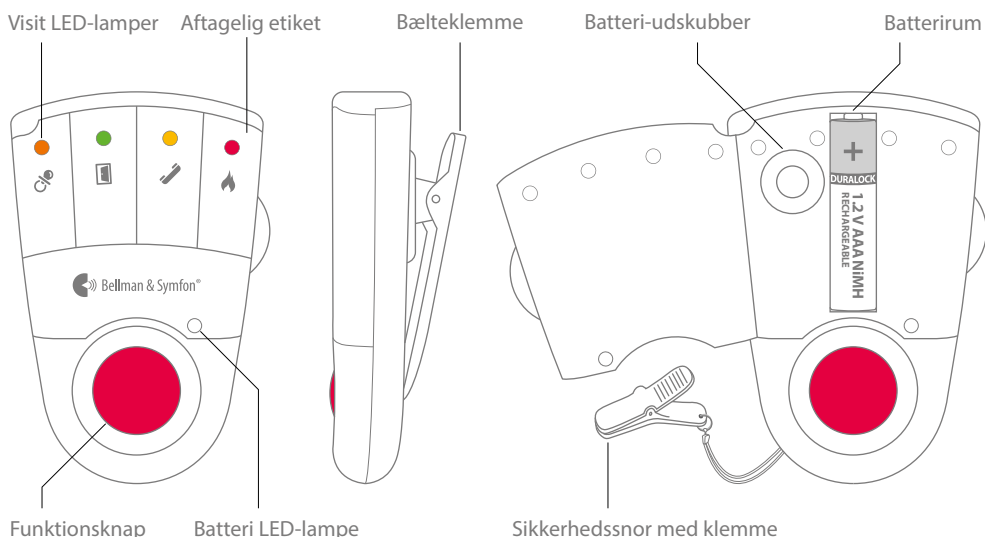

Funktioner

- Diskrete advarsler
Udsender lydløse og ikke-påtrængende vibrationer
- Klar signalidentifikation
Anvender farvede LED-lamper og vibrationsmønstre
- Let og bærbar
Vejer kun 70 g
- Valgfrit tilbehør til opladeren
Udstyret med to stik til pudevibrator

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz, afhængigt af regionen
- Dækning: 50 – 250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

Strøm og batteri

- Hovedstrøm
Drives via BE1260 tilbehør til opladeren
- Batteristrøm
1 × 1,5 V AAA alkaline eller
1 × 1,2 V AAA NiMH genopladeligt batteri
- Strømförbrug
Aktivt: 220 mA, passiv: 1 mA
- Driftstid
Alkaline batterier: 2 – 3 ugers
NiMH-batterier: ~1 uge, fuldt opladet

I æsken

- BE1470 Visit lommevibrator
- Bælteklemme, sikkerhedssnor, ekstra frontetikette

Miljøkrav

- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Visit indikatorer

Visits LED-lamper angiver normalt følgende:

- Orange lys, sut-symbol
Baby/personkald er aktiveret
- Grønt lys, dørsymbol
Dørsenderen er aktiveret
- Gult lys, telefonsymbol
Telefonsenderen er aktiveret
- Rødt lys, brandsymbol
Røgalarmen er aktiveret
- Orange og rødt lys blinker skiftevis
Kuliltealarmen er aktiveret

Tilbehør

- BE1260 Oplader til lommevibrator
- BE1270 pudevibrator (tilsluttet til opladeren)

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1470_BE1230_001DAS004-dk

bellman.com