



Invacare®

XLT

Et aktivt liv med støtte!

Trusted Solutions,
Passionate People



Invacare **XLT** fastrammestol er den ideelle kørestol til dagligt brug. Stolen er designet til at kunne justeres til brugerens behov, og tilbyder en fantastisk støtte, selvstændighed, mobilitet og mulighed for at være aktiv.

Invacare ønsker ikke at gå på kompromis, når det drejer sig om udvikling. **XLT** er designet og bygget på *Rea™* fabrikken i Sverige, og brugerne vil nyde godt af *Rea's* traditioner inden for kvalitetsudvikling af unikke kørestole.

Perfekt tilpasning

XLT kan fås i 3 smarte fastramme versioner: **Aktiv** 75° knævinkel med fast fodbøjle, **Dynamisk** 90° knævinkel med fast fodbøjle eller **Swing** med delte benstøtter.

Hver version har mulighed for individuelle løsninger. **XLT** er den ideelle kørestol til at genvinde, øge eller beholde det aktive og selvstændige liv.

Mange muligheder for individuelle løsninger

Tilbehørsprogrammet er stort indenfor fx armlæn, benstøtter, skubbehåndtag og hjul.

Stabilitet, styrke og et aktivt liv

XLT er konstrueret i ren titanium, hvilket sikrer maksimal stabilitet og styrke uden at gå på kompromis med den lave vægt. Det brede udvalg af unikt tilbehør og flere konfigurationsmuligheder gør, at **XLT** kan tilbyde brugeren en kørestol med den maksimale sikkerhed og støtte, som behøves i en travl og aktiv hverdag.



Egenskaber og tilbehør



Armlæn

Flere muligheder for god støtte fra forskellige armlæn. Aftagelige, flip-up - eller standard armlæn med korte eller lange armlænsputer samt hemiarmlæn.



Antitip

Antitippen kan nemt klappes væk kun vha. foden. Ligeledes kan den vinkles udad, for at give mere plads til hjælperen.



Sporty hjul

De sorte højtryksdæk "Marathon Evolution" er både smarte og letkørende.



Delte benstøtter på *XLT Swing*

Kan svinges til side eller ind under stolen for at lette forflytning eller klare snævre passager.



Forhjulsophæng

Smart forhjulsophæng. Sikrer stabilitet og gode køreegenskaber.



Titanium fodbøjle

Titanium dele giver en lav vægt, høj styrke og bedre komfort. Kan monteres på **Aktiv** (75°) eller **Dynamisk** (90°) ramme.



Dæk

① massiv, ② luftfyldt, ③ lav profil, ④ højtryksdæk, ⑤ punkterfri, ⑥ sorte Marathon Evolution.



Forhjul

① 75 x 24 hårde (3"),
② 100 x 27 halv massiv (4"),
③ 125 x 27 halv massive (5"),

④ 140 x 37 bløde (5,5")
⑤ 150 x 27 halv massive (6"),
⑥ 150 x 30 blødt (6"),

⑦ 150 x 32 luftfyldte (6"),
⑧ 180 x 40 luftfyldte (7"),
⑨ 180 x 40 bløde (7")

Tekniske data


For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Ryghøjde	Benstøtte-længde	Sædevinkel	Rygvinkel
Invacare XLT Aktiv	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 520 mm	200 - 490 mm	380 - 505 mm	0 - 14°	± 10°
Invacare XLT Dynamisk	355 - 500 mm	400 / 450 / 500	400 - 500 mm	200 - 490 mm	355 - 485 mm	0 - 14°	± 10°
Invacare XLT Swing	330 - 505 mm	400 / 450 / 500	390 - 520 mm	200 - 490 mm	280 - 510 mm	0 - 14°	± 10°

interval 15 mm


	Totalbredde	Totalhøjde	Totallængde inkl. benstøtter	Total vægt	Max brugervægt	Transportvægt	Crashtestet
Invacare XLT Aktiv	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	830 - 1030 mm	9.8 kg	135 kg	6 kg	ISO 7176-19
Invacare XLT Dynamisk	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	730 - 880 mm	9.8 kg	135 kg	6 kg	
Invacare XLT Swing	SB + 200 mm	610 - 1050 mm	820 - 1230 mm	11.3 kg	135 kg	6 kg	

Stel farver

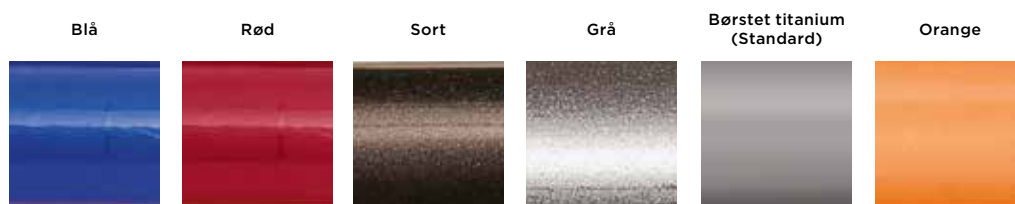

Betræk

Sort Jemima

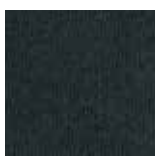

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark

