

Senge

– *Komfortable, praktiske og multi-justerbare*

Guldmann™

Guldmann's senge er udviklet til at yde optimal komfort for brugeren og lette de daglige arbejdsgange for alle personalegrupper.

Der er to serier Guldmann senge – en til hospitaler og en til alle andre former for pleje. Sengenes praktiske design og funktioner sikrer brugeren effektiv pleje og giver hjælperen mulighed for at arbejde ergonomisk korrekt. For portører, teknisk personale og rengøringspersonale er sengene lette at transportere, håndtere og rengøre.

Komfortable og brugervenlige

Guldmann sengene er designet som en velgennemtænkt base for al slags sengepleje og tilgodeser både brugernes og hjælpernes behov.

Liggefladen er inddelt i fire justerbare sektioner, der kan hæves og sænkes så sengen yder brugeren den bedst mulige liggekomfort og den mest effektive pleje. For eksempel kan lår-sektionen køres i en 45° graders vinkel for at sikre at brugeren ikke glider ned i sengen.

Sengens sædedel er en trykafastende komfortplade, hvilket betyder at brugeren i siddende stilling opnår en maksimal støtte, idet sædedelen er en hel plade.



Guldmann™

Guldmann's senge fungerer som et aktivt arbejdsredskab, der hjælper med at sikre optimale arbejdsstillinger for hjælperen. En trænet hjælper kan, eksempelvis, kombinere sengens forskellige positioner, så brugeren kan flyttes rundt i sengen helt uden brug af fysiske kræfter.

Sengene kan indstilles så det er let at placere brugeren i et sejl, klar til løft eller forflytning til kørestolen eller andet hjælpemiddel. Sengene kan hæves og sænkes, så det er nemt for den selvhjulpne bruger at komme ind og ud af sengen med minimal assistance fra plejeren.



Multi-justerbare og praktiske

Sengene er lette at justere og flytte rundt, og de muliggør gode ergonomiske bevægemønstre hos hjælperne, der positivt vil opleve færre belastninger og skader.

Fjernbetjeningen til Guldmann sengene kan betjenes både af brugere og hjælpere. En unik detalje er „personaleknappen“, som bevirker at rygdæl, lårdæl og bendel positioneres samtidig.

Elektriske motorer (2-4 motorer) gør det muligt at justere hver enkelt sektion i liggefladen separat, så brugeren opnår størst mulig komfort.

Batteri-backup sikrer – som option, at sengen fungerer også når den ikke er tilsluttet strøm, – for eksempel under transport.

Guldmann sengerammer er fri for beslag og skruer, – alle håndtag er placeret så de er let tilgængelige og justering eller servicering af sengene sker helt uden brug af værktøj. Sengehestene er monteret på sengerammen for at reducere sengens bredde.

Opmagasiner og recirkulering

Sengene er modulopbygget og kan adskilles i 5 dele i alt (overpart kan skilles i 4 dele) og kan således flyttes/bæres i mindre og lettere moduler. Belastningen reduceres væsentlig for depotfolk og teknikere, – ikke mindst ved leveringer, hvor sengen skal bæres op eller ned af trapper.

Modulopbygningen sikrer en optimal recirkulering, idet sengen kan bruges både på plejehjem og i hjemmeplejen.

Ved opmagasiner på depot eller centrallager kan sengene placeres på specielle sengevogne, hvilket betyder, at der kan opbevares flere senge på mindre plads.

I mange situationer kan sengen transporteres på sengevognen direkte fra depot ud i en bil og ind, hvor sengen skal placeres hos en bruger – uden at det er nødvendigt at sengen skilles ad.



Tekniske specifikationer

Guldmann™

| Max belastning | Max bruger vægt | Antal motorer | Centralbremse | Bredde cm | | Varenumre | | | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | Guldmann plejeseng | Guldmann hospitals-seng | Guldmann indbygningsseng | Guldmann sengeløfter |
| 240 kg | 200 kg | 2 | | 82 | Standard sengegavle | P07-2U82SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | | 82 | Standard sengegavle | P07-3U82SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | | 82 | Standard sengegavle | P07-4U82SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 2 | | 90 | Standard sengegavle | P07-2U90SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | | 90 | Standard sengegavle | P07-3U90SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | | 90 | Standard sengegavle | P07-4U90SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 2 | C | 82 | Standard sengegavle | P07-2C82SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | C | 82 | Standard sengegavle | P07-3C82SD | H07-3C82SD | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | C | 82 | Standard sengegavle | P07-4C82SD | H07-4C82SD | | |
| 240 kg | 200 kg | 2 | C | 90 | Standard sengegavle | P07-2C90SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | C | 90 | Standard sengegavle | P07-3C90SD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | C | 90 | Standard sengegavle | P07-4C90SD | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 240 kg | 200 kg | 2 | | 82 | Træsengegavle | P07-2U82LD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | | 82 | Træsengegavle | P07-3U82LD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | | 82 | Træsengegavle | P07-4U82LD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 2 | C | 82 | Træsengegavle | P07-2C82LD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | C | 82 | Træsengegavle | P07-3C82LD | | | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | C | 82 | Træsengegavle | P07-4C82LD | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | | 82 | Uden sengeramme | | | I07-3U82XE | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | | 82 | Uden sengeramme | | | I07-4U82XE | |
| 240 kg | 200 kg | 3 | C | 82 | Uden sengeramme | | | I07-3C82XE | |
| 240 kg | 200 kg | 4 | C | 82 | Uden sengeramme | | | I07-4C82XE | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 240 kg | 200 kg | | | | | | | | S07-UE |
| 240 kg | 200 kg | | C | | | | | | S07-CE |



Identifikation af varenumre

| P07- | 4 | C | 82/90 | SD |
|--|---|--|-----------------------|--|
| P07 Guldmann plejeseng H07 Guldmann hospitalsseng I07 Guldmann indbygningsseng S07 Guldmann sengeløfter | 2 motorer: Løftemotor Rygdelmotor 3 motorer: Løftemotor Rygdelmotor Bendelsmotor 4 motorer: Løftemotor Rygdelmotor Bendelsmotor Lårdelsmotor | C med central bremsesystem U med central bremsesystem | Liggefladebredde i cm | SE standard eksport SD standard dansk LE træsengegavle med integrerede træsengehest XE uden sengeramme E uden liggeflade |

Senge

Guldmann™



2

Plejeseng, træ

Plejeseng med 2-4 motorer med fastmonteret træsengegavle inkl. træsengeheste, håndbetjening og faste madrasstyr + integreret sengeforlængerdel.

P07-



3

Hospitalsseng

Hospitalsseng med 3-4 motorer og Trendelenburg funktion, inkl. aftagelige gavle, sengeheste, integreret sengeforlænger, batteri-back-up, håndbetjening, faste madrasstyr, drænagebøjle, fenderlister, fenderhjul, antistatiske hjul m. retningsstyr og centralbremse

H07-



4

Sengeløfter

Anvendes sammen med en almindelig seng, når der er brug for elektrisk højdejustering

S07-



5

Indbygningseng

Placeres i en almindelig sengeramme. Med 3-4 motorer til indstilling af ryg-, lår- og bendele samt højdejustering

I07-




1

Plejeseng, standard

Plejeseng med 2-4 motorer med aftagelige træsengegavle, håndbetjening, integreret forlængerdel og faste madrasstyr. Sengen er forberedt til stålsengeheste

P07-

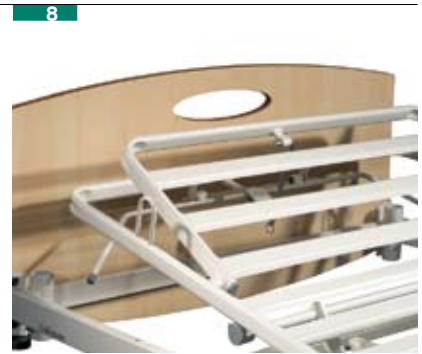

- 1**
Senge­hest, stål – standard
 højre, plejeseng 4310-1
 venstre, plejeseng 4311-1
 højre, hospitalsseng 4310-6
 venstre, hospitalsseng 4311-6

- 2**
Senge­hest, stål – med snoretræk
 højre, plejeseng 4310-2
 venstre, plejeseng 4311-2

- 3**
Senge­hest, stål – høj
 imødekommer brugen af højere madrasser,
 specialmadrasser og topmadrasser
 højre, plejeseng 4410-1
 venstre, plejeseng 4411-1
 højre, hospitalsseng 4410-3
 venstre, hospitalsseng 4411-3

- 4**
Senge­hest, stål – lille
 446000

- 5**
Senge­hestforhøjer, stål
 446100

- 6**
Overtræk til stålsenge­hest
 til standard stålsenge­hest 43700
 til forhøjet stålsenge­hest 44700

- 7**
Overtræk til træsenge­hest
 43710

- 8**
Hovedstøtte
 til plejeseng 441600-1
 til hospitalsseng 441600-3

- 9**
Støttegreb
 4478

Sengetilbehør

Guldmann™



| | | |
|-----------|--|------|
| 10 | Madrasser | |
| | 82 x 196 x 13 cm, Multiflex, bomuld | 9158 |
| | 82 x 196 x 13 cm, Multiflex, inkontinens | 9175 |
| | 82 x 196 x 12 cm, koldskum, bomuld | 9183 |
| | 82 x 196 x 12 cm, koldskum, inkontinens | 9182 |
| | 90 x 196 x 12 cm, koldskum, bomuld | 9190 |
| | 90 x 196 x 12 cm, koldskum, inkontinens | 9191 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------|
| 11 | Madrassforlænger | |
| | 82 x 20 x 13 cm, til Multiflex madras | 9157 |
| | 82 x 20 x 12 cm, til koldskum madras | 9189 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|------|
| 12 | Madrassovertræk | |
| | 82 x 196 x 12 cm, bomuld | 9187 |
| | 82 x 196 x 12 cm, inkontinens | 9188 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 13 | Galge m. indstillelig greb | |
| | til plejeseng, max 75 kg | 4325-1 |
| | til plejeseng, max 90 kg | 4320-1 |
| | til hospitalsseng, forkromet, max 90 kg | 4320-6 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 14 | Fenderhjul | |
| | til beskyttelse af stikkontakter og karme horisontal | 6178 |
| | vertikal | 446200 |

| | | |
|-----------|--|------|
| 15 | Sengevogn | |
| | til opbevaring eller transport af seng | 1050 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 16 | Sengebord m. højdejusterbar bordplade | |
| | højre/venstre-vendt skuffe | 685 |

| | |
|------------------------|------------|
| Forhøjede gavle | 97200376-1 |
|------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Forlængede træsengeheste | 9192 |
|---------------------------------|------|