




Komfort og trykaflastning

Invacare **Vicair Liberty** puderne er velegnet til kørestolsbrugere med lav risiko for at udvikle tryksår. **Vicair Liberty** er opdateret med en selvjusterende ventil, der sikrer den rette pasform, hvilket gør den endnu lettere at anvende. Puderne tilpasses automatisk og kan anvendes til forskellige formål, hvor perfekt form og let trykfordeling ønskes. **Vicair Liberty** puderne er behagelige at anvende, er ca. 40 mm høj og vejer kun 300-400 gram. **Vicair Liberty** er let at flytte fra stol til sæde, og kan tages med i byen ved behov for aflastende og komfortabel siddeflade.



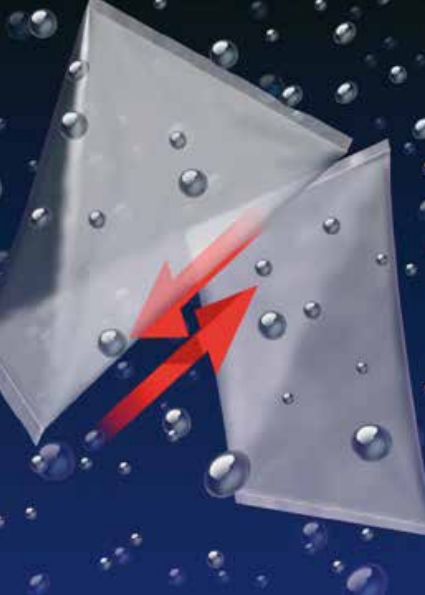

Egenskaber og tilbehør

Vicair teknologi

Invacare **Vicair Liberty** puderne benytter sig af Invacare **Vicair Technology™**. En unik og innovativ metode til støtte af kroppen. Hundredevis af små luftfyldte celler kaldet **SmartCells™**, er lagt i et tyndt lag silikone i et vinylbetræk. Dette gør, at luftcellerne let glider mod hinanden og derved former sig efter kroppens konturer.

Perfekt form og trykfordeling

Vicair Liberty puden indeholder udover silikone og **SmartCells** også luft, der presses ud gennem en ventil, hvorved puden former sig helt efter brugerens konturer.

Vicair Liberty puden anvendes til brugere, der har behov for komfort og ved forebyggelse af tryksår hos brugere i lavrisiko for at udvikle tryksår.



Vicair Liberty TC

Komfortabel og let aflastende 2 kammer pude med udskæring. Velegnet sammen med bade- og toiletstole. Hygiejnisk og enkel i brug.



Vicair Liberty PT

2 kammer pude, der forhindrer tendens til fremadskridning. Det forreste kammer fungerer som en kile, der reducerer shearkræfterne.



Bækkenstabilisator

Bækkenstabilisatoren bruges som et supplement til **Vicair Liberty PT**. Den forhindrer fremadskridning, stabiliserer bækkenet og sørger for aflastning samt en korrekt opret og komfortabel siddestilling. Stabilisatoren fås i 3 standard størrelser, der alle kan tilpasses i dybden.

Tekniske data



Vicair Liberty

400x400, 400x450, 430x430, 450x400, 450x450, 450x500, 500x450, 500x500 mm



0,3 - 0,4 kg



Max. brugervægt: 150 kg



Rengøring af betræk: 60°

Til **Vicair Liberty PT** findes et betræk, der kan vaskes ved 60°. Selve **Vicair Liberty PT** samt **Liberty TC** puden kan afvaskes med mild sæbevand eller med et desinficerende middel. Se vaskevejledning i brugsanvisningen.



Farve



Sort



Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Vicair Liberty - DK - 07/2016



Yes, you can.®