


Mono

Trykaflastende og drejbar skummadras

Mono er en trykreducerende skummadras, der er udviklet med høje krav til kvalitet. Madrassen har en god holdbarhed og er anbefalet til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.

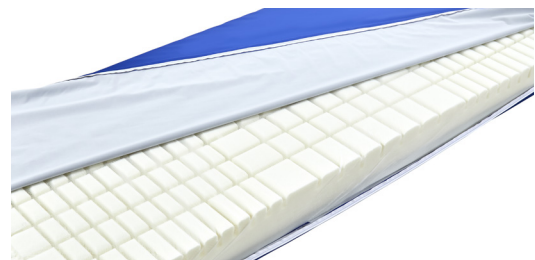

Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære. En Mono skummadras kan være med til at afhjælpe det.

Materiale og opbygning

Mono er udført i højelastisk koldskum og har inkontinensbetræk. Skummet er opskåret på én side med forskellige nedskæringsdybder. Det giver en inddeling i 5 zoner, som aflaster kroppens udsatte steder. Samtidig har madrassen en bred skumkant, som sikrer bedre stabilitet ved mobilisering ind og ud af sengen.

Drejbar for længere levetid

Mono er lavet som en drejbar skummadras (på den ene side), så levetiden kan forlænges yderligere ved brug af et drejeregime. Betræk og madras er tydeligt mærket med bund og top.

Kvalitetsbetræk

Madrassen leveres med et vandtæt og åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket har lynlås på 3 sider, så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let mod hinanden, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

Nem håndtering

Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med solide håndtag. Man kan altid løfte madrassen ud af sengen, uanset hvilken side man står på.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforebyggelse for at høre nærmere om produktet.

Mono

Trykaflastende og drejbar skummadras

Mono er en trykreducerende skummadras, der er udviklet med høje krav til kvalitet. Madrassen har en god holdbarhed og er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.



Opbygning

Mono er udført i højelastisk koldskum, som er opskåret på én side med forskellige nedskæringsdybder. Det inddeler madrassen i 5 zoner, som svarer til kroppens trykpunkter.

Drejbar

Mono er lavet som en drejbar skummadras (på den ene side), så levetiden kan forlænges yderligere ved brug af et drejeregime.

Nem ud-/indstigning

En fast skumkant gør det nemmere at mobilisere sig og komme ud af sengen.

Tekniske data

Mono fås i flere udgaver:

80x200x14 cm

HMI nr.: 54698

Varenr.: 10-007367

83x200x14 cm

HMI nr.: 81664

Varenr.: 10-007745

85x200x14 cm

HMI nr.: 54699

Varenr.: 10-007744

88x200x14 cm

HMI nr.: 114910

Varenr.: 88200MONO

90x200x14 cm

HMI nr.: 54700

Varenr.: 10-009700

100x200x14 cm

HMI-nr.: 79482

Varenr.: 10-010363

105x200x14 cm

HMI nr.: 79483

Varenr.: 10-010429

110x200x14 cm

HMI nr.: 79484

Varenr.: 10-010364

Brugervægt: 0-150 kg

Madrasmvægt: Ca. 10 kg (alt efter størrelse)

Materiale: Brandhæmmende HR PUR-skum med høj elasticitet. 45 kg/m³.

Betræk: PU inkontinensbetræk

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.