



HOVERJACK®

Air Lift

HoverJack® Air Lift

Hvis en patient falder, kan HoverJack air lift rulles ind under Patienten. Derefter kan hver af de 4 kamre løfte patienten i liggende position fra gulv til seng eller bære højde. Dette reducerer antallet af medarbejders behov for at løfte en patient fra gulv. Og samtidig minimere potentielt for yderligere skader på patient og personale. Når HoverJack er oppustet kan HoverMatt med samme Luft forsynings enhed, let overføre en patient til seng eller bære.

4 kammer oppustet



3 kammer oppustet



2 kammer oppustet



1 kammer oppustet



HoverJack® Air Lift fordele:


- Færre medarbejdere skal være med til at løfte patienter efter fald
- Kontrol over højde gennem individuelle kamre
- Selvlukkende ventiller der er meget at brugevenlig
- Hurtig åbning af ventiller til at sænke patienten, hvis der er nødvendigt.
- Teflon® bunden gør det nemt at transportere på tværs af alle overflader.
- HoverJack har en vægt grænse på 862 kg.



HOVERJACK®

Air Lift

HoverJack® Air Patient Lift

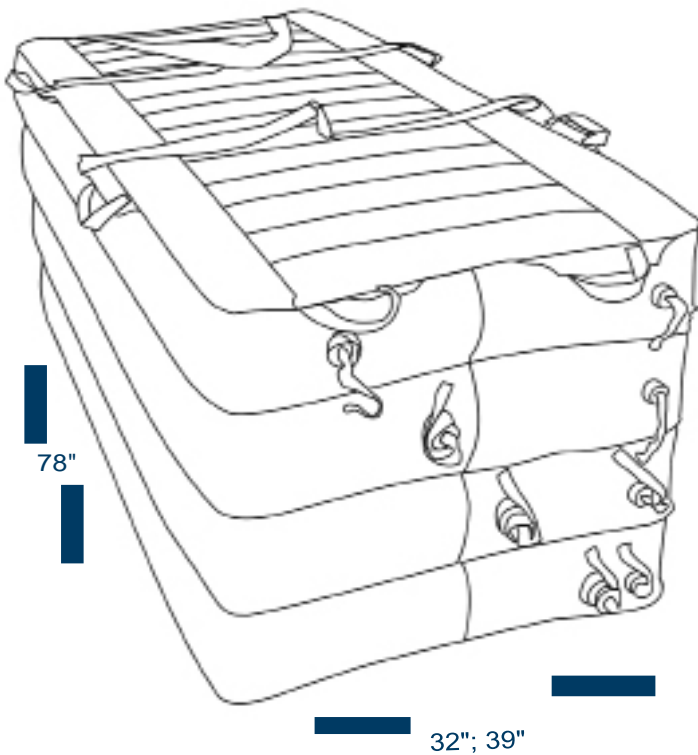

Produkt specifikation

Vare nr. FRT32EV HMI Nr. 72277

Konstruktion

Topside Material: Nylon Oxford

Underside Material:

Teflon® imprægneret polyester

Latex fri

Dimension

Fås i 2 størrelser:

• 32" B x 78" L – HJ3202

(800 watt motor anbefaldes til
air forsyning enhed)

• 39" B x 78" L – HJ3902

(1100 watt motor anbefaldes til
air luftforsyning enhed)

Inflationen

• 4 oppustings kamre med
selv-lukknings ventiler

• 4 udluftnings ventiler
(rød cover)

FAABORG REHAB TECHNIC

+ 45 70 20 55 53

www.faaborg-rehab.dk



HOVERTECH
International