


Support serien



Positioneringssele

- Få den rette støtte, til at bibeholde den rette stilling

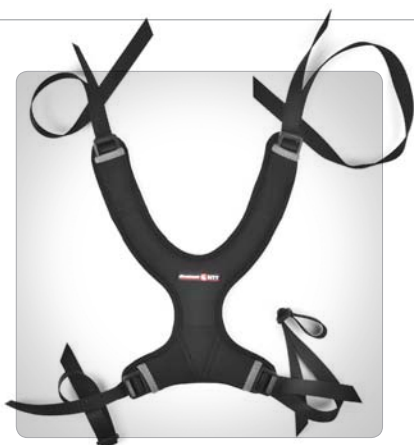

Support serien

Vi har nu udviklet og forbedret vores Support positioneringsbælte-serie i 19 år, hvilket har givet os stor erfaring om positioneringsproblematikker. Vi er stolte af at kunne præsentere Support Pro serien. Disse nye seler og bæltter har et stærkere materiale, flere funktioner og en mængde forskellige spænder at vælge imellem.



Vaskbart ved 60°

Samtlige seler og bæltter kan vaskes ved 60°.
Samtlige materialer er vand- og smudsafvisende og enkle at tørre af.



Fleksibel afprøvningspakke

Fleksibel afprøvningspakke som indeholder samtlige seler og bæltter. Pakken forenkler afprøvningen. Hænges enkelt op på f.eks. en dør.

Samtlige spænder, bånd og triglidespænder følger med afprøvningspakkerne.



Ankelbæspænding

Ankelbæspændingen giver en stabil støtte og holder fødderne på fodpladerne. Ankelbæspændingen monteres på forskellige fodstøtter ved at skrue fæstestropperne i fodpladen.

Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft og med to forskellige fastgørelsesmuligheder rundt om anklen. En med velcro og en med spænde.



Armbind

Armbind monteres diagonalt og benyttes for at afhjælpe ufrivillige bevægelser samt for at hindre overstrækning af de pågældende led.


Tilbydes i Support Eksklusiv & Soft.



Håndmanchet

Et hjælpemiddel for de brugere, som har besvær med at fikseren hånden/hænderne på styret/kørehåndtaget.

Tilbydes i Support Eksklusiv.

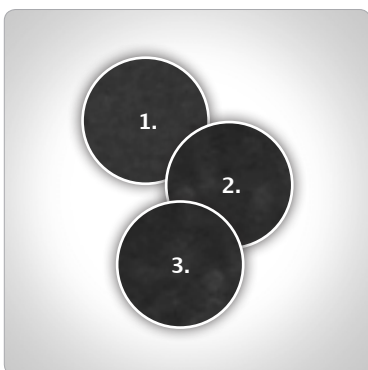

Forskellige materialevalg

1. **Eksklusiv** har et skind look med gode aftørringsegenskaber.
2. **Soft** er et neoprenlignende materiale med stretch.
3. **Soft Pro** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber, hvor spænderne er i indsyede lommer.

At vælge den rigtige sele

1 Vælg rette type sele

2 Vælg rette størrelse

3 Vælg rette materiale

4 Monter selen korrekt

At vælge rette type sele

Vi har tre forskellige typer af seler; sternumstøtte, sternumvest og h-sele. Sternumstøtten og sternumvesten giver en koncentreret støtte over sternum. H-selen giver støtte til både skulderparti og krop. Den bruges ved rotation og til brugere med fremadfald. Passer også godt til borgere, som bruger sonde.




Sternumstøtte når man behøver

- Koncentreret støtte over sternum
- Modvirkning af fremadfald



Sternumvest når man behøver

- Koncentreret støtte over sternum
- Modvirkning af fremadfald

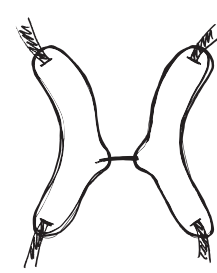

H-sele når man behøver

- Effektivt modvirkning af rotation
- Passer godt til borgere, som bruger sonde

1 Vælg rette type af sele

2 Vælg rette størrelse

3 Vælg rette materiale


4 Montere selen rigtigt

Att vælge rette størrelse

Det som adskiller de forskellige seler er deres funktion, selestørrelse og seleformer. For at vælge rette størrelse til respektive bruger, måler man fra skulder til skulder. Disse mål er skitseret efter en almen bruger.

Hvilken størrelse skal jeg have?

Skulderbredde på 20–25 cm vælger du størrelse XS
Skulderbredde på 25–30 cm vælger du størrelse S
Skulderbredde på 30–35 cm vælger du størrelse M
Skulderbredde på 35–45 cm vælger du størrelse L

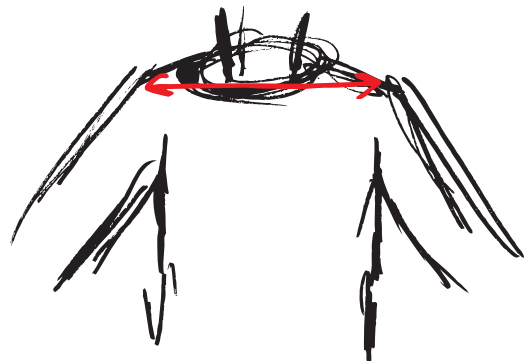

Mål fra skulder til skulder, for at nå frem til den totale skulderbredde.

1 Vælg den rigtige sele

2 Vælg rette størrelse

3 Vælg rette materiale

4 Monter selen korrekt

Vi har tre forskellige materialer at vælge imellem.

- **Exklusiv** har et skind look med gode aftørringsegenskaber.
- **Soft** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber.
- **Soft Pro** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber, hvor spænderne er i indsyede lommer.

 **Exklusiv**

 **Soft**

 **Soft Pro**

4


At montere selen korrekt

- Monter selens nedre fæstepunkter ved hjælp af triglidespænder på kørestolens nedre rygrør.
- Monter selens øvre fæstepunkter ved hjælp af klappspænderne.


Trækretning

Trækretningen for de øvre fæstepunkter bør være over skulderpartiet, for at forhindre at skuldrene trækkes nedad.

Ved behov tilbydes forskellige forhøjningsstænger.

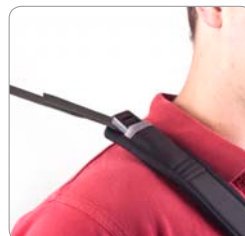

Korrekt trækretning

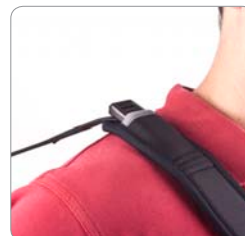

Forkert trækretning

FMK (Fæste mellem kørehåndtag)

Fæste mellem kørehåndtag (vare nr. 7022) er en universal monteringsenhed for at muliggøre montering af sele og hovedstøtte. Monteres rundt om kørestolens skubbehåndtag/rygrør. Fæste til hovedstøtte indgår, som en del af produktet.

Endvidere vælges forhøjningsstænger.

Anvendes for at få den korrekte trækretning for positioneringsstøtten.



FMK vare nr. 7022

At vælge det rigtige hoftebælte/sittbelt

1 Vælg rette størrelse

2 Vælg den rigtige bæltetype

3 Vælg rette bæltepude materiale


4 Vælg det rigtige spænde

At vælge rette størrelse

Vi har fire forskellige størrelser på vores Sittbelt. Det som adskiller vore bæltter er båndbredde, bæltepudestørrelse og båndlængde. For at vælge korrekt størrelse til respektive brugere, måler du fra hoftekam til hoftekam.

Se tabel nedenfor.

- **Sittbelt størrelse XS** består af et 25 mm bredt bånd og to bæltepuder, på hver på 12 cm.
- **Sittbelt størrelse S** består af et 25 mm bredt bånd, og en pudelængde på 15 cm.
- **Sittbelt størrelse M** består af et 25 mm bredt bånd og en pudelængde på 19 cm.
- **Sittbelt størrelse L** består af et 40 mm bredt bånd og en pudelængde på 22 cm.

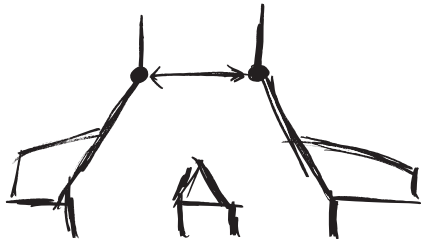

Mål hoftekammen

Mål mellem 15–25 cm, vælger du *Sittbelt størrelse XS*

Mål mellem 25–32 cm, vælger du *Sittbelt størrelse S*

Mål mellem 32–37 cm, vælger du *Sittbelt størrelse M*

Mål mellem 35–45 cm, vælger du *Sittbelt størrelse L*

1 Vælg rette størrelse

2 Vælg den rigtige bæltetype

3 Vælg rette bæltepude materiale

4 Vælg det rigtige spænde

To eller fire fastgørelsespunkter?


Vi har to forskellige modeller af Sittbelt, 2-punktsbælte og 4-punktsbælte (Y-sele). Det som adskiller bæltterne er antallet af fastgørelsespunkter på hver side. 2-punktsbæltet er med til at støtte og modvirke fremadskridning. 4-punktsbæltet passer til alle typer brugere og bruges til optimal positionering af bækkenet og støtter og stabiliserer bækkenets stilling.



2-punktsbælte
Et fastgørelsespunkt på hver side.



4-punktsbælte
2 fastgørelsespunkter på hver side.

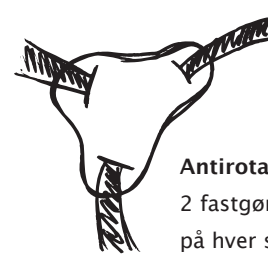

Antirotationsbælte
2 fastgørelsespunkter på hver side.

1 Vælg den rigtige størrelse

2 Vælg det rette bælte

3 Vælg det rette bæltepude materiale

4 Vælg det rette spænde

Vi har tre forskellige varianter at vælge imellem, når det kommer til bæltepuder.

- **Exklusiv** har et skind look med gode aftørringsegenskaber.
- **Soft** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber.
- **Soft Pro** er et neoprenlignende materiale med stretchegenskaber og puderne er mere konturformet.



Exklusiv



Soft




Soft Pro

1 Vælg den rigtige størrelse

2 Vælg det rette bælte

3 Vælg det rette bæltepude materiale


4 Vælg det rette spænde

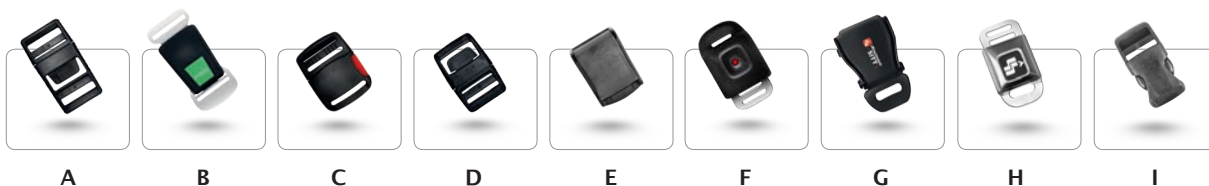


- A. **Spænde 742** Dobbeltræk (meget populær)
B. **Autospænde** Kraftigt spænde i metal
C. **Spænde S40** Stærkere end S742, knap på siden
D. **Spænde 740** Fixlås
E. **Spænde 340** Kraftigt spænde

- F. **Sikkerhedsspænde** Forhindrer uønsket åbning tilbydes til autospænde & chromline
G. **Flyspænde** Kraftig konstruktion
H. **Chromeline** Fleksibelt spænde i metal
I. **DWSR** Dobbeltræk

At montere bæltet korrekt

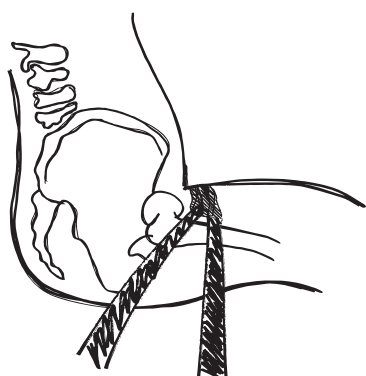


Korrekt trækretning

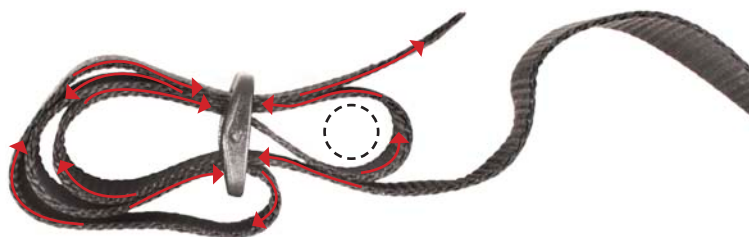

Fastgøres ved at trække båndene gennem medfølgende Triglidespænde og fastgøres om sæderøret

Tekniske data på **Support serien**

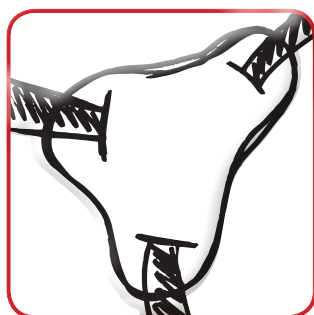

På de følgende sider finder du tekniske data på de enkelte Support produkter.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du altid meget velkommen til at ringe til os på telefon nr.:

86 17 01 74



- Få balance i kroppen
- Get balance in your body



Tekniske data på seler

	Vare nr.	Varenavn	Materiale	Skulderbredde
1	3751	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Eksklusiv str. XS	Skind look med gode aftørringsegenskaber	20-25 cm
	3752	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Eksklusiv str. S	Skind look med gode aftørringsegenskaber	25-30 cm
	3753	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Eksklusiv str. M	Skind look med gode aftørringsegenskaber	30-35 cm
	3754	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Eksklusiv str. L	Skind look med gode aftørringsegenskaber	35-45 cm
2	3756	<input type="checkbox"/> Sternumvest Eksklusiv str. XS	Skind look med gode aftørringsegenskaber	20-25 cm
	3757	<input type="checkbox"/> Sternumvest Eksklusiv str. S	Skind look med gode aftørringsegenskaber	25-30 cm
	3758	<input type="checkbox"/> Sternumvest Eksklusiv str. M	Skind look med gode aftørringsegenskaber	30-35 cm
	3759	<input type="checkbox"/> Sternumvest Eksklusiv str. L	Skind look med gode aftørringsegenskaber	35-45 cm
3	374001	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Soft Pro str. XS	Et neoprenlignende materiale med stretch	20-25 cm
	374002	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Soft Pro str. S	Et neoprenlignende materiale med stretch	25-30 cm
	374003	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Soft Pro str. M	Et neoprenlignende materiale med stretch	30-35 cm
	374004	<input type="checkbox"/> Sternumstøtte Soft Pro str. L	Et neoprenlignende materiale med stretch	35-45 cm
4	37561	<input type="checkbox"/> Sternumvest Soft str. XS	Et neoprenlignende materiale med stretch	20-25 cm
	37571	<input type="checkbox"/> Sternumvest Soft str. S	Et neoprenlignende materiale med stretch	25-30 cm
	37581	<input type="checkbox"/> Sternumvest Soft str. M	Et neoprenlignende materiale med stretch	30-35 cm
	37591	<input type="checkbox"/> Sternumvest Soft str. L	Et neoprenlignende materiale med stretch	35-45 cm
5	3783	<input type="checkbox"/> H-sele Eksklusiv str. XS	Skind look med gode aftørringsegenskaber	20-25 cm
	3784	<input type="checkbox"/> H-sele Eksklusiv str. S	Skind look med gode aftørringsegenskaber	25-30 cm
	3785	<input type="checkbox"/> H-sele Eksklusiv str. M	Skind look med gode aftørringsegenskaber	30-35 cm
	3786	<input type="checkbox"/> H-sele Eksklusiv str. L	Skind look med gode aftørringsegenskaber	35-45 cm
6	374015	<input type="checkbox"/> H-sele Soft Pro str. XS	Et neoprenlignende materiale med stretch	20-25 cm
	374016	<input type="checkbox"/> H-sele Soft Pro str. S	Et neoprenlignende materiale med stretch	25-30 cm
	374017	<input type="checkbox"/> H-sele Soft Pro str. M	Et neoprenlignende materiale med stretch	30-35 cm
	374018	<input type="checkbox"/> H-sele Soft Pro str. L	Et neoprenlignende materiale med stretch	35-45 cm

Vores forskellige modeller



Tekniske data på hoftebælter



Antirotationsbælte

Vare nr.	Varenavn	Spænde	Bæltepude længde	Trækning	Hoftekam mål
374060	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. XS	DWSR25	150 mm	Dobbeltræk	15-25 cm
374065	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. XS	Chromeline	150 mm	Dobbeltræk	15-25 cm
374061	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. S	DWSR25	175 mm	Dobbeltræk	25-32 cm
374066	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. S	Chromeline	175 mm	Dobbeltræk	25-32 cm
374063	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. M	DWSR40	195 mm	Dobbeltræk	30-37 cm
374067	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. M	Auto	195 mm	Dobbeltræk	30-37 cm
374064	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. L	DWSR40	215 mm	Dobbeltræk	35-45 cm
374068	<input type="checkbox"/> Antirotationsbælte str. L	Auto	215 mm	Dobbeltræk	35-45 cm



Sittbælt Eksklusiv

Vare nr.	Varenavn	Spænde	Bæltepude længde	Trækning	Hoftekam mål
3791	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv str. L	Spænde 742	220 mm	Ingen	35-45 cm
3792	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv str. L	Autospænde	220 mm	Ingen	35-45 cm
3793	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv str. L	Spænde S40	220 mm	Ingen	35-45 cm
3794	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv str. S	Spænde 725	150 mm	Ingen	25-32 cm



Sittbælt Eksklusiv SLL

Vare nr.	Varenavn	Spænde	Bæltepude længde	Trækning	Hoftekam mål
379120	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv SLL str. S	DWSR25	150 mm	Ingen	25-32 cm
379121	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv SLL str. M	DWSR40	195 mm	Ingen	30-37 cm
379122	<input type="checkbox"/> Sittbælt Eksklusiv SLL str. L	DWSR40	220 mm	Ingen	35-45 cm

Tekniske data på hoftebælder





Sittbelt Soft Pro

Vare nr.	Varenavn	Spænde	Bæltepude længde	Trækning	Hoftekam mål
374030	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L	 Spænde 742	220 mm	Dobbeltræk	35-45 cm
374031	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L	 Spænde 740	220 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374032	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L	 Spænde S40	220 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374033	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L	 Flyspænde	220 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374034	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L	 Autospænde	220 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374035	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. L*	 Spænde 340	300 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374041	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. M	 Spænde 725	190 mm	Enkeltræk	32-37 cm
374042	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. M	 Chromeline	190 mm	Enkeltræk	32-37 cm
374045	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. S	 Spænde 725	150 mm	Enkeltræk	25-32 cm
374056	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. S	 Chromeline	150 mm	Enkeltræk	25-32 cm
374049	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. XS	 Spænde 725	125 mm	Enkeltræk	15-25 cm
374055	<input type="checkbox"/> Sittbelt Soft Pro str. XS	 Chromeline	125 mm	Enkeltræk	15-25 cm

* Forstærket med triglidespænder i stål



Sittbelt Comfort Soft Pro- 2 punkts bælte

Vare nr.	Varenavn	Spænde	Bæltepude længde	Trækning	Hoftekam mål
374050	<input type="checkbox"/> Comfort Soft Pro str. L	 Spænde 742	220 mm	Enkeltræk	35-45 cm
374051	<input type="checkbox"/> Comfort Soft Pro str. S	 Spænde 725	150 mm	Enkeltræk	25-32 cm

Spænder



TG 15

Vare nr. 211215
Båndbredde 15 mm



TG 20

Vare nr. 211220
Båndbredde 20 mm



TG 25

Vare nr. 211025
Båndbredde 25 mm



TG 40

Vare nr. 211040
Båndbredde 40 mm



Autospænde

Vare nr. 211101
Båndbredde 40 mm




Sikkerhedskåbe

Vare nr. 211109
Passer autospænde




Chromline

Vare nr. 211107
Båndbredde 25 mm

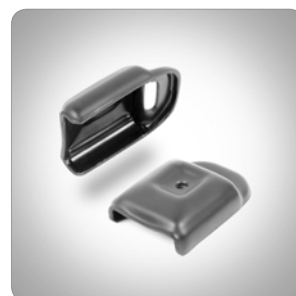

Sikkerhedskåbe

Vare nr. 211108
Passer chromline

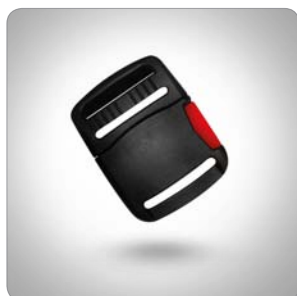

Spænde S40

Vare nr. 211140
Båndbredde 40 mm



Flyspænde

Vare nr. 211106
Båndbredde 40 mm



Spænde 720

Vare nr. 211720
Båndbredde 20 mm



Spænde 725

Vare nr. 211725
Båndbredde 25 mm



Spænde 740

Vare nr. 211740
Båndbredde 40 mm



Spænde 742

Vare nr. 211742
Båndbredde 40 mm



ESR 20

Vare nr. 211104
Båndbredde 20 mm



ESR 25

Vare nr. 211105
Båndbredde 25 mm

Spænder



Spænde 320

Vare nr. 211320
Båndbredde 20 mm




Spænde 325

Vare nr. 211325
Båndbredde 25 mm



Spænde 340

Vare nr. 211340
Båndbredde 40 mm

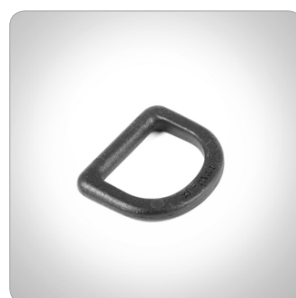

D-ring

Vare nr. 211105
Båndbredde 25 mm



Uniloop 25

Vare nr. 211000
Båndbredde 25 mm



Uniloop 40

Vare nr. 211001
Båndbredde 40 mm



Shocklock II

Vare nr. 211103
Båndbredde 15 mm

Tekniske data på Ankelbæspænding, Håndmanchet, Armbind mv.

Vare nr.	Varenavn	Material	Rundt om anklen
3771	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding, velcro str. S (sæt)	Exklusiv	14-17 cm
3772	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding, velcro str. M (sæt)	Exklusiv	17-20 cm
3773	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding, velcro str. L (sæt)	Exklusiv	20-25 cm
<i>Rundt om anklen</i>			
37711	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding, velcro str. S (sæt)	Soft	14-17 cm
37721	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding velcro str. M (sæt)	Soft	17-20 cm
37731	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding, velcro str. L (sæt)	Soft	20-25 cm
<i>Rundt om anklen</i>			
374070	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding Pro, spænde str. S (sæt)	Soft Pro	14-17 cm
374071	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding Pro, spænde str. M (sæt)	Soft Pro	17-20 cm
374072	<input type="checkbox"/> Ankelbæspænding Pro, spænde str. L (sæt)	Soft Pro	20-25 cm
<i>Håndlængde</i>			
3775	<input type="checkbox"/> Håndmanchet str. S	Exklusiv	0-10 cm
3776	<input type="checkbox"/> Håndmanchet str. M	Exklusiv	10-15 cm
3777	<input type="checkbox"/> Håndmanchet str. L	Exklusiv	16-22 cm
<i>Bæltepude</i>			
3781	<input type="checkbox"/> Armbind str. L	Exklusiv	5x20 cm
3782	<input type="checkbox"/> Armbind str. S	Exklusiv	5x16 cm
37811	<input type="checkbox"/> Armbind str. L	Soft	5x20 cm
37821	<input type="checkbox"/> Armbind str. S	Soft	5x16 cm



Forskellige materialevalg

- **Exklusiv** har et skind look med gode aftørringsegenskaber.
- **Soft** er et neoprenlignende materiale med stretch.
- **Soft Pro** er også et neoprenlignende materiale med stretch.


Til montering af seler med Rygpolstring/Stroproyg

Vare nr.	Varenavn	Anvendes ved
7022	<input type="checkbox"/> FMK (fæste mellem kørehåndtag)	Rygpolstring/stroproyg



Til montering af vore seler skal følgende varer bruges

Vare nr.	Varenavn
3715	<input type="checkbox"/> Forhøjningsstang – Fast ryg, 25 mm bånd (til Sternumstøtte, Sternumvest og H-sele)
3719	<input type="checkbox"/> Forhøjningsstang – FMK (vare nr. 7022), 25 mm (til Sternumstøtte, Sternumvest og H-sele)
371901	<input type="checkbox"/> Forhøjningsstang justerbar, 25mm bånd (til justeringsmulighed)
371902	<input type="checkbox"/> Forhøjningsstang justerbar, 40mm bånd (til justeringsmulighed)
152238	<input type="checkbox"/> Øvre monteringsbeslag, lang (til montering på Delfi Pro / Sharky)
283038	<input type="checkbox"/> Øvre monteringsbeslag, kort (til montering på Delfi Pro / Sharky)

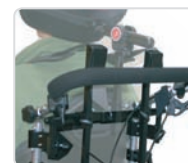

Reservedele til bæltter

Vare nr.	Varenavn	Materiale
3795	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. S (til 25 mm bånd)	Ekklusiv
3796	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. L (til 40 mm bånd)	Ekklusiv
376213	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. XS (til 25 mm bånd)	Soft Pro
376214	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. S (til 25 mm bånd)	Soft Pro
376215	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. M (til 25 mm bånd)	Soft Pro
376216	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt str. L (til 40 mm bånd)	Soft Pro
376217	<input type="checkbox"/> Bæltepude til Sittbelt forstærket (til 40 mm bånd)	Soft Pro
37951	<input type="checkbox"/> Bæltepude til SittBelt str. S (til 25mm bånd)	Soft
37961	<input type="checkbox"/> Bæltepude til SittBelt str. L (til 40 mm bånd)	Soft



Anatomic SITT A/S

Viengevej 4

8240 Risskov

Telefon +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk

Web www.anatomicsitt.com