


# DORMILET

TRYKAFLASTNING TIL SENDELIGGENDE

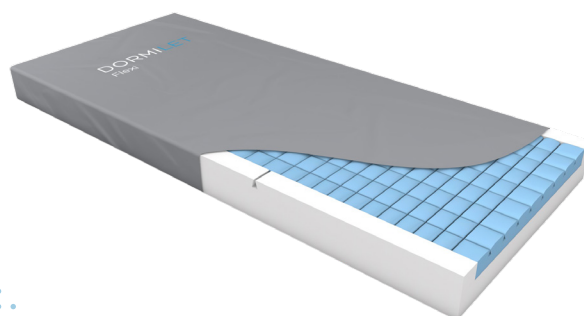

OVERSKUD TIL OMSORG

  
VENDLET

# DORMILET


## Flexi

**DORMILET Flexi** er næste generation i skummadrasser. Det er en madras, der er designet til at virke optimalt sammen med en sengs profilerende funktioner. Dette kombineret med unikke designbeskyttede udskæringer af skummet, giver stor komfort for den sengeliggende kombineret med gode trykaflastende egenskaber.

## UNIK KONSTRUKTION

DORMILET Flexi består af 2 forskellige skum typer. Madrassens bund og sidekonstruktion er lavet i en fast skum. Denne skumramme har specielt udviklede udskæringer, som betyder, at madrassen følger sengen, når f.eks. ryg- og benstøtten hæves.

Inden i skumrammen findes en blødere skum, som ligeledes har en unik udskæring. Denne udskæring giver skummet usædvanlig stor tilpasningsevne til kroppens kurvaturer, hvilket giver stor trykfordeling og komfort.

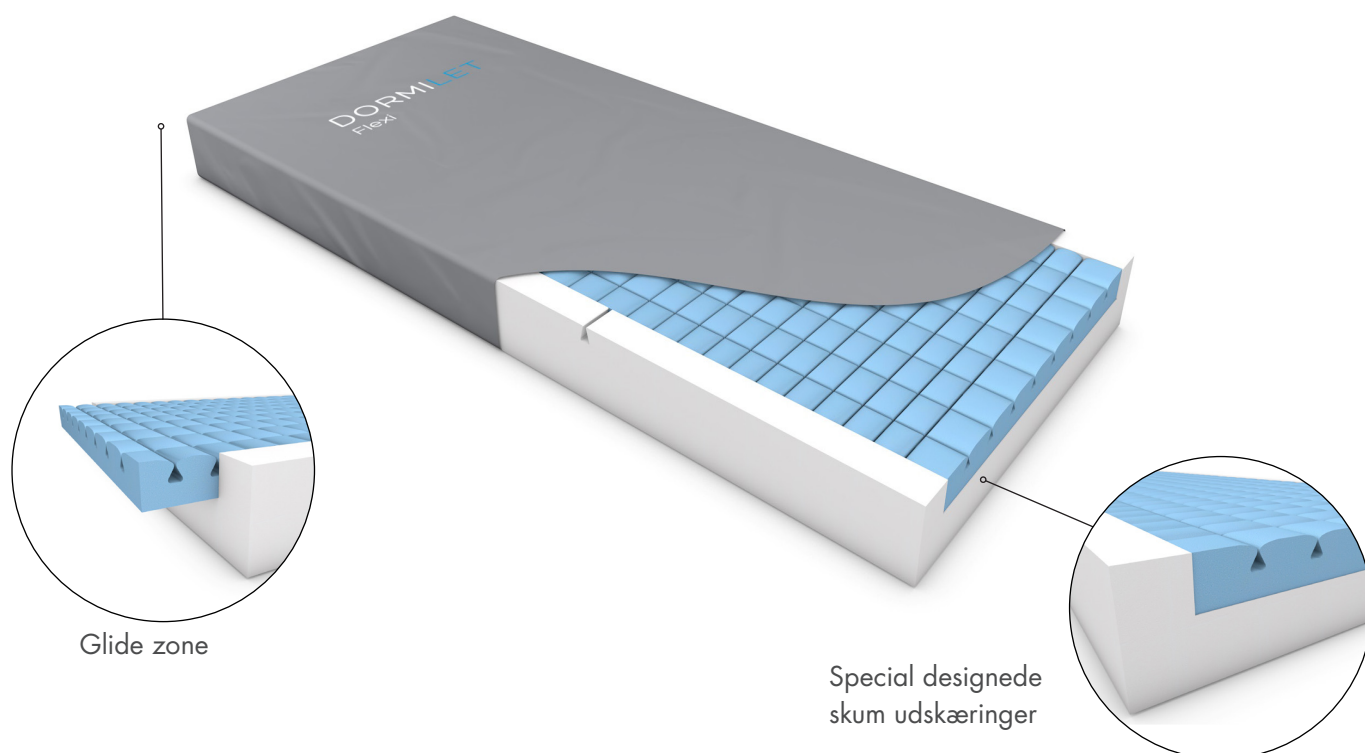

## MIDDEL RISIKO

### Kategori 1-2

## GLIDE ZONE

DORMILET Flexi har en helt speciel glide zone. Glide zonen ligger under hele overkroppen og er designet til at fjerne shear og friktion mellem den sengeliggende og madrassen, når rygstøtten hæves – f.eks. når der ønskes at lave en siddende stilling i sengen.

Konstruktionen betyder, at den friktion og shear, der normalt er mellem den sengeliggende og madrassen nu flyttes ind i selve madrassen mellem de 2 forskellige skumtyper. Dette mindsker ikke kun shear og friktion under ryggen, men trykket under bækkenet mindskes også betydeligt.

## STABILITET OG KOMFORT

Der er anvendt CMHR skum i bedste kvalitet, hvilket i kombination med de specielle udskæringer og den unikke glide zone giver en særdeles god komfort for den sengeliggende.

Samtidig sikrer den stabile skumramme komfortable og lette forflytninger, hvor brugeren føler sig tryk og stabil – selv når brugeren sidder på kanten af madrassen.

## MÅLGRUPPE

Målgruppen er den aktive / moderat aktive sengeliggende borger, som har op til middel risiko for udvikling af tryksår eller som allerede har udviklet sår op til og med kategori 2. Maksimal bruger vægt er 160 kg.


## GARANTI

Der ydes 2 års garanti på betræk og skum.

Varenr.	Navn	Størrelse	HMI-nr.	Pris
5200000	Flexi 80	200 x 80 x 14	101748	2.475,-
5200001	Flexi 85	200 x 85 x 14	89674	2.475,-
5200003	Flexi 88	200 x 88 x 14	101749	2.475,-

Alle priser er ex. moms

Mulighed for specialproduktion af madrasser i andre bredder.  
Forlængerstykker af 10, 15 eller 20 cm's bredde kan tilkøbes.

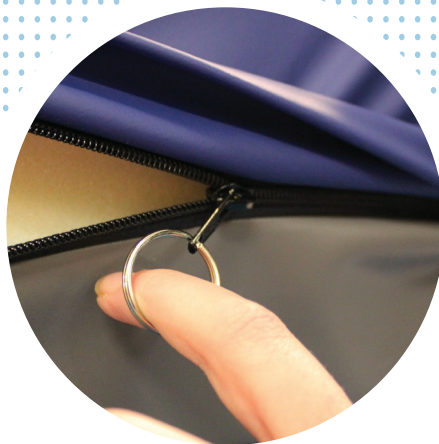

## BETRÆK OG BUND

Betrækket på DORMILET Flexi madrassen er strækbart i flere retninger således, at skumprofilerne kan arbejde optimalt.

Betrækket er endvidere åndbart og anti-bakterielt behandlet.

Samlingerne er svejset og lynlåsen er beskyttet med afdækninger, hvilket sikrer maksimal beskyttelse af madrassens skumkerne. Alle samlinger er udført, så de opfylder de strengeste krav til infektionskontrol.

Der er håndtag monteret på DORMILET Flexi madrassen.

## BRANDTEST

DORMILET Flexi madrassen er brandtestet hos en uafhængig instans.

Madrassen har gennemgået:

- BS EN 597-1 (cigaret test)
- BS EN 597-2 (tændstiktest)
- BS 6807 (crib 5)

## FORLÆNGERSTYKKE

Til DORMILET Flexi madrassen fås forlængerstykker i tre længder.

## RENGØRING

Betrækket på DORMILET Flexi madrassen kan aftørres med varmt vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel.

Betrækket kan også aftørres med en 0,1 % hypochloritopløsning (1.000 ppm).

Ved kraftig tilsmudsning skal madrassetrækket først rengøres med rengøringsmiddel og vand, derefter med en 1 % hypochloritopløsning (10.000 ppm).

Betrækket kan også tages af skumkernen og maskinvaskes. Betrækket må vaskes ved max. 90° C.

Betrækket skal lufttørre indendørs i rene omgivelser eller i tørretumbler ved lav temperatur (max. 40° C).

