


LIGGER DU VANDRET?

- Stopper sædetilt i en valgt vinkel

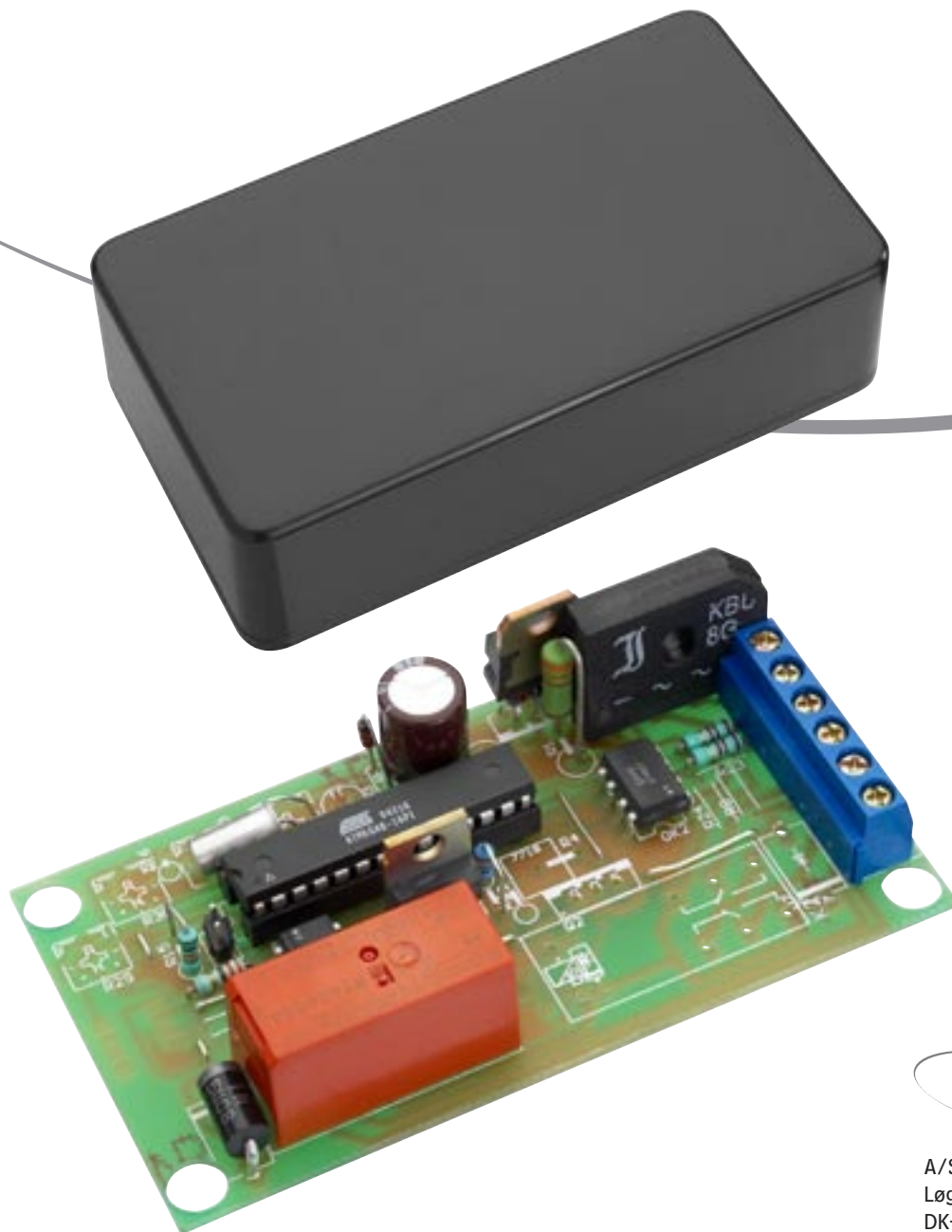

A/S Aabentoft
Løgtenevej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Tilt controller – TC1

Input: 24VDC
Output: 24VDC, max 10A

Dimensioner: (H x B x D) 29 x 100 x 55mm - sort plast boks.
Elektrisk tilslutning: Skrueterminal

Ledning med MTA konektor sælges som tilbehør – MTA15.

TC1 indsættes serielt med aktuatoren til sædetilt. Modulet sørger for at stoppe aktuatoren, når sædet befinder sig i eksempelvis vandret position. Dette sker dog kun, når tiltet er på vej fremover. For at fortsætte det fremadgående tilt er det nødvendigt at midterstille joysticket og derefter igen at aktivere joysticket fremad. Printet indeholder en funktion der gør det muligt at forhindre, at tiltet bevæger sig længere fremover end vandret. Modulet kan leveres med op til 4 sensorer, hvis det ønskes at tiltet skal stoppe i flere vinkler.

Varenr.: TC1