

STELLA CARE

FRIHED TIL AT GLEMME

Frihed til mennesker med demens

Ingen må forsvinde sporløst. Vores GPS trackere sikrer et frit og trygt liv.



Vinder af innovationspriser • Allerede valgt af over 50 kommuner • Rost af pårørende

GPS trackere

Vi arbejder hele tiden på nye GPS trackere til vores sortiment, og det er vigtigt for os, at det er værdigt for mennesket med demens at gå med vores GPS trackere. GPS trackerne fås i forskellige udformninger, eksempelvis som et armbåndsur, skosål eller som en lille boks. Alle vores GPS trackere er vandtætte.



Vores GPS trackere – produktoversigt



①

Smart

Stor præcision, flot design og ny teknologi



②

Navigator

Sikkerhed, lang batteritid og flot design



Læs mere om GPS trackerne på stellacare.dk



③

Step

Yderst diskret GPS tracker



④

MiniBox

Stor præcision og sikkerhed



⑤

Basic

Lang batteritid og prisbillig

Se det fulde skema på stellacare.dk/priser

Sammenligning af GPS trackere	Smart ①	Navigator ②	Step ③	MiniBox ④	Basic ⑤
Tid mellem nye positioner (ved spring)	15 sek.	2 min.	15 sek.	15 sek.	2 min.
Nøjagtighed	10 meter	50 meter	10 meter	10 meter	25 meter
Batteritid (minimum)	24 timer	30 timer	24 timer	24 timer	48 timer
Lejpriser (ekskl. moms)	Smart	Navigator	Step	MiniBox	Basic
Leje pr. måned (inkl. abonnement)	549,-	549,-	449,-	449,-	349,-
Salgspriser (ekskl. moms)	Smart	Navigator	Step	MiniBox	Basic
Køb (ekskl. abonnement)	2.995,-	2.995,-	2.995,-	2.995,-	1.995,-
Abonnement pr. måned ved køb	399,-	399,-	299,-	299,-	189,-

Hvorfor vælge Stella Care?

De bedste produkter

Vi udvikler selv vores produkters software. Det betyder, at vi altid er foran i udviklingen af vores produkter.

Kundesupport i verdensklasse

Vi tilbyder personlig kundesupport 24 timer i døgnet. Derfor kan du altid ringe til os for at få hjælp.

Sikkert og brugervenligt system

Vi har udviklet vores system i samarbejde med brugerne. Derfor er vores system intuitivt, sikkert og nemt.

Produkter til alle

Vi tilbyder en variation af produkter. Dette gør vi for at imødekomme vores kvindelige og mandlige brugeres individuelle behov.



Hvordan fungerer produktet?

Produktet består af to dele. En GPS tracker og en app.


GPS tracker og Stella Care app

GPS trackeren bæres af personen med demens. Den tilhørende app bruges af plejepersonale eller pårørende, til at se informationer om GPS trackeren.

Hvis en person ikke er vendt hjem, trykker du "find GPS" på app'en for at se personens position. Positionen bliver vist på et kort, der automatisk opdateres.

App'en kan også give dig andre informationer, fx om GPS trackeren er online eller offline, GPS trackernes batteristatus eller om GPS'erne er uden for geo-fence (et virtuelt hegn).

Du kan sætte flere telefoner til samme GPS tracker. Og flere GPS trackere til samme telefon.

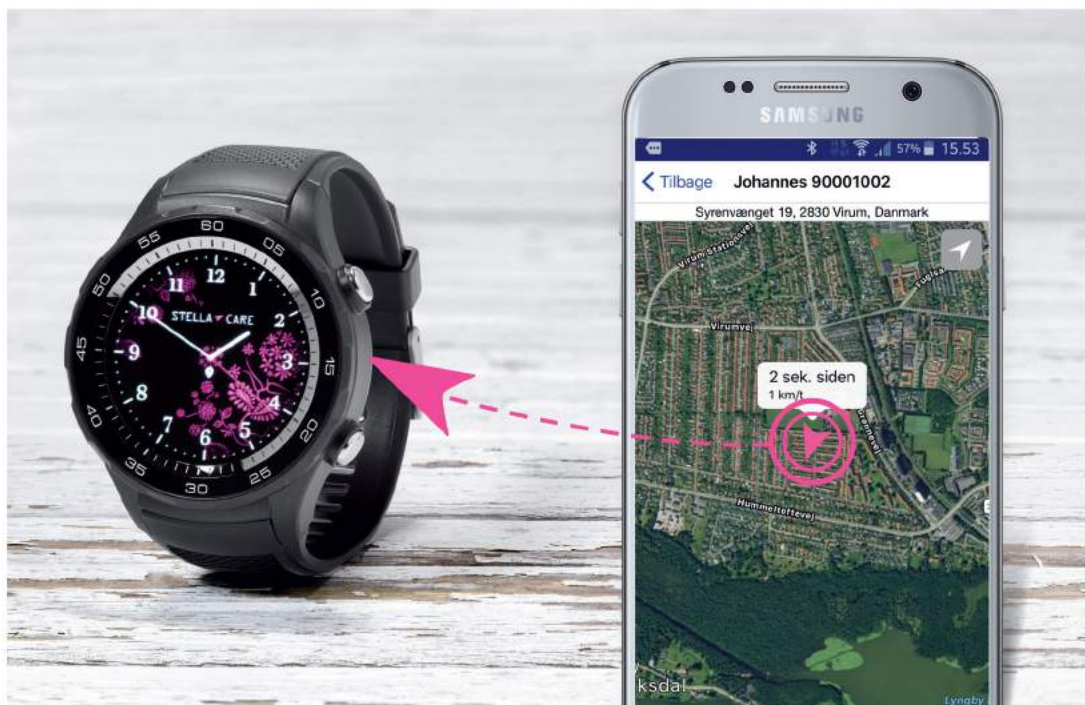

Værd at vide om GPS trackere

Her er en oversigt over, hvad du skal være opmærksom på, og som gør det lettere, når du skal vælge GPS leverandør.

Emne/fordel	Det skal du være opmærksom på
Livskvalitet og trafikikkerhed:	Det giver livskvalitet, at kunne få lov at færdes frit. Det kræver naturligvis at borgeren ser sig for i trafikken, så han/hun ikke er til fare for sig selv og andre.
Mulighed for at færdes frit:	Borgeren kan gå selv, men kan jo også tage med bussen og lignende. Vær derfor opmærksom på hvor langt borgeren kommer væk, hvis han/hun skal mødes og have hjælp til at komme hjem igen. Der kan laves et geo-fence (et elektronisk område, hvor borgeren må færdes). Kommer han/hun uden for dette område, giver app'en på mobiltelefonen en alarm. Vær opmærksom på om systemet (leverandøren) tilbyder denne service.
Tryghed for personale og pårørende:	Det giver tryghed altid at vide, hvor ens kære befinder sig. Hvis borgeren ikke selv kan finde tilbage, skal det være aftalt, hvem der kan møde ham/hende og følge ham/hende tilbage.
Opladning:	En GPS enhed skal lades op med jævne mellemrum. Få indarbejdet en rutine så der altid er strøm på GPS enheden. Det kan eksempelvis være at oplade GPS enheden hver nat.
Sporing:	Der er forskel på hvor ofte GPS enhederne sender deres position. Nogle sender deres position flere gange hvert minut, andre har et opdateringsinterval på 10 minutter eller mere. 10 minutter er lang tid at vente på en ny position, hvis man er ude at lede efter en savnet person.
Brugervenlighed:	Når en borger savnes, kan situationen let blive stresset. Derfor er det vigtigt, at GPS sporingen er nem og intuitiv. Brugervenlighed er et vigtigt parameter, når du vælger GPS sporingssystem.

Vi har mange glade kunder, og over 50 kommuner har allerede vores produkter. Se en oversigt på et kort over alle kommunerne på stellacare.dk/kort

Emne/fordel	Det skal du være opmærksom på
App vs. PC sporing:	Vær opmærksom på om du kan få en nem og intuitiv app til din telefon, hvorfra du kan spore borgeren. Nogle GPS enheder skal man spore ved at logge ind på en PC. Men du kan ikke tage PC'en med dig, når du skal ud at møde borgeren.
Hvor virker den?	GPS enheder virker alle steder, hvor der er mobiltelefondekning. I praksis over det meste af verden. Vær opmærksom på om leverandøren af GPS enheden har åbnet for, at den også kan bruges i udlandet, så du ikke får en ubehagelig overraskelse, hvis du tager GPS enheden med på en rejse.
Sikkerhed:	Nogle GPS enheder går i dvale, når de ikke bliver brugt. Så kan det være vanskeligt at se, om de fungerer. Vær derfor opmærksom på om du på den tilhørende app kan se, at GPS enheden er tændt samt hvor meget batteri, der er tilbage på den. Vær opmærksom på, om app'en giver besked, når det er tid til at oplade GPS enheden.
Vælg en GPS enhed, som borgeren vil gå med:	Det er vigtigt, at GPS enheden bliver en integreret del af hverdagen, så den altid kommer med borgeren. Find derfor en GPS enhed, som borgerne vil have med. De findes i flere forskellige udformninger og farver og blandt andet som et almindeligt armbåndsur.
Opkald til GPS enhed:	Du kan ringe til GPS enheden. Så kan du høre, hvad der foregår. Det er ikke alle med en demenssygdom, der er i stand til at bruge GPS enheden som en telefon. Det er ikke sikkert, at de reagerer på, at du taler til dem igennem GPS enheden. Det er en fordel, hvis man kan ringe til GPS enheden direkte fra app'en på telefonen.



Stella Care støtter dem, der hjælper mennesker med demens. Vores mål er, at demensramte ikke forsvinder sporeløst.

Vi designer og udvikler systemer, som skaber tryghed og frihed for mennesker med demens, plejepersonale og pårørende.

Vi lancerede i 2012 vores egen app og GPS ur. Siden har vi hvert år lanceret nye, forbedrede versioner af vores app og vores GPS trackere.